«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО "ОЭЗ "ВладМиВа"
_____В.П. Чуев
"27" 09 2019 г.

Версия/Version: № 6, 27.09.2019
RU *Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине* ***tdvladmiva.ru***

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материала пломбировочного композитного двухкомпонентного химического отверждения

«КОМПОЦЕМ®»

по ТУ 9391-080-45814830-2002

(порошок-жидкость)

НАИМЕНОВАНИЕ

Материал пломбировочный композитный двухкомпонентный химического отверждения «Компоцем» по ТУ 9391-080-45814830-2002 (далее по тексту - материал «Компоцем»). Материал «Компоцем» выпускается в форме «порошок-жидкость» или «паста-паста» различных комплектаций:

-Материал «Компоцем» *порошок-жидкость, 4-цветный комплект,*
-Материал «Компоцем» *паста-паста, 2-цветный комплект;*
-Материал «Компоцем» *паста-паста, 1-цветный комплект;*
-Материал «Компоцем» *паста-паста, 1-цветный комплект (в шприцах).*

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал «Компоцем» (порошок-жидкость) предназначен для восстановления (пломбирования) кариозных полостей II, III, IV, V классов.

Материал «Компоцем» предназначен для применения квалифицированными врачами-стоматологами в условиях медицинского учреждения.

Показания к применению: материал показан для восстановления (пломбирования) кариозных полостей II, III, IV, V классов. Допускается применение для восстановления культи зуба и для фиксации шин.

Противопоказания к применению: Материал недопустим для совместного применения с эвгенолсодержащими материалами, а так же при наличии аллергической реакции или повышенной чувствительности пациента (пользователя) к компонентам материала.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Компоцем» (порошок-жидкость) выпускается в виде двух компонентов – порошок и жидкость, предназначенных для смешивания при изготовлении пломбировочного материала. Порошок представляет собой окрашенный тонкодисперсный наполнитель, содержащий инициатор отверждения; жидкость содержит активатор полимеризации. В состав материала «Компоцем» (порошок-жидкость) входят: бисфенолглицидилметакрилат (Бис-ГМА), диметакриловый эфир триэтиленгликоля (ТГМ-3), N,N-бис(2-гидроксиэтил) р-толуидин (ДГЭПТ), стеклонаполнитель (барий-боросиликатное стекло), перекись бензоила (ПБ), красители, пигменты.

Материал «Компоцем» относится к композиционным материалам и обладает рядом специфических свойств, которые выгодно отличают его от других пломбировочных цементов:

- высокая механическая прочность (прочность при изгибе не менее 70 МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 34 МПа, адгезионная прочность в соединении с твердыми тканями зуба не менее 7 МПа);

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- стабильность и низкая растворимость в ротовой жидкости (водопоглощение не более 50 мкг/мм^3, водорастворимость не более 5 мкг/мм^3);

- минимальная усадка при твердении;

- идентичность с тканями зуба (цвет согласно расцветке по шкале VITA, цветостойкость, флюоресцирующий эффект, коэффициент прозрачности от 10 до 20 %);

- рабочие характеристики: время отверждения не более 5 мин, рабочее время не менее 1,5 мин, способность к полированию до зеркального блеска.

Наличие в комплекте порошков разных цветовых оттенков (A2, A3, B2, C2 по шкале VITA) позволяет произвести подбор материала, максимально близкого по оптическим характеристикам к естественным тканям зуба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Подготовка кариозной полости

Кариозную полость обработать обычным способом. Для увеличения площади соприкосновения с материалом края эмали рекомендуется скосить на 45°.

Обязательным условием хорошей адгезии пломбировочного материала к тканям зуба является тщательно высушенная подготавливаемая поверхность. Для изоляции поверхности зуба от попадания слюны необходимо использовать коффердамы или ватные валики.

При пломбировании материалом «Компоцем» на всю поверхность дентина необходимо предварительно нанести изолирующую прокладку из поликарбоксилатного или стеклоиономерного цемента. В случае пломбирования глубоких полостей на участок дентина, находящийся в непосредственной близости к пульпе, следует нанести лечебный материал, содержащий гидроокись кальция («Кальцесил»).

ВНИМАНИЕ: Недопустимо совместное применение с эвгенолсодержащими материалами.

Протравливание эмали

На поверхность эмали в области дефекта нанести гель для травления эмали на 40-60 секунд. Затем гель смыть водой и тщательно высушить полость теплым воздухом до образования матово-белой поверхности эмали.

В случае попадания слюны на протравленную и высушенную эмаль травление повторить в течение 10 сек., после чего промыть и просушить поверхность.

ВНИМАНИЕ: *Вода для промывания не должна содержать никаких примесей, так как примеси снижают адгезию композита к твердым тканям зуба. Воздух для просушивания не должен содержать масла и водяных паров. Для высушивания полости нельзя применять эфир или спирт, снижающие адгезию пломбировочного материала к стенкам полости зуба.*

Пломбирование

Цементную массу получить путем смешивания порошка и жидкости на специальном блокноте с помощью пластмассового шпателя. Порошок дозировать ложкой-мерником, жидкость – капельницей. Рекомендуемое весовое соотношение порошка и жидкости 2,8 : 1,0, что соответствует 1 мернику порошка и 1 капли жидкости. Время смешивания компонентов должно быть не более 30 секунд, это необходимо для максимального использования адгезионных свойств материала. При температуре 23±1 °С рабочее время цемента составляет около 3 минут.

«Компоцем» внести в подготовленную кариозную полость с некоторым избытком одной-двумя порциями, тщательно прижимая материал ко дну и стенкам во избежание образования в нем пузырьков воздуха. Моделирование пломбы в полости рта проводить не более 1 минуты.

Для предотвращения образования на поверхности пломбы неотвержденного слоя (ингибированного кислородом воздуха), рекомендуется использовать полимерные

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

матричные полоски, которые необходимо удерживать на поверхности материала до полного отверждения (не менее 3 минут).

Обработка пломбы

Окончательную обработку пломбы осуществить через 5-7 минут после полного отверждения. Шлифовать пломбу алмазными мелкозернистыми головками с последующим полированием пастой («Полидент № 4»).

Материал «Компоцем» также может применяться для восстановления культи зуба и для фиксации шин.

ВНИМАНИЕ: *В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.*

ФОРМА ВЫПУСКА

I. 4-цветный комплект

Порошок (банка)	
оттенка А2	- 20 г
оттенка А3	- 10 г
оттенка В2	- 10 г
оттенка С2	- 10 г
Жидкость (флакон)	- 2 шт. х 10 г
Гель для травления эмали (шприц)	- 5 мл
Иглы в п/э пакете	- 10 шт.
Блокнот для замешивания	- 1 шт.
Шпатель пластмассовый	- 20 шт.
Ложка мерная (мерник)	- 2 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Коробка	- 1 шт.

II. 4-цветный комплект

Порошок (банка)	
оттенка А2	- 40 г
оттенка А3	- 10 г
оттенка В2	- 10 г
оттенка С2	- 10 г
Жидкость (флакон)	- 26 г
Гель для травления эмали (шприц)	- 2 шт. х 7 г
Иглы в п/э пакете	-10 шт.
Блокнот для замешивания	- 1 шт.
Шпатель пластмассовый	- 25 шт.
Ложка мерная (мерник)	- 2 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Коробка	- 1 шт.

Допускается выпуск материала «Компоцем» другой комплектности. Допускается по согласованию с потребителем изготовление композитного цемента «Компоцем» других оттенков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от **+5°С до +25°С.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от - 30^{0}С до +30^{0}С.**

Срок годности – **3 года.**

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие изделия в упаковке предприятия-изготовителя в течение его срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала «Компоцем» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В отдельных случаях у особо чувствительных пациентов (пользователей) возможны аллергические реакции на компоненты, входящие в состав порошка.

⚠*О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), неуказанных в инструкции побочных эффектов или аллергических реакций просим сообщать производителю.*

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00311 от 26.12.2018 г.
Номер партии, дата выпуска и срок годности указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (АО "ОЭЗ "ВладМиВа")
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555
факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

Символы/Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

 - Беречь от влаги/Store in a dry place


 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

 - Использовать до/Expiry date

LOT - Код партии/Batch number

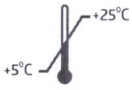

- Температурный диапазон/Temperature limitation

Packer - Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/ Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО "ОЭЗ "ВладМиВа"
_____ В.П. Чуев
"23" 05 2022 г.

Версия/Version: № 12, 23.05.2022
RU *Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине* ***tdvladmiva.ru***

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала пломбировочного композитного двухкомпонентного химического отверждения
«КОМПОЦЕМ®»
по ТУ 9391-080-45814830-2002
(паста-паста)

НАИМЕНОВАНИЕ
Материал пломбировочный композитный двухкомпонентный химического отверждения «Компоцем» по ТУ 9391-080-45814830-2002 (далее по тексту - материал «Компоцем»). Материал «Компоцем» выпускается в форме «порошок-жидкость» или «паста-паста» различных комплектаций:
-Материал «Компоцем» *порошок-жидкость, 4-цветный комплект,*
-Материал «Компоцем» *паста-паста, 2-цветный комплект;*
-Материал «Компоцем» *паста-паста, 1-цветный комплект;*
-Материал «Компоцем» *паста-паста, 1-цветный комплект (в шприцах).*

НАЗНАЧЕНИЕ
Материал «Компоцем» (паста-паста) предназначен для пломбирования кариозных полостей II, III, IV, V классов.
Материал «Компоцем» (паста-паста) предназначен для применения квалифицированными врачами-стоматологами в условиях медицинского учреждения.
Показания к применению: материал показан для восстановления (пломбирования) кариозных полостей II, III, IV, V классов. Допускается применение материала для пломбирования кариозных полостей I класса.
Противопоказания к применению: Материал недопустим для совместного применения с эвгенолсодержащими материалами, а так же при наличии аллергической реакции или повышенной чувствительности пациента (пользователя) к компонентам материала.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Материал «Компоцем» (паста-паста) выпускается в виде двух паст (основной и каталитической) разных цветовых оттенков по шкале VITA (A_2, A_3, B_2), предназначенных для смешивания перед применением. Материал «Компоцем» (паста-паста) представляет собой композит на основе метакрилатных олигомеров и подготовленного по инновационной нанотехнологии модифицированного тонкодисперсного неорганического наполнителя (до 80% массы), в состав которого входят: бисфенолглицидилметакрилат (Бис-ГМА), диметакриловый эфир триэтиленгликоля (ТГМ), триметилолпропантриметакрилат (ТМПТМА), полиэтиленгликольдиметакрилат (ПЭГДМА)) стеклонаполнитель (барий-боросиликатное стекло), перекись бензоила, силан, аэросил, ДГЭПТ, красители, пигменты, ингибиторы (ионол, ПМФ, ДУДМА).
Полученный в результате смешивания равных количеств паст пломбировочный материал не липнет к инструменту, легко моделируется и соответствует требованиям ГОСТ 31574:
- прочность при изгибе не менее 70 МПа, прочность при диаметральном разрыве не менее 34 МПа, адгезионная прочность в соединении с твердыми тканями зуба не менее 7 МПа;
- водопоглощение не более 50 мкг/мм^3, водорастворимость не более 5 мкг/мм^3;
- минимальная усадка при твердении;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- идентичность с тканями зуба (цвет согласно расцветке по шкале VITA, цветостойкость, флюоресцирующий эффект, коэффициент прозрачности от 10 до 20 %);

- рабочие характеристики: время отверждения не более 5 мин, рабочее время не менее 1,5 мин, способность к полированию до зеркального блеска.

Наличие паст разных цветовых оттенков (A2, A3, B2 по шкале VITA) позволяет произвести подбор материала, максимально близкого по оптическим характеристикам к естественным тканям зуба.

Входящий в набор адгезив химического отверждения обеспечивает надежное краевое прилегание.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Выбор цвета

Для выбора цвета использовать стандартную шкалу VITA фирменного производства. Цвет необходимо определять по средней части эталона цвета шкалы при дневном или имитирующем его освещение. При выборе цвета поверхность эмали восстанавливаемого зуба должна быть очищена и увлажнена.

Подготовка кариозной полости

Кариозную полость обработать обычным способом. Для увеличения площади соприкосновения с материалом края эмали рекомендуется скосить на 45°.

Обязательным условием хорошей адгезии пломбировочного материала к тканям зуба является тщательно высушенная подготавливаемая поверхность. Для изоляции поверхности зуба от попадания слюны необходимо использовать коффердамы или ватные валики.

Защита живых тканей зуба

При пломбировании глубоких полостей на участок дентина, находящийся в непосредственной близости к пульпе, следует точечно нанести лечебный материал, содержащий гидроокись кальция («Кальцесил», «Кальцелайт») в сочетании с подкладочным стеклоиономерным цементом («Цемилайт», «ЦемиЛайн-LC»).

ВНИМАНИЕ: Недопустимо совместное применение эвгенолсодержащих стоматологических материалов.

Протравливание

На подготовленную поверхность зуба нанести гель для травления на 20-30 сек. По истечении времени обработки гель для травления тщательно смыть водой и высушить полость зуба сжатым воздухом.

В случае попадания слюны на протравленную и высушенную поверхность зуба травление повторить в течение 10 сек., после чего промыть и просушить поверхность.

ВНИМАНИЕ: *Вода для промывания не должна содержать никаких примесей, так как они снижают адгезию композита к твердым тканям зуба. Воздух для просушивания не должен содержать масла и водяных паров.*

Нанесение адгезива

В лунку пластины для смешивания внести по одной капле каждой жидкости адгезива (№ 1 и № 2) и тщательно смешать в течение 10 секунд. При температуре 23±1°С рабочее время адгезива около 1,5 минут. С помощью аппликатора адгезив нанести тонким слоем на подготовленную поверхность зуба. Время отверждения адгезива в полости рта 2-3 минуты.

Пломбирование

На блокнот для смешивания с помощью ***противоположных*** концов пластмассового шпателя поместить равные по объему количества основной и каталитической паст. Смешать пасты в течение 30 секунд растирающими движениями во избежание захвата пузырьков воздуха. Полученный материал должен быть однородным по цвету. При температуре 23±1°С рабочее время материала составляет около 3 минут. С целью облегчения работы с пастами, а также в качестве разбавителя паст материал «Компоцем» паста-паста может комплектоваться моделировочной жидкостью.

С помощью инструментов с тефлоновым или титановым покрытием композитную пасту внести в подготовленную полость, тщательно прижимая материал ко дну и стенкам. Не

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

допускать попадания пузырьков воздуха в пасту при моделировании пломбы. Моделирование проводить не более 1 минуты.

Для предотвращения образования на поверхности пломбы неотвержденного слоя (ингибированного кислородом воздуха), снижающего прочностные характеристики материала, рекомендуется использовать полимерные матричные полоски, которые необходимо удерживать на поверхности материала до полного отверждения (не менее 3 минут).

Обработка пломбы

Окончательную обработку пломбы осуществить через 5-7 минут после полного отверждения. Шлифовать пломбу алмазными мелкозернистыми головками с последующим полированием пастой («Полидент № 4»). Следует помнить, что плохо отполированная поверхность может привести в дальнейшем к изменению цвета пломбы.

Допускается применение материала для пломбирования кариозных полостей I класса.

ВНИМАНИЕ: В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего применения.

ФОРМА ВЫПУСКА

I. Комплект одноцветный

Паста основная одного из цветов (A_2, A_3, B_2) (банка)	- 14 г (или 28 г)
Паста каталитическая (банка)	- 14 г (или 28 г)
Гель для травления эмали (шприц)	- 5 мл
Адгезив (жидкость № 1) (бутылочка-капельница)	- 5 мл
Адгезив (жидкость № 2) (бутылочка-капельница)	- 5 мл
Иглы	- 5 шт.
Блокнот для смешивания	- 1 шт.
Пластина для смешивания	- 3 шт.
Шпатель пластмассовый	- 30 шт.
Аппликаторы	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Коробка	- 1 шт.

или

II. Комплект двухцветный

Паста основная двух из цветов (A_2, A_3, B_2) (банка)	- 14г + 14г
Паста каталитическая (банка)	- 28 г
Гель для травления эмали (шприц)	- 5 мл
Адгезив (жидкость № 1) (бутылочка-капельница)	- 5 мл
Адгезив (жидкость № 2) (бутылочка-капельница)	- 5 мл
Иглы	- 5 шт.
Блокнот для смешивания	- 1 шт.
Пластина для смешивания	- 3 шт.
Шпатель пластмассовый	- 30 шт.
Аппликаторы	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Коробка	- 1 шт.

или

III. Комплект одноцветный

Паста основная одного из цветов (A_2, A_3, B_2) (шприц)	- 5 г
Паста каталитическая (шприц)	- 5 г
Гель для травления эмали (шприц)	- 5 мл
Адгезив (жидкость № 1) (бутылочка-капельница)	- 5 мл
Адгезив (жидкость № 2) (бутылочка-капельница)	- 5 мл
Иглы	- 5 шт.
Блокнот для смешивания	- 1 шт.
Пластина для смешивания	- 3 шт.
Шпатель пластмассовый	- 10 шт.
Аппликаторы	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Коробка-футляр	- 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Допускается выпуск материала «Компоцем» другой комплектности. Допускается по согласованию с потребителем изготовление композитного цемента «Компоцем» других оттенков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре от **+5°С до +10°С.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°С до +30°С.**

Гель для травления эмали допускается хранить в сухом темном месте при температуре от **+5°С до +25°С**.

Срок годности комплекта – **2 года.**

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие изделия в упаковке предприятия-изготовителя в течение его срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала «Компоцем» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В отдельных случаях у особо чувствительных пациентов (пользователей) возможны аллергические реакции на компоненты, входящие в состав изделия.

⚠*О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), неуказанных в инструкции побочных эффектов или аллергических реакций просим сообщать производителю.*

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00311 от 26.12.2018 г.

Номер партии, дата выпуска и срок годности указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (АО "ОЭЗ "ВладМиВа")
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555
факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

Символы/Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

 - Производитель/Manufacturer

 - Беречь от влаги/Store in a dry place

 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

 - Использовать до/Expiry date

 - Код партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation

 - Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/ Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru