ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАКОЛЕННИКА ПИО-03

Наколенник (далее изделие) назначается при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Режим использования изделия определяется врачом - ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92.
E-mail: grodno@bpovc.by; Сайт: **www. bpovc-grodno.by**

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШИНЫ МНИИТО ПИО-08, ; ШИНЫ ВИЛЕНСКОГО ПИО-08-01, ШИНКИ СИТЕНКО ПИО-08-03

1. Шины ПИО-08, ПИО-08-01, шинка ПИО-08-03 (далее изделие) предназначены для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2. Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. При серийном изготовлении изделия ПИО-08-01 размер изделия определяется расстоянием разведения ног ребенка (расстояние между подколенными ямками при разведении ног ребенка) в соответствии с таблицей 1.

3.1. Расстояние максимального разведения ног ребенка определяет лечащий врач травматолог-ортопед.

Таблица 1

Размер изделия	Расстояние разведения ног минимум/максимум, (мм)
12	120-170
14	140-190
16	160-210
18	180-230
20	200-250
22	220-270
24	240-290
26	260-310
28	280-330
30	300-350
32	320-370
34	340-390
36	360-410

4. Режим использования изделия определяет лечащий врач-ортопед.
5. Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.
6. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
   - изделия не стирать;
   - кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
   - сушить вдали от отопительных приборов;
   - глажению не подвергать;
   - уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости, и потертости.

Изделие ремонту не подлежит.

Изготовитель:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92.
E-mail: grodno@bpovc.by; Сайт: **www. bpovc-grodno.by**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МАНЖЕТКИ - СТЯЖКИ ПИО-13 , СТЯЖКИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ ПИО-40

1. Манжетка - стяжка ПИО-13, стяжка переднего отдела стопы ПИО-40, (далее изделие) назначается для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения его распластанности, а также, до и после хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей. Изделие используется в обуви на низком и среднем каблуке.

2. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

3. Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

4. Размер изделия определяется обхватом стопы в пучковой части, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Обхват стопы в пучковой части, мм	170 ± 10	180 ± 10	190 ± 10	200 ± 10	210 ± 10	220 ± 10	230 ± 10	240 ± 10	250 ± 10	260 ± 10

5. Режим ношения изделия и место расположения валика Зейца - по рекомендации врача травматолога - ортопеда.

6. В изделии валик Зейца необходимо располагать так, чтобы его широкий край был направлен в сторону носочной части стопы, а узкий край к пятке (рисунок 1).

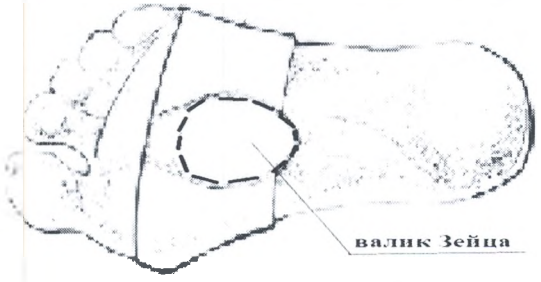


Рисунок 1.

7. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости. Изделие ремонту не подлежит.





Изготовитель:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92.
E-mail: grodno@bpovc.by; Сайт: **www. bpovc-grodno.by**

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА ПИО-15

Пояс для крепления протеза ПИО-15, ПИО-15-ХХ (далее - изделие) предназначен для крепления протезов бедра (голени) согласно медицинскому назначению.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Изделие рекомендуется надевать на нательное бельё. Необходимо застегнуть изделие, начинать нужно с нижней пуговицы, затем затянуть и завязать шнуровку.

Надеть протез и пристегнуть к поясу при помощи деталей крепления.

Режим ношения изделия определяется использованием (ношением) протеза. Следует выполнять санитарно- гигиенические мероприятия.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушку производить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- утюжить при температуре 60-70° С, исключая эластичные вставки и детали крепления.

Изделие ремонту не подлежит.

Изготовитель:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92.
E-mail: grodno@bpovc.by; Сайт: **www. bpovc-grodno.by**

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЯСА - РЕМНЯ ФИКСИРУЮЩЕГО ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02

Пояс - ремень фиксирующий ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02, (далее изделие) предназначен для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умеренно-выраженных болях на почве остеохондроза, спондилолистезе 1 степени, в послеоперационном периоде после резекции дисков и др.

Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед

При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Обхват талии измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне талии через пупочную часть.

Таблица 1

Размер изделия	75 (XXS)	80 (XS)	85 (S)	90 (M)	95 (L)	100 (XL)	105 (XXL)	110 (3XL)	115 (4XL)	120 (5XL)
Обхват талии, мм	700-749	750-799	800-849	850-899	900-949	950-999	1000-1049	1050-1099	1100-1149	1150-1200

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, далее застегнуть пряжки, встать.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

Не допускается самостоятельно производить ремонт пояса.

Ремонт необходимо производить в РУП «Белорусский протезно- ортопедический восстановительный центр».

Изготовитель:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92.
E-mail: grodno@bpovc.by; Сайт: **www. bpovc-grodno.by**

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПИО-17

Приспособление для поддержания нижней конечности ПИО-17 (далее приспособление) предназначено для разгрузки тазобедренного сустава при ортопедических заболеваниях бедренной кости и тазобедренного сустава, таких как остеохондропатия тазобедренного сустава, для разгрузки тазобедренного сустава.

Противопоказаниями к назначению приспособления являются:

- психоэмоциональная непереносимость;
- заболевания кожных покровов;
- аллергические реакции на материал;
- наличие сгибательных контрактур области тазобедренных и коленных суставов.

Изделие изготавливается по индивидуальному заказу.

Режим ношения приспособления - по рекомендации врача-травматолога-ортопеда.

Приспособление рекомендуется надевать на одежду.

Приспособление по объему регулируется при помощи штрипок и капок, ремней.

Для обеспечения правильного ухода за приспособлением необходимо:

- кожаные части протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытереть насухо;
- не подвергать приспособление стирке и глажению.

Приспособление ремонту не подлежит.

Изготовитель:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92.
E-mail: grodno@bpovc.by; Сайт: **www. bpovc-grodno.by**

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ПОДУШКУ ФРЕЙКА АБДУКЦИОННУЮ ПИО-18-01

Подушка Фрейка абдукционная ПИО-18-01 (далее изделие) предназначена для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Завязать крепление на теле на шнурки. Застегнуть бретели через плечики на пуговицы.

Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

По вопросам индивидуального пользования изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-травматологом-ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не более 40 °С;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.



Изготовитель:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92.
E-mail: grodno@bpovc.by; Сайт: **www. bpovc-grodno.by**

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА БЕДРА ПИО-35, ПИО-35-01

Пояс для крепления протеза бедра ПИО-35, ПИО-35-01 (далее изделие) предназначен для обеспечения фиксации протеза бедра. Рекомендуется применять в случае, если применение пояса кожаного узкого РБ-655 или широкого РБ-656 невозможно.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяется режимом носки протеза.

С помощью стяжных ремней и застёжки «контакт» производится натяжение, регулировка, фиксация изделия на теле и протезе бедра.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
- производить стирку только вручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени;
- выжимать слегка вручную, не выкручивая;
- сушить вдали от источников тепла в подвешенном состоянии;
- не подвергать утюжке;
- проводить химическую чистку с применением всех общепринятых органических растворителей;
- очищать застежку текстильную «контакт» от ниток, ворсинок.

При ношении изделия рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Гродно, ул. Белуша, 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92.
E-mail: grodno@bpovc.by; Сайт: **www. bpovc-grodno.by**

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гродненский филиал
230003, г.Гродно, ул. Белуша, 47а



Устройство для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 СТБ 932-3-2021

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с стройством для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 ЦСИЕ.02.057.00.00.00 (далее - устройство), с условиями эксплуатации технического обслуживания.

1 Назначение

Устройство относится к изделиям медицинского назначения и ожет быть использовано в ортопедии и травматологии в раннем онсервативном и послеоперационном лечении врождённой косолапости детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть спользовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем етском возрасте. Предназначено для использования при температуре кружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной лажности до 85 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение по КД	Модель (тип) изделия	Маркировка (на подстопниках)	Размеры без ботинок, мм			Масса, кг, не более
			Длина L ± 5	Ширина B ± 2	Высота H ± 3	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00	ПИО-51	0	240…295	100	43…55	0,91
-01	ПИО-51-01	1	280…335	100	43…52	0,98
-02	ПИО-51-02	2	320…375	115	43…50	1,15
-03	ПИО-51-03	3	360…417	115	43…48	1,35

2.2 Устройство выпускается четырех исполнений согласно таблице 2.

Таблица 2

Модель изделия	Расстояние разведения ног ребёнка минимум / максимум, мм
ПИО-51	187…240
ПИО-51-01	227…283
ПИО-51-02	267…323
ПИО-51-03	307…365

2.3 Ботинки меняют по мере роста стопы ребёнка (не чаще чем 2 раза з год).

Ботинки не предназначены для ходьбы.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 Устройство

Устройство (см. рисунок) состоит из двух узлов:

- распорка 8 с подстопниками 1;
- пара кожаных ботинок 2 с язычком 3 и с открытым носком 4.

Примечание – Изображение устройства на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

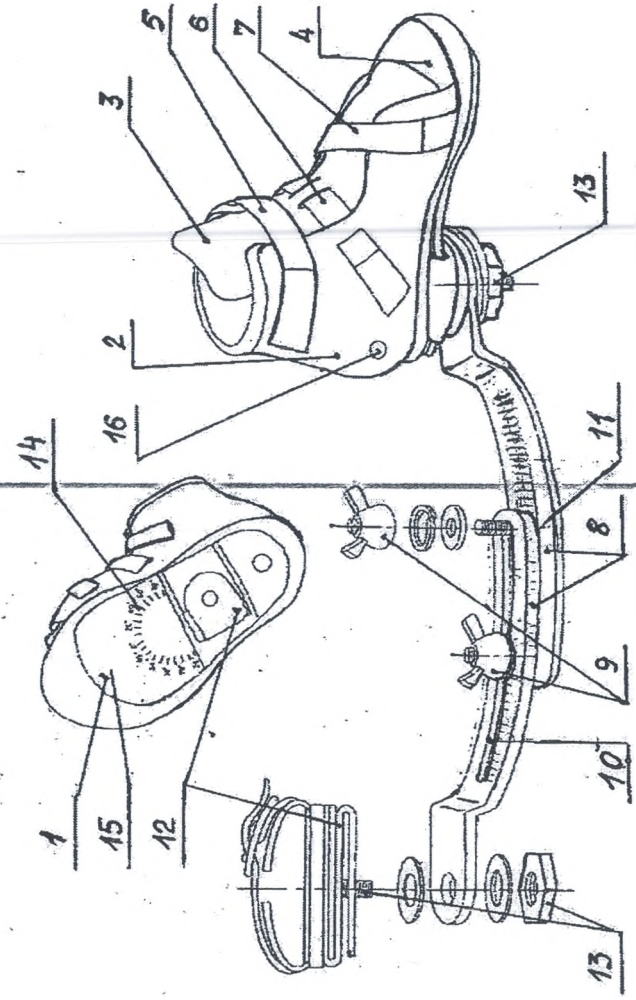

Рисунок

**Возможен вариант крепления ботиночка с помощью шнурков, которые заменяют ремешки 5 и 7. Лечащий врач-ортопед в соответствии с индивидуальными особенностями пациента вправе определять способ крепления ботинка на стопе.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4 Подготовка к использованию

4.1 Устройство поступает к пользователю в собранном виде. Лечащий врач-ортопед раскручивает винтовое соединение 9 и надевает на ножки ребёнка ботинки 2. Ботинки 2 надеваются на стопу и плотно фиксируются с помощью ремешков 5, 6, 7. Визуально с помощью отверстия в пяточной части 15 внутренних берцев и положения пальцев носочной части 4 контролируется положение пятки пользователя в обуви. Правую и левую планки распорки соединяют между собой жёстко и внахлёст с помощью гаек 9 на заданном расстоянии и контролируют положение планок 8 по шкале 11 в пазу 10. Угол поворота стоп задают ослаблением винтового соединения 12,13 с фиксацией положения ботинка 2 по градуированной шкале 14 с шагом 0°. По мере увеличения длины стопы пользователя ботинки 2 в устройстве заменяются. По мере роста ребёнка, в зависимости от требуемого расстояния разведения ног на ширину плеч, по назначению врача-ортопеда устройство заменяется на следующее исполнение.

5 Меры безопасности

5.1 Во избежание нанесения травмы ребёнку все узлы и детали устройства должны быть надёжно зафиксированы.

5.2 Ботинки рекомендуется надевать на трикотажный носок.

5.3 Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребёнка и рекомендациями лечащего врача-ортопеда.

5.4 Запрещается подвергать устройство ударам.

5.5 При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия:

- необходимо правильно подбирать размер ботинок по длине стопы, а также следить за своевременной заменой ботинок по мере роста ребёнка;
- ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре;
- запрещается сушить обувь на нагревательных поверхностях;
- запрещается мыть обувь в воде;
- необходимо избегать попадания на обувь щелочей, кислот, активных растворителей.

5.6 Пользователю запрещается производить изменение параметров устройства или изменять его конструкцию без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Техническое обслуживание

6.1 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
- протирать изделие дезинфицирующим раствором;
- поверхность обуви протирать мягкой влажной тряпкой;
- следить за надёжной фиксацией деталей устройства.

7 Комплектность

7.1 Устройство	1 шт.
7.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
7.3 Гаечный ключ	1 шт.
7.4 Отвёртка	1 шт.

8 Маркировка

Маркировка индивидуальной упаковки устройства должна иметь:
- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение модели изделия согласно КД;
- обозначение СТБ/ТО;
- номер заказа;
- размер устройства;
- гарантийный срок металлических элементов устройства и ботинок (месяцев, дней);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий);
- система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485;
- количество изделий в упаковке(при групповой упаковке),шт.

9 Свидетельство о приемке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей

наименование изделия

ПИО-51 СТБ 932-3-2021

обозначение *№ заказа*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 932-3-2021, ТО BY 100010315.327-2022, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017. .

МП

_____ _____

личная подпись *расшифровка подписи*

_____

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковывании

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей

наименование изделия

ПИО-51 СТБ 932-3-2021

обозначение *№ заказа*

упаковано на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_____

должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

_____

число, месяц, год

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации металлических элементов устройства – 12 месяцев со днявыдачи потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации обуви (ботиночек) – 45 дней со дня выдачи потребителю.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт устройства в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за нарушения условий хранения, транспортирования, изменений и ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласования с РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на устройства, имеющие нарушения требований эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

230003, г.Гродно, ул. Белуша, 47а, тел. ((0152) 62-42-92, ((0152) 62-42-91.

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова ,8А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

12 Сведения о государственной регистрации

Устройство является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110274.

Действительно до 24.06.2026 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Гродненский филиал Республика Беларусь 230003,
г.Гродно, ул. Белуша 47А
Телефон для справок: (0152) 62-42-92
E-mail: grodno@bpovc.by; сайт: bpovc-grodno.by
Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.
Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок: (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru