Инструкция по применению
наколенника ПИО-03

Наколенник (далее изделие) назначается при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.


Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Режим использования изделия определяется врачом - ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Изделие ремонту не подлежит.

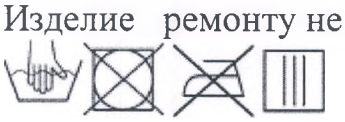

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.
Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479, сайт: www.bpovc.by.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
чулок - ползунков ПИО-05

Чулки-ползунки ПИО-05 (далее изделие) назначаются при наличии контрактур в голеностопных и тазобедренных суставах, не подлежащих оперативному устранению.

Противопоказания к применению изделия: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов. Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Режим ношения изделия - по рекомендации врача-ортопеда - травматолога.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;
- сушить вдали от источников тепла;
- соблюдать правила личной гигиены.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр». Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479. E - mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
стремянки при врождённом вывихе бедра у детей
ПИО-07

Стремянка при врождённом вывихе бедра у детей ПИО-07 (далее изделие) предназначена для лечения врождённого вывиха бёдер у новорожденных детей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Режим ношения изделия - по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

Изделие рекомендуется надевать на ребёнка лежа, на нательное белье, или подкладывать пелёнку. Бретели верхней части изделия должны располагаться на спинке ребёнка. Пояс должен плотно прилегать к телу и находиться под грудью. Помочь надеть на ножки ребенка нужно так, чтобы петля проходила под стопой, нижнюю стяжку застегнуть на щиколотке, а верхнюю стяжку отрегулировать, и застегнуть под коленом. Далее следует застегнуть помочи сзади и спереди на поясе, чтобы они плотно облегали ножки ребёнка.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытереть насухо;
- сушить вдали от источников тепла в расправленном виде;
- уделять внимание коже ребёнка и предупреждать опрелости.

Изделие ремонту не подлежит.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.
Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479. E - mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
шины МНИИТО ПИО-08, ; шины Виленского ПИО-08-01,
шинки Ситенко ПИО-08-03

1 Шины ПИО-08, ПИО-08-01, шинка ПИО-08-03 (далее изделие) предназначены для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2 Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 При серийном изготовлении изделия ПИО-08-01 размер изделия определяетсярасстоянием разведения ног ребенка (расстояние между подколенными ямками при разведении ног ребенка) в соответствии с таблицей 1.

3.1 Расстояние максимального разведения ног ребенка определяет лечащий врач травматолог-ортопед.

Таблица 1

Размер изделия	Расстояние разведения ног минимум/максимум, (мм)
12	120-170
14	140-190
16	160-210
18	180-230
20	200-250
22	220-270
24	240-290
26	260-310
28	280-330
30	300-350
32	320-370
34	340-390
36	360-410

4 Режим использования изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

6 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделия не стирать;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- глажению не подвергать;
- уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости, и потертости.

Изделие ремонту не подлежит.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г.Минск, ул.Одоевского 10. Телефон для справок (017) 3081479; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081434, сайт: www.bpovc.by. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению трусиков абдукционных ПИО-09-03

1 Трусики абдукционные ПИО-09-03 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей до 1 года. Используется для фиксации тазобедренного сустава в положении отведения и сгибания, что способствует правильному формированию вертлюжной впадины.

1.1 Противопоказанием к назначению изделия является:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер трусиков абдукционных определяется расстоянием максимального разведения ног ребенка в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	14 (XXS)	16 (XS)	18 (S)	20 (M)	22 (L)	24 (XL)	26 (XXL)	28 (3XL)	30 (4XL)	32 (5XL)	34 (6XL)	36 (7XL)
Расстояние максимального разведения ног ребенка, мм	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360

2 Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1 Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Застегнуть крепление на застежку текстильную «контакт». Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.

3 Ребенок должен носить изделие постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недели.

4 По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом - ортопедом.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;
- сушить в расправленном виде вдали от источников тепла;
- периодически очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно для проведения гигиенических процедур мягкими детскими средствами.

Изделие ремонту не подлежит.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
на абдукционные трусики ПИО-09-05

Абдукционные трусики ПИО-09-05 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов и врожденного вывиха бедра у детей.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребенка и рекомендациями лечащего врача - ортопеда.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости;
- соблюдать водные процедуры;
- полужесткий гибкий корпус один раз в неделю протирать антисептическим средством;
- стирку съемного чехла производить вручную при температуре воды 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- застежки периодически очищать от ниток, ворсинок.

Изделие ремонту не подлежит.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
пояса для крепления протеза ПИО-15

Пояс для крепления протеза ПИО-15 (далее - изделие) предназначен для крепления протезов бедра (голени) согласно медицинскому назначению.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Изделие рекомендуется надевать на нательное бельё. Необходимо застегнуть изделие, начинать нужно с нижней пуговицы, затем затянуть и завязать шнуровку.

Надеть протез и пристегнуть к поясу при помощи деталей крепления.

Режим ношения изделия определяется использованием (ношением) протеза. Следует выполнять санитарно- гигиенические мероприятия.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушку производить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- утюжить при температуре 60-70° С, исключая эластичные вставки и детали крепления.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.
Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479. E - mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
пояса - ремня фиксирующего ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02

Пояс - ремень фиксирующий ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02, (далее изделие) предназначен для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умеренно-выраженных болях на почве остеохондроза, спондилолистезе 1 степени, в послеоперационном периоде после резекции дисков и др.

Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Обхват талии измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне талии через пупочную часть.

Таблица 1

Размер изделия	75 (XXS)	80 (XS)	85 (S)	90 (M)	95 (L)	100 (XL)	105 (XXL)	110 (3XL)	115 (4XL)	120 (5XL)
Обхват талии, мм	700-749	750-799	800-849	850-899	900-949	950-999	1000-1049	1050-1099	1100-1149	1150-1200

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, далее застегнуть пряжки, встать.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

Не допускается самостоятельно производить ремонт пояса.

Ремонт необходимо производить в РУП «Белорусский протезно- ортопедический восстановительный центр».

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г.Минск, ул.Одоевского 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; регистратура (017) 3081432, сайт: www.bpovc.by; E-mail: minsk@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
приспособления для поддержания нижней конечности ПИО-17

Приспособление для поддержания нижней конечности ПИО-17 (далее приспособление) предназначено для разгрузки тазобедренного сустава при ортопедических заболеваниях бедренной кости и тазобедренного сустава, таких как остеохондропатия тазобедренного сустава, для разгрузки тазобедренного сустава.

Противопоказаниями к назначению приспособления являются:

- психоэмоциональная непереносимость;
- заболевания кожных покровов;
- аллергические реакции на материал;
- наличие сгибательных контрактур области тазобедренных и коленных суставов.

Изделие изготавливается по индивидуальному заказу.

Режим ношения приспособления – по рекомендации врача-травматолога-ортопеда.

Приспособление рекомендуется надевать на одежду.

Приспособление по объему регулируется при помощи штрипок и капок, ремней.

Для обеспечения правильного ухода за приспособлением необходимо:

- кожаные части протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытереть насухо;
- не подвергать приспособление стирке и глажению.

Приспособление ремонту не подлежит.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by. E-mail: minsk@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению подушки Фрейка абдукционной ПИО-18-01

Подушка Фрейка абдукционная ПИО-18-01 (далее изделие) предназначена для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей до 1 года. Используется для фиксации тазобедренного сустава в положении отведения и сгибания, что способствует правильному формированию вертлужной впадины.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер изделия определяется расстоянием максимального разведения ног ребенка в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	0 (XXS)	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)	7 (3XL)	8 (4XL)	9 (5XL)	10 (6XL)	11 (7XL)
Расстояние максимального разведения ног ребенка, мм	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360

По вопросам индивидуального применения изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом – травматологом - ортопедом.

Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

Необходимо уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Завязать шнурки. Застегнуть бретели через плечики на пуговицы.


Режим носки по рекомендации врача-травматолога-ортопеда. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1- 2 недель.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не более 40 ° С;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- ежедневно проводить гигиенические процедуры с мягкими моющими детскими средствами.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изделие ремонту не подлежит.

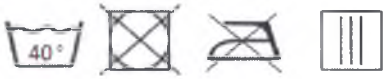

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by. E-mail: minsk@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению распорки с креплением ПИО-20-01

1 Распорка с креплением ПИО-20-01 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2 Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Изделия выпускаются в индивидуальном исполнении и серийно.

4 При серийном изготовлении изделия ПИО-20-01 размер изделия определяется расстоянием разведения ног ребенка (расстояние между подколенными ямками при разведении ног ребенка) в соответствии с таблицей 1.

4.1 Расстояние максимального разведения ног ребенка определяет лечащий врач травматолог-ортопед.

Таблица 1

Размер изделия	Расстояние разведения ног минимум/максимум, (мм)
12	120 - 170
14	140 - 190
16	160 - 210
18	180 - 230
20	200 - 250
22	220 - 270
24	240 - 290
26	260 - 310
28	280 - 330
30	300 - 350
32	320 - 370
34	340 - 390
36	360 - 410

5 Режим использования изделия определяет лечащий врач травматолог - ортопед.

6 Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

7 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить бретели вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

9 Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479. E - mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
чехла для протезов после вычленения бедра
ПИО-22

Чехол для протезов после вычленения бедра ПИО-22 (далее изделие) используется как косметическая оболочка, покрывающая полукорсет, к протезу после вычленения бедра.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.


Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Режим ношения изделия определяется временем использования протеза.

Изделие крепится на полукорсете протеза при помощи пояса и шнуровки. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка, без выкручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- глажению не подвергать.

Изделие ремонту не подлежит.

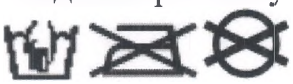



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.
Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479.
E - mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
защиты для рук
ПИО-31, ПИО-31-01, ПИО-31-02, ПИО-31-03, ПИО-31-04, ПИО-31-05

Защита для рук ПИО-31, ПИО-31-01, ПИО-31-02, ПИО-31-03, ПИО-31-04, ПИО-31-05 (далее изделие) предназначена и может быть использована как защита для рук при передвижении инвалидов на колясках, а также может служить защитой ладонной части кисти при опоре на трость во время ходьбы.

Противопоказаниями к назначению изделия является индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При серийном изготовлении ПИО-31, ПИО-31-01, ПИО-31-02, ПИО-31-03 размер изделия определяется измерением – ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, в соответствии с таблицей 1, рисунком 1.

Таблица 1

Размер изделия	1 (S)	2 (M)	3 (L)
Ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, мм	100-115	115-130	130-145



Рисунок 1

При серийном изготовлении размер изделий ПИО-31-04, ПИО-31-05, определяется величиной обхвата кисти правой руки – измеряется на уровне пятого пястно-фалангового сочленения, выраженной в сантиметрах и округленной до целого числа, в соответствии с таблицей 2, рисунком 2.

Таблица 2

Обхват кисти (А), см (дюймы))	17(6,5)	19(7)	20(7,5)	22(8)	23(8,5)	24(9)
Размер изделия ПИО-31-04	17(XS)	19(S)	20(M)			
Размер изделия ПИО-31-05			20(M)	22(L)	23(XL)	24(XXL)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

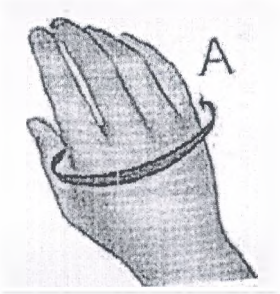


Рисунок 2

Изделие надевать непосредственно на руку .

Плотность прилегания регулировать с помощью застёжки текстильной «контакт». Чистку производить мыльным раствором с помощью щётки. Сушить при комнатной температуре.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно – ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.
Телефон для справок: (017) 3081434; регистратура: (017) 3081432.
E-mail: minsk@bpovc.by; http: //www.bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению чехла утеплённого ПИО-32

Чехол утеплённый ПИО-32 (далее изделие) предназначен для категории лиц, передвигающихся на кресло – коляске в осенне-зимний период.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

При серийном изготовлении размер изделия определяется шириной сидения кресло-коляски в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	1(XS)	2(S)	3(M)	4(L)	5(XL)	6(XXL)
Ширина сидения, мм	300	360	380	450	500	550

Перед применением необходимо надеть на человека тёплую верхнюю одежду.

Разместить изделие на кресло – коляску клапаном вверх, зафиксировать с помощью ремней. Расстегнуть клапан. При необходимости, расстегнуть застежку - молния для абдуктора, продеть абдуктор в отверстие. При необходимости, продеть ремень для ног в шлевку и закрепить на подножке кресла-коляски.

Усадить человека в чехол, размещенный в кресло – коляске, застегнуть клапан, далее затянуть шнур в кулиске так, чтобы это не мешало дыханию.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирке не подвергать;
- промывать поверхность изделия мыльным раствором нейтральных моющих средств с помощью губки или щётки, а затем водой, протирать сухой тряпочкой;
- сушить вдали от источников тепла в расправленном виде.

Изделие ремонту не подлежит.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно – ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта
(017) 3081479. E – mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
манжетки - стяжки ПИО-13 , стяжки переднего отдела стопы ПИО-40

1 Манжетка - стяжка ПИО-13, стяжка переднего отдела стопы ПИО-40, (далее изделие) назначается для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения его распластанности, а также, до и после хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей. Изделие используется в обуви на низком и среднем каблуке.

2 Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

3 Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

4 Размер изделия определяется обхватом стопы в пучковой части, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Обхват стопы в пучковой части, мм	170 ± 10	180 ± 10	190 ± 10	200 ± 10	210 ± 10	220 ± 10	230 ± 10	240 ± 10	250 ± 10	260 ± 10

5 Режим ношения изделия и место расположения валика Зейца - по рекомендации врача травматолога - ортопеда.

6 В изделии валик Зейца необходимо располагать так, чтобы его широкий край был направлен в сторону носочной части стопы, а узкий край к пятке (рисунок 1).

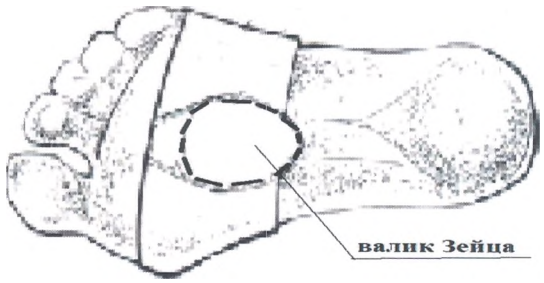



Рисунок 1

7 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости. Изделие ремонту не подлежит

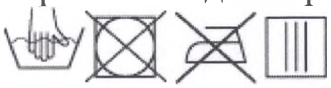

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр». Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479. E - mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
подушки абдукционной ПИО-48

1 Подушка абдукционная ПИО-48 (далее изделие) назначается для поддержания и отведения плечевого сустава:

-после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече;

-при подвывихах и вывихах плеча;

-при артрозах, миозитах;

-при ушибах, частичном повреждении связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения.

2 Противопоказаниями к назначению изделия является индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов (состав материала чехла: нейлон - 35%, ППУ - 30%, ПЭ – 35).

3 Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно универсального размера.

4 Изделие рекомендуется носить на одежду (футболку, рубашку).

5 Установить подушку в подмышечной области анатомическим вырезом к грудной клетке. С помощью ремня фиксатора пояса закрепить подушку вокруг талии. С помощью ремня плечевого дополнительно зафиксировать подушку. Положить предплечье на верхнюю поверхность подушки и зафиксировать его с помощью ремней держателей конечности.

6 Режим ношения изделия - по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

7 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из чехла следует вынимать вкладыш из пенополиуретана;

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;

- после стирки изделие хорошо прополоскать в тёплой, а затем холодной воде;


- выжимать вручную без выкручивания, не использовать механические воздействия;

- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;

- не подвергать глажению;

- после высыхания в чехол вставить вкладыш из пенополиуретана.

8 Изделие ремонту не подлежит.

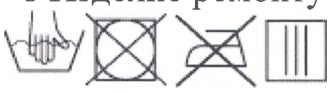

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479;

E- mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
пояса для крепления протеза бедра ПИО-35, ПИО-35-01

Пояс для крепления протеза бедра ПИО-35, ПИО-35-01 (далее изделие) предназначен для обеспечения фиксации протеза бедра. Рекомендуется применять в случае, если применение пояса кожаного узкого РБ-655 или широкого РБ-656 невозможно.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяется режимом носки протеза.

С помощью стяжных ремней и застёжки «контакт» производится натяжение, регулировка, фиксация изделия на теле и протезе бедра.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
- производить стирку только вручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени;
- выжимать слегка вручную, не выкручивая;
- сушить вдали от источников тепла в подвешенном состоянии;
- не подвергать утюжке;
- проводить химическую чистку с применением всех общепринятых органических растворителей;
- очищать застежку текстильную «контакт» от ниток, ворсинок.

При ношении изделия рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Изделие ремонту не подлежит.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479. E - mail: minsk@bpovc.by сайт: www.bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
поддерживающей повязки с подушкой ПИО-41

Поддерживающая повязка с подушкой ПИО-41 (далее изделие) назначается для поддержания и отведения плечевого сустава:

- после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече;
- при подвывихах и вывихах плеча;
- при артрозах, миозитах;
- при ушибах, частичном повреждении связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При серийном изготовлении размер определяется длиной предплечья с кистью в соответствии с таблицей 1 и рисунком 1.

Таблица 1

Размер изделия	1 (M)	2 (L)
Длина предплечья с кистью, мм	340-380	380-420

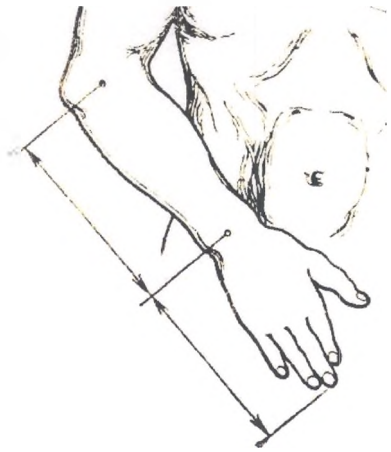


Рисунок 1- Измерение длины предплечья с кистью

Изделие рекомендуется носить на одежду (футболку, рубашку).

Режим ношения изделия - по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из чехла подушки следует вынимать вкладыш из пенополиуретана;
- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в тёплой, а затем холодной воде;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


- выжимать вручную без выкручивания, не использовать механические воздействия;

- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;

- глажению не подвергать;

- после высыхания в чехол вставить вкладыш из пенополиуретана;

- застежку текстильную «контакт» периодически необходимо очищать от ворсинок и ниток.

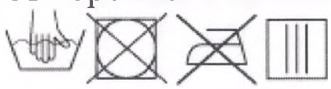

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10
Телефон для справок: (017) 3081434; регистратура: (017) 3081432
E-mail: minsk@bpovc.by; http: //www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению распорки регулируемой ПИО-49


Распорка регулируемая ПИО-49 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП у детей.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Наличие имеющихся иных противопоказаний определяется врачом - травматологом - ортопедом РУП БПОВЦ.

Размер изделия определяется по расстоянию между подколенными ямками в положении отведения в тазобедренных суставах ребенка в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

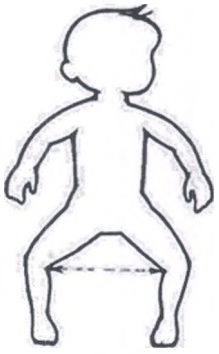

Размер изделия	Расстояние разведения ног (мм)
S	170-200
M	210-260
L	270-320

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяет лечащий врач-травматолог-ортопед. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на мягкой подкладке спинки изделия, ножки вложить в манжетки и зафиксировать изделие при помощи застежки текстильной «контакт».

По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом - ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие не стирать;
- элементы крепления стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- изделие 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не подвергать глажению;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании изделия следует соблюдать санитарно - гигиенические мероприятия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 40 дней с даты выдачи (продажи), при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10
Телефон для справок: (017) 3081434; регистратура: (017) 3081432
E-mail: minsk@bpovc.by; http: //www.bpovc.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению ортеза для лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей ПИО-25

1 Ортез для лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей ПИО-25 (далее ортез) предназначен для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь при дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, для разведения ног при ДЦП и предотвращения перекрещивания колен у детей.

2 Противопоказаниями к назначению ортеза являются:

- вывих тазобедренного сустава;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Ортез рекомендуется надевать на нательное белье. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на лентах, ножки уложить в манжетки и зафиксировать при помощи шнура. Бретели крепить спереди.

4 Режим носки ортеза определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за ортезом необходимо:

- шинки не стирать;
- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

6 Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:РУП «Белорусский протезно – ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем. Телефон для справок 8(017)3081434; отдел маркетинга и сбыта 8(017)3081479.Сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
спецбрюк на парную ампутацию бедер ПИО-04-01,
спецбрюк на парную ампутацию голени ПИО-04-02,
спецбрюк на сочетанную ампутацию бедра и голени ПИО-04-03

Спецбрюки на парную ампутацию бедер, голени и на сочетанную ампутацию бедра и голени ПИО-04 (далее изделие) назначается при двухсторонней ампутации нижних конечностей независимо от длины культей, в случае выявления противопоказаний к протезированию. Кроме того, спецбрюки, могут быть назначены дополнительно, к протезам при двухсторонней экзартикуляции в тазо - бедренных суставах или двухсторонних культях бедер.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие необходимо надевать на нательное белье.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку не производить;
- протирать поверхность брюк раствором нейтральных моющих средств с помощью губки, затем сухой тряпкой;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- глажению не подвергать;
- химчистку производить с применением всех общепринятых органических растворителей;
- очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Изделие ремонту не подлежит.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр», г. Минск, ул.Одоевского 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by; E-mail: minsk@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073 г.Минск, ул. Одоевского 10



Устройство для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 СТБ 932-3-2021

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 ЦСИЕ.02.057.00.00.00 (далее - устройство), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Устройство относится к изделиям медицинского назначения и может быть использовано в ортопедии и травматологии в раннем консервативном и послеоперационном лечении врождённой косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте. Предназначено для использования при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 85 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение по КД	Модель устройства	Размер устройства (маркировка на под-стопниках)	Размеры устройства без ботинок, мм			Масса, кг, не более
			Длина L ± 5	Ширина B ± 2	Высота H ± 3	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00	ПИО-51	0	240…295	100	43…55	0,91
-01	ПИО-51-01	1	280…335	100	43…52	0,98
-02	ПИО-51-02	2	320…375	115	43…50	1,15
-03	ПИО-51-03	3	360…417	115	43…48	1,35

2.2 Устройство выпускается четырех исполнений согласно таблице 2.

Таблица 2

Модель устройства	Расстояние разведения ног ребёнка минимум / максимум, мм
ПИО-51	187…240
ПИО-51-01,	227…283
ПИО-51-02,	267…323
ПИО-51-03	307…365

2.3 Ботинки меняют по мере роста стопы ребёнка (не чаще чем 2 раза в год).

Ботинки не предназначены для ходьбы.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 Устройство

Устройство (см. рисунок) состоит из двух узлов:

- распорка 8 с подстопниками 1;
- пара кожаных ботиночек 2 с язычком 3 и с открытым носком 4.

Примечание – Изображение устройства на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

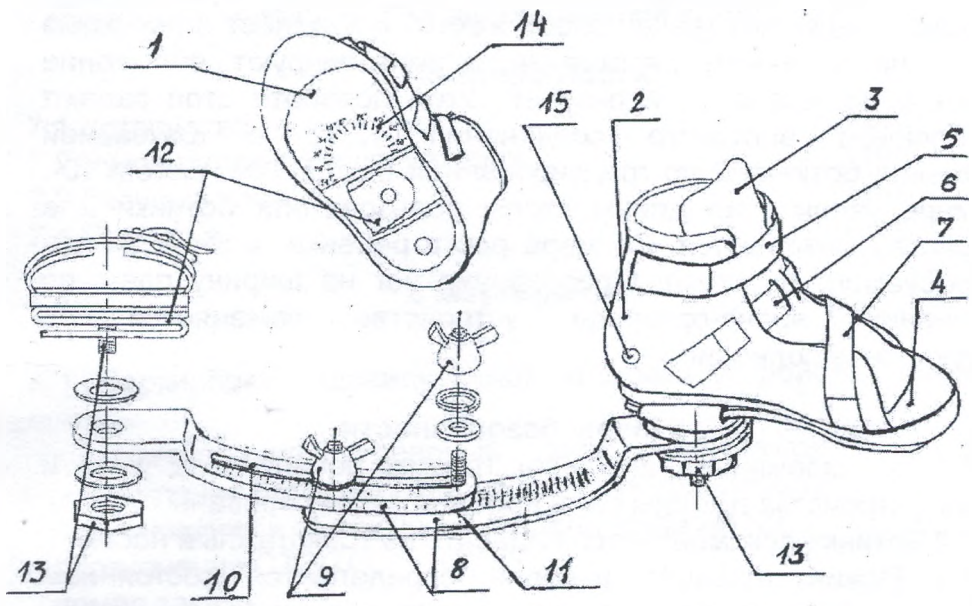

Рисунок

---

* ***Возможен вариант крепления ботиночка с помощью шнурков, которые заменяют ремешки 5 и 7. Лечащий врач-ортопед в соответствии с индивидуальными особенностями пациента вправе определять способ крепления ботинка на стопе.***

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4 Подготовка к использованию

4.1 Устройство поступает к пользователю в собранном виде. Лечащий врач-ортопед раскручивает винтовое соединение 9 и надевает на ножки ребёнка ботинки 2. Ботинки надеваются на стопу и плотно фиксируются с помощью ремешков 5,6,7. Визуально с помощью отверстия в пяточной части 15 внутренних берцев и положения пальцев в носочной части 4 контролируется положение пятки пользователя в обуви. Правая и левая планки распорки соединяют между собой жёстко и внахлёст с помощью гаек 9 на заданном расстоянии и контролируют положение планок 8 по шкале 11 в пазу 10. Угол поворота стоп задают ослаблением винтового соединения 12,13 с фиксацией положения ботинка 2 по градуированной шкале 14 с шагом 10°. По мере увеличения длины стопы пользователя ботинки 2 в устройстве заменяются. По мере роста ребенка, в зависимости от требуемого расстояния разведения ног на ширину плеч, по назначению врача-ортопеда устройство заменяется на следующее исполнение.

5 Меры безопасности

5.1 Во избежание нанесения травмы ребёнку все узлы и детали устройства должны быть надёжно зафиксированы.

5.2 Ботинки рекомендуется надевать на трикотажный носок.

5.3 Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребёнка и рекомендациями лечащего врача - ортопеда.

5.4 Запрещается подвергать устройство ударам.

5.5 При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия:

- необходимо правильно подбирать размер ботинок по длине стопы, а также следить за своевременной заменой ботинок по мере роста ребёнка;
- ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре;
- запрещается сушить обувь на нагревательных поверхностях;
- запрещается мыть обувь в воде;
- необходимо избегать попадания на обувь щелочей, кислот, активных растворителей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.6 Пользователю запрещается производить изменение параметров устройства или изменять его конструкцию без предварительного согласования с РУП БПОВЦ.

6 Техническое обслуживание

6.1 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо
- протирать изделие дезинфицирующим раствором;
- поверхность обуви протирать мягкой влажной тряпкой;
- следить за надёжной фиксацией деталей устройства.

7 Комплектность

7.1 Устройство	1 шт.
7.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
7.3 Гаечный ключ	1 шт.
7.4 Отвёртка	1 шт.

8 Маркировка

8.1 Маркировка индивидуальной упаковки устройства должна содержать:
- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение модели согласно КД;
- обозначение СТБ/ТО;
- номер заказа;
- размер устройства;
- гарантийный срок металлических элементов устройства и ботинок (месяцев, дней);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 Свидетельство о приемке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей
наименование изделия

ПИО-51 СТБ 932-3-2021
обозначение *№ заказа*

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 932-3-2021, ТО BY 100010315.327-2022, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 - 2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

личная подпись *расшифровка подписи*

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковывании

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей
наименование изделия

ПИО-51 СТБ 932-3-2021
обозначение *№ заказа*

упаковано на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации металлических элементов устройства – 12 месяцев со дня выдачи потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации обуви (ботиночек) – 45 дней со дня выдачи потребителю.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт устройства в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за нарушения условий хранения, транспортирования, изменений и ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласования с РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на устройства, имеющие нарушения требований эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, тел. (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

12 Сведения о государственной регистрации

Устройство является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: _____.

Действительно до _____.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» : 220073, Республика Беларусь, г. Минск , ул.Одоевского 10 тел.017-308-14-85. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок: (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru