9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие бюгеля требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации, подтверждающей наличие заводских дефектов, при предъявлении паспорта по адресу:

Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ».

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Бюгель зуботехнический БМ-1П- ____, заводской №___ _____
ТУ РБ 200079626.009-2003

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

БЮГЕЛИ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ БМ-1П

ТУ РБ 200079626.009-2003

ПАСПОРТ
БМ-1П.00.000 ПС

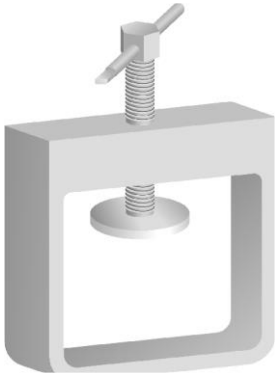

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Бюгели зуботехнические БМ-1П-01, БМ-1П-02, БМ-1П-03 (далее – бюгель) предназначены для зажима кювет в условиях зуботехнических лабораторий.

1.2 Бюгель предназначен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС и относительной влажности 80% при +25ºС.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Максимальное зажимное пространство, мм:
БМ-1П-01 ……..70
БМ-1П-02 ……..130
БМ-1П-03 ……..190
2.2. Ход винта, мм, не менее ……..30
2.3 Габаритные размеры, мм
длина ……..125 ± 3
ширина ……..72 ± 3
высота:.
БМ-1П-01 ……..170 ± 5
БМ-1П-02 ……..230 ± 5
БМ-1П-03 ……..290 ± 5
2.4 Масса, кг, не более;
БМ-1П-01 ……..1,6
БМ-1П-02 ……..1,8
БМ-1П-03 ……..2,1
2.5 Срок службы, лет, не менее……..7

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1.В комплект поставки входит:
- бюгель ……..… .1 шт.
- ключ ……..… .1 шт.
- паспорт ……..… .1 шт.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Бюгель представляет собой сборную конструкцию и поставляется потребителю в упакованном виде.

4.2 Распакуйте бюгель, очистите его от пыли.

4.3 Удалите консервационную смазку. Выполните санитарную обработку путем протирки поверхностей пресса салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата).

Также допускается обработку проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Периодически, по мере необходимости, производите смазку резьбовой части силового винта смазкой ЦИАТИМ-201.

5.2 При установке кювет в зажимное пространство бюгеля, необходимо убедиться, что они расположены по оси силового винта.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Бюгель в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50 ºС и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25ºС.

6.2.Хранить бюгель допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40 ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бюгель зуботехнический БМ-1П-____ , заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ РБ 200079626.009-2003 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку__ _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Бюгель зуботехнический БМ-1П-____ , заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____м.п._____ ____Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru