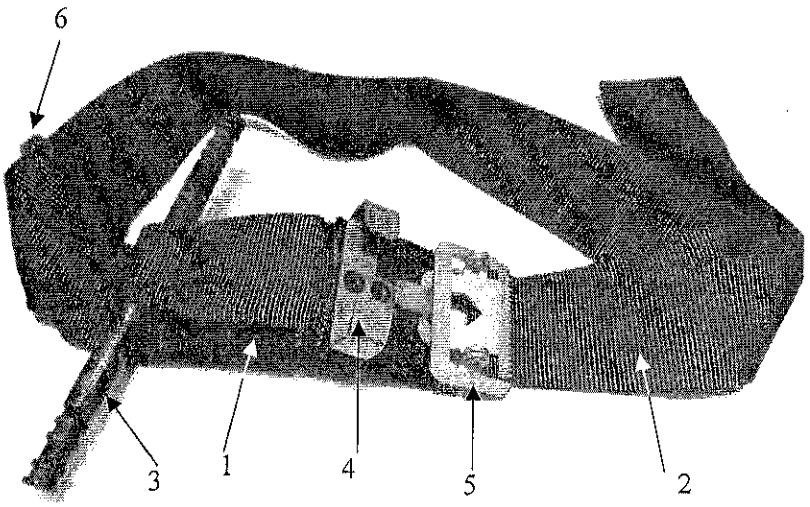
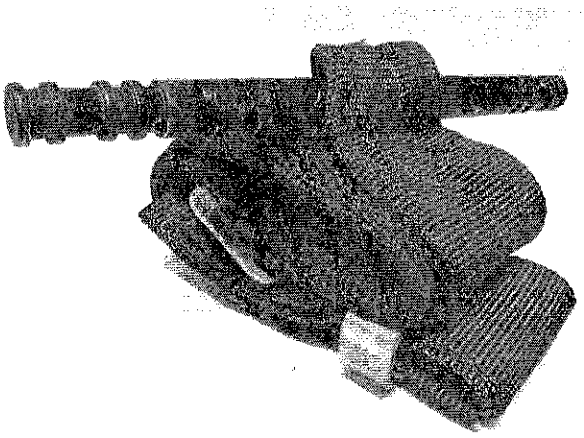
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Турникет кровоостанавливающий «S.A.S.» (далее – турникет) предназначен для временной остановки интенсивных кровотечений на конечностях.



1 - подложка
2 - утягивающая лента
3 - вороток
4 - скоба фиксации воротка с крючком
5 - пряжка
6 - ограничительное кольцо



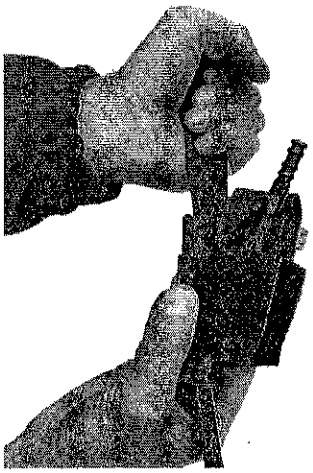
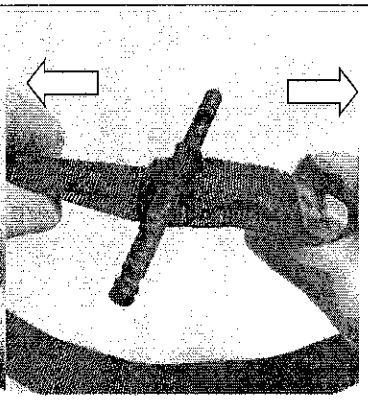
Габаритные размеры турникета в сложенном виде
140×50×50(±10мм)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для временной остановки интенсивного кровотечения

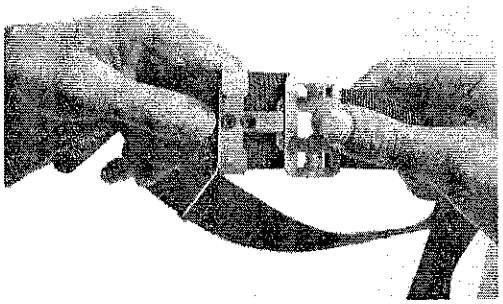
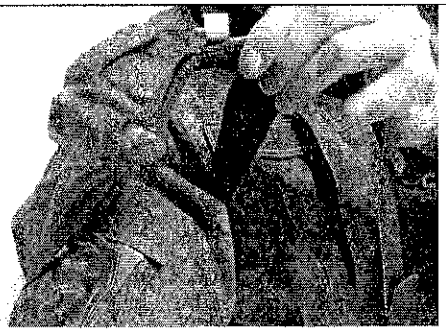
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

НА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ:

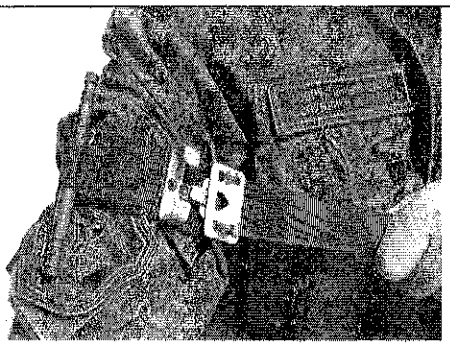
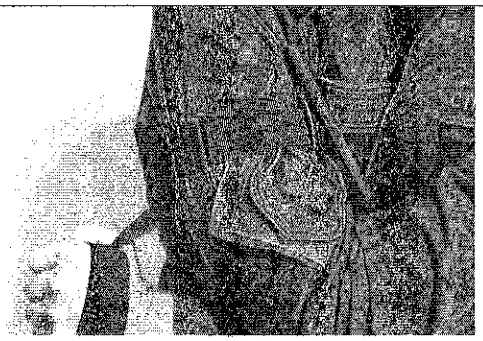
	извлечь турникет из чехла
  А Б	**убедиться, что вороток расположен на подложке**, при необходимости – **растянуть ленту с воротком до упора** (Б) (привести в исходное положение)

Внимание!

Размещение ленты с воротком в положении, отличном от исходного, приводит к неэффективности применения турникета.

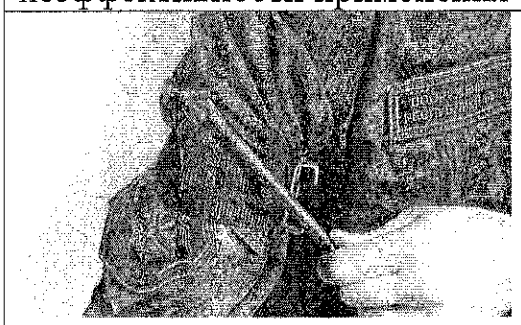
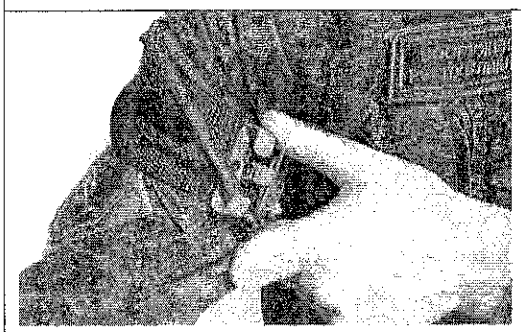
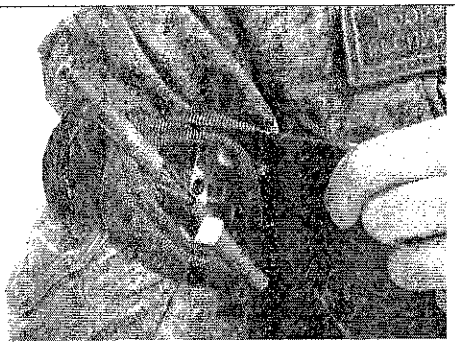
	защелкнуть пряжку на крючок скобы фиксации воротка
	завести образовавшуюся петлю на раненую руку выше ранения (ближе к туловищу)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	второй рукой взять за утягивающую ленту возле пряжки и затянуть
	**затянуть утягивающую ленту с максимальным усилием** (первичная затяжка)

Внимание!

Неполная первичная затяжка утягивающей ленты приводит к неэффективности применения турникета.

	вращать вороток до остановки кровотечения
	зафиксировать вороток вкладыванием в скобу фиксации воротка
	свободный конец утягивающей ленты обмотать вокруг воротка

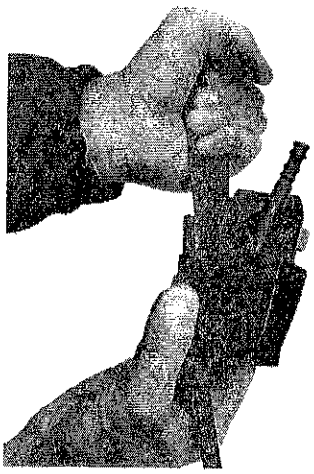
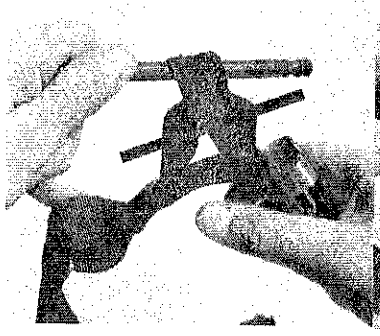
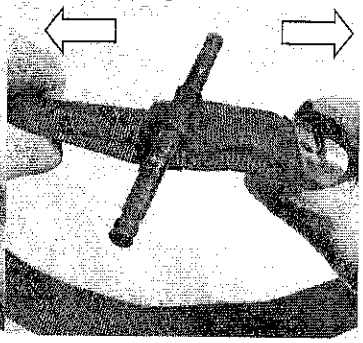
указать врем наложения турникета.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание!

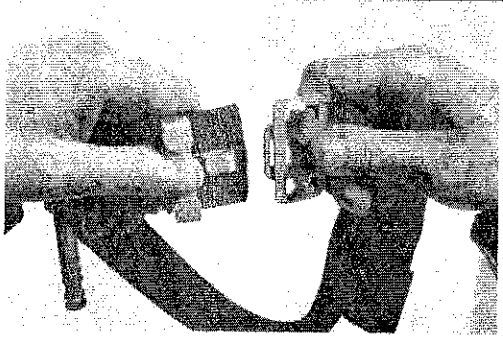
Чрезмерное закручивание воротка при максимально сильной первичной затяжке может привести к повреждению подлежащих тканей (нервов, сосудов, мышц).

НА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ:

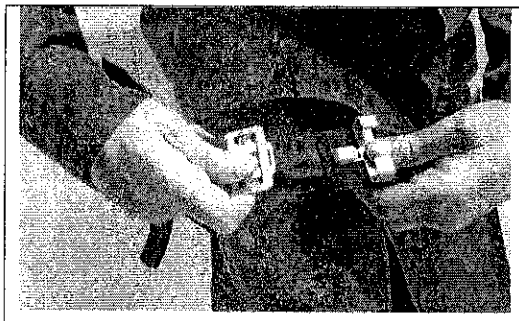
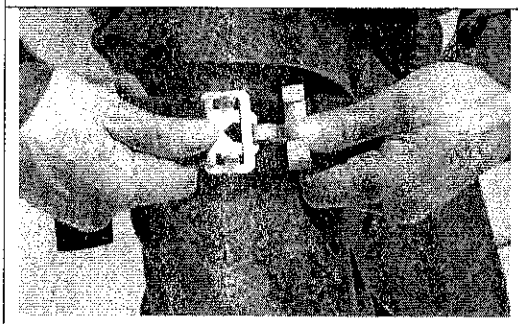
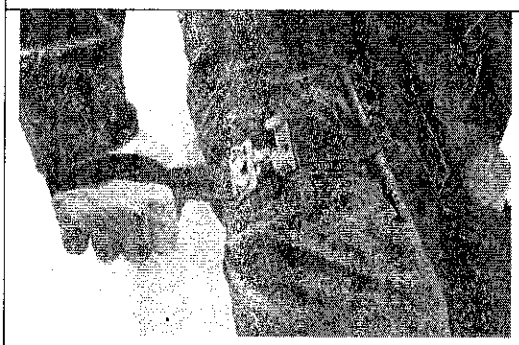
	извлечь турникет из чехла
 А  Б	**убедиться, что вороток расположен на подложке**, при необходимости – **растянуть ленту с воротком до упора** (Б) (привести в исходное положение)

Внимание!

Размещение ленты с воротком в положении, отличном от исходного, приводит к неэффективности применения турникета.

	разъединить пряжку и крючок скобы фиксации воротка

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	охватить утягивающей лентой раненую ногу выше раны (ближе к туловищу)
	защелкнуть пряжку на крючок
	**затянуть утягивающую ленту с максимальным усилием** (первичная затяжка)
Внимание! Неполная первичная затяжка утягивающей ленты приводит к неэффективности применения турникета.	

дальнейшие действия выполнять по аналогии с наложением на верхнюю конечность.

Внимание!

Время нахождения турникета на конечности в затянутом состоянии не должно превышать 1 час. Если в течение этого времени пострадавшего не представляется возможным доставить в учреждения здравоохранения, то через каждые 20-25 минут необходимо выполнить следующие действия:

прижать кровоточащую рану (или пережать магистральный сосуд на протяжении) и осторожно расслабить турникет на 3-5 минут;

растянуть ленту воротка и **убедиться, что вороток расположен на подложке**;

повторно наложить турникет чуть выше или ниже предыдущего места наложения, повторно обозначить время наложения.

Не следует накладывать турникет:

на среднюю треть плеча;

Республика Беларусь Минская область Общество с ограниченной ответственностью «МСВ ПРОФИ»

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

на нижнюю треть бедра;
на нижнюю треть голени и предплечья.

Функциональные возможности турникета

Объединение двух турникетов в одну функциональную единицу (путем соединения крючка одного турникета с пряжкой другого) позволяет обеспечить охват любой части тела (в том числе в узловых зонах – пах, шея, подмышечная впадина).

Помимо временной остановки интенсивных кровотечений турникет может быть использован для

создания точечного давления на рану (накладывание на рану поверх объемного перевязочного материал и затягивание утягивающей ленты турникета **без вращения воротка**);

транспортной иммобилизации, фиксации шин;

переноске пострадавших;

извлечения пострадавших из труднодоступных мест.

Турникет может накладываться как поверх одежды, так и непосредственно на кожу.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от -25°С до +40°С.

Относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25°С.

После использования турникета необходимо обязательно провести полный осмотр металлических элементов и лент. При обнаружении деформации металлических элементов или повреждения лент дальнейшее использование турникета по предназначению не допускается.

При использовании турникета в процессе обучения без контакта с биологическим жидкостями турникет может использоваться многократно без проведения дезинфекции.

При необходимости (попадание биологических жидкостей, общее загрязнение в процессе обучения) турникет можно продезинфицировать химическим способом. Обработка средствами, оказывающими негативное влияние на металлические детали и ленту, а также термическим способом (кипячением, автоклавированием) не допускается. После дезинфекции турникет необходимо тщательно просушить.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru