ИНСТРУКЦИЯ

по применению
ремней и комплекта ремней для фиксации пациентов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Назначение изделия.

Комплект ремней для фиксации пациентов предназначен для использования медицинским и иным персоналом учреждений здравоохранения и социальной защиты в отделениях хирургии (нейрохирургии), реанимации, психиатрии и наркологии учреждений здравоохранения, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, других учреждениях социальной защиты, а также в домашних условиях для фиксации в надлежащем положении конечностей или туловища пациента при проведении необходимых лечебно-профилактических и диагностических процедур, либо для обеспечения неподвижности пациентов, склонных к суициду, самоповреждениям или агрессии по отношении к медперсоналу или другим пациентам.

Состав и параметры.

Продукция поставляется в следующем составе:

- ремни для фиксации пациентов: варианты исполнения:

ремень для фиксации нагрудный (РГ), тип: МЗ или КБ, размеры: S, L, M;
ремень для фиксации поясной (РП), тип: МЗ или КБ, размеры: S, L, M;
ремень для фиксации ног (РН), тип: МЗ или КБ, размеры: S, L, M;
ремень для фиксации рук (РР), тип: МЗ или КБ, размеры: S, L, M;

- комплект ремней для фиксации пациентов, тип МЗ, размеры: S, L, M

в составе:
ремень для фиксации ног (РН);
ремень для фиксации рук (РР) – 2 шт.;
ремень для фиксации нагрудный (РГ);
ремень для фиксации поясной (РП);
магнитные замки (клипсы) – 12 шт.;
магнитный ключ – 2 шт.;


- комплект ремней для фиксации пациентов, тип КБ, размеры: S, L, M


в составе:
ремень для фиксации ног (РН);
ремень для фиксации рук (РР) – 2 шт.;
ремень для фиксации нагрудный (РГ);
ремень для фиксации поясной (РП).

Параметры комплектов:

Наименование и обозначение ремня	Наименование составной части	Количество	Размеры (длина, ширина), мм		
			L	M	S
Ремень для фиксации нагрудный (РГ)	Ремень	2	650х45	650х45	650х45
	Ремень центральный	1	780х45	760х45	750х45
	Ремень наплечный	1	2150х45	2100х45	2100х45
Ремень для фиксации поясной (РП)	Основа	1	1350х150	1050х150	740х150
	Ремень	2	760х45	750х45	740х45
	Ремень	2	600х45	600х45	600х45
	Ремень центральный	2	850х45	830х45	800х45
Ремень для фиксации ног (РН)	Ремень	2	550х45	430х45	320х45
	Ремень общий	1	2150х45	2100х45	2100х45
Ремень для фиксации рук (РР)	Ремень	2	720х45	650х45	570х45
Примечание - Допускаемые предельные отклонения размеров - ±10%.					

Инструкция по использованию.

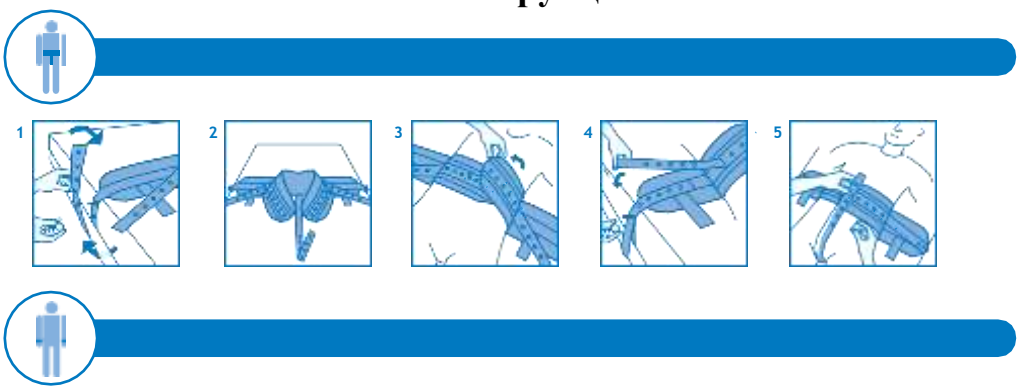

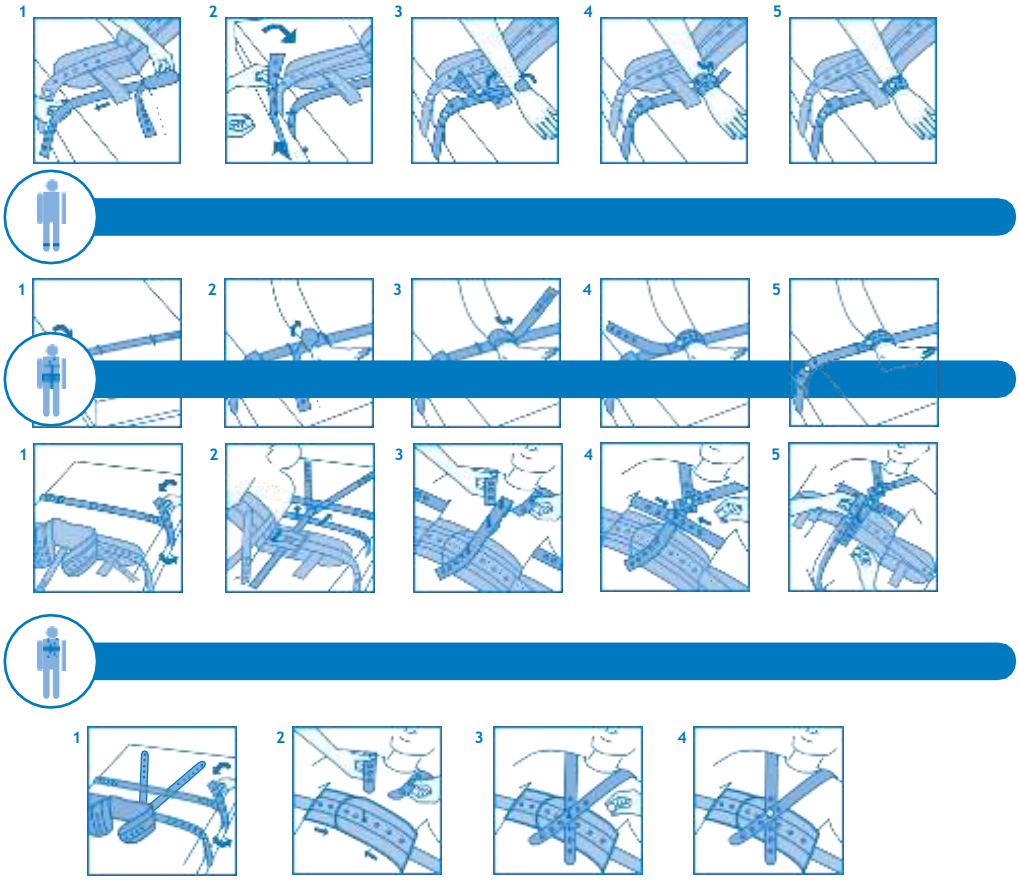

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Используйте изделие наиболее подходящего для пациента размера.
2. Перед использованием полностью проверьте весь комплект.
3. Надежно прикрепите все ремни к каркасу кровати. На совмещенных кроватях всегда прикрепляйте ремни к подвижным рамам.
4. Используйте ремень для фиксации поясной чтобы предотвратить скольжение пациента вверх и вниз.
5. Два боковых поручня кровати должны всегда находиться в положении ВВЕРХ и быть ЗАБЛОКИРОВАНЫ.
6. Постоянно наблюдайте за всеми пациентами, которые удерживаются с помощью комплекта ремней для фиксации пациентов.
7. В экстренных случаях необходимо использовать безопасное режущее устройство.
8. Магнитные ключи не должны находиться рядом с пациентами с кардиостимулятором на расстоянии менее 15 см.
9. Не погружайте магнитные замки в жидкость и не допускайте ее попадания на и вовнутрь магнитного замка.
10. Неправильное использование комплекта ремней для фиксации пациентов может привести к серьезным травмам или даже смерти пациента.
11. Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования ремней, комплекта ремней для фиксации пациентов или несоблюдения указанных рекомендаций.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

- Комплект ремней для фиксации пациентов не являются огнеупорными.
- Перед мытьем/сушкой комплекта ремней для фиксации пациентов необходимо снять магнитные замки.
- Комплект ремней для фиксации пациентов изготовлен из полимерных материалов или 100% натурального хлопка и не предназначен для очистки при высоких температурах (не более 40º).
- Регулярно очищайте жесткой щеткой боковую застежку на липучке от пуха и ниток.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru