ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРУЖКИ ЭСМАРХА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кружки Эсмарха выпускаются по ТУ BY 693153002.002-2023 «Кружки Эсмарха резиновые».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кружки Эсмарха предназначены для применения (спринцевания, промывания и пр.) медицинским персоналом и пациентами в лечебно-профилактических учреждениях.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- трубка;
- наконечники;
- наконечник маточный;
- зажим.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед процедурой закройте регулируемый зажим на трубке.

Поместите кружку на штатив, закрепив ее с помощью держателя.

Наполните кружку, заранее приготовленным раствором для промывания.

Трубку провести через оба отверстия зажима (положение «открыто» - см. рис.). В другой конец трубки вставить наконечник (при промывании) или маточный наконечник (при спринцевании). Собранную в систему кружку подвесить за петлю.

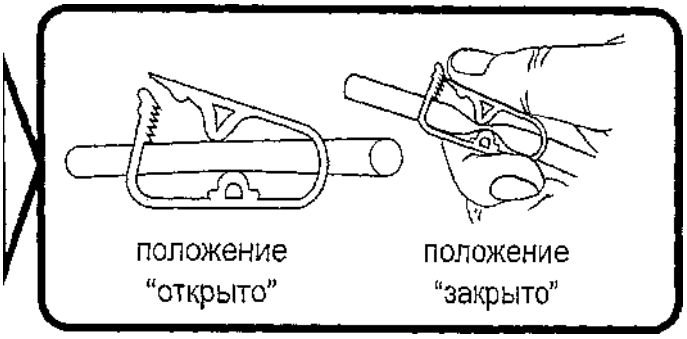

Перевести зажим в положение «закрыто», нажав пальцем на фиксатор зажима с максимальным усилием до щелчка (см. рис.). В горловину кружки залить требуемое количество лекарственного раствора. Вовремя проведения процедуры перевести зажим в положение «открыто», нажав пальцем на зубчастую часть фиксатора, что обеспечит свободное истечение жидкости из кружки.

Удерживая кружку около наконечника и направив наконечник вверх и в сторону, приоткройте регулируемый зажим на трубке и выпустите воздух из трубки до полного заполнения наконечника раствором.

Осторожно введите наконечник кружки пациенту в прямую кишку.

Полностью откройте регулируемый зажим на трубке, нажав пальцем на зубчатую часть фиксатора.

Отрегулируйте поток жидкости с помощью зажима.

По окончании санитарно- гигиенической процедуры зажим перевести в положение «закрыто».

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед применением промойте все детали кружки в горячей воде при температуре не более 90 °С.

Дезинфекцию наконечников проводят методом погружения в 3%-ный раствор перекиси водорода или в 3%-ный раствор хлорамина в течение 80 мин.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Кружки следует хранить в помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Кружки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения кружек – 3 года с даты изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-МЕДИКА»

222227, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, Драчковский с/с, аг. Драчково, ул.Центральная, 10Б, каб.1, здание торгового центра Драчково №61.

Электронный адрес: med@brk.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru