Инструкция по применению

Ходунки трехфункциональные модель: AT51002








Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ходунки трехфункциональные модель AT51002 являются легким, удобным изделием, предназначенным для облегчения движения лицам с ограниченными возможностями передвижения и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Они обеспечивают пользователю опору, сокращая риск падения, а также позволяют ходить, опираясь на ходунки с обеих сторон.

Подготовка ходунков к использованию

Для того чтобы сложить ходунки, следует нажать кнопку замка и потянуть боковые стороны ходунков внутрь, а затем сложить ходунки (как указано на картинке ниже).

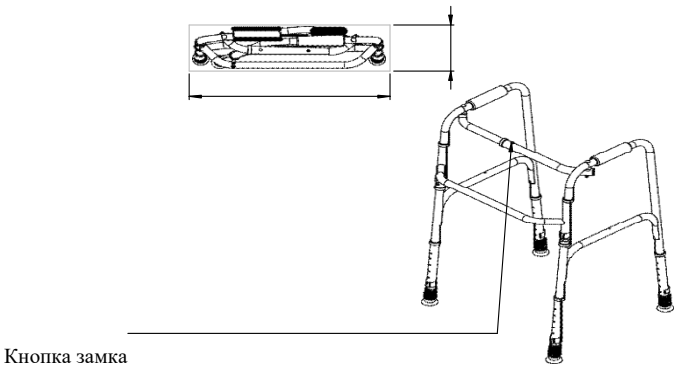


Ходунки в шагающем положении

Для переустановки ходунков в шагающее положение необходимо достать клипсы, находящиеся с боковых сторон ходунков, и установить их в соответствующих отверстиях в передней части.

Ходунки переставные

Для переустановки ходунков в положение переставных, необходимо снять две предохранительные клипсы, расположенных на верхнем горизонтальном усиливающем элементе рамы, и поместить их в отверстия, расположенные на одинаковой высоте на вертикальном элементе рамы. Такое положение обеспечивает самую большую стабильность. Чтобы переставить ходунки, их необходимо поднять целиком. Модель рекомендуется преимущественно для перемещения на короткое расстояние.

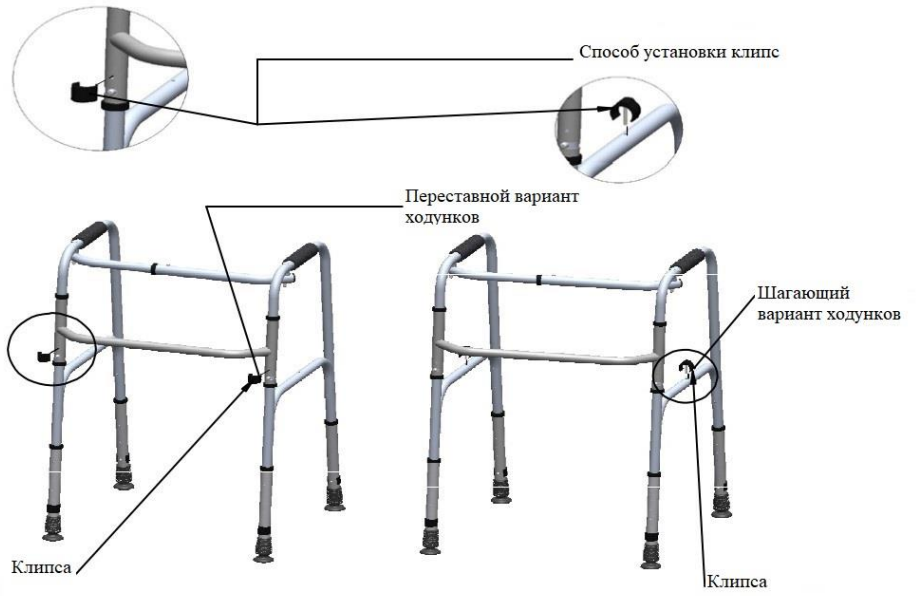

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ходунки с колесами

Чтобы получить ходунки с колесами, их необходимо сначала заблокировать (отключить функцию ходьбы), снять передние ножки и установить колеса на их место. Не забудьте проверить высоту всех ножек (они должны быть одинаковой длины).

Перед началом использования изделия необходимо отрегулировать высоту. Для этого следует изъять клипсу, отрегулировать высоту – одинаковую для всех четырех ножек, а затем, вставить клипсу в соответственное отверстие. В противном случае изделие может оказаться нестабильным, а отверстие может деформироваться.

Технические характеристики модели AT51002:

Высота: 75-93 см. 8 уровней регулировки, каждые 2 см
Ширина между ручками: 46 см
Вес с колесами: 2,650 кг, с насадками: 2,35 кг
Глубина: 40 см
Толщина в сложенном виде: 12 см
Диаметр колеса: 12,5 см
Ширина: (спереди) 46 см, (сзади) 51 см
Максимальный вес пользователя: 130 кг

Основные характеристики модели AT51002:

• изготовлены из армированного алюминия;
• оснащены комплектом из двух колес и ножек;
• 3 в 1; могут выступать как шагающие ходунки с 4 насадками, в положении переставных ходунков или как ходунки с двумя колесами для легкого перемещения;
• легко складываются и транспортируются, складываются нажатием одной кнопки;
• 8 уровней регулировки высоты;
• эргономичные ручки.

Уход за изделием:

Изделие следует периодически чистить с помощью воды и моющих средств. Изделие можно подвергать действию дезинфицирующих средств.

Если изделие не используется, оно должно храниться в сухом помещении. Следует избегать длительного и непосредственного воздействия солнечного света на изделие.

Предупреждение!

1. Перед использованием ходунков прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.
2. Использование ходунков на поверхности, которая не обеспечивает надежной опоры, то есть мокрой, ледяной, жирной, сильно отшлифованной, не допускается из-за риска падения.
3. Перед каждым использованием ходунков осуществлять визуальный контроль всех компонентов ходунков, в том числе - тщательно проверять стабильность и состояние опорной рамы.
4. Ходунки предназначены только для поддержки одного пользователя, запрещено стоять на ходунках.
5. Не превышайте максимальный уровень высоты.
6. Существует вероятность защемления пальцев в зоне складывания ходунков, будьте внимательны!

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Не используйте ходунки, если вы заметили какие-либо видимые или заметные повреждения (например, поломку рамы), так как это может привести к несчастному случаю.

8. Не наклоняйтесь снаружи ходунков, стоя в них. Это может привести к падению пользователя.

9. Не используйте ходунки, если пользователь весит более 130 кг.

10. Избегайте контакта с открытым пламенем. Изделие может воспламениться.

11. Убедитесь, что клипсы, фиксирующие насадки или колеса, находится на одной высоте после установки. В противном случае ходунки могут быть нестабильными, а отверстие может деформироваться.

Утилизация изделия непригодного для дальнейшего использования.

С непригодным для дальнейшего использования изделием следует обращаться как с коммунальными отходами. Во время утилизации непригодного к дальнейшему использованию изделия, рекомендуется произвести сортировку его элементов.

Состав: Н-образная планка: 100% сталь, вся остальная рама: 100% алюминиевый сплав; наконечники ножек: 100% TPR; ручки: 100% EVA; колеса 5 дюймов: 65% ПП + 35% ПВХ.

Срок годности (хранения): 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Гарантия: год с даты покупки.

Информация об изделии

Для получения подробной информации об изделии обратитесь к производителю или к продавцу в вашей местности.

Импортер в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г. Минск, ул. Пономаренко 35/А - 318 тел.: +375 44 799 76 99.

Производитель – «ANTAR» Sp. J., ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Польша, Варшава

тел.: 0 22 518 36 00.

CE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: ……

Серийный номер: ……..

Дата продажи: ……..

1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьляньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи.

2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.

3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость. Ремонт или замена дефектных изделий не продлевают гарантийный срок.

4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.

5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.

6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.

7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.

Antar Sp.J.

ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa

tel. +48 22 518 36 00

fax: +48 22 518 36 30

e-mail:antar@antar.net

www.antar.net

Импортер в РБ – ИООО «АНМЕДПЛЮС»,

тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.

и разборчивая подпись продавца:

_____( )

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru