УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Лента»
_____Е. В. Шайтура
«__20__» ____12_____2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

салфеток медицинских:
- салфеток медицинских, стерильных;
- салфеток медицинских, нестерильных;
- салфеток медицинских с рентгеноконтрастной нитью, стерильных;
- салфеток медицинских с рентгеноконтрастной нитью, нестерильных;

Начальник управления качеством
и сертификацией продукции
ОАО «Лента»

_____Е. М. Ермоленко
20.12.2022 г.

Начальник отдела управлением
качеством ОАО «Лента»

_____ Л. Н. Наконечная
20.12.2022 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция по применению предназначена для ознакомления пользователей с назначением, применением, эксплуатацией, условиями хранения и гарантиями изготовителя салфеток медицинских (далее салфетки), в том числе с рентгеноконтрастной нитью, стерильных и нестерильных.

Салфетки соответствуют требованиям СТБ 2282-2012 « Салфетки медицинские. Общие технические условия».

Назначение:

Салфетки медицинские предназначены для применения в учреждениях здравоохранения при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекций и реализации потребителю.

Описание изделия:

Салфетки изготавливают различного размера (50х50мм, 50х75мм, 75х75мм, 100х50мм, 100х60мм, 100х75мм, 100х100мм, 150х100мм, 200х100мм, 200х200мм) в 2,4,8,12,16,20,24 или 32 сложения. Салфетки изготавливают однослойными или многослойными.

Для повышения безопасности применения в операционных блоках салфетки дополнительно могут быть снабжены рентгеноконтрастной нитью, которая дает возможность быстрого и неинвазионного обнаружения их с использованием рентгенооборудования, если перевязочный материал является источником патологии. Рентгеноконтрастная нить не токсична, состоит из материала, который содержит не менее 60% сульфата бария.

Салфетки изготавливают стерильными и нестерильными.

Внешний вид салфеток медицинских и салфеток медицинских с рентгеноконтрасной нитью представлен на рис.1 и рис.2

Рис. 1


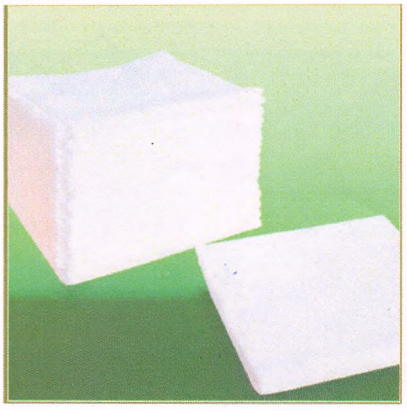


Рис. 2

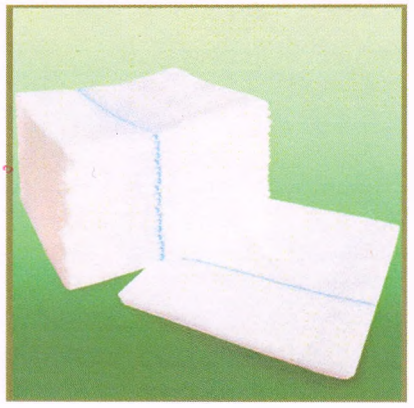

Способ применения:

Перед использованием упаковку с салфетками необходимо разорвать по шву или разрезать ножницами.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стерильные салфетки необходимо извлекать из упаковки избегая соприкосновения с краями упаковки или иными предметами, способными контаминировать салфетки.

После использования салфетки утилизируются в обычном порядке.

Меры предосторожности:

Салфетки сохраняют свою стерильность только при условии хранения в неповрежденной упаковке. Перед применением салфеток необходимо проверить целостность упаковки.

Нарушение целостности упаковки может привести к потере стерильности. В случае повреждения упаковки салфеток медицинских (стерильных) допускается использование в качестве салфетки нестерильной.

Для контакта с поврежденной кожей, открытыми ранами использовать только стерильные салфетки.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия эксплуатации:

Предназначены для одноразового использования, повторное использование не допускается.

Транспортирование и хранение:

Салфетки транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.

Упакованные салфетки должны храниться в сухом, проветриваемом помещении, на расстоянии от пола не менее 20см, в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие салфеток требованиям СТБ 2282-2012 при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Срок годности стерильных салфеток – пять лет с даты стерилизации.
Срок хранения нестерильных салфеток – пять лет с даты изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru