Инструкция - памятка - по уходу и эксплуатации
за рукавицами ортопедическими

Рукавицы ортопедические предназначены для лиц с протезами верхних конечностей или деформированными кистями рук.

Противопоказанием к пользованию рукавицами является индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Рукавицы изготавливаются с 29 по 38 размер и по индивидуальным заказам с учетом анатомо-функциональных особенностей конкретного человека.

Для правильного подбора рукавиц по размеру рекомендуется измерить обхват ладонной части кисти (А) в области пястно-фалангового сочленения, в соответствии с рисунком 1 и подобрать размер в соответствии с таблицей 1.

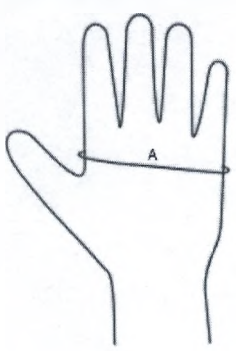


Рисунок 1

Таблица 1

Размер рукавиц	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Обхват кисти (А), мм	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- очищать от загрязнения рукавицы влажной, а затем сухой губкой;
- сушить рукавицы следует при температуре (20 ± 5^0C) вдали от отопительных приборов;
- запрещается мыть рукавицы в воде.

Гарантийный срок эксплуатации – 40 дней с момента выдачи (продажи) рукавиц.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru