Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **AUTOBACK**, П12

Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка под спину П12.

Профилактика усталости и боли в пояснице.





без подушки



с подушкой TRELAX





Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически правильного положения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время длительного сидения.
- Формирование правильной осанки.
- Нормализация тонуса паравертебральных мышц в поясничном отделе.
- Снижение вибрационного воздействия на позвоночник.

Показания к применению:

- Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время вождения.
- Профилактика возникновения болей в нижней части спины при остеохондрозе.
- Мышечный дисбаланс и боли в пояснице.
- Улучшение эргономики автомобильного кресла.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Способ применения:

Подушку размещают на кресле так, чтобы максимальный выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника. Для крепления к спинке кресла имеются два фиксирующих эластичных ремня.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 25x29x6 см.

Цвет:


Серый, черный.

Состав:

Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% полиэстер.

Комплектность:

Подушка, съемный чехол с ремнями для фиксации, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

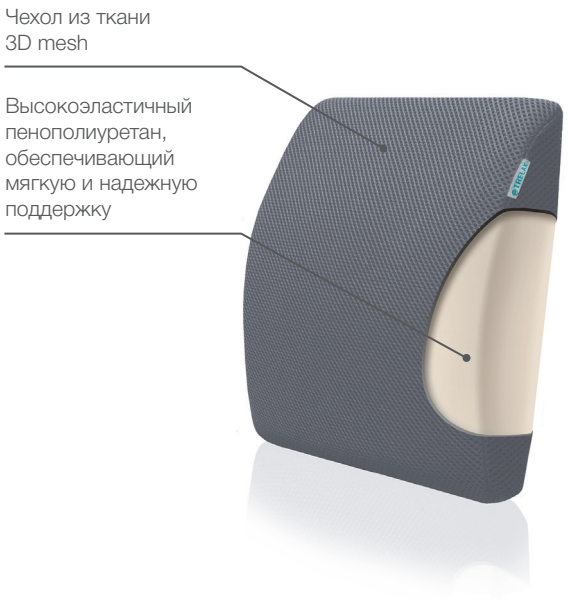

Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **RESPECTA,** П05


Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка с эффектом памяти под голову П05.


Улучшает качество сна. С эффектом памяти для сна на боку, на спине и на животе.




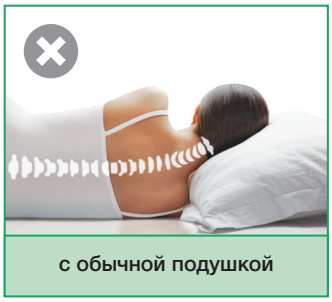



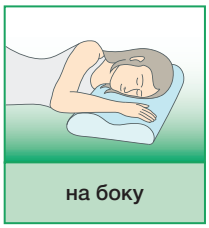

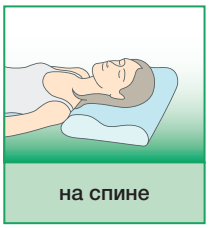

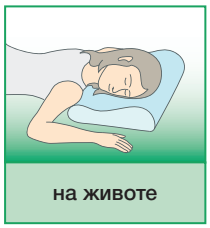

Рекомендованное положение во время сна



Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически правильного положения головы и шеи во время сна и отдыха.
- Уменьшение регионарного болевого синдрома.
- Восстановление нарушенного баланса мышечного тонуса в затылочно-шейной и шейно-грудной зонах и плечевом поясе.
- Улучшение качества ночного и дневного сна и отдыха.

Показания к применению:

Комплексная программа профилактики и реабилитации:

- головной боли напряжения (ГБН);
- дискомфорта и мышечного напряжения в шее, нарушающих нормальный сон и/или дневной отдых;
- мышечных спазмов, болей шее, в том числе с иррадиацией в затылок, грудную клетку и плечевой пояс;
- миофасциальных синдромов;
- фибромиалгий;
- хронической недостаточности мозгового кровообращения, в том числе при уже имеющей место вертебрально-базилярной недостаточности (начало применения не ранее 3 мес. с момента острого нарушения мозгового кровообращения).

Длительное применение изделия предупреждает прогрессирование дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, суставах плечевого пояса (остеохондроз, спондило- и остеоартроз и др.) и мягких тканях, способствует нормализации кровообращения и особенно микроциркуляции во время сна и отдыха в этих зонах.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.
Начало применения изделия должно быть согласовано с лечащим врачом при:

- длительном или рецидивирующем, или нарастающем характере болевых и/или мышечно-тонических проявлений;
- неэффективном применении аналогичных ортопедических изделий;
- показаниях к хирургическому вмешательству;
- после оперативных вмешательств на голове и шее.

Применять с осторожностью после хирургического вмешательства на позвоночнике (в любом его отделе) и мягких тканях плечевого пояса.

Подбор размера подушки:

Размер одежды	Размер подушки	
42-44	**S**	38x60x(8)10 см
46-54	**M**	38x60x(10)12 см
более 54	**L**	38x60x(12)14 см

Состав:

Подушка: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 35% лиоцелл – TENCEL® (поверхность), 65% полиэстер.

Комплектность:

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Дополнительную наволочку можно приобрести отдельно.

Способ применения:

Подушку располагают валиком под шею. При сне на боку и на спине – под шею располагается больший по высоте валик, меньший по высоте валик рекомендуется использовать для тех, кто засыпает на животе.

Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **RESPECTA COMPACT**, П07

Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка с эффектом памяти под голову для путешествий П07. Улучшение качества сна в поездках.

С эффектом памяти для сна на боку, на спине и на животе.



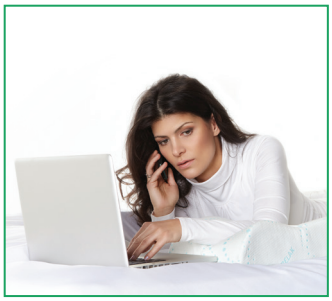



Оказываемые эффекты:

- Улучшение качества сна.
- Обеспечение физиологически правильного положения и разгрузка шейного отдела позвоночника и головы во время сна.
- Нормализация кровообращения головного мозга.
- Нормализация тонуса мышц шеи и надплечий.

Показания к применению:

Комплексная программа профилактики и реабилитации:

- головной боли напряжения (ГБН);
- дискомфорта и мышечного напряжения в области шеи, нарушающего нормальный сон и/или дневной отдых;
- мышечных спазмов, болей в шее, в том числе с иррадиацией в затылок, грудную клетку и плечевой пояс;
- миофасциальных синдромов;
- фибромиалгий;
- хронической недостаточности мозгового кровообращения, в том числе при уже имеющей место вертебро-базилярной недостаточности (начало применения не ранее 3 месяцев с момента острого нарушения мозгового кровообращения).

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. Начало применения изделия должно быть согласовано с лечащим врачом:

- у пациентов с длительным или рецидивирующим течением вертеброгенных болевых и/или мышечно-тонических синдромов;
- в первые три недели после оперативного вмешательства на позвоночнике, голове и шее.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 38x30x(10)12 см.

Состав:

Основа: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 35% лиоцелл – TENCEL® (поверхность), 65% полиэстер.
Сумка: 100% полиэстер.

Комплектность:

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, транспортировочная сумка, коробка, инструкция по применению.





Возможность на время скрутить для компактной транспортировки в багаже

Способ применения:

Подушку располагают валиком под шею. При сне на боку и на спине – под шею располагается больший по высоте валик, меньший по высоте валик рекомендуется использовать для тех, кто засыпает на животе.

Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **SPECTRA**, П04

Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка под спину П04.

Профилактика сутулости и боли в спине.





без подушки



с подушкой TRELAX





Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически правильного положения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время длительного сидения.
- Формирование правильной осанки.
- Нормализация тонуса паравертебральных мышц в поясничном отделе.
- Мягкая боковая поддержка в поясничном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время длительного сидения.
- Возникновение болей в нижней части спины при остеохондрозе.
- Остеохондроз нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника.
- Нарушение осанки.
- Реабилитация при комплексной терапии, после травм и заболеваний нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника в качества реклинатора на период постельного режима.
- Улучшение эргономики рабочего кресла.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

При нестабильности позвонков в поясничном отделе перед применением подушки необходимо проконсультироваться с врачом.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 37x33x9 см.

Цвет:


Серый, черный.

Состав:

Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% полиэстер.

Комплектность:

Подушка, съемный чехол с ремнем для фиксации, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

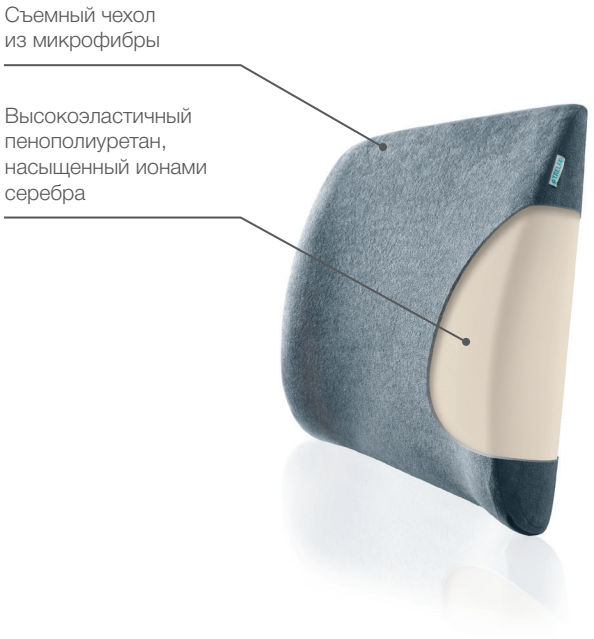

Способ применения:

Подушку размещают на кресле или сиденье так, чтобы максимальный выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника. Для крепления к спинке стула или кресла на подушке имеется фиксирующий ремень, который может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА, П11

Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка под спину П11.

Профилактика усталости и боли в пояснице.







без подушки



с подушкой TRELAX





Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически правильного положения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время длительного сидения.
- Формирование правильной осанки.
- Нормализация тонуса паравертебральных мышц в поясничном отделе.

Показания к применению:

- Нарушение осанки.
- Профилактика возникновения болей в нижней части спины при остеохондропатии.
- Мышечный дисбаланс и боли в пояснице.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

При нестабильности позвонков в поясничном отделе перед применением подушки необходимо проконсультироваться с врачом.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 25х29х6 см.

Цвет:

Серый.

Состав:


Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% полиэстер.

Комплектность:

Подушка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Способ применения:

Подушку размещают на кресле или сиденье так, чтобы максимальный выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника. Для крепления к спинке стула или кресла на подушке имеется фиксирующий ремень, который может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

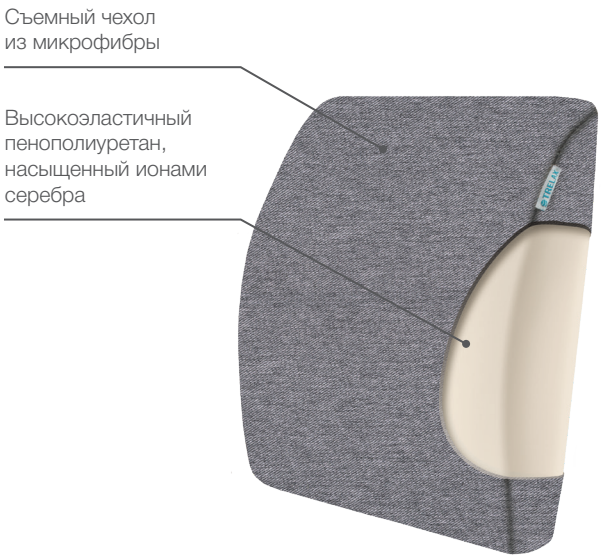

Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **SPECTRA SEAT**, П17


Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка с откосом на сиденье П17.

Формирование правильной осанки, укрепление мышц поясницы.



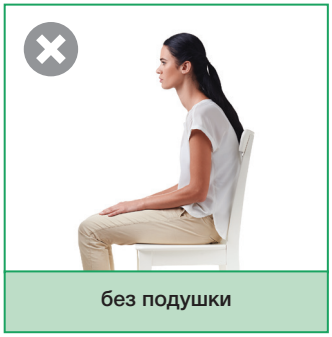

без подушки

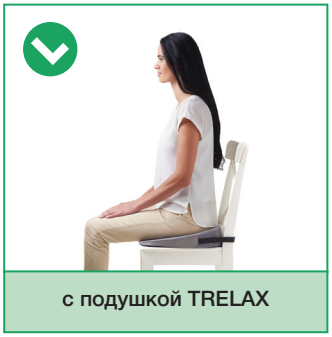

с подушкой TRELAX





Оказываемые эффекты:

- Формирование правильной осанки.
- Укрепление мышц спины.
- Уменьшение болевых ощущений при геморрое.

Показания к применению:

- Нарушение осанки.
- Боли в спине при долгом нахождении в положении сидя.
- Повышение комфорта при долгом нахождении в положении сидя.
- Наличие геморроидальных узлов.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Подбор размера:

22х27 см, 40х44 см, 42х39 см.

Цвет:

Серый, черный.

Состав:


Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Вставка: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% полиэстер.

Комплектность:

Подушка, съемный чехол с ремнем для фиксации, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Способ применения:

Подушку используют для сидения на обычном стуле или в автомобиле. Более высокий край подушки должен прилегать к спинке сиденья. Для лучшего крепления подушки воспользуйтесь фиксирующим ремнем.
В случае показаний врача подушку можно использовать без мягкой вставки.

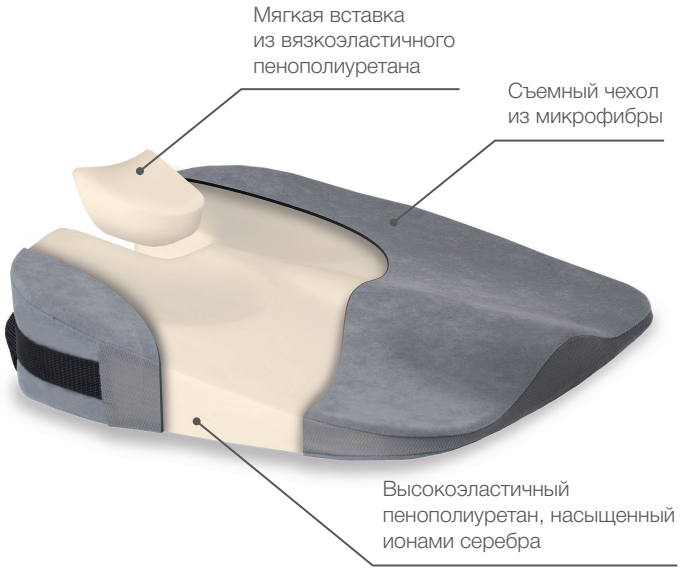

Изделие используется преимущественно в профилактических целях и предназначено для коррекции и формирования правильной осанки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению


ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **SUPPORT**, П18


Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка на сиденье П18.

Нормализует кровообращение в области таза и промежности.



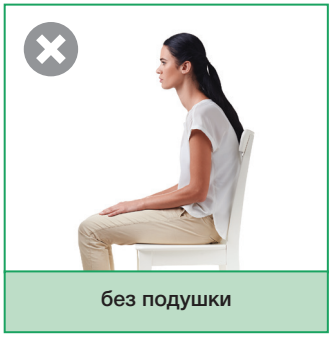


без подушки

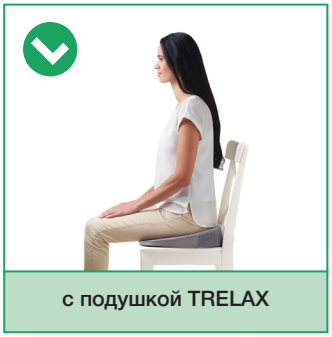
с подушкой TRELAX





Оказываемые эффекты:

- Разгрузка ягодиц, задней поверхности бедер, седалищных бугров, копчика.
- Коррекция положения туловища при длительном сидении.
- Нормализация кровообращения в области таза и промежности при длительном сидении.
- Нормализация тонуса мышц пояса нижних конечностей и нижней части поясничного отдела.
- Повышение комфортности при длительном сидении, в том числе в инвалидных креслах, сидячих каталках.

Показания к применению:

- Комплексная реабилитация травм тазовой области.
- Болевые синдромы в области крестца, крестцово-подвздошных сочленений, копчика, седалищных бугров.
- Реабилитация после заболеваний и операций в области промежности.
- Дискомфорт и мышечное напряжение в области ягодиц и задней поверхности бедер при долгом нахождении в положении сидя
- Профилактика пролежней в области ягодиц, седалищных бугров, задней поверхности бедер при длительном сидении в инвалидных креслах и сидячих каталках.
- Обеспечение максимального комфорта при длительном сидении в креслах-колясках и в креслах-каталках.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 36x43x6 см.

Цвет:

Серый, черный.

Состав:

Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% полиэстер.



Комплектность:

Подушка, съемный чехол с ремнем для фиксации, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Способ применения:

Разместите подушку на сиденье.

Изделие используется преимущественно в профилактических целях и предназначено для коррекции и формирования правильной осанки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **ORTHOFIX**, П15

Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка фиксирующая П15.

Уменьшает боли в суставах.





Для уменьшения отека в ногах



Для уменьшения боли в колен-ном и тазобедренном суставах

Варианты использования подушки



Оказываемые эффекты:

- Способствует уменьшению боли при заболеваниях и травмах суставов.
- Ускоряет реабилитацию после операций на тазобедренном суставе.
- Снимает усталость и тяжесть в ногах.
- Способствует нормализации кровообращения в ногах, снятию отечности.

Показания к применению:

- Период реабилитации после операций на шейке бедра.
- Артроз и артрит коленных и тазобедренных суставов.
- Дискомфорт и мышечное напряжение в области коленных и тазобедренных суставов.
- Ощущение усталости и мышечного напряжения в ногах.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. Размер 28x18x16 см.

Состав:

Основа: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол подушки сделан из трикотажного велюра (80% хлопок, 20% полиэстер).

Комплектность:

Подушка в чехле, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Способ применения:

Подушку располагают в сложенном виде между ног или в разложенном виде под ногами.



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **DIVA**, П08


Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка для отдыха и путешествий П08.

Массажный эффект для расслабления мышц.



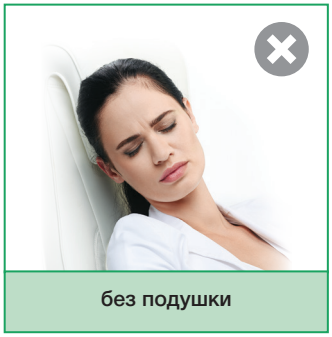

без подушки

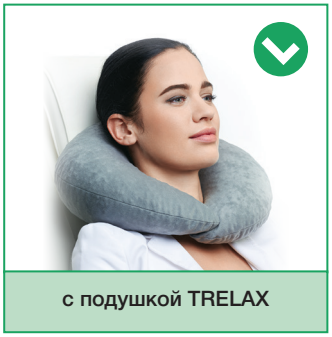

с подушкой TRELAX

Оказываемые эффекты:

- Фиксация шейного отдела позвоночника и головы в физиологически правильном положении.
- Оптимальная поддержка мышц шеи.
- Расслабление и нормализация тонуса мышц шеи за счет массажного эффекта.
- Уменьшение болевых ощущений при остеохондрозе.

Показания к применению:

- Дискомфорт и мышечное напряжение в области шеи и надплечий во время длительного сидения.
- Расслабление шейных мышц при миозите.
- Профилактика нарушений кровообращения головного мозга при длительном сидении в статическом положении (кресло автомобиля, самолета, автобуса и т.д.).
- Профилактика возникновения головных болей при длительном сидении в статическом положении.
- Остеохондроз шейного отдела позвоночника.
- Легкая нестабильность позвонков в шейном отделе.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 38x40x8,5 см.

Цвет:

Серый, черный.

Состав:

Наволочка: 100% полиэстер.
Наполнитель: 100% пенополистирол.

Комплектность:

Подушка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.



Способ применения:

Подушку размещают в области шеи вырезом вперед так, чтобы при откидывании головы затылочная часть располагалась на валике подушки.

Во время использования изделия возможно появление легкого шуршания в связи с особенностью, свойственной полимерному материалу наполнителя.

Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **AUTOHEAD**, П16

Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка под голову на автомобильное сиденье П16.

Разгрузка шейного отдела. Уменьшение напряжения в шее.





Подушка фиксируется к подголовнику автомобильного кресла с помощью эластичной ленты

Оказываемые эффекты:

- Поддержка и разгрузка шейного отдела позвоночника водителя при кратковременных остановках.
- Поддержка и разгрузка шейного отдела позвоночника пассажира во время движения.
- Компенсация нагрузки при резких толчках.
- Уменьшение утомляемости.

Показания к применению:

- Дискомфорт и мышечное напряжение в области шеи во время длительного сидения.
- Профилактика возникновения болей при остеохондрозе.
- Шейный остеохондроз.
- Использование в комплексе реабилитации после травм и заболеваний шейного отдела позвоночника.
- Улучшение удобства водительского кресла.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Важно! Не рекомендуется использовать подушку при поездках на трассах на длительные дистанции. При длительном монотонном движении расслабление шейной мускулатуры может приводить к снижению концентрации внимания и скорости реакции.

Способ применения:

Подушку крепят к подголовнику кресла и размещают под голову так, чтобы затылок головы располагался по центру подушки.

Подбор размера:

12x27 см, 19x31 см.

Цвет:

Серый, черный.



Состав:

Основа: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% полиэстер.

Комплектность:

Подушка, съемный чехол, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Ортопедическая подушка используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА **MEDICA**, П06

Подушки ортопедические в наволочках, с чехлами и без них по ТУ 9396-003-88419706-2008. Подушка с отверстием на сиденье П06.

Комплексное лечение геморроя, после эпизиотомии и травм таза.





Оказываемые эффекты:

Равномерно распределяет нагрузку на таз и бедра, оставляя интактной область промежности.

Показания к применению:

Как вспомогательное средство при:

- вывихах, переломах и других травмах копчика;
- травмах седалищных бугров;
- в период реабилитации после травм таза, повлекших нарушение целостности тазового кольца;
- заболеваниях и травмах промежности, прямой кишки и малого таза;
- после оперативного лечения геморроидальных узлов;
- после эпизиотомии в послеродовом периоде;
- профилактике пролежней в области седалищных бугров и задней поверхности бедра у длительно сидячих пациентов (инвалиды-колясочники).

Противопоказания:

Выпадение и угроза выпадения органов малого таза, в том числе матки, влагалища и прямой кишки.
Не рекомендуется использовать подушку при вождении автомобиля.

Способ применения:


Подушка используется при сидении на жестких или полужестких поверхностях.
Подушку размещают на сиденье так, чтобы при посадке промежность и копчик располагались в отверстии подушки, а седалищные бугры опирались на валик.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 43x47x9 см.

Цвет:

Серый.

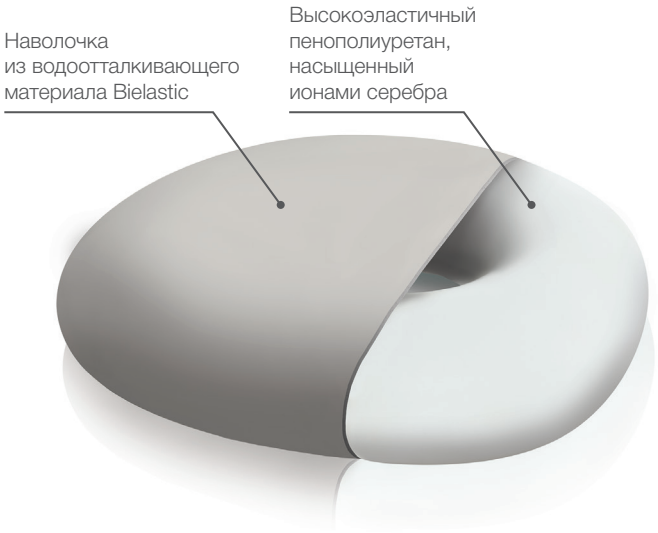

Состав:

Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Наволочка: 100% полиэстер Bielastic.

Комплектность:

Подушка, съемная наволочка, сумка из ПВХ, инструкция по применению.

Изделие используется на этапе восстановительного лечения. Необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru