9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий ТУ РБ 200079626.020-2003 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3. В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт стола, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации, подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Стол пеленальный СП-1П заводской №_____
ТУ РБ 200079626.020-2003

Приобретена_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____
Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия
Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


Копия верна

Директор
СЗАО «Белмедматериалы»
Республика Беларусь Брестская область Пинский район Пинковичи Общество Белмедматериалы
О.В. Бондарь

СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СП-1П

ТУ РБ 200079626.020-2003
СП-1П.00.000 ПС

Паспорт

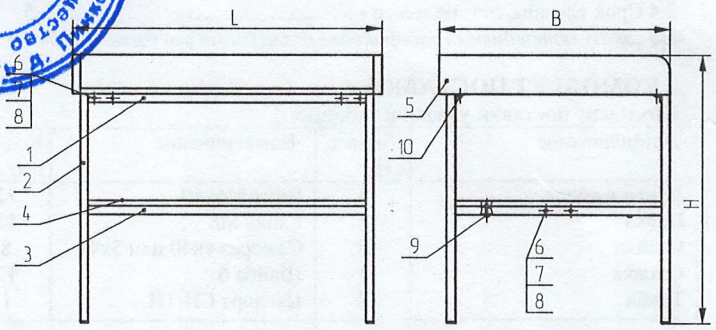

Рисунок

1. Труба
2. Стойка
3. Стяжка
4. Полка
5. Лежак в сборе
6. Винт М6х40
7. Гайка М6
8. Шайба 6
9. Саморез 4х40
10. Саморез 4х40

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Стол пеленальный СП-1П (далее - стол) предназначен для проведения медицинского осмотра, медицинских манипуляций и пеленания младенцев в медицинских учреждениях.

1.2 Стол предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры стола, мм:
длина, L……1040±10
ширина, B……765±10
высота, H……865±10
2.2 Масса, кг, не более……28
2.3 Допускаемая нагрузка на стол, кг……30±1
2.4 Срок службы, лет, не менее - ……5
По заказу потребителя габаритные размеры могут быть изменены

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки указан в таблице.

Наименование	Кол-во, шт.	Наименование	Кол-во, шт.
Лежак в сборе	1	Винт М6х40	12
Полка	1	Гайка М6	12
Стойка	2	Саморез 4х40 или 5х40	8
Стяжка	1	Шайба 6	12
Труба	2	Паспорт СП-1П	1

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Стол представляет собой сборную конструкцию, выполненную из следующих элементов (см. рисунок): труба поз.1, стойки поз.2, стяжки поз.3, полки поз.4, лежак в сборе поз.5, крепежа поз.6, 7, 8, 9, 10.

4.2 Стол поставляется потребителю в разобранном виде. Вскройте упаковку, очистите стол от пыли.

4.3 Рекомендуемая последовательность сборки:

- соедините стойки поз.2 с трубой поз.1, затем со стяжкой поз.3 при помощи крепежа поз. 6, 7, 8.
- полку поз.4 и лежак в сборе поз.5. зафиксируйте к каркасу пр помощи саморезов поз.9, 10.

4.4 Выполните санитарную обработку стола путем протирки его поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Также допускается обработку проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

4.5 Предприятие оставляет за собой право с целью усовершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации стола периодически затягивайте ослабленные крепежные соединения.

5.2 Во избежание поломки боковых и задней стенки стола не нагружайте их грузом более 5 кг.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Стол в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°С до +50° С и относительной влажности воздуха не более 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить столу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол пеленальный СП-1П, заводской №_____ соответствует ТУ РБ 200079626.020-2003 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Упаковку произвел _____м.п._____Подпись

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Стол пеленальный СП-1П, заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru