Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за суспензорием ПИ-03


1 Суспензорий назначается мужчинам при невправимых пахово-мошоночных грыжах и водянке яичек.
2 Суспензорий надевать на тело под нижнее белье. Правильно одетый суспензорий должен поддерживать мошонку в слегка приподнятом положении.
3 Суспензорий крепится и регулируется с помощью текстильной застежки «контакт» или на пуговицах.
4 Для дополнительной фиксации суспензория предусмотрены подбедренники с креплением на текстильную застежку «контакт» или на пуговицы.
5 Для сохранения внешнего вида суспензория необходимо:
- стирку производить вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- утюжить с паром, исключая текстильную застежку «контакт» и фурнитуру.
Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.
Телефон для справок : (0222) 74-48-81.
Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за суспензорием ПИ-03

1 Суспензорий назначается мужчинам при невправимых пахово-мошоночных грыжах водянке яичек.
2 Суспензорий надевать на тело под нижнее белье. Правильно одетый суспензорий долж поддерживать мошонку в слегка приподнятом положении.
3 Суспензорий крепится и регулируется с помощью текстильной застежки «контакт» и на пуговицах.
4 Для дополнительной фиксации суспензория предусмотрены подбедренники с креплени на текстильную застежку «контакт» или на пуговицы.
5 Для сохранения внешнего вида суспензория необходимо:
- стирку производить вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежут времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, подвешенном состоянии, вдали от источник тепла;
- утюжить с паром, исключая текстильную застежку «контакт» и фурнитуру.
Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

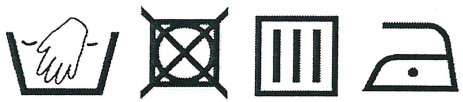

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительны центр»
Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.
Телефон для справок : (0222) 74-48-81.
Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых издели Учтем Ваши пожелания в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за лифами-бюстгальтерами и лифом-полуграцией

1 Лиф-бюстгальтер и лиф–полуграция (далее лиф) назначается женщинам после мастэктомии для крепления экзопротеза молочной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.
2 Вложить экзопротез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли (пуговицы), отрегулировать по длине бретели.
3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления экзопротеза молочной железы не должна пережимать плечо. Бретель для крепления экзопротеза молочной железы может быть длиннее на 15-20мм бретели для естественной молочной железы.
4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.
5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
-извлечь экзопротез молочной железы из чашки лифа;
- стирку производить вручную при температуре воды 40° С;
- выжимать слегка вручную, без использования механических средств;
- сушить в подвешенном состоянии, расправленном виде;
- глажение и пропаривание требуют осторожности;
- не применять сушку в барабане;
- запрещается высокотемпературная сушка;
- не отбеливать хлорсодержащим веществом.
Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.






ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.
Телефон для справок: (0222) 74-48-81.
Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за лифами-бюстгальтерами и лифом-полуграцией

1 Лиф-бюстгальтер и лиф–полуграция (далее лиф) назначается женщинам пос мастэктомии для крепления экзопротеза молочной железы или как метод креплен протеза верхней или нижней конечности.
2 Вложить экзопротез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки петли (пуговицы), отрегулировать по длине бретели.
3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления экзопротеза молочно железы не должна пережимать плечо. Бретель для крепления экзопротеза молочной желе может быть длиннее на 15-20мм бретели для естественной молочной железы.
4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.
5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
-извлечь экзопротез молочной железы из чашки лифа;
- стирку производить вручную при температуре воды 40° С;
- выжимать слегка вручную, без использования механических средств;
- сушить в подвешенном состоянии, расправленном виде;
- глажение и пропаривание требуют осторожности;
- не применять сушку в барабане;
- запрещается высокотемпературная сушка;
- не отбеливать хлорсодержащим веществом.
Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

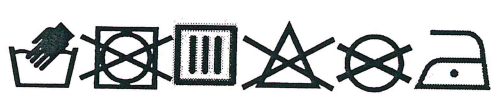



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительны центр»
Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.
Телефон для справок: (0222) 74-48-81.
Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качес производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru