
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Республиканское унитарное предприятие
"Медтехноцентр"
ул. Ботаническая, 16, 22037, г. Минск

Стол медицинский для санитарно-гигиенической обработки новорожденных: Стол пеленальный

Р 1888.000.000
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Р 1888.000.000 ИС

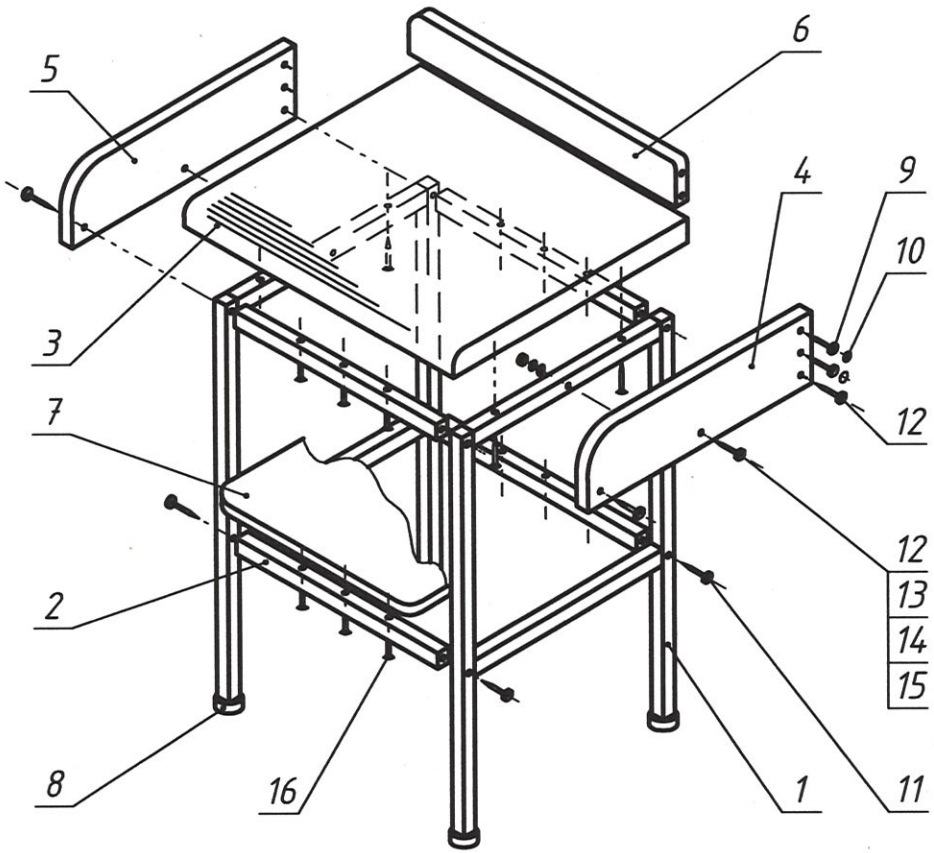

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поз.	Наименование, обозначение	Кол.
1	Опора Р 1888.100.000	2
2	Стяжка Р 1888.200.000	4
3	Лежак Р 1888.300.000	1
4	Боковина Р 1888.400.000	1
5	Боковина Р 1888.400.000-01	1
6	Стенка задняя ГКСН 044.500.000	1
7	Полка ГКСН 044.600.000	1
8	Винт 413-13.03.02.00	4
9	Евростяжка 7х50 (конфирмат)	4
10	Заглушка пластмассовая	4
11	Винт В2М6-6gх45.58.016 ГОСТ 17473-80	4
12	Стяжка ФБ 1014-000-05 ОСТ 13-40-84	6
13	Гайка М6-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	2
14	Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70	2
15	Шайба 6.02.016 ГОСТ 11371-78	2
16	Шуруп 4-4х40.016 ГОСТ 1145-80	16

Порядок сборки

1. В опоры поз. 1 вкрутить винты поз. 8.
2. Собрать каркас стола из опор поз. 1 и стяжек поз. 2, используя винты поз. 11.
3. Полку поз. 7 закрепить на каркасе с помощью шурупов поз. 16 (6 шт.).
4. Лежак поз. 3 расположить на каркасе и закрепить с помощью шурупов поз. 16 (10 шт.).
5. Произвести крепление боковин поз. 4 и поз. 5 к каркасу при помощи стяжек поз. 12, гаек поз. 13, шайб поз. 14 и поз. 15.
6. Произвести сборку боковин поз.4 и поз. 5 со стенкой задней поз. 6 при помощи евростяжек поз. 9.
7. Шляпки евростяжек поз. 9 закрыть заглушками поз. 10.
8. Проверить надежность затяжки крепежа.
9. Устойчивость обеспечить регулировкой винтов поз. 8 в опорах.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие
"Медтехноцентр"
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
Копия верна
Юрисконсульт Лавчук А.В.