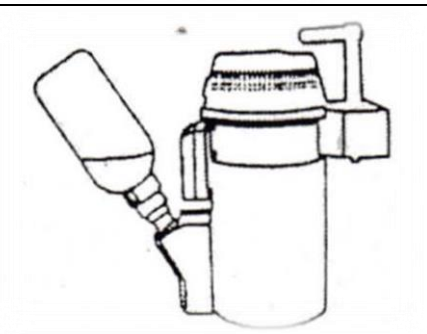
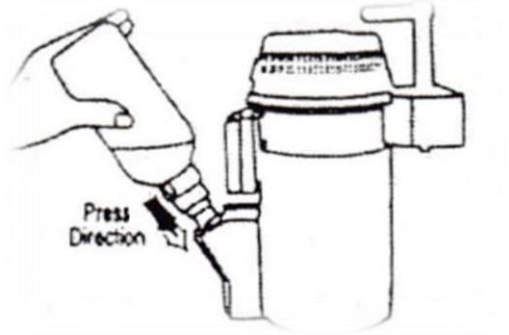
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АДАПТЕРА	
	Снимите крышку с бутылки.
	Навинтите адаптер на бутылку, совмещая с кольцом на горлышке.
	Поместите бутылку с адаптером на заправочный конец испарителя.
	Нажмите на бутылку, чтобы начать подачу жидкости. (Надавить по направлению вниз)
	Сбросьте давление, чтобы остановить поток жидкости. (Для сброса потянуть по направлению вверх)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru