Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

_____

(наименование организации, выполнившей поверку)

Аттестат аккредитации _____

_____

Ростомер медицинский РМ-1П, заводской номер _____

Поверка производилась в соответствии с методикой поверки РБ МП.3589-2023 «Ростомеры медицинские РМ-1П, ростомеры детские РД-1П».

На основании результатов первичной поверки ростомер признан годным и пускается к применению.

Дата поверки «___» _____20__ г.

Фамилия, подпись, клеймо поверителя _____

_____-_____-_____

Сведения о поверке при эксплуатации


Дата поверки	Заключение поверителя	Фамилия, подпись, клеймо поверителя

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

РОСТОМЕР МЕДИЦИНСКИЙ РМ-1П ТУ BY 800017554.002-2017

ПАСПОРТ

БИПЯ.942323.012 ПС

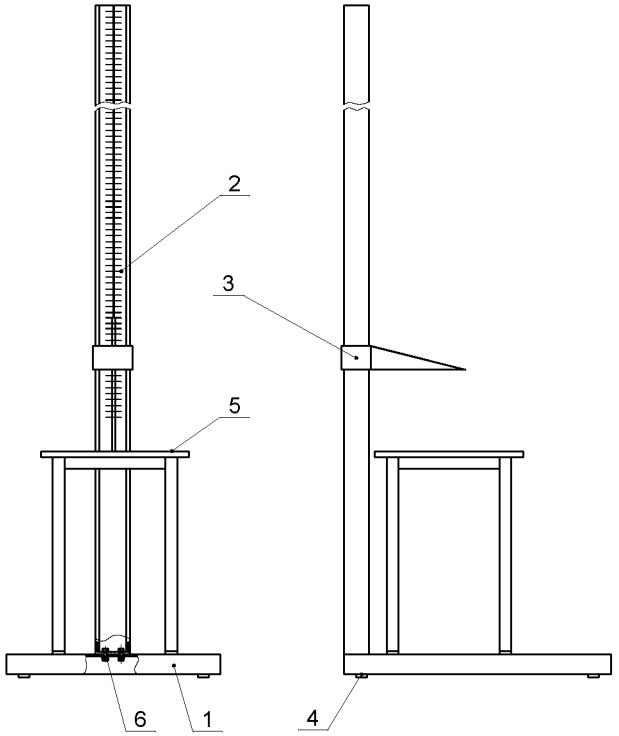

Рисунок

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Ростомер медицинский РМ-1П (далее – ростомер) предназначен для измерения роста человека в положении стоя (сидя – в комплекте со стульчиком) в учреждениях здравоохранения, а также в спортивных и оздоровительных организациях.

1.2 Ростомер предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм:
- длина……460±5
- ширина……360±5
- высота ……2140±10

2.2 Масса, кг, не более……20

2.3 Диапазон измерения роста человека, см:
- в положении стоя…… 40-208
- в положении сидя…… 0-168

2.4 Службы, лет, не менее……5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы 1

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Основание	РМ-1П.01.000	1
Рейка	РМ-1П.02.000	1
Стульчик	РМ-1П.03.000	1
Указатель	РМ-1П.00.003	1
Болт	М6-6gх16.56.019 ГОСТ 7805	2
Гайка	М6-6Н.56.019 ГОСТ 5927	2
Шайба	6.65Г.019 ГОСТ 6402	2
Шайба	6.48.01.019 ГОСТ 11371	4
Паспорт	РМ-1П.00.000 ПС	1
Стульчик (размер: 300х300х400 мм) – 1шт. – по заказу потребителя		

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Ростомер (см. рис.) состоит из основания 1, рейки 2, указателя 3, регулируемых опор 4, крепежа 6 (согласно таблицы комплекта поставки). В комплект поставки (по заказу потребителя) входит стульчик 5.

4.2 Ростомер поставляется потребителю в разобранном виде. Вскройте упаковку, очистите детали ростомера от пыли.

4.3 Основание 1 ростомера установите на ровную поверхность, исключающую перемещения и колебания. Соедините основание 1 с рейкой 2 с помощью крепежа 6. Используя отвес или уровень, выставьте рейку ростомера 2 вертикально, прокручивая опоры 4. На рейку 2 наденьте указатель 3.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Измерение проводить следующим образом: подняв указатель 3 несколько выше измеряемого роста человека, затем плавно опустить, прижимая при этом указатель 3 к лицевой поверхности рейки 2 и снять показание.

4.5 Выполните санитарную обработку ростомера путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства или 1 % раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Также допускается обработку проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Ростомер в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50º С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25º С.

6.2 Хранить ростомер допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ростомер медицинский РМ-1П, заводской №_____ соответствует ТУ BY 800017554.002-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного з
а приемку_____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Ростомер медицинский РМ-1П, заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ BY 800017554.002-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со получения потребителем (даты продажи)

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт ростомера, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Ростомер медицинский РМ-1П, заводской №_____ ТУ BY 800017554.002-2017

Приобретен_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____
Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия
Подпись и печать
руководителя учреждения – владельца

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

_____

(наименование организации, выполнившей поверку)

Аттестат аккредитации _____

_____

Ростомер детский РД-1П, заводской номер _____

Поверка производилась в соответствии с методикой поверки РБ МП.3589-2023 «Ростомеры медицинские РМ-1П, ростомеры детские РД-1П».

На основании результатов первичной поверки ростомер признан годным и пускается к применению.

Дата поверки «___» _____20__ г.

Фамилия, подпись, клеймо поверителя _____

-_____ _____-_____

Сведения о поверке при эксплуатации


Дата поверки	Заключение поверителя	Фамилия, подпись, клеймо поверителя

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

РОСТОМЕР ДЕТСКИЙ РД-1П
ТУ BY 800017554.002-2017

ПАСПОРТ

БИПЯ.942323.017 ПС

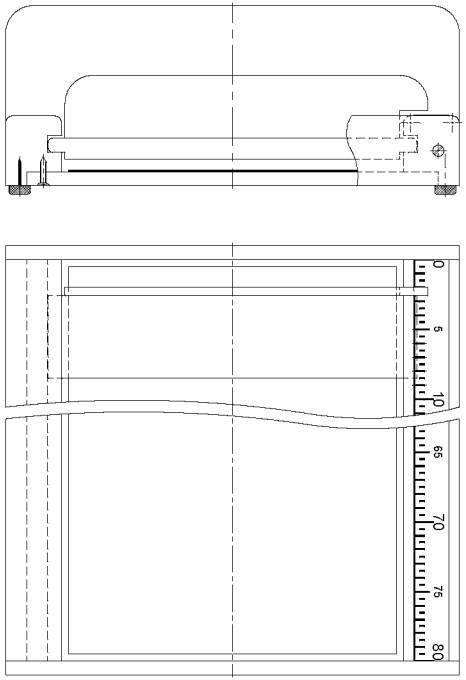

Рисунок

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Ростомер детский РД-1П (далее – ростомер) предназначен для измерения роста младенца в положении лежа в учреждениях здравоохранения.

1.2 Ростомер предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм:
- длина…… 885±15
- ширина…….. 325±15
- высота …….. 125±10

2.2 Масса, кг, не более……..... 7
2.3 Диапазон измерения, см……. 0 - 80
2.4 Цена деления, см…….... 0,5
2.5 Срок службы, лет, не менее……..... 5

По заказу потребителя – ростомер с диапазоном измерения:
0 – 120 см (длина ростомера, мм: 1285±15)

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:
- ростомер ……. 1 шт.
- паспорт ……1 шт.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Ростомер поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите ростомер от пыли.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Выполните санитарную обработку ростомера путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 %-го раствора моющего средства или 1 % раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Также допускается обработку проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Ростомер в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°С до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

5.2 Хранить ростомер допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ростомер детский РД-1П, заводской №_____ соответствует ТУ BY 800017554.002-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Ростомер детский РД-1П, заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____Подпись

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ BY 800017554.002-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

8.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт ростомера, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов при предъявлении паспорта по адресу:
225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

9.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок. О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Ростомер детский РД-1П, заводской №_____ ТУ BY 800017554.002-2017
Приобретен_____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию_____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения – владельца