УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора,
зам. генерального директора
по экономике ОАО «Лента»

_____ Р.В. Лобасенко
19.04 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ФИКСАТОРА УДЕРЖИВАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО

Начальник управления качеством
и сертификацией продукции
ОАО «Лента»

_____ Е.М. Ермоленко
19.04 2023г.

Начальник отдела управлением
качеством ОАО «Лента»

_____ Л.Н. Наконечная
19.04 2023 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция по применению предназначена для ознакомления пользователей с назначением, применением, эксплуатацией, условиями хранения и гарантиями изготовителя фиксатора удерживающего медицинского (далее фиксатор).

Фиксатор соответствует требованиям ТУ BY 700002794.011-2018 «Фиксаторы удерживающие медицинские»

Назначение:

Фиксатор предназначен для фиксации положения больного для исключения излишней подвижности конечностей при проведении медицинских процедур.

Описание изделия:

В зависимости от исполнения фиксаторы изготавливаются двух типов:

- Фиксатор удерживающий медицинский, тип 1;
- Фиксатор удерживающий медицинский, тип 2.

Фиксаторы представляют собой текстильную ленту с нашитой подушечкой и креплением из текстильной застежки и двух металлических рамок. Внешний вид фиксаторов приведен на рисунках 1,2.

Способ применения:

Обернуть конечность больного резинотканевой подушечкой и зафиксировать текстильной застежкой.

Длинный конец ленты текстильной обернуть вокруг подушечки, заправить в рамку, и обернуть в обратном направлении, зафиксировав текстильной застежкой. Продеть во вторую рамку и закрепить больного к кровати, стулу и т.п.

Условия эксплуатации:

Предназначен для многоразового использования.

Допускается проведение дезинфекции фиксатора химическими препаратами, рекомендованными для резинотканевых материалов. Обработка термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается.

Транспортирование и хранение:

Транспортирование и хранение фиксаторов по ГОСТ 7000.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие фиксаторов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внешний вид фиксаторов удерживающих медицинских

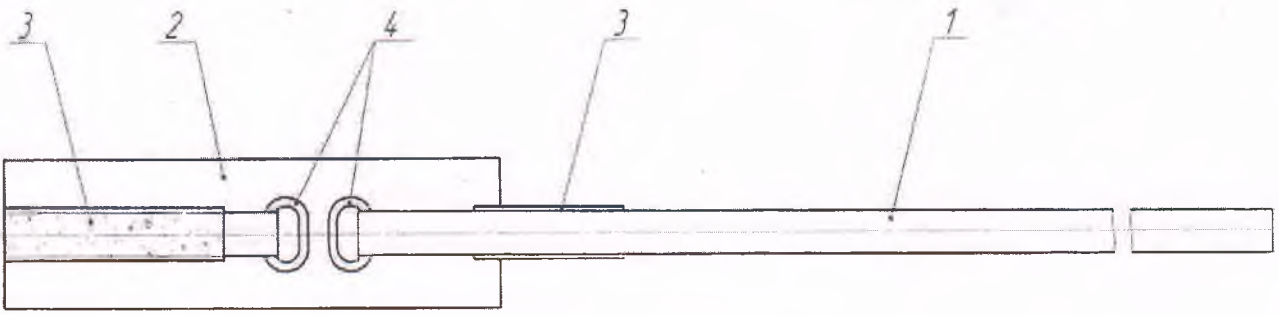


Рис.1 - Фиксатор удерживающий медицинский, тип 1

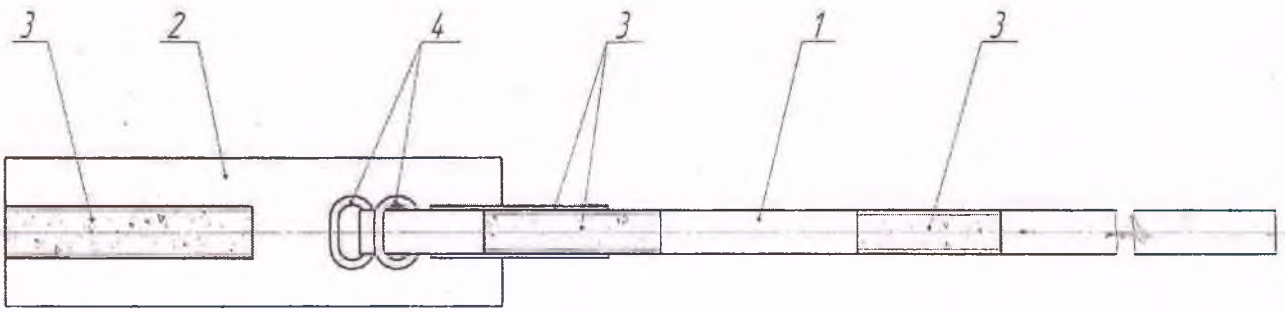


Рис.2 - Фиксатор удерживающий медицинский, тип 2

1 - лента текстильная полипропиленовая;
2 - подушечка;
3 - застёжка текстильная;
4 - рамки металлические.

Производитель:
ОАО «Лента». Адрес: Республика Беларусь, 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 65, тел/факс + 375 222 42 25 26.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru