
AERSMED®

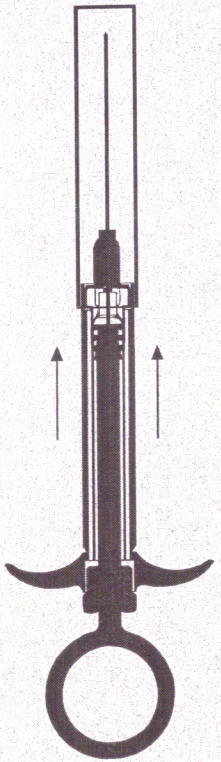

AERSMED®


Организация–производитель:
ООО «АЭРС–МЕД»,
170001, Россия, Тверская область,
г. Тверь, территория Двор Пролетарки, 10А, оф. 203.
Тел./Факс: 8 (495) 973–77–35
8 (495) 979–67–15
www.shpric.com

Произведено по ТУ 9398-001-65038901-2010 ISO 13485

AERSMED®

Комплект для инъекций

стоматологический однократного применения АЭРС®

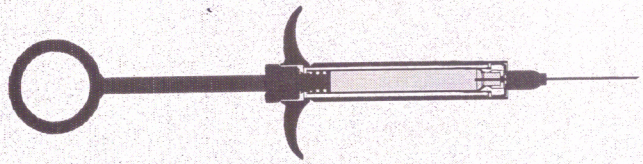

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ «АЭРС»

ФОРМА ВЫПУСКА

Индивидуальная упаковка в коробке по 100 штук.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект предназначен для проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологической практике.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Инъектор карпульный однократного применения (пластик);
- Игла стоматологическая одноразовая в индивидуальной защитной пластиковой оболочке;

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше +25 °С в защищенном от света месте. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ

Указан на индивидуальной упаковке.
Не применять после истечения срока годности!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

① Убедитесь, что целостность упаковки с инъектором не повреждена и не вскрывалась ранее, в противном случае комплект подлежит утилизации;

② Вскройте упаковку с одной из сторон;

③ Вытащите заднюю заглушку из шприц–инъектора и установите вовнутрь катридж с раствором анестетика. Плотно зафиксируйте заглушку обратно.

④ Установите (накрутите) инъекционную иглу на резьбовую часть инъектора. Возможна установка карпульной стерильной иглы другой длины, исходя из клинических требований;


⑤ Удалите защитный колпачок иглы и выпустите незначительное количество лекарственно препарата путем надавливания на шток инъектора;


⑥ Проведите процедуру инъекции;

⑦ При необходимости дополнительного введения лекарственного препарата, выдвиньте защитный колпачок инъектора вперед в «предварительное положение»;

⑧ После окончания процедуры инъекции выдвиньте вперед защитный колпачок инъектора в его окончательное положение «до щелчка»;

⑨ После окончания всех манипуляций с инъектором поместите его в контейнер для использованных шприцев и игл для последующего обеззараживания и утилизации.

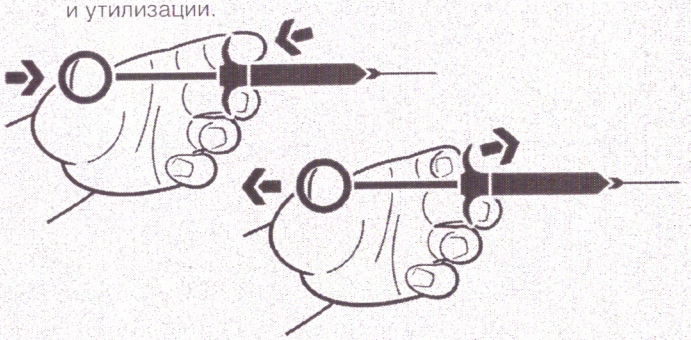

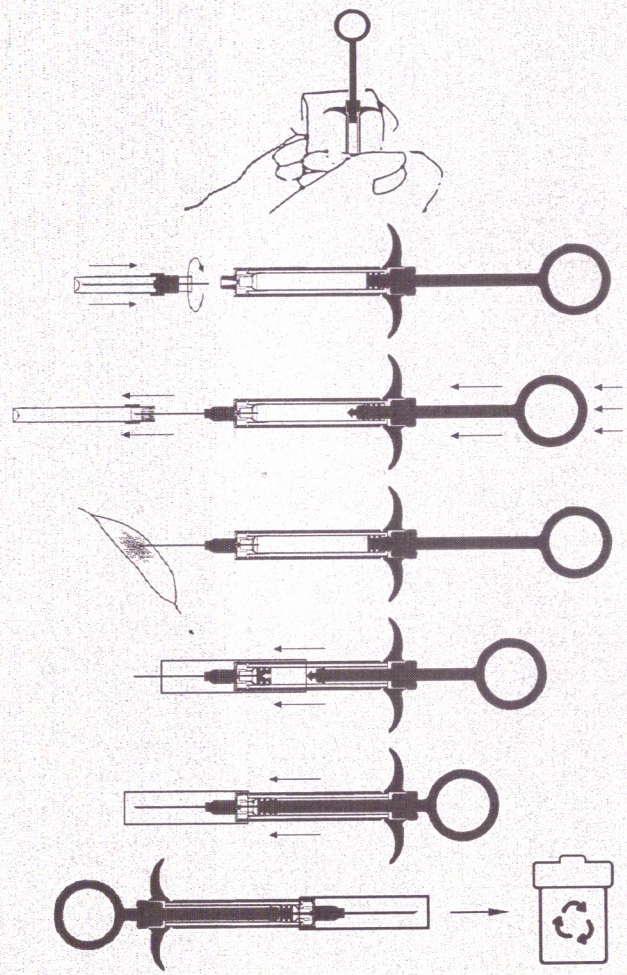

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru