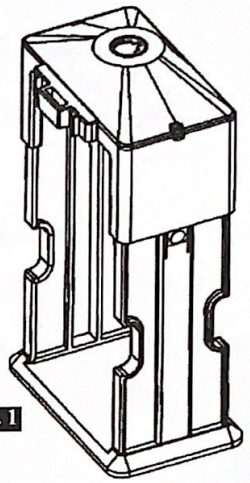
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИДгруп
www.mid.by e-mail.info@mid.by

ПАСПОРТ
Устройство для снятия инъекционных игл «МИД-03»


рис. 1

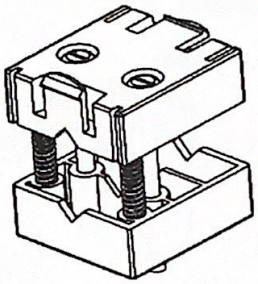
Устройство для снятия инъекционных игл «МИД-03» (далее-устройство) предназначено для применения в медицинских учреждениях для безопасного снятия использованных инъекционных игл со шприца и их временного хранения в контейнере до момента утилизации.
Конструкция устройства позволяет использовать сменные контейнеры для сбора, временного хранения и транспортировки использованных инъекционных игл, другого колюще-режущего медицинского инструментария.

В качестве сменных контейнеров могут быть использованы пластиковые литровые ем[illegible] от дезинфицирующих, антисептических средств, жидкого мыла.

Конструкция кронштейна позволяет закрепить держатель контейнера как на горизонтальной плоскости, так и на стойке.

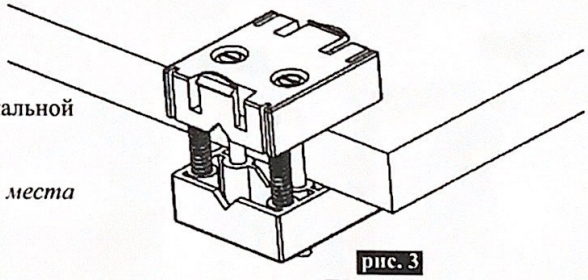
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Тип крепления:	кронштейн.
2. Масса устройства:	0,44 кг.
3. Габаритные размеры, ДхШхВ:	144х128,5х213,6 мм.


рис. 2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Держатель контейнера с иглосъемником (рис. 1)	1 шт.
2. Кронштейн (рис. 2)	1 шт.
3. Контейнер с крышкой (рис. 9)	1 шт.
4. Маркировочная наклейка	50 шт.
5. Паспорт	1шт.
6. Коробка картонная	1шт.

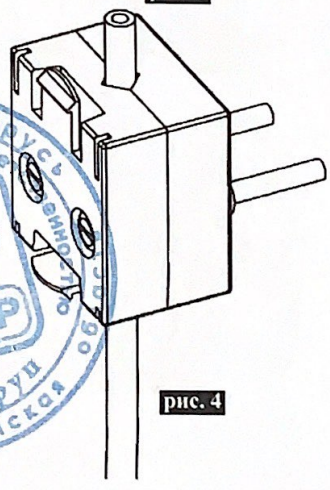

рис. 3

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Выберите место установки устройства (на столе, на вертикальной стойке и др.).

⚠ *Выбирайте место установки устройства вблизи от места проведения инъекций.*

2. В зависимости от места установки возможны следующие варианты крепления кронштейна:
- крепление кронштейна к горизонтальной плоскости (рис.3);
- крепление кронштейна к вертикальной стойке (рис. 4).


рис. 4

19 ИЮЛ 2023
КОПИЯ ВЕРНА
Директор ООО "МИДгруп"
Зайцев И.В

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

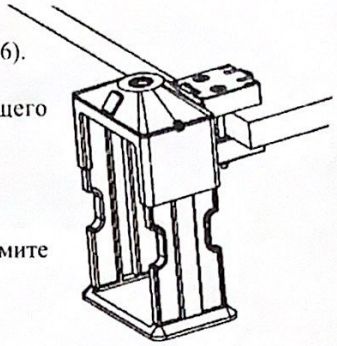
3. Присоедините держатель контейнера к кронштейну (рис. 5, 6).

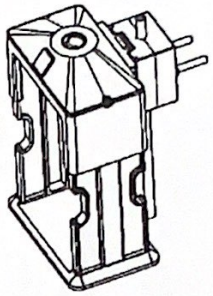
4. Приготовьте необходимое количество дезинфицирующего раствора и заполните им контейнер.

5. Оттяните вниз основание держателя контейнера (рис. 7).

6. Вставьте контейнер в держатель и, придерживая его, нажмите на боковые фиксаторы (рис. 8).

7. Устройство готово к работе.


рис. 5


рис. 6

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Выполните инъекцию.

2. Поднесите шприц с использованной иглой к устройству и вставьте в отверстие иглосъемника.

3. Зацепите иглу (канюлю иглы) за выступ иглосъемника и потяните шприц вверх.

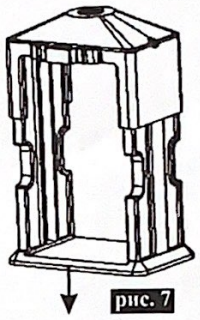
4. Игла отсоединена.

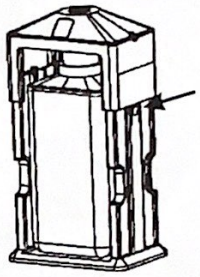
5. По мере необходимости или заполнения емкости контейнера его заменяют на новый согласно рекомендациям по подготовке к работе.

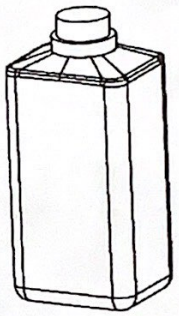
6. После дезинфекции аккуратно слейте дезинфицирующий раствор из контейнера и плотно закройте его крышкой.

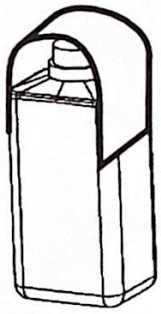
7. Заполните графы маркировочной наклейки, а затем наклейте ее на контейнер (рис. 10).

8. Контейнер готов к транспортировке на место временного хранения для последующей утилизации.


рис. 7


рис. 8


рис. 9


рис. 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте поверхности устройства ветошью, смоченной в моющем растворе. Для дезинфекции устройства применяются препараты, разрешенные для дезинфекции изделий медицинского назначения.

⚠ Не пользуйтесь абразивными и содержащими хлор очистителями.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации устройства для снятия инъекционных игл **«МИД-03»** – 12 месяцев с даты реализации.
2. Срок годности устройства для снятия инъекционных игл **«МИД-03»** не ограничен.

ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- приведение в негодность устройства по причине нарушений эксплуатации и технического обслуживания;
- наличие механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство для снятия инъекционных игл **«МИД-03»** соответствует техническим условиям ТУ BY 690777163.003-2013 и признано годным к эксплуатации.

Серийный номер

Дата изготовления

КОПИЯ ВЕРНА
19 ИЮЛ 2023

Директор ООО "МИДгруп"
Зайцев И.В.

Юридический адрес изготовителя:
Республика Беларусь, 222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фомичых, 56/2-1
Почтовый адрес изготовителя: 220113, г. Минск, ул. Восточная, 129-222
Тел./факс +375 17 395 13 30, +375 17 374 43 60
e-mail: info@mid.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru