Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛПА-МЕД»
ГОРОД МИНСК
Копия верна

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ТРОМБОФЛЕБИТАХ, ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН, ТРАВМАХ КОНЕЧНОСТЕЙ.**

**Показания**

- Профилактика и лечение варикозной болезни вен и ее осложнений.
- Восстановление после хирургического вмешательства и склеротерапии.
- Посттравматическая реабилитация.

Изготовлен из хлопковой пряжи, воздухопроницаем,

**Инструкцию по применению смотрите на обороте.**

**Состав сырья, %:**
хлопок – 77, латекс – 18, полиэфир – 5.

**Гарантийный срок хранения** – 36 месяцев

**ТУ РБ 28862565.002-99**
**ФСЗ№ 2010/06350 от 06.07.22**

**Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»:**
220012, Беларусь, г. Минск, ул. Кузьмы Чорного 31, пом. 9, каб. 6
тел./факс +375 17 243 81 16. E-mail: belpa-minsk@tut.by
**Адрес производства:**
222310, Беларусь, Минская область, Молодечненский р-н, д. Носилово, ул. Новая, д. 2
**Уполномоченный представитель производителя, принимающий претензии на территории РФ:**
**ООО «ПОЛЬЗА»**, 214036, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774. E-mail: polza_orto@mail.ru



ПОЛЬЗА®

# Бинт медицинский эластичный вязаный

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать требуемый размер (см. на упаковке). Накладывать на конечность согласно предложенным схемам или в соответствии с рекомендациями врача. Стирать руками при температуре воды не выше 40°С с использованием мягких моющих средств, не тереть, не кипятить, не отбеливать, не выкручивать. Сушить вдали от источника тепла в расправленном виде. Не гладить утюгом.

**Техника бинтования.**
Бинтовать конечность лучше после отдыха, когда конечность находилась в приподнятом состоянии. Бинт должен быть свернут. Накладывать на кожу разматывая наружу.

**А. Лучезапястный сустав** бинтовать от запястья по наружной стороне руки, покрывая бинтом ладонь по диагонали, и до запястья. Обернуть запястье. Сделать несколько таких витков «восьмеркой» от запястья по руке вверх и закрепить бинт.

**В. Нижнюю конечность** приподнять, накладывать бинт начиная с лодыжки, затем на стопу, голень и бедро (снизу в верх). Степень компрессии должна быть максимальной в нижней части конечности и ослабевать к верху. Последний виток накладывать выше пораженного участка не менее чем на 5см. Зафиксировать при помощи клипс.

**Противопоказания:** местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.














Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**Предназначен для:**

- проведения компрессионной терапии нижних конечностей при варикозной и посттромботической болезни в стадии трофических нарушений мягких тканей;
- лечения тяжелых форм хронической венозной или лимфовенозной недостаточности;
- бандажирования конечностей при лимфедеме.

**Инструкцию по применению смотрите на обороте.**

**Состав сырья, %:**
хлопок – 80; латекс – 16; полиэфир – 4.

**Гарантийный срок хранения** – 36 месяцев.

**ТУ РБ 28862565.002-99**
**ФСЗ№ 2010/06350 от 06.07.22**

**Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»:**
220012, Беларусь, г. Минск, ул. Кузьмы Чорного 31, пом. 9, каб. 6
тел./факс +375 17 243 81 16. E-mail: belpa-minsk@tut.by
**Адрес производства:**
222310, Беларусь, Минская область, Молодечненский р-н, д. Носилово, ул. Новая, д. 2
**Уполномоченный представитель производителя, принимающий претензии на территории РФ:**
**ООО «ПОЛЬЗА»**, 214036, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774. E-mail: polza_orto@mail.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛПА-МЕД»
МИНСК
Копия верна

польза®
www.belpa-med.com

Сделано в БЕЛАРУСИ

# Бинт медицинский эластичный вязаный

**малой растяжимости (до 50%)**

***нестерильно***



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# Бинт медицинский эластичный вязаный

## малой растяжимости (до 50%)

пользa®

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ.**


Перед использованием проконсультироваться с врачом. Подобрать требуемый размер (см. на упаковке). Накладывать на конечность согласно предложенным схемам или в соответствии с рекомендациями врача. Стирать руками при темпера-туре воды не выше 40°С с использованием мягких моющих средств, не тереть, не кипятить, не отбеливать, не выкручивать. Сушить вдали от источника тепла в расправленном виде. Не гладить утюгом.

**Техника формирования компрессионного бандажа из бинтов малой растяжимости.**


Бандаж накладывать утром в постели перед подъемом.Согнуть стопу под углом 90°, сделать виток на стопе, оставив свободными пальцы (рис 1, 2, 3). Далее накладывать на стопу, пятку , лодыжку, голень и бедро – см. вариант 1 (рис. 4,5,6). Рулон бинта раскручивать наружу, удерживая его близко от конечности. Закрепить последний виток клипсами. Давление бандажа плавно ослабевает от лодыжки в направлении бедра. Способ наложения компрессионного бандажа должен соответствовать форме ноги, т. е. при конической форме туры бинта должны идти в восходящем и нисходящем направлениях – см. вариант 2 ( рис.7, 8, 9). При правильно наложенном бандаже в покое кончики пальцев слегка синеют, а в начале ходьбы восстанавливают свой обычный цвет.

**Противопоказания:** местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

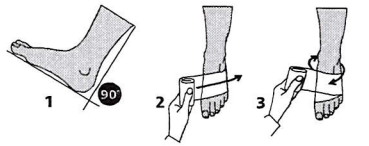



**вариант 1**

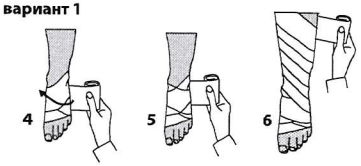


**вариант 2** (при конической форме ноги)

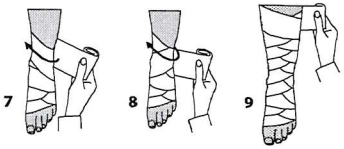


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛМА-МЕД»
Копия верна