польза®

www.belpa-med.com


ПОЯС МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

сделано в БЕЛАРУСИ

Производитель ООО «Белпа-мед»



модель 9809

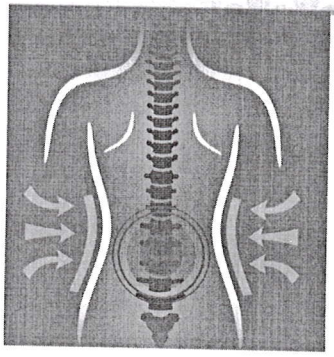

Мягко фиксирует поясничную область.
Оказывает согревающее действие.

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7
Обхват талии, см	64–72	72–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130
Обхват бедер, см	86–95	95–101	101–107	107–113	113–119	119–128	128–137

Инструкцию по применению смотрите на обороте.

КОПИЯ ВЕРНА


подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПОЯС МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

модель 9809

польза®

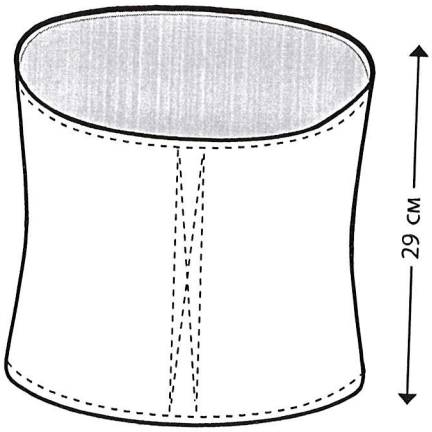



Двухслойная ткань «хлопок-полушерсть» эффективно сохраняет тепло.


МЯГКО ФИКСИРУЕТ ПОЯСНИЧНУЮ ОБЛАСТЬ. ОКАЗЫВАЕТ СОГРЕВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.

ПОКАЗАНИЯ

- Поясничные боли различной этиологии.
- Воспалительные и дегенеративные заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника.
- Период реабилитации после травм и операций.
- В целях профилактики переохлаждения при неблагоприятных климатических условиях.

Инструкция по применению и уходу.
Перед использованием проконсультироваться с врачом. Надевать поверх хлопкового белья либо непосредственно на тело так, чтобы полушерстяной слой ткани (цветной) был снаружи. Длительность ежедневного использования не ограничена. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°С. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить в расправленном виде вдали от источников тепла и солнечных лучей. Не гладить утюгом. Универсален для мужчин и женщин.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья, местные воспалительные поражения кожи, открытые травмы поясничной области.

Состав, %: хлопок – 48, полушерсть – 42, латекс – 7, полиэфир – 3.

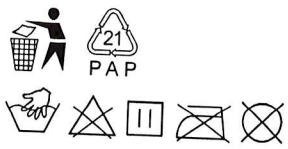

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.
ТУ РБ 28862565.001-99.
№ ФСЗ 2010/06348 от 06.07.2022

Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»:
220012, Беларусь, г. Минск,
ул. Кузьмы Чорного, д. 31, пом. 9, каб. 6
Тел./факс +375 17 243 81 16
E-mail: belpa-minsk@tut.by
Адрес производства: 222310, Беларусь, Минская область, Молодечненский р-н, д. Носилово, ул. Новая, д. 2

Уполномоченный представитель производителя, принимающий претензии на территории РФ:
ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия,
г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774
E-mail: polza_orto@mail.ru

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru