Хранение тканей: носитель для витрификации Криотек (Cryotec)
(Синий, зеленый, красный, желтый, белый)
Инструкция по применению


Состав: основное тело носителя (состав: 98% полиэтилентерефталата), наружная оболочка (состав: полиэтилентерефталата ≧ 99%)
Вид: Хранение тканей
Упаковка: Внутренняя упаковка: Гамма-стойкий ПП (полипропилен) / Наружная упаковка: оболочка из ОПП (ориентированный полипропилен)
Стерилизация: Стерилизовано ионизирующим излучением (Гамма-стерилизация). Продукт поставляется в стерильном состоянии.
Температура хранения : При хранении: 10 ℃ ~ 25 ℃
Срок годности: 2 года с даты стерилизации.
Показания к применению: Для витрификации клеток млекопитающих, тканей, ооцитов, эмбрионов и бластоцист.
Инструкция по применению:
Снимите колпачок, поместите клетки на загрузочную пластину таким образом, чтобы криопротектор проник в достаточном количестве. Быстро опустите носитель в ёмкость с жидким азотом для заморозки. С помощью щипцов наденьте колпачок на носитель, не вынимая его из среды жидкого азота и поместите в резервуар с жидким азотом с целью хранения. При проведении размораживания с помощью щипцов снимите колпачок в среде жидкого азота и проведите процедуру размораживания.
Утилизация: Поскольку изделие после использования может быть загрязнено, его следует утилизировать в соответствии с локальными требованиями и процедурами.

Производитель: REPROLIFE Inc.
9F, 2-5-3, Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио,160-0022, Япония,Тел:+81359258931
Эл.почта: contact@cryotech-japan.jp Адрес веб-сайта продукта: http://cryotech-japan.jp
2018/02/20 Версия 0.0


Внимание:
1. Держите загрузочную пластину так, чтобы она не касалась колпачка при снятии и надевании колпачка.
2. Если упаковка разорвана или повреждена, не используйте ее и утилизируйте.
3. Весь процесс с применением носителя Криотек (Cryotec) следует проводить при комнатной температуре.
4. Использовать изделие может только специалист.

Предупреждение:
1. Изделие с поврежденной упаковкой использовать нельзя.
2. Нельзя использовать изделие по истечению срока годности.
3. Данное изделие должно применяться только специалистом, имеющим опыт и владеющим соответствующей техникой.
4. Изделие только для однократного применения.

Витрификация

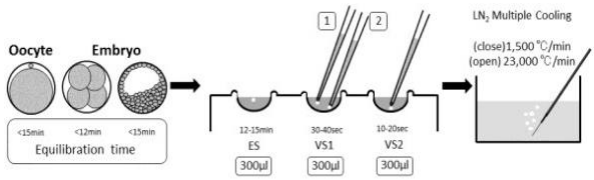

Размораживание

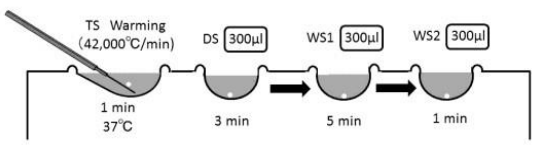

*Рекомендуется совместное применение со средами для витрификации, средами для размораживания и планшетами.
* Среды для витрификации, среды для размораживания и планшеты поставляются раздельно.

Аббревиатуры:
ПП (полипропилен), ОПП (ориентированный полипропилен), ES (Раствор для уравновешивания), VS1 (раствор для витрификации 1), VS2 (раствор для витрификации 2), TS (раствор для оттаивания), DS (раствор для дилюции), WS1 (раствор для промывки 1), WS2 (раствор для промывки 2), LN2 (жидкий азот)

Условные обозначения

No	Символ	Описание	No	Символ	Описание	No	Символ	Описание
1		'Производитель'	5	LOT	'Номер партии	9		'Обратитесь к инструкции по применению
2	REF	'Каталожный номер	6		'Не использовать повторно	10		'Не применять вс лучае вскрытия или повреждения упаковки
3		'Использовать до	7		'Не стерилизовать повторно'	11	10 ℃ 25 ℃	'Ограничения температуры'
4		'Дата производства'	8	STERILE R	'Стерилизовано ионизирующим излучением'			


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Хранение тканей:
Планшеты для витрификации (Tissue Storage Plate): Vitri Plate;
Планшеты для размораживания (Tissue Storage Plate): Warm Plate;
Инструкция по применению


Предупреждение :
Изделия с поврежденной упаковкой не подлежат использованию. В случае истечения срока годности изделия не могут быть использованы.
Предупреждение перед применением: Это изделие используется только специалистом, прошедшим курс обучения. Это изделие предназначено только для одноразового использования.
Предупреждение перед хранением: Избегайте ударов или давления, например, падения и приложения большой нагрузки.
Основной материал: Полистирол
Вид: Планшет для витрификации (Tissue Storage Plate): Vitri Plate;
Планшет для размораживания (Tissue Storage Plate): Warm Plate.
Упаковка: Первичная упаковка: пакет ОПП / Вторичная упаковка: пакет ОПП (только для 10 штук)
Стерилизация: Ионизирующим излучением
Температура хранения : При хранении: 10 ℃ ~ 25 ℃
Срок годности: 2 года с даты стерилизации.
Показания к применению: витрификация или размораживание клеток млекопитающих, тканей ооцитов, эмбрионов и бластоцист.
Инструкция по применению
Vitri Plate:
Вскройте пакет и извлеките планшет. Поместите его на подставку для микроскопа. Планшет имеет 3 лунки на лицевой стороне и выемку для носителя Криотек (Cryotec) на обратной стороне. Снимите крышку и наполните каждую лунку растворами. Применять при комнатной температуре.
Warm Plate:
Вскройте упаковку и извлеките планшет, не снимая крышку. Затем поместите закрытый планшет в инкубатор при температуре 37℃< 3 часов перед применением. Выньте его из инкубатора и установите (квадратная лунка с левой стороны) на подставку для микроскопа. Снимите крышку и наполните каждую лунку растворами. Проводить при комнатной температуре.
Утилизация:
Поскольку изделие после использования может быть загрязнено, его следует утилизировать в соответствии с локальными требованиями и процедурами.

Производитель: REPROLIFE Inc.
9F, 2-5-3, Синдзюку, Синдзюку-ку, Токио,160-0022, Япония
Телефон: +81359258931
Эл.почта:contact@cryotech-japan.jp
Адрес веб-сайта продукта: http://cryotech-japan.jp 2018/02/20 Ver. 0.0

Витрификация

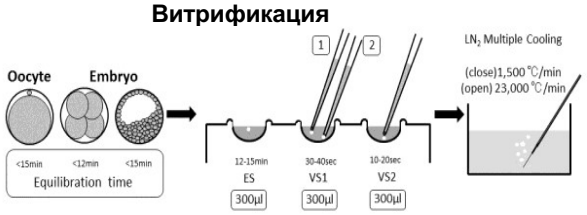

Размораживание

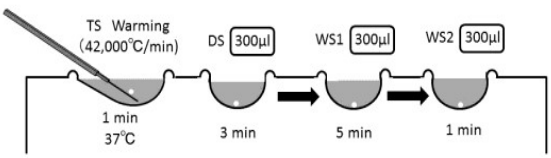

*Рекомендуется совместное применение со средами для витрификации, средами для размораживания и носителями Криотек (Cryotec) .
Аббревиатуры:
ПП (полипропилен), ОПП (ориентированный полипропилен), ES (Раствор для уравновешивания), VS1 (раствор для витрификации 1), VS2 (раствор для витрификации 2), TS (раствор для оттаивания), DS (раствор для дилюции), WS1 (раствор для промывки 1), WS2 (раствор для промывки 2), LN2 (жидкий азот)
Условные обозначения

No	Символ	Описание	No	Символ	Описание	No	Символ	Описание
1		'Производитель'	6	LOT	'Номер партии	11		'Не применять в случае вскрытия или повреждения упаковки
2	REF	'Каталожный номер	7		'Не применять повторно	12	10℃ 25℃	Ограничения температуры
3	EC REP	Авторизированный представитель в ЕС	8		'Не стерилизовать повторно			
4		'Использовать до	9	STERILE R	'Стерилизовано ионизирующим излучением			
5		'Дата производства'	10		'Обратитесь к инструкции по применению			

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru