SPD2049

OVERALL WIDTH 320MM

150MM

150MM

OVERALL WIDTH 190MM

Fold

Fold

Fold

40.5mm

42mm

41.5mm

41.5mm

24.5mm

Русский

Clearblue™

Тест на беременность

Clearblue Plus
(Клиаблу Плюс)

- Точность свыше 99 % со дня ожидаемого начала менструации.
- **Внимательно прочтите этот листок-вкладыш перед проведением теста.**

1 Перед проведением теста

Для проведения теста вам могут понадобиться часы.

Со дня ожидаемого начала менструации тест можно проводить в любое время дня.



2 Выполните тест

Когда вы будете готовы к выполнению теста, извлеките тест из обертки из фольги и снимите колпачок. Используйте тест сразу.

Проводить тест можно непосредственно под струей мочи **либо** в пробе мочи, собранной в сухую чистую емкость.

- Удерживайте тест, направив окрашивающийся наконечник вниз, под струей мочи **или** в собранной пробе мочи на протяжении **5 секунд**, как показано на рисунке.
- Наконечник сразу окрасится в розовый цвет, указывая на впитывание мочи. **Продолжайте держать окрашивающийся наконечник под струей мочи ровно 5 секунд.**

- Держите окрашивающийся наконечник направленным вниз или поместите тест на горизонтальную поверхность, пока в контрольном окошке не появится голубая линия и результат.
- При желании можно надеть колпачок обратно.



- Если окрашивающийся наконечник не поменяет полностью цвет на розовый, см. вопрос 5.

3 минуты

ПОДОЖДИТЕ 3 МИНУТЫ. **Появление голубых линий указывает на начало работы теста.**

3 Считайте результат


Вы можете считать свои результаты в окошке с результатом.

Не считывайте результат до появления в контрольном окошке голубой линии. Эта линия указывает на то, что тест сработал.

Результат «Беременна» может появиться через 1 минуту, если тестирование проводится начиная с первого дня задержки (т. е. на следующий день после дня ожидаемого начала менструации).

Чтобы подтвердить результат «Не беременна», следует подождать 3 минуты (см. вопрос 8).

Если голубая линия не отображается в контрольном окошке, тест не сработал (см. вопрос 6).

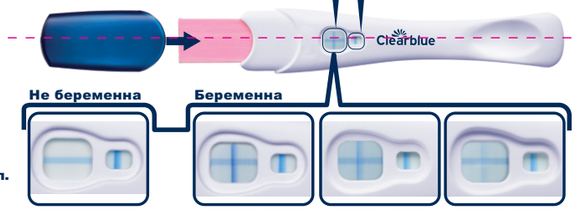

Если ваш результат **«Не беременна»**, см. вопрос 10.

- Если ваш результат **«Беременна»**, см. вопрос 11.
- Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, см. вопрос 7.

Не имеет значения, если одна из линий, которые составляют знак «+», светлее или темнее другой. Результат — «Беременна».

ВАЖНО! Считайте результаты теста в течение **10 минут** после проведения теста.
Не принимайте во внимание никакие изменения результатов теста по истечении этого времени.

Вопросы и ответы

1 Насколько точны результаты теста Clearblue?
Лабораторные анализы показали, что точность теста Clearblue превышает 99 % при использовании со дня ожидаемого начала менструации.

2 Каков принцип работы теста Clearblue?
Во время беременности в вашем организме вырабатывается гормон беременности ХГЧ (хорионический гонадотропный гормон человека). На ранних сроках беременности количество ХГЧ в организме увеличивается. Тест на беременность Clearblue Plus (Клиаблу Плюс) позволяет обнаружить даже незначительное количество этого гормона в моче (чувствительность этого теста составляет 25 мМЕ/мл).

3 Я не знаю, когда должна начаться следующая менструация. Как узнать правильное время проведения теста?
Чтобы определить день ожидаемого начала менструации, рассчитайте свою обычную продолжительность цикла, считая количество дней с первого дня месячных до дня, после которого должны начаться следующие месячные.
- Если у вас нерегулярные менструальные циклы, необходимо учитывать наиболее продолжительный цикл за последние месяцы.

Если получен результат «Не беременна», но все же есть подозрения на беременность, см. вопрос 10.

4 Могут ли какие-либо лекарственные препараты или состояние здоровья повлиять на результат?
- **Перед** проведением теста всегда читайте инструкции производителей всех принимаемых вами лекарств.
- Препараты для повышения фертильности, содержащие ХГЧ, могут привести к результатам, вводящим в заблуждение (такие препараты для повышения фертильности вводятся, как правило, в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого периода времени после инъекции может привести к ложному результату «Беременна»).
- Другие препараты для повышения фертильности (например, кломифена цитрат), обезболивающие препараты и гормональные контрацептивы (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
- Если вы недавно прекратили использовать гормональную контрацепцию или принимаете такие препараты для повышения фертильности, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, что может привести к преждевременному выполнению теста.
- Если вы недавно были беременны (даже если беременность завершилась раньше срока), может быть получен ложный результат «Беременна».
- Внематочная беременность, кисты яичников, менопауза и некоторые редкие заболевания могут привести к результатам, вводящим в заблуждение.
- Если получен результат «Беременна», впоследствии вы можете обнаружить, что не беременны, поскольку беременность может естественным способом прерваться на ранних стадиях.

В случае получения неожиданного результата следует обратиться к врачу.

5 Я использовала тест на беременность, но окрашивающийся наконечник не поменял цвет на розовый полностью. Что мне делать?
Если окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым, то, вероятно, вы использовали недостаточное количество мочи. Тем не менее, если в течение 10 минут после проведения теста в контрольном окошке появилась голубая линия, тест сработал. Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, см. вопрос 6.

6 Я использовала тест на беременность, но в контрольном окошке не появилась голубая линия. Что мне делать?
Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, то тест не сработал. К этому могли привести перечисленные ниже причины.
- Окрашивающийся наконечник не был направлен вниз, либо тест не был положен на горизонтальную поверхность после попадания на него мочи.
- Использовано слишком мало или слишком много мочи.
  Отбор пробы должен длиться 5 секунд.

Необходимо провести повторное тестирование, используя новый тест и внимательно следуя инструкциям. Соберите пробу мочи в сухую чистую емкость и погрузите туда только окрашивающийся наконечник на 5 секунд.

7 Что делать, если я не уверена в своем результате?
- Результат «Беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «+», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста.

Знак «+» в окошке с результатом может выглядеть по-разному, однако линии, составляющие знак «+», и линия в контрольном окошке должны иметь одинаковую ширину (см. рисунки A–C).

Рисунок A
У беременных женщин такой результат возможен при проведении тестирования через несколько дней после задержки месячных, т. е. при более высоком уровне гормона ХГЧ.
Рисунок B
У беременных женщин такой результат не редкость при проведении тестирования непосредственно в день или примерно в день задержки месячных, когда уровень гормона ХГЧ остается относительно низким.
Рисунок C
Даже слабое отображение результата все же указывает на результат «Беременна».
Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, проведите повторный тест не ранее чем через 3 дня, внимательно следуя инструкциям.
- Результат «Не беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «-», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста. Если ваш результат — «Не беременна», но все же есть подозрения на беременность, см. вопрос 10.

8 Когда можно считать результат теста?
Результат «Беременна» может появиться всего за 1 минуту, если тестирование проводится начиная со дня задержки (т. е. на следующий день после ожидаемого начала менструации). Прежде чем начать считывание результата, убедитесь, что в контрольном окошке присутствует голубая линия. Для подтверждения результата «Не беременна» **необходимо** подождать 3 минуты. Если в течение **10 минут** после проведения теста в контрольном окошке голубая линия не появилась, тест не сработал (см. вопрос 6).

9 Как долго будет отображаться результат теста?
Результат можно считывать в течение 3–10 минут после проведения теста. Не обращайте внимания на изменение результатов, произошедшее через 10 минут.

10 Результат моего теста — «Не беременна». Что мне делать?
Вы можете быть не беременны, или уровень гормона беременности еще недостаточно высок для обнаружения. Вы также могли неверно рассчитать день ожидаемого начала менструации.
- Если было проведено раннее тестирование, следует провести повторный тест после дня ожидаемого начала менструации.
- В случае задержки менструации проведите повторный тест через 3 дня. Если при повторном тестировании получен результат «Не беременна», но менструации по-прежнему нет, обратитесь к врачу.

11 Результат моего теста — «Беременна». Что мне делать?
Если ваш результат «Беременна», следует обратиться к врачу для консультации по поводу дальнейших действий.

www.clearblue.com
Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» РФ, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2 Телефон: 8 800 333 5198
Импортер: ИООО «АЛИДИ-Вест», 220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, оф. 7.3.1
Телефон: 8 8200 321 0344
Производитель: ЭсПиДи Свис Пресижн Дайагностик ГмбХ (SPD), 47 Рут де Ст.-Жорж, 1213 Петит Лэнси, Женева, Швейцария.
Произведено на: Эбботт Диагностикс (Шанхай) Ко., Лтд. Шанхай 201203, Китай.
Упаковщик: Трувант Европа-СП. ЗО. О. 95-010, Стрыков, Польша.

Clearblue является товарным знаком SPD. © SPD, 2021. Все права защищены.

	Производитель		Не используйте повторно
LOT	Код партии	IVD	Медицинское устройство для диагностики *in vitro*
	Срок годности	°C °F	Предельно допустимая температура 2–30 °C

Для получения консультации по поводу дальнейших действий, информации и общих рекомендаций по вопросам беременности посетите наш сайт: **www.clearblue.com**

Для самотестирования дома.
Только для диагностического использования *in vitro*.
Не для внутреннего применения.
Не используйте повторно.
Храните в местах, недоступных для детей.
Храните при температуре от 2 до 30 °C.
В случае хранения в холодильнике довести до комнатной температуры в течение 30 минут до начала тестирования.
Не используйте в случае повреждения обертки из фольги.
Не используйте после истечения срока годности.
Утилизируйте вместе с обычными бытовыми отходами.
Не разбирайте устройство. Содержит мелкие части. Не употребляйте в пищу никакие компоненты устройства. При случайном проглатывании обратитесь за медицинской помощью.
Сообщите Clearblue о любой травме вследствие использования этой продукции.
Не стерильно

BOH199.02 12-2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Itarus House,
Tenter Road, Moulton Park,
Northampton, NN3 6PZ
Need help? Contact us:
+44 (0)1604 468100
mail@itarus.com
www.itarus.com

Title: CB11 LFT RU (1LG ru)
Project: Belarus - New and Revision BOH
Job No.: 204507 File No.: 100713 Asset No.: 335
File Name: CIC-BOH199_02V2.ai
Revision date: 17/01/2022 Revision time: 15:04
Unique Code: BOH199.02 12-2021
Brief: 1538.01 MSCoreText: 1386.02
Printer: N/A
EAN: N/A Size%: Cutter Guide: SPD2049.01
Design Ref: BOH199.01
AW Template: N/A
Colours: 4 Technical Colours:
1 Cyan
2 Magenta
3 Yellow
4 P295
Profile
Operator: 9
UIC: vZhNg7 SPD Version: 2 Revision: 0
QUALITY CONTROL
Itarus: Date:
SPD: Date:
Customer: Date:
Powered by OnlineServices
GS1 UK Industry Partner
Microsoft Partner Silver Application Development
25.4.1 / 10.14.6 / TBC