ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Слюноотсос стоматологический однократного применения
ТУ BY 600012098.039-20

ИСЖЕ.942826.01ИП **Дата выпуска _____ Рев. 00**

Настоящая инструкция применяется для слюноотсоса стоматологического однократного применения.

Область применения: стоматология. Изделие должно использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.

Перед применением внимательно прочтите инструкцию!

НАЗНАЧЕНИЕ: Слюноотсос стоматологический однократного применения (далее слюноотсос) предназначен для аспирации ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента при проведении стоматологических процедур.

ФОРМА ВЫПУСКА: Слюноотсос выпускается в первичной упаковке, состоящий из пленки, заваренной непрерывным швом. Допускается упаковка в пакет, состоящий из пленки и бумаги. Детали слюноотсоса изготовлены из материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии с областью применения, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях. Слюноотсосы в первичной упаковке нетоксичны и нестерильны.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Противопоказания отсутствуют.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: При соблюдении данной инструкции побочные действия отсутствуют.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Запрещается повторное использование изделия. Не использовать при наличии повреждений на слюноотсосе. Не использовать не по назначению. Не использовать после окончания срока годности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Поддерживайте чистоту среды, в которой хранятся данные изделия и проводите надлежащие гигиенические процедуры при их использовании

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Согните трубку слюноотсоса под необходимым углом.
2. Соедините сторону трубки слюноотсоса без наконечника с аспирационной системой стоматологической установки.
3. Поместите трубку слюноотсоса (стороной наконечника) в ротовою полость пациента для аспирации.
4. После завершения стоматологических процедур извлечь и утилизировать слюноотсос в установленном порядке.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:


Дата изготовления


Использовать до




Код партии


Не использовать повторно


Не применять при повреждении упаковки


Перед применением прочтите инструкцию

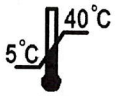

Ограничение температуры


Хрупкое. Осторожно


Беречь от влаги



Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ:

Слюноотсосы должны храниться в упаковке изготовителя при температурах от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Защитить слюноотсосы от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

При соблюдении условий хранения срок годности изделия – 5 лет от даты изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Производственное унитарное предприятие «ФреБор» (Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж.

Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru