
EL903 Oasis Elite Противопролежневый протектор для позиционирования туловища в положении на животе



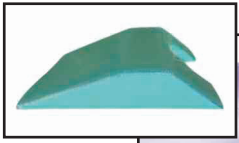

Oasis Elite Большой противопролежневый протектор

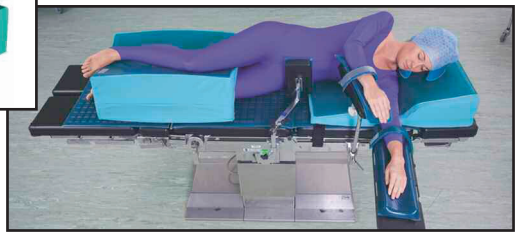




рис 1

EL800 Oasis Elite Противопролежневый протектор для позиционирования туловища в положении на боку, между нижними конечностями





Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Положение на животе



Положение на спине



Положение на боку



Положение для литотомии



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Oasis + Discs OP015



Oasis + Длинная подушка для руки OP101



Oasis + Опора для головы и шеи OP151



Elite при положении Тренделенбурга



ELTS40

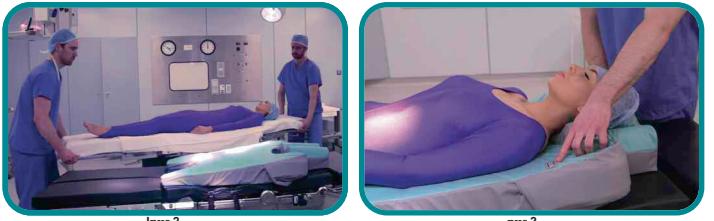


рис 3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

EL913: Oasis Elite Подушка-позиционер для позиционирования туловища в положении на боку

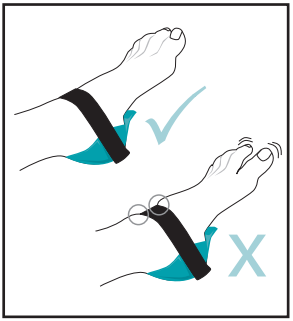




Image 4



Oasis Противопролежневые протекторы для пяток чашеобразные (OA131)



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГОЛЕТИЕ И ЛУЧШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ПРОДУКЦИЕЙ TRULIFE PRESSURECARE.

Продукция Trulife Pressurecare помогает распределить давление по широкой поверхности и поддерживать позу пациента. Предрасположенность пациента к травмам, связанным с давлением, определяется многими факторами, в том числе и внутренними: общим состоянием здоровья, возрастом, весом и имеющимися заболеваниями. Риск возникновения травм, связанных с давлением, можно минимизировать с применением продукции Trulife и правильных лечебных практик. Должный уход и забота обеспечат длительный срок службы и долговечность изделий Trulife Pressurecare.

Общие сведения о применении изделий Trulife Pressurecare.

- В соответствии с правильными лечебными практиками оценивайте состояние пациента и области потенциального риска до принятия решения о том, какие следует использовать прокладки и подкладки.
- Всегда проверяйте правильное и безопасное расположение пациента, чтобы давление ни на одну область не было слишком высоким. Обращайте особое внимание на зоны повышенного риска.
- На изделие можно положить пеленку, однако это затрудних движение по ним. Если пеленка используется, она должна свободно лежать на изделиях, без морщин и складок и не должна быть накрахмаленной.
- Со всеми изделиями следует обращаться осторожно. Не кладите на них острые инструменты: они могут проколоть пленку.
- Прокладки можно нагревать до температуры тела в предварительно разогретой до 40 °C печи или на подогреваемом матраце. Соблюдайте инструкции производителя печи или матраца. (См. правильные лечебные практики)
- Изделия можно охлаждать до -12oC безо всяких отрицательных последствий.
- Не тяните прокладки для стола, если на них лежит пациент: чрезмерные усилия могут отрицательно сказаться на прокладках.
- Не тяните изделия по неровным поверхностям и заостренным.
- Регулярно проверяйте износ изделия. Поврежденные изделия (с разрывами, трещинами или признаками износа) использовать нельзя.
- Перед использованием изделия необходимо почистить и просушить.
- Противоскользящие диски серии Oasis + должны использоваться только в сочетании с другими противоскользящими средствами. (См. правильные лечебные практики)
- Изделия серии Oasis + изготовлены из 100 % силикона. Они «масляные» на ощупь, поскольку силикон выделяет масло для предотвращения аллергию и дополнительного захвата.
- Не подвергайте изделия воздействию открытого пламени.
- При поднятии тяжелых изделий соблюдайте технику безопасности.
- При хранении складывайте крупные накладки секциями примерно по 35 см.

Фиксатор конечностей Oasis (OA113) и удерживающие ремни Oasis (OA110)

Эти изделия предназначены для содействия стабилизации пациента на операционном столе и не рассчитаны на удержание веса пациента.

Фиксаторы положения лежа на животе EL903 и EL904/ELP914

- Для максимальной защиты данное изделие следует использовать совместно с подголовником для прон-позиции (EL141) и низким валиком для груди или универсальным позиционером для поднятия стоп — см. рисунок 1.
- Проверьте безопасность и надежность положения пациента.
- Убедитесь, что ремешки надежно закреплены на боковых поручнях стола. (EL903)

Установка систем серии ELTS40 Elite Trendelenburg

1. Постелите антискользящую подкладку на основание стола.
2. Положите систему для позиционирования поверх антискользящей подкладки.
3. Пристегните ремешки к поручню.
4. Поместите подголовник максимально близко к системе для позиционирования, руководствуясь стрелками-указателями.
5. При переносе пациента убедитесь, что положение его плеч совпадает с метками на основной части системы для позиционирования. (См. рис. 2 и 3, стр. 4).
6. Поместите голову пациента на подголовник. После того, как тело пациента займет нужное положение, поместите его ноги на подставку для ног.
7. После того, как тело пациента займет нужное положение, установите подплечники. Для этого вставьте входящий в комплект Г-образный кронштейн в гнездо, расположенное с внешней стороны подплечника.
8. Затем вставьте другой конец Г-образного кронштейна в зажим.
9. Аккуратно просуньте подплечники под пациента.
10. Если система настроена таким образом, что непрерывность поручней нарушена или крепления препятствуют установке подплечников и зажимов, верните ее в положение, подходящее для их установки.
11. Вденьте подплечники в карманы системы для позиционирования.
12. Зафиксируйте систему, закрепив зажимы на поручнях. При необходимости установите фиксаторы для рук, вставив их плоскую сторону под матрас.
13. До проведения операции необходимо провести наклонный тест, чтобы убедиться, что пациент надежно зафиксирован на столе. Обратите внимание, что наша система также работает в режиме поперечного наклона.

Для получения дополнительной информации и изображений см. руководства по установке ELTS40, входящие в комплект поставки продуктов, или обратитесь к видеоруководству по адресу https://vimeo.com/180749129.

EL913: Oasis Elite lateral Park bench Positioner

Убедитесь, что изделие обращено вверх гелевой поверхностью. Длинная сторона изделия должна находиться под телом пациента, а короткая сторона — свешиваться с боковой поверхности операционного стола, как показано на рисунке 4.

Убедитесь, что ремешки надежно закреплены на боковых поручнях стола.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Данное изделие предназначено для использования совместно с принадлежностями для позиционирования на операционных столах. Для получения подробной информации обратитесь к производителю операционного стола.

EL800: Позиционер Oasis Elite для фиксации ноги в боковом положении также подходит для данного положения. Проверьте безопасность и надежность положения пациента.

Подкладки для столов Oasis Elite (EL030 и EL031)

Храните изделия гелевой стороной наружу.

Чистка продуктов Trulife Pressurecare.

- Продукты подлежат дезинфекции до и после использования.
- Продукты серии Oasis, Oasis Elite, Azure и Oasis + можно чистить с помощью стандартных моющих средств для операционных. Не допускайте чрезмерного намачивания продуктов чистящими растворами.
- Прячьте неиспользуемые крючки и петли на соответствующих продуктах во избежание накопления пыли.
- Если продукт серии Oasis + притягивает ворс, его можно очистить под проточной водой.
- Перед использованием продукты необходимо высушить.
- Продукты серии Oasis + прошли проверку на возможность стерилизации в автоклаве. Результаты проверки не показали значимых изменений в продуктах после 24 3-минутных циклов стерилизации в автоклаве при температуре 134 °C.
- Для чистки фиксаторов для рук, Г-образных кронштейнов и зажимов системы ELTS40 см. соответствующие инструкции. (ELT22-ELT24) Чистка подплечника Trulife (ELT21) осуществляется стандартными моющими средствами для операционных.

Информацию о чистящих средствах и других испытаниях можно получить у местного дистрибьютора.

Транспортировка

Аккуратно снимайте подкладки со столов и хирургического оборудования. Большие подкладки на столы (без содержания пены) можно сворачивать в рулон и переносить на руках. Большие пенные и гелевые изделия необходимо переносить, полностью поддерживая двумя руками или, при возможности, на руках, как младенца. Для перевозки объемных изделий рекомендуется использовать тележки.

Инструкции по утилизации

Утилизация изделий должна производиться в соответствии со всеми национальными законами и правилами. Все упаковочные материалы от изделий должны отправляться на переработку.

В случае проблем с изделиями Pressurecare обратитесь к местному дистрибьютору. Перед возвратом поврежденного изделия продезинфицируйте его.

Если у вас имеются вопросы или комментарии по нашим товарам и работе с ними, обратитесь к местному дистрибьютору.

Важные примечания

Сохраните эти инструкции для справки. В случае возникновения серьезных инцидентов с продукцией сообщите об этом в Trulife по адресу quality_department@trulife.com, а также властям государства-участника программы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Trulife, Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Ireland
Tel : +353 1 4511755 **Fax:** +353 1 4275790
Email: info@trulife.com

CE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

TL/PC79/0223