Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие подставки требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

8.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31Б, к.4.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

9.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Подставка под таз ППТ, заводской № _____
ТУ BY 800017554.055-2014

Приобретена_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание
ремонтным предприятием _____города _____
дата, подпись и штамп ремонтной организации

Подпись и печать руководителя
ремонтной организации

Подпись и печать руководителя
организации - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ПОДСТАВКА ПОД ТАЗ ППТ

ТУ BY 800017554.055-2014

Паспорт

БИПЯ 942839.055.ППТ ПС

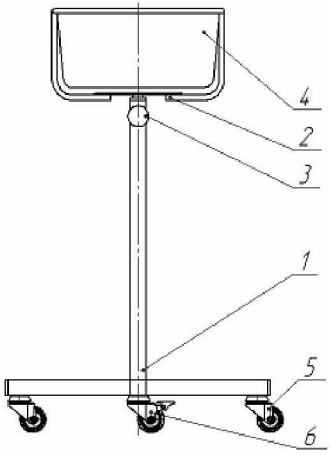


Рисунок 1
Подставка на колесах

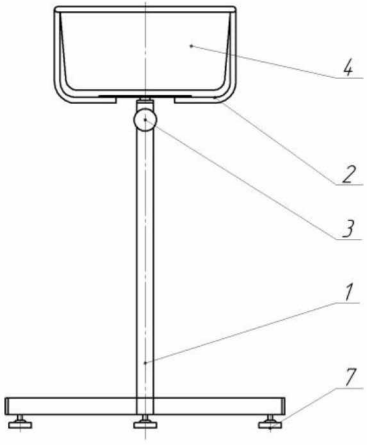


Рисунок 2
Подставка на опорах

1. Основание
2. Стойка
3. Винт-барашка
4. Таз (гастроемкость)
5. Колеса без тормоза
6. Колеса с тормозом
7. Опоры

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Подставка под таз ППТ (далее - подставка) предназначена для использования в операционных и перевязочных кабинетах медицинских учреждений.

1.2 Подставка выпускается на колесах, два из которых с тормозом, или на опорах.

1.3 Подставка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 ºС до +35 ºС и относительной влажности до 80 % при температуре +25 ºС.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры подставки, мм:

высота max, не менее……..……..…….... 1250
высота min, не более……..……..…….... 800
диаметр основания, не более……..…….. 530
2.2 Объем таза (гастроемкости), л, не менее……..13
2.3 Масса, кг, не более……..……..……...7
2.4 Срок службы, лет, не менее ……..……..…….....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- подставка ……..……...1 шт.
- таз (гастроемкость) ……..…….....1 шт.
- паспорт……..…… 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Подставка (см. рис. 1, 2) представляет собой конструкцию, состоящую из основания 1, стойки 2, на которой расположен таз (гастроемкость) 4, двух опорных колес с тормозом 6 и двух колес без тормоза 5 (для подставки на колесах) или четырех регулируемых опор (для подставки на опорах). Стойка регулируется по высоте с помощью винт-барашка 3.

4.2 Подставка поставляется потребителю в собранном виде. Распакуйте подставку. Осмотрите подставку для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

4.3 Выполните санитарную обработку подставки и таза путем протирания их поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 %-го раствора моющего средства или 1 % раствором хлорамина. Допускается санитарную обработку проводить любыми дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Примечание – Предприятие оставляет за собой право с целью усовершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Подставка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 ºС до +50 ºС и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре +25 ºС.

5.2 Хранить подставку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50 ºС до +40 ºС и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25 ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка под таз ППТ, заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.055 -2014 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Подставка под таз ППТ, заводской номер _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации БИПЯ 942839.055 ППТ.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел_____ м.п.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие подставки требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

8.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31Б, к.4.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

9.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Подставка под коробки стерилизационные ПКС,
заводской № _____ ТУ BY 800017554.055-2014

Приобретена_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание
ремонтным предприятием _____ города _____
дата, подпись и штамп ремонтной организации

Подпись и печать руководителя
ремонтной организации

Подпись и печать руководителя
организации – владельца


СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ПОДСТАВКА ПОД КОРОБКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПКС

ТУ BY 800017554.055-2014

Паспорт

БИПЯ 942839.055.ПКС ПС

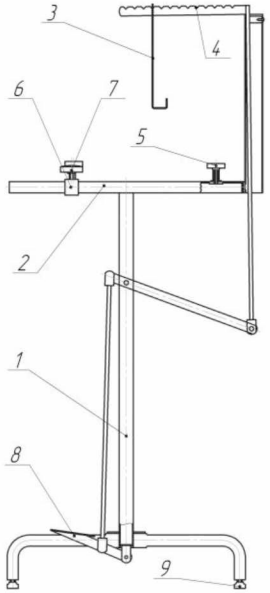

1. Стойка с основанием
2. Стол
3. Крючок
4. Рейка
5. Упор
6. Прижимная планка
7. Ручка-фиксатор
8. Педаль
9. Опоры регулируемые

Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Подставка под коробки стерилизационные ПКС (далее - подставка) предназначена для удобства пользования коробками стерилизационными круглыми типа КСКФ (далее - коробка) в операционных и перевязочных кабинетах медицинских учреждений.

1.2 Подставка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 ℃ до +35 ℃ и относительной влажности до 80 % при температуре +25 ℃.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры подставки, мм, не более:

высота ……...……...1300

диаметр основания……..……600

2.2 Масса, кг, не более……..…..……..…..9

2.3 Срок службы, лет, не менее ……..……..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- подставка ……..……...1 шт.
- паспорт……..…1 шт.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Подставка поставляется потребителю в собранном виде. Распакуйте подставку, освободите ее от упаковочного материала, очистите от пыли.

4.2 Осмотрите подставку для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

4.3 Установите подставку, отрегулировав высоту с помощью опор поз.9 (см. – рисунок). Убедитесь, что подставка стоит на полу ровно, без раскачивания. Наденьте крючок поз.3 на рейку поз.4.

4.4 Выполните санитарную обработку подставки путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 %-го раствора моющего средства или 1 %-го раствора хлорамина. Допускается санитарную обработку проводить любыми дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Примечание – Предприятие оставляет за собой право с целью усовершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.5 Установите коробку на стол поз.2, придвинув ее к упорам поз.5. Переместите прижимную планку поз.6 вплотную к коробке. Зафиксируйте коробку с помощью ручек поз.7. Убедитесь, что коробка надежно зафиксирована. На ручку коробки наденьте крючок поз.3, передвинув его по рейке поз.4 в нужное положение. Нажмите и удерживайте педаль поз.8 – крышка коробки открыта; отпустите педаль – крышка коробки закрыта.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Подставка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 ℃ до +50 ° С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре +25 ℃.

5.2 Хранить подставку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50 ℃ до +40 ℃ и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25 ℃. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка под коробки стерилизационные ПКС, заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.055-2014 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Подставка под коробки стерилизационные ПКС, заводской номер _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п.