ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наконечника клизменного однократного применения
ТУ BY 600012098.012-2006

ИСЖЕ.943134.01 ИП **Дата выпуска _____ Рев. 04**

НАЗНАЧЕНИЕ: Наконечник клизменный однократного применения (далее наконечник клизменный) предназначен для промывания и спринцевания полостей организма человека, с применением соответствующих устройств (кружка Эсмарха или другие) в медицинских учреждениях.

Наконечник клизменный должен использоваться только квалифицированным и обученным медицинским персоналом.


ФОРМА ВЫПУСКА: Каждый наконечник клизменный упаковывается в первичную упаковку, состоящую из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали наконечника клизменного (штуцер и наконечник) изготовлены из материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии с областью применения, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях.

Медицинское изделие наконечник клизменный однократного применения в первичной упаковке стерильно.

Стерилизован окисью этилена.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Подготовить больного и кружку Эсмарха к процедуре.
2. Проверить целостность первичной упаковки и срок годности наконечника клизменного.
3. Вскрыть первичную упаковку и извлечь наконечник клизменный.
4. Наконечник клизменный соединить со штуцером (см. рис. 1).

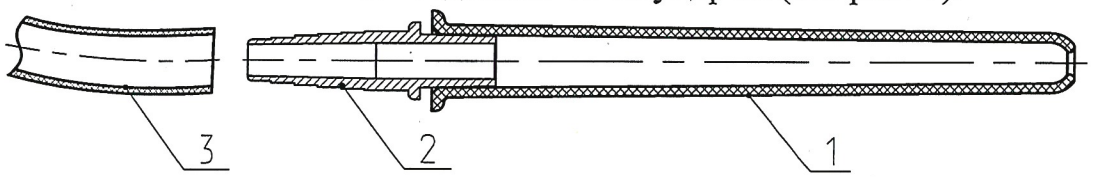

1 – наконечник клизменный; 2 – штуцер; 3 – трубка кружки Эсмарха

Рисунок 1 – Схема соединения наконечника клизменного

5. Соединить штуцер с трубкой кружки Эсмарха.
6. Наконечник клизменный смазать вазелином.
7. Открыть кран (зажим) на трубке кружки Эсмарха, удалить весь воздух и выпустить немного жидкости из трубки кружки Эсмарха, затем закрыть кран (зажим).
8. Далее проводить процедуру согласно инструкции по постановке клизмы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Наконечник предназначен только для одноразового применения на одном пациенте. Повторное использование может быть опасным как для пациента, так и для персонала.

Не подвергать повторной стерилизации. Повторная стерилизация может вызвать инфекцию или критические реакции.

Не применять не по назначению. Использовать в соответствии с инструкцией по применению. Не применять при нарушении целостности первичной упаковки.

В случае нарушения вышеперечисленного, надежность применения изделия не гарантируется, и производитель не несет ответственность.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Специальные противопоказания отсутствуют. Пациент, у которого возникают гиперчувствительные реакции в отношении одного из материалов, не должен проходить лечение с использованием данного изделия.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

При соблюдении данной инструкции побочные действия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:

 Дата изготовления


 Использовать до

 Код партии

 Не использовать повторно

 Не применять при повреждении упаковки

 Стерилизация с применением окиси этилена

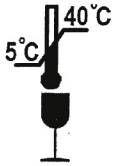 Ограничение температуры

 Хрупкое. Осторожно

 Беречь от влаги

 Беречь от солнечных лучей

 Перед применением прочтите инструкцию

 Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ:

Наконечники должны храниться в упаковке изготовителя при температурах от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Защитить наконечники клизменные от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет от даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Производственное унитарное предприятие «ФреБор» (Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж. Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru