Инструкция - памятка по уходу и эксплуатации за валиками метатарзальными ортопедическими моделей ВМ-1, ВМ-2

1 Валик метатарзальный ортопедический (далее валик) модели ВМ-1 предназначен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия 1 и 2 степени, поддержки поперечного свода на уровне 2 и 3 головок плюсневых костей. Рекомендован для применения в обуви с высотой каблука до 6 см.

2 Валик метатарзальный ортопедический Т- образный (далее валик) модели ВМ-2 предназначен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия 1 и 2 степени, поддержки поперечного свода на уровне 2 - 5 головок плюсневых костей. Подходит также для обуви с высотой каблука выше 6 см.

3 Валик модели ВМ-1 выпускается серийно, трех типоразмеров (S, M, L). Высота валика 7 ± 1,5 мм.

Размер S рекомендуется применять в обуви с 220 по 240 размер.

Размер М рекомендуется применять в обуви с 245 по 275 размер.

Размер L рекомендуется применять в обуви с 280 по 295 размер.

4 Валик Т-образный модели ВМ-2 выпускается серийно, двух типоразмеров (S, M). Высота валика размера S -9,5 ±1,5 мм, размера М – 10,5 ± 1,5 мм.

Размер S рекомендуется применять в обуви с 220 по 260 размер.

Размер М рекомендуется применять в обуви с 230 по 295 размер.

5 С учетом рекомендации врача-ортопеда и антропометрических особенностей стоп пользователя, допускается использование валиков в обуви размеров, не совпадающих с данной инструкцией.

6 Для определения расположения валика метатарзального необходимо:

6.1 Встать на лист бумаги и обвести контур стопы (см. рис.1).

6.2 Отметить выступающие места в районе первого (А) и пятого (Б) плюсне - фалангового сустава. Между точками прочертить прямую линию.

6.3 Разделить отрезок АБ на две равные части, поставить точку В.

6.4 Отметить середину пяточного закругления, точка Г.

6.5 Соединить точку Г с точкой В. Получили центральную ось стопы.

6.6 На пересечении отрезка АБ и ВГ получаем точку положения переднего края валика (размер L, см.табл.1).


6.7 Перенести место расположения валика с обчерка на стельку в обуви.

7 Ориентировочные значения размера L в зависимости от длины стопы представлены в таблице 1.

8 Схема определения расположения валика представлена на рисунке 1а - для валика модели ВМ-1, на рисунке 1б - для валика модели ВМ-2.

Таблица 1

Длина стопы, мм	220	225	230	235	240	245	250	255
Размер L (положение переднего края валика), мм	149	153	156	160	163	167	170	173
Длина стопы, мм	260	265	270	275	280	285	290	295
Размер L (положение переднего края вали-ка), мм	177	179	184	187	190	194	197	201
С учетом антропометрических особенностей стоп пользователя, по рекомендации врача - ортопеда допускается иное размещение валиков								

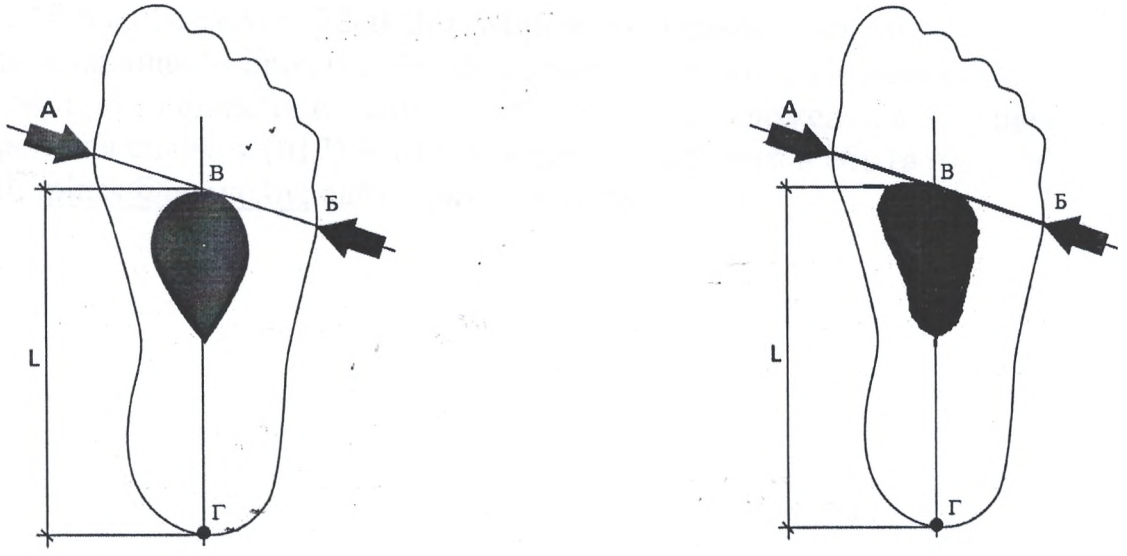

а б

Рисунок 1- Схема определения расположения валиков метатарзальных

9 Способ применения:

9.1 Удалить защитный слой с клеевого фиксатора валика.

9.2 Разместить валик клеевым слоем вниз в обуви, в соответствии с определенным местоположением (п.7 инструкции). Для модели ВМ-2 обратить внимание на правильное применение валика Т-образного: исполнение Л – в левую полупару обуви, исполнение П – в правую полупару обуви. Маркировка исполнения Л и П расположена на нижнем слое клеевого фиксатора.

9.3 Слегка прижать валик для фиксации.

10 Уход за валиком:

10.1 Валик не вынимается из обуви.

10.2 Валик не мыть.

10.3 В случае загрязнения необходимо очистить поверхность изделия мягкой влажной губкой или салфеткой.

10.4 Сушить вдали от нагревательных приборов.

11 Гарантийный срок эксплуатации – 30 дней со дня реализации.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.
Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.
Телефон для справок (017) 3081479; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081434.
E-mail: minsk@bpovc.by; сайт: www.bpovc.by.

Инструкция - памятка по уходу и эксплуатации за подпяточником для компенсации укорочения моделей П-0,5, П-1,0 , П-1,5, П-2,0

1 Подпяточники моделей П-0,5, П-1,0 , П-1,5, П-2,0 предназначены для компенсации укорочения нижней конечности соответственно 0,5 см, 1,0 см, 1,5 см, 2,0 см.

2 Подпяточник выпускается серийно, моделей П-0,5 и П-1,0 четырех типоразмеров (S, M, L, XL) каждой модели, моделей П-1,5 и П-2,0 трех типоразмеров (S, M, L).

3 В моделях П-0,5 и П-1,0 размеры:

S - для 210-230 (33-36) размеров обуви,

M - для 235-255 (37-40) размеров обуви,

L – 260-280 (41-43) размеров обуви,

XL – 285-305 (44-47) размеров обуви.

4 В моделях П-1,5 и П-2,0 размеры:

S - для 210-235 (33-37) размеров обуви,

M - для 240-265 (37,5-41) размеров обуви,

L – для 270-305 (42-47) размеров обуви.

5 Толщина подпяточника в готовом виде в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Подпяточник для компенсации укорочения	Модель П-0,5. Размер S, M, L, XL	Модель П-1,0. Размер S, M, L, XL	Модель П-1,5. Размер S, M, L	Модель П-2,0. Размер S, M, L
Толщина, мм	6 ± 1,5	11 ± 1,5	16 ± 1,5	21 ± 1,5

6 Способ применения:

6.1 Удалить защитный слой с клеевого фиксатора подпяточника.

6.2 Разместить подпяточник клеевым слоем вниз в обуви, вплотную к заднику в соответствии со схемой (рисунок 1).

6.3 Слегка прижать подпяточник для фиксации.

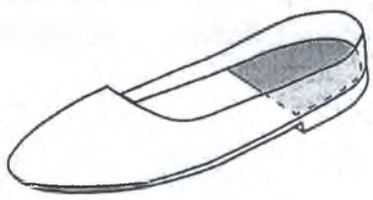


Рисунок 1 – Схема размещения подпяточника в обуви

7 Уход за подпяточником:

7.1 Подпяточник не мыть.

7.2 В случае загрязнения необходимо очистить поверхность изделия мягкой влажной губкой или салфеткой.

7.3 Сушить вдали от нагревательных приборов.

8 Гарантийный срок эксплуатации – 45 дней со дня реализации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081479; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081434. E-mail: minsk@bpovc.by; сайт: www.bpovc.by.

Инструкция - памятка по уходу и эксплуатации за изделиями обувными ортопедическими, изготовленными по индивидуальному заказу

1 При примерке изделие не должно причинять Вам каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.

2 Мытье изделий любого вида исключается. В случае загрязнения необходимо очистить поверхность изделия мягкой влажной тряпкой, при чем не стоит сильно тереть, так как может быть испорчена внешняя поверхность материала изделия.

3 Не сушите изделие на нагревательных приборах, возле огня или на солнце. Мокрое изделие нужно сушить при комнатной температуре, набив бумагой или вставив специальные приспособления для поддержания формы.

4 Избегайте соприкосновения изделия с солями, щелочами, кислотами и другими химическими веществами.

5 Если Вы заметите неровности в окраске или структуре материалов, помните, что неравномерность рисунка является естественной характеристикой натуральной кожи.

6 На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации изделия, а также на сменные детали (шнурки и прочее) гарантия не распространяется.

7 Гарантийный срок эксплуатации – 50 дней с момента получения изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр». Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского,10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (017) 3081479; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081434; E-mail: minsk@bpovc.by; сайт: www.bpovc.by.