Coloplast®

Coloplast

ru Паста в тубе

Выравнивает складки и неровности кожи

Принадлежности по уходу за стомой

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

**Инструкция по применению**
Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции.

23341159 Version 1
Логотип Coloplast является зарегистрированным товарным знаком компании Coloplast A/S. Все права защищены.© 2022-02-17

## Назначение изделия
Изделие предназначено для заполнения неровностей, складок кожи вокруг стомы и создания герметичного уплотнения между стомой и клеевой пластиной, а также защищает кожу от выделений из стомы.

## Меры предосторожности
Данное изделие следует использовать с осторожностью у недоношенных детей или младенцев, проходящих лечение в кувезе, поскольку оно не стерильно и может привести к повышенному риску инфицирования.

Изделие содержит спирт, и его не следует накладывать непосредственно на открытую рану или кожную язву. При наложении на раздраженную или стертую кожу может кратковременно возникнуть ощущение жжения. При возникновении и длительном существовании раздражения кожи обратитесь к медицинскому работнику за консультацией.

Не подвергать воздействию солнечных лучей.

Храните изделие в прохладном и сухом месте. Не замораживайте. Перед применением дождитесь, пока температура изделия достигнет комнатной.

Только для наружного применения.

## Информация
Компания Coloplast не несет ответственности за причинение вреда здоровью или ущерб, возникшие в результате несоблюдения текущих рекомендаций компании Coloplast по использованию данного изделия.

## Порядок применения


### Подготовка
Во избежание загрязнения пасты
• Держите тюбик подальше от воды и избегайте его контакта со стомой.
• Мойте руки мылом и водой до и после нанесения пасты.

Перед нанесением пасты убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая.


### Применение



Нанесите пасту на кожу для выравнивания глубоких складок, шрамов или неровностей, либо непосредственно на клеевой слой/адгезивную пластину. Не наносите пасту на всю поверхность клеевого слоя.

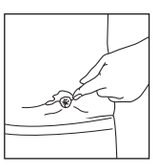

При необходимости выровняйте пасту аккуратными разглаживающими движениями шпателем или мокрым пальцем.

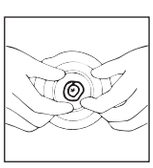

Наложив адгезивную пластину на кожу вокруг стомы, проведите пальцами по всей ее поверхности и убедитесь, что она плотно прилегает к коже.

После использования удалите остатки пасты с тюбика чистой салфеткой. Плотно закройте тюбик крышкой во избежание контакта пасты с водой.

### Удаление
Паста легко удаляется с помощью теплой воды и салфетки. Можно оставить на коже маслянистые следы пасты перед наложением следующего изделия.
Лучше оставить небольшие остатки пасты на коже, чем подвергать ее риску раздражения для полного удаления пасты.

### Удаление в отходы
Данное изделие следует удалять вместе с обычными бытовыми отходами или в соответствии с местными правилами.

Не смывать в унитаз.

## Сообщение об инцидентах
Если во время или в результате использования данного изделия произошел серьезный инцидент, сообщите об этом производителю и уведомьте соответствующий национальный орган.

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**Условные обозначения**

| | |
|---|---|
| MD | Медицинское изделие |
| CE | Указывает, что изделие соответствует требованиям европейского законодательства в отношении медицинских изделий |
| REF | Номер по каталогу |
| | Срок годности (ГГГГ-ММ-ДД) |
| LOT | Код партии |
| | Дата изготовления (ГГГГ-ММ-ДД) |
| | Изготовитель |
| | Обратитесь к инструкции по применению |
| UDI | Обозначает носитель, содержащий информацию об уникальном идентификаторе изделия |
| GTIN | (Global Trade Item Number) Идентификационный номер изделия в системе международной торговли |
| | Не допускать воздействия солнечного света |
| | Упаковка, пригодная для переработки |