АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Описание: Ангиографические катетеры представляют собой внутрисосудистые стерильные апирогенные катетеры однократного применения.

Показания: Ангиографические катетеры предназначены для доставки рентгеноконтрастных средств к выбранным участкам сосудистой системы в сочетании со стандартными диагностическими процедурами. Ангиографические катетеры с маркерными полосками также могут использоваться для анатомических измерений.

Противопоказания: не известны.

Предупреждения:

- Ангиографические катетеры Impress® с гидрофильным покрытием не должны использоваться в коронарных артериях.
- Ангиографические катетеры представляют собой катетеры однократного применения.
- Рекомендуемый размер проводника: см. этикетку конкретного катетера.
- Использование проводника было сопряжено с большей частотой тромбообразования.

Меры предосторожности:

- Не использовать, если упаковка открыта или повреждена.
- Не использовать после истечения срока годности.
- Не обрабатывать в автоклаве.
- Осторожно извлечь катетер из упаковки, взявшись за втулку и медленно извлекая его из упаковки.
- Если при извлечении проводника из катетера ощущается сопротивление, извлечь проводник и катетер как единое целое, чтобы предотвратить потенциальное повреждение стенки сосуда.
- Перед использованием, промыть все устройства, вводимые в кровеносный сосуд, стерильным гепаринизированным физраствором или подобным изотоническим раствором.
- У катетеров с гидрофильным полимерным покрытием на дистальной поверхности катетера поверхность дистальной части катетера должна быть полностью смочена раствором, чтобы оставаться смазанной. Смачивание катетера до и во время использования требует осторожности и внимания.

Нежелательные явления:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ангиографические катетеры Merit Medical предназначены для использования врачами, владеющими процедурой чрескожного введения катетера. Осложнения, которые могут быть связаны с использованием ангиографических катетеров, включают, в частности, следующее:

• Тромбообразование/эмболы
• Воздушная эмболия
• Гематома в месте пункции
• Повреждение стенки артерии
• Перемещение бляшек
• Инфаркт миокарда
• Сердечная аритмия
• Инфекция
• Перфорация стенки сосуда
• Аллергическая реакция на контрастное вещество
• Окклюзия сосудов
• Спазм сосудов
• Инсульт и смерть

Показания к применению:
1. Для ангиографических катетеров Merit рекомендуется использовать проводники с покрытием.
2. Ввести катетер в кровеносный сосуд, выбрав соответствующий метод введения.
3. Катетеры PIGTAIL. Катетеры Pigtail оснащены выпрямителем. Используется раздвоенная конфигурация, облегчающая извлечение после позиционирования наконечника катетера на проводнике.
• Продвинуть выпрямитель вперед так, чтобы pigtail распрямился.
• Установить наконечник катетера на проводник и убрать выпрямитель, потянув за язычок выпрямителя.
4. МАРКЕРНЫЕ ПОЛОСКИ. Точность анатомических измерений составляет ±4%.

Содержимое стерильно и апирогенно в не вскрытой, неповрежденной внутренней упаковке. Хранить в сухом прохладном месте.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Только для однократного применения. Не использовать повторно, не перерабатывать и не подвергать повторной стерилизации. Повторное использование, переработка или повторная стерилизация может нарушить структурную целостность изделия и/или привести к отказу изделия, что, в свою очередь, может привести к травмированию, развитию заболеваний или смерти

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

пациента. Повторное использование, переработка или повторная стерилизация может также привести к риску загрязнения изделия и/или развитию у пациента инфекции или перекрестной инфекции, включая, помимо прочего, передачу инфекционных заболеваний от одного пациента другому. Загрязнение изделия может привести к травмированию, развитию заболеваний или смерти пациента.

MERITMEDICAL®

CE 2797

Производитель
«Мерит Медикал Системз, Инк.» (Merit Medical Systems, Inc.)
Саут-Джордан, штат Юта 84095, США 1-801-253-1600
Отдел обслуживания клиентов в США 1-800-356-3748

EC REP

Уполномоченный представитель
«Мерит Медикал Аэлэнд, Лтд.» (Merit Medical Ireland Ltd)
Паркмор Бизнес Парк Уэст, Голуэй, Ирландия
Европейская служба поддержки клиентов по странам: Бельгия 0800 72906; Франция 0800 916030;
Германия 0800 1820871; Ирландия 091 703700; Нидерланды 0800 0228184; Великобритания 0800 973115

490022002_014 ID041520

Только по рецепту

F ДИАМЕТР ПО ШКАЛЕ ШАРЬЕРА

PSI РЕКОМЕНДУЕМОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОВОДНИК




СОДЕРЖАНИЕ



БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ



ЗНАЧЕНИЯ РАСХОДА и ДАВЛЕНИЯ. ЗНАЧЕНИЯ РАСХОДА ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ 10,4 сП.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ.

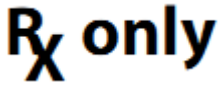

Внимание: Согласно федеральному закону США продажа данного изделия без предписания лечащего врача запрещена. / Внимание:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru