Преимущества солевой грелки:




Продукция компании высоко оценена Международной Конвенцией 2000 в Женеве и удостоена «МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ ЗА КАЧЕСТВО И ПРЕВОСХОДСТВО»

- Работает совершенно автономно
- Многоразовое применение
- Долго сохраняет тепло или холод
- "2 в 1", теплый и холодный компресс
- Исключает ожог или перегрев
- Гигиенична в применении
- Безопасна для людей и животных

Инструкция по применению:

ВКЛЮЧЕНИЕ

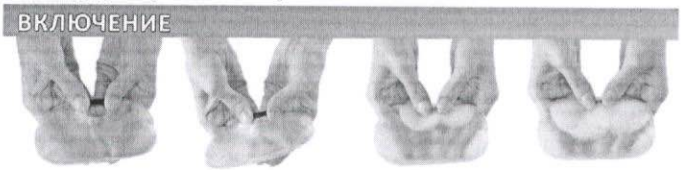

Для запуска грелки слегка (под углом 45°) перегните палочку-пускатель, находящуюся в растворе соли. Грелка за несколько секунд нагреется до температуры +52°С и будет сохранять тепло от 30 минут до 4-х часов в зависимости от ее размера и температуры окружающей среды.
После того, как вы активировали солевую грелку, ее необходимо размять до эластичного и мягкого состояния, после чего она легко примет форму согреваемой поверхности.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ




Для восстановления оберните грелку тканевой салфеткой, поместите в емкость с водой комнатной температуры, доведите до кипения и прокипятите в течение 10-15 минут до полного растворения кристаллов. Оставьте грелку в воде до полного остывания! Затем извлеките грелку из воды без использования острых предметов. Когда грелка остынет она снова готова к применению.

ОХЛАЖДЕНИЕ



Для использования в качестве холодного компресса поместите грелку на 30-40 минут в холодильник. За это время она охладится до (+4) - (+6) С°.

Внимание! Не помещайте грелку в морозильную камеру.

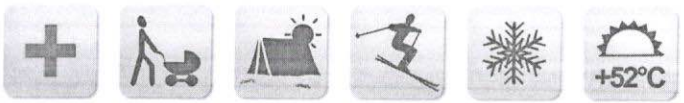

Наименование: Грелка солевая. (Полное наименование и штрих-код смотри на упаковке) Является медицинским изделием. Отпускается без рецепта. Изделие зарегистрировано в Росздравнадзоре. РУ № ФСР 2007/00829 от 11.03.2011 , срок действия не ограничен. Патент № 2149608.

ТУ № 9398-001-40239490-2007. Гарантийный срок - 2 года со дня продажи. Срок годности не ограничен. Изделие предназначено для личного многократного использования.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре. Избегать попадания прямых солнечных лучей. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовыми отходами. **Комплектность:** грелка солевая - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. **Состав:** оболочка - пленка ПВХ; солевой раствор - ацетат натрия, применяется в пищевой промышленности.

Производитель: ООО "ДЕЛЬТА-ТЕРМ", 125057, Россия, Москва, ул. Новопесчаная д.6, корп 2.
Тел.: 8 (495) 145-99-95, info@deltaterm.ru.

дельтатерм
для Вашего здоровья

www.deltaterm.ru

deltatermmagazin
deltatermmagazin
deltatermmagazin
@delta_term

Дата выпуска:
№ партии:
Дата продажи:

МНОГОРАЗОВОЕ БЕСКОНЕЧНОЕ ТЕПЛО


+52° МГНОВЕННО НАГРЕВАЕТСЯ ДО +52°С



СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

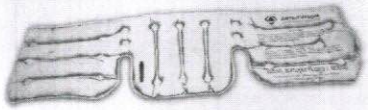

СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА «СТЕЛЬКИ» (пара)

Применяются для согревания ног при простуде и вегето-сосудистой дистонии, при болях в ногах, благодаря тепловому воздействию исчезнут боли в ногах. Можно вложить стельки в шерстяные носки или просто поставить на них ноги, сидя вечером у телевизора.



СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА «ВОРОТНИК»

Применяется при болезнях суставов - артрит, артроз. Для разогревания перед массажем. Помогает в лечении шейного остеохондроза. Эта форма незаменима для людей страдающих мигренями. Прекрасно снимает стресс и напряжение.

СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА «МАСКА»

Применяется для усиления воздействия косметических средств, для подготовки к чистке пор и пилингу. Обеспечивает комфортный уход за кожей лица, улучшая ее состояние и внешний вид. Регулярное применение предотвратит преждевременное старение кожи.






СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА «ДЕТСКАЯ»


Используется при детских коликах в животике, для прогревания небольших участков тела (колено, локоть), при дюбаже печени. Незаменима на прогулках с детьми, в походах.

Прекрасная замена горчичникам!

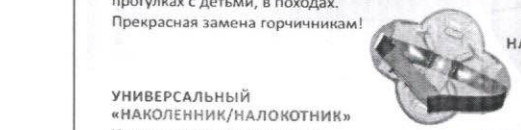

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «НАКОЛЕННИК/НАЛОКОТНИК»

Используется для лечения и профилактики заболеваний суставов, а также при разрывах мышц и растяжениях связок, после легких травм и ушибов. Имеет удобную резинку с липучкой для закрепления на сустав.

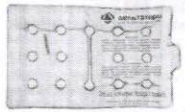

СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА «МАТРАСИК»

Применяется для прогревания больших участков тела. Помогает в лечении радикулита и миозитов. Грелку «Матрасик» можно использовать на прогулках с детьми (вкладывать в коляску), в походах (в спальный мешок).



СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА «ЛОР»

Для прогревания носовых пазух при лечении насморка и простудных заболеваний. А также для согревания рук на холоде и прогревании небольших участков тела.



СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА «МАТРАСИК МИНИ»

Эргономичный размер подойдет для прогревания поясницы, суставов и грудной клетки.

Используется при дюбаже печени. Применяется для прогревания небольших участков тела.



ГРЕЛКА «ЛОР МАКСИ»»

Применяется при лечении заболеваний уха, горла, носа и простудных заболеваниях.

СТЕЛЬКИ
ВОРОТНИК
СУВЕНИРНЫЕ ГРЕЛКИ
МАСКА
ДЕТСКАЯ
НАКОЛЕННИК
МАТРАСИК
ЛОР



Полный ассортимент солевых грелок смотри на сайте **www.deltaterm.ru**

Показания к применению:

ТЕПЛО

Профилактика и лечение

Простуды • Грипп • Насморка • Отита • Артрита • Остеохондроза • Радикулита • Почечных колик • Невралгии • Разогревание перед массажем • При дюбаже печени • Для предотвращения образования гематом после инъекций • Подогрев медицинских препаратов

ХОЛОД

Профилактика и лечение

Мигрени • Носовых кровотечений • Ушибов • Растяжения связок и мышц • Укусов насекомых • Используется для снижения высокой температуры

Солевые грелки «ДЕЛЬТА-ТЕРМ» находят широкое применение не только в медицине но и для обогрева рук и техники (фото и видеокамеры) при работе на морозе. Как средство обогрева часто используются рыбаками и охотниками. Солевые грелки незаменимы при простудных заболеваниях, при лечении детей. Солевые грелки рекомендуют врачи, косметологи и тренеры.


А так же используются для охлаждения и разогрева напитков и продуктов в походе, на даче, в любом месте, когда это нужно сделать быстро и автономно.

Правила использования:

- При включении грелки палочка-пускатель должна полностью находиться в солевом растворе. Грелка активируется при перегибе палочки под углом до 45°.
- Если купленная вами грелка не запустилась с первого раза - это не означает, что она не работает. В данном случае, перед первым применением необходимо прокипятить грелку.
- Для восстановления не помещайте грелку в микроволновую печь.
- Во время кипячения всегда используйте тканевую салфетку. Опускайте грелку в воду комнатной температуры, а затем доводите до кипения. Вода должна полностью накрывать грелку при кипячении. Не пытайтесь восстановить грелку без воды.
- Время кипячения зависит от размера грелки, в среднем от 5 до 15 минут до полного растворения кристаллов.
- **ВАЖНО! Оставьте грелку в воде до полного остывания! Затем извлеките грелку из воды без использования острых предметов.**
- ВНИМАНИЕ! Не допускается:

  - вынимать грелку сразу после кипячения из воды;
  - заливать грелку холодной водой для быстрого остывания;
  - помещать горячую грелку в холодильную или морозильную камеру

- При проколе грелка самокристаллизуется и становится непригодной. Прокол грелки не является гарантийным случаем.
- Если после использования грелка находится в твердом состоянии, не пытайтесь ее сложить, чтобы поместить в кастрюлю, это может привести к разрыву пакета. Прокипятите сначала одну сторону грелки, затем переверните и прокипятите вторую сторону, чтобы она стала мягкой, а затем уже полностью опустите грелку в кастрюлю.
- Не помещайте грелку в морозильную камеру холодильника, при охлаждении грелки до - 8 Сº раствор самокристаллизуется. Для восстановления грелки ее необходимо сначала согреть до комнатной температуры, а затем прокипятить.
- Не помещайте горячую грелку в холодильник - это может привести к поломке холодильника.
- Если приобретенная вами грелка находится в твердом состоянии, это означает, что она самокристаллизовалась из-за случайного удара или низкой температуры во время транспортировки. Это естественное явление - если оно произошло, то перед первым применением прокипятите грелку.
- В процессе эксплуатации грелки в растворе могут появиться кристаллы в виде снежинок и грелка может стать гелеобразной. Наличие кристаллов не влияет на нормальную работу грелки и не является браком солевой грелки.
- Грелки стельки не предназначены для использования в качестве стелек для ходьбы. Максимальная статичная нагрузка на грелки не должна превышать 90 кг.
- В случае попадания раствора на кожу и слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости промойте их теплой водой. Раствор безопасен.
- Для прогревания тела людям с чувствительной кожей и детям до 3-х лет, грелку рекомендуется обернуть тканевой салфеткой.

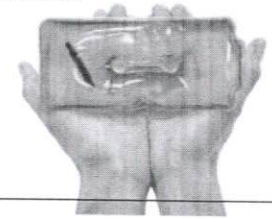

Противопоказания: онкологические заболевания, воспалительные процессы, кровотечения, травмы.

! Перед применением солевой грелки в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.