DIRECTION OF GRAIN

PHARMA CODE REF. IS: 1741







(RU) Таблетки для очищения зубных протезов Корега Био Формула (Corega Bio Formula). ВНИМАНИЕ! Опасно при проглатывании. Вызывает серьезное раздражение органов зрения. Может вызвать аллергическую реакцию. Тщательно вымойте руки после использования таблеток или раствора. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: необходимо обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте! ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: обратиться к врачу. Утилизировать содержимое вместе с бытовыми отходами. [Содержит МЯТНОЕ МАСЛО.] Может вызвать аллергическую реакцию.


(KZ) Корега Био Формула (Corega Bio Formula) тіс протездерін тазалауға арналған таблеткалар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұтып қойған кезде зиянды. Көру мүшелерінің қатты тітіркенуін тудырады. Аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Таблеткаларды немесе ерітіндіні пайдаланғаннан кейін қолыңызды жақсылап жуыңыз. КӨЗГЕ ТИГЕН КЕЗДЕ: көлемді бірнеше минут бойы сумен шайып жуыңыз. Контактілі линзаларды пайдаланғанды не алып тастау оңай болса, оларды алып тастаңыз. Кезді жууды жалғастырыңыз. Көздің тітіркенуі қоймаса: дәрігерге көріну керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз! ЖҰТЫП ҚОЙҒАН КЕЗДЕ: дәрігерге көріңіз. Ішкерітін тұмшалтас қалдықтарымен бірге қоқысқа тастаңыз. Ұрдажықпа ЖАЛБЫЗ МАЙЫ бар.] Аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:

(RU) Не брать таблетки или раствор в рот. Не пить раствор для очищения зубных протезов и не использовать как ополаскиватель для рта. Во время использования таблеток или раствора избегать контакта с полостью рта или глазами. Не использовать при наличии чувствительности к какому-либо ингредиенту, входящему в состав продукта. Хранить при температуре не выше 25° С в местах, недоступных для детей и лиц, которые по неосторожности могут проглотить таблетку или раствор. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: незамедлительно обратитесь к врачу. При появлении раздражения прекратить использование и проконсультироваться с врачом.

(KZ) Таблеткаңы немесе ерітіндіні ауыз қуысына құйыңдаңыз. Тіс протездерін тазалау үшін ерітіндіні ішпеңіз және шайғыш зат ретінде пайдаланбаңыз. Таблеткаларды немесе ерітіндіні пайдаланғаннан кейін жұмыңыздың немесе көзіңізге тимеңіз. Қандай да бір ингредиентке тітіркену немесе жоғары сезімталдық болған жағдайда құралды пайдаланбаңыз. Балалар мен абайсызда таблетканы немесе ерітіндіні жұтып қоюы мүмкін адамдардың қолы жетпейтін орындарда 25°С-ден жоғары емес температурада сақтау керек. ЖҰТЫП ҚОЙҒАН КЕЗДЕ: дәрігерге көріңіз. Ітіріпкеу пайда болса, құралды пайдаланудың тоқтатып, медицинелық жәрдем алыңыз.

6Z00000021053

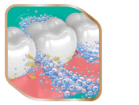

(RU) ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛЕТОК «КОРЕГА»?

(KZ) НЕЛІКТЕН «КОРЕГА» ТАБЛЕТКАЛАРЫН ПАЙДАЛАНЫП КҮНДЕЛІКТІ ТАЗАЛАУ ҚАЖЕТ?


(RU) Дополнительные советы и рекомендации можно найти на сайте: www.mydenturecare.com
Если не проводить ежедневную чистку, частицы пищи и налет могут накапливаться на зубных протезах, вызывая появление пятен и неприятного запаха.
Ежедневно снимайте зубные протезы, чтобы облегчить боль и давление, возникающие при их ношении в течение дня, а также обеспечить оптимальную очистку с помощью специально разработанного очищающего средства, такого как Корега.
Корега с активными пузырьками — это средство для ежедневного очищения, предназначенное для частичных и полных зубных протезов. Удаляет пятна и ежедневный налет*, придавая ощущение свежести. При этом активно уничтожает 99,9 % бактерий, вызывающих неприятный запах**, которые могут повредить ваши собственные зубы и десны.
Используйте ежедневно для свежего дыхания, чистой и здоровой улыбки!
* Данные о розничных продажах средств по уходу за зубными протезами для брендов GSK за 12 месячный период, заканчивающийся в мае 2023 года.
** По результатам тестирований в лабораторных условиях.

(KZ) Қосымша кеңестер мен ұсыныстарды веб-сайттан табуға болады: www.mydenturecare.com
Күнделікті тазалап тұрмаса, тіс протездерінде тамақ бөлшектері пен өнеуі жиналып, дәктер мен жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін.
Күні бойы киімде болатын ауырсыну мен қызығуды жеңілдету үшін, сондай-ақ Корега сияқты арнайы жасалған тазартушы құралмен ондайды тазалау үшін тіс протездерін күнделікті алып отырыңыз.
Белсенді көпіршіктер бар Корега — бұл тазарта және тұлық тіс протездерін күнделікті тазалауға арналған құрал. Дақтарды және күнде жиналатын өнеуді кетіреді*, бактерияның сезімін сыйлайды. Сонымен қатар жағымсыз иіс шығаратын бактерияларды 99,9 %-ға дейін** белсенді жояды, бұл бактерияның тістеріңіз бен ауыз жиектеріңізді зиянды әсерін.
Тынық балғын болу үшін, таза әрі сау тістеріңіз күлімсіреу үшін күнделікті пайдаланыңыз!
* 2023 жылдың мамырының аяқталатын 12 айлық кезеңдегі GSK брендтеріне арналған тіс протездерін күту құралдарын бөлшек сату деректері.
** Зертханалық жағдайда тестілеу нәтижелеріне сәйкес.

КАРТОН / КАРТОН
ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ / ҚАЙТА ӨҢДЕУГЕ ЖАРАМДЫ

Переработанный картон
Қайта өңделген картон

Товарный знак принадлежит или используется Группой Компаний Хеленон. ©2024 Группа компаний «Хеленон или ее лицензиар.
Тауар белгісі Хеленон компаниялар тобына тиесілі немесе оған пайдаланады. ©2024 «Хеленон компаниялар тобы немесе оның лицензиары.

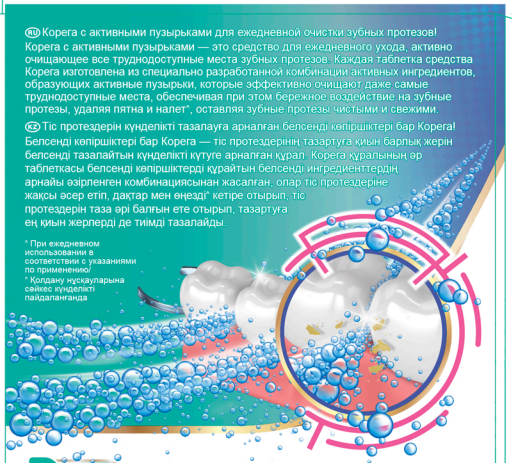

(RU) Корега с активными пузырьками для ежедневной очистки зубных протезов!
Корега с активными пузырьками — это средство для ежедневного ухода, активно очищающее все труднодоступные места зубных протезов. Каждая таблетка средства Корега изготовлена из специально разработанной комбинации активных ингредиентов, образующих активные пузырьки, которые эффективно очищают даже самые труднодоступные места, обеспечивая при этом бережное воздействие на зубные протезы, удаляя пятна и налет*, оставляя зубные протезы чистыми и свежими.

(KZ) Тіс протездерін күнделікті тазалауға арналған белсенді көпіршіктері бар Корега! Белсенді көпіршіктері бар Корега — тіс протездерінің тазартуға қиын барлық жерін белсенді тазалайтын күнделікті күтуге арналған құрал. Корега құралының әр таблеткасы белсенді көпіршіктерді құрайтын белсенді ингредиенттердің арнайы әзірленген комбинациясынан жасалған, олар тіс протездеріне жақсы әсер етіп, дақтар мен өнеуді* кетіре отырып, тіс протездерін таза әрі балғын ете отырып, тазартуға ең қиын жерлерді де тиімді тазалайды.

* При ежедневном использовании в соответствии с указаниями по применению/
* Қолдану нұсқауларына сәйкес күнделікті пайдаланғанда




(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
1. Опустите одну таблетку очищающего средства Корега Био Формула (Corega Tabs Bio Formula) в теплую (не горячую) воду. Убедитесь, чтобы полученный раствор полностью покрывал зубной протез.
2. Замочите протез в течение 3 минут. Для достижения наилучшего результата почистите мягкой щеткой.
3. Тщательно ополосните протез проточной водой. Раствор, оставшийся после использования, следует немедленно вылить.

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧИСТКИ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, таких как зубные пластинки, элайнеры и каппы.

(KZ) КҮНДЕЛІКТІ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛАР
1. Корега Био Формула (Corega Tabs Bio Formula) тазартқыш құралының бір таблеткасын жылы (ыстық емес) суға батырыңыз. Өнімнің толығымен жібітуге арналған ерітіндіде екеніне көз жеткізіңіз.
2. Протезді 3 минутқа жібітіңіз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін жұмсақ щеткамен тазалаңыз.
3. Протезді ағынды сумен жақсылап шайыңыз. Пайдаланғаннан кейін қалған ерітіндіні дереу төгу керек.

Сондай-ақ тіс пластинкалары, элайнерлер мен каптар сияқты АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ ОРТОДОНТИЯЛЫҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫ ТАЗАЛАУҒА ЖАРАЙДЫ.

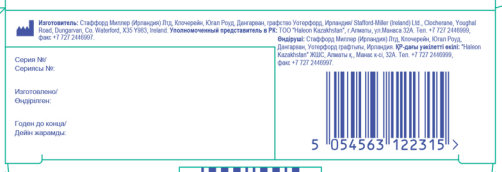

PHARMA CODE REF. IS: 1741

13.25 | 31.75 | 249 | 159 | 2 | 1.5 | 2 | 22.5 | 31.75 | 13.25 | 1.5

31.4 | 100 | 32 | 100 | 11

274.4

V1 12 - JUN - 2024	Artwork Information Panel	HALEON
Non Production Artwork ☐	Production Artwork X	
Total Number of Colours including Varnish & Foils: 7		
1. Black	2. Cyan	3. Magenta
4. Yellow	5. PANTONE Reflex Blue C	6. PANTONE 7467 C
7. Varnish	8.	9.
10.	11.	12.
Total Special Finishes: 0		

Component No: 62000000213053	AWP No: 7720158
Manufacturing Site: Dungarvan (Note: North American Artwork will have N/A in this field)	
Approving Market: Kazakhstan-KAZ	
Technical Drawing No: OC.UC.017	
Material Spec No: OC.UC.SPEC.008 (Note: North American Artwork will have N/A in this field)	
Body Text Size: 4.0pt Smallest Text Size: 4.0pt (Note: For North American Artwork, see Regulatory Spec box for Rx information)	
Electronic Verification Code: 1741	
Printer and User notes:	

DUNGARVAN
Site Additional Artwork Information Panel
Varnish type: Waterbased
Reel unwind: N/A

AIP_CHAMPS_2023_HALEON

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru