Электрический кабель


Назначение

Электрический кабель модели 2035U/2035UC можно использовать с любой имеющейся в наличии моделью консоли. Это стерильное изделие, предназначенное для одноразового использования.

Описание

Стерильный электрический кабель обеспечивает электрическое соединение с катетером. Электрический кабель необходим для процедур абляции.

Электрический кабель предназначен для использования с совместимыми катетерами для криоабляции компании Medtronic.

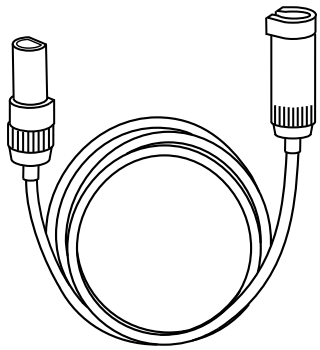

Электрический кабель соединяет следующие компоненты:

- **Катетер** — один конец электрического кабеля подсоединяется к рукоятке катетера.
- **Блок автоматического подсоединения** — другой конец электрического кабеля подсоединяется к порту криокатетера на блоке автоматического подсоединения.

Инструкция по эксплуатации

1. Распакуйте электрический кабель.
2. Для создания электрического соединения подключите соответствующий конец электрического кабеля к разъему рукоятки катетера.
3. Подсоедините соответствующий конец электрического кабеля к порту криокатетера на блоке автоматического подсоединения.
4. После завершения процедуры отсоедините электрический кабель от рукоятки катетера и блока автоматического подсоединения.

Чистка и хранение

До использования храните электрический кабель при рекомендованной температуре, описанной в “Технические характеристики”, стр. 57.

Электрический кабель — это стерильное изделие, предназначенное для одноразового использования. Не пытайтесь проводить его очистку.

Утилизация

Не утилизируйте данный продукт вместе с несортированным бытовым мусором.

Внимание! Все использованные катетеры и стерильные компоненты должны утилизироваться согласно процедурам, принятым в данном лечебном учреждении.

Физические характеристики

Длина	122 cm

Электрокардиографический (ЭКГ) кабель


Назначение

Электрокардиографический (ЭКГ) кабель модели 2035W можно использовать с любой имеющейся в наличии моделью консоли и точечными катетерами для криоабляции компании Medtronic.

Описание

Кабель ЭКГ соединяет блок автоматического подсоединения консоли и систему регистрации электрофизиологических показателей лечебного учреждения. Данный продукт используется только с точечными катетерами для криоабляции компании Medtronic.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

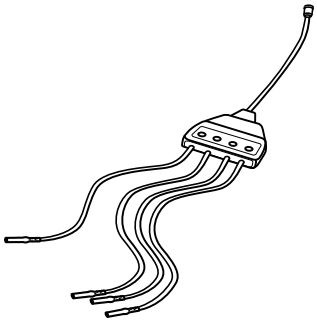

Кабель ЭКГ соединяет следующие компоненты:

- **Система регистрации электрофизиологических показателей** — к ней подключаются четыре 2 mm экранированных коннектора.
- **Блок автоматического подсоединения** — конец с одиночным разъемом подключается к соответствующему порту на блоке автоматического подсоединения.

Инструкция по эксплуатации

1. Подсоедините конец кабеля ЭКГ с одиночным разъемом к блоку автоматического подсоединения.
2. Подсоедините 4 экранированных разъема к системе регистрации электрофизиологических показателей.
3. Отключите кабель ЭКГ, отсоединив его от блока автоматического подсоединения и от системы регистрации электрофизиологических показателей.

Чистка и хранение

Протрите кабель ЭКГ влажной салфеткой. При необходимости используйте слабый раствор моющего средства или изопропиловый спирт. Тщательно высушите. Изделие нельзя погружать в воду.

Пока кабель ЭКГ не используется, храните его внутри консоли. Храните его при рекомендованной температуре, описанной в “Технические характеристики”, стр. 57.

Утилизация

Не утилизируйте данный продукт вместе с несортированным бытовым мусором. Утилизируйте этот продукт в соответствии с местным законодательством. Указания по надлежащей утилизации продукта см. по адресу http://recycling.medtronic.com

Физические характеристики

Длина	81 cm


Шланг для удаления отработанного газа

Назначение

Шланги для удаления отработанного газа серии 1035 можно использовать с любой имеющейся в наличии моделью консоли.

Описание

Шланг для удаления отработанного газа выводит использованное охлаждающее вещество (в виде газа) из консоли в систему лечебного учреждения для удаления жидкости или газа. Шланг для удаления отработанного газа необходим для процедур абляции.

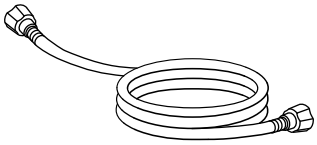

Шланг для удаления отработанного газа соединяет следующие компоненты:

- **Консоль** — подсоединяется к специальному коннектору на задней панели консоли. Туго затяните соединение пальцами.
- **Система лечебного учреждения для удаления газа** — часто подсоединяется через настенный разъем. Для совмещения со шлангом может потребоваться адаптер (поставляется компанией Medtronic). Y-образные адаптеры (поставляются компанией Medtronic) позволяют подсоединить к одному настенному разъему два шланга.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru