«УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор
АО «ОЭЗ «ВладМиВа
_____ В.П. Чуев
«__» _____ 2018 г.

Версия/Version № 6 от 22.01.2024 г.

RU *Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине* ***tdvladmiva.ru***

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

лака стоматологического фторирующего на основе природных смол
и нанодисперсного гидроксиаппатита
«Нанофлюор®»
по ТУ 9391-108-45814830-2007

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Лак стоматологический фторирующий на основе природных смол и нанодисперсного гидроксиаппатита «Нанофлюор» (далее по тексту – лак «Нанофлюор») применяется для глубокого фторирования и ускоренной реминерализации дентина и эмали:

- при профилактике и лечении первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии пятна, кариеса корня, а также при лечении клиновидных дефектов;
- после снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов;
- после удаления брэкет-систем и полировки эмали зубов и пломб;
- после кюретажа пародонтальных карманов для защиты пришеечной области зуба при цервикальной гиперестезии;
- при лечении гиперестезии зубов после применения техники травления (реставрация композиционными материалами, герметизация фиссур, установка брекэт-систем).
- при абразивном повреждении эмали и дентина в результате неправильной чистки зубов или при травмировании зубов;
- при обработке контактных поверхностей соседних зубов с несъемными ортопедическими конструкциями;
- при обработке «живой» культи препарированного зуба перед фиксацией несъемного протеза;
- при лечении и профилактике кариеса у детей и подростков: сохранение временных зубов до появления постоянных, герметизация фиссур в стадии их созревания, при пигментированных глубоких фиссурах постоянных зубов.;
- перед пломбированием для изоляции глубоких полостей зуба.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Лак **«Нанофлюор»** содержит:

- аминофторид и фторид натрия, повышающие резистентность зубной эмали к воздействию кислот, что предупреждает развитие кариеса. Аминофторид – органическое соединение фтора нового поколения, обладающее повышенной фторирующей активностью с длительным терапевтическим действием. Оптимальное содержание фторирующих компонентов обеспечивает мгновенную изоляцию зубов от различного рода раздражителей.
- природную смолу, обладающую антисептическими и бактерицидными свойствами, способную образовывать тонкую прочную плёнку, не влияющую на адгезию реставрационных материалов к дентину;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- нанодисперсный коллоидный гидроксиаппатит, способствующий восстановлению минеральной структуры эмали зуба, реминерализации дентина глубокой кариозной полости и нормализации функционального состояния пульпы зуба;
- хлорбутанол, оказывающий умеренно отвлекающее, противовоспалительное и антисептическое действие;
- основу, способствующую быстрому высыханию и образованию пленки в течение 40-60 сек.

Растворитель **«Нанофлюор»** предназначен для разбавления лака в случае увеличения его вязкости в результате испарения растворителя.

Для получения более прочного и долговременного покрытия, а также в условиях домашнего применения, рекомендуется использовать растворитель **«Нанофлюор»** для очистки поверхности зуба перед нанесением лака.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Перед использованием флакон с лаком необходимо встряхнуть!

Для профилактики и лечения первичного кариеса, кариеса в стадии пятна, кариеса корня, клиновидных дефектов необходимо удалить зубной камень, очистить поверхность зубов от остатков твердых зубных отложений, удалить пелликулу, промыть и высушить твердые ткани зуба.

После снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов высушить твердые ткани зуба сжатым воздухом, нанести лак и высушить.

При обработке «живой» культи препарированного зуба, контактных поверхностей соседних зубов с несъемными ортопедическими конструкциями, а также при абразивном (или травматичном) повреждении эмали и дентина нанести лак на высушенные твердые ткани зуба.

После кюретажа пародонтальных карманов и тщательного гемостаза твердые ткани зуба тщательно высушить и нанести лак.

Для снижения чувствительности зубов лак необходимо аккуратно нанести на слегка просушенные сверхчувствительные области зуба.

Для обработки углублений и фиссур молочных, а также постоянных зубов необходимо тщательно очистить поверхность углублений от остатков пищи, высушить и нанести лак.

Для изоляции глубоких полостей перед пломбированием, а также при лечении вторичного кариеса на дно просушенной, обезжиренной полости, с помощью аппликатора, точечно нанести лак, высушить струей воздуха и приступить к дальнейшей реставрации после протравливания и нанесения бондинга.

При необходимости возможно нанесение лака в 2–3 слоя с тщательным высушиванием каждого слоя.

ВНИМАНИЕ: После использования лака следует тщательно закрывать флакон.

ФОРМА ВЫПУСКА

Лак (флакон)	- 5 мл
Растворитель (флакон)	- 5 мл
Аппликаторы	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Допускается выпуск лака «Нанофлюор» без растворителя или другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре **от +5°С + 25°С.** Срок хранения - **3 года.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°С до +30°С.**

ВНИМАНИЕ: ***Беречь от огня!***

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению его срока годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению, просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки лака **«Нанофлюор»** и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00836 от 22.11.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество
“Опытно-экспериментальный завод”
“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)
308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19
тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

Символы/ Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

 - Беречь от влаги/Store in a dry place

 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight


 - Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation

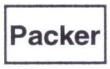

- Упаковщик/Packer

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/ Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки / Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru