Conveen® Security+

ru Уропрезерватив

Coloplast

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Инструкция по применению
Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции.

23331920 Version 1
Логотип Coloplast является зарегистрированным товарным знаком компании Coloplast A/S. Все права защищены.© 2024-04-03

Назначение изделия
Уропрезервативы предназначены для дренирования мочи, обычно в мочеприемник.

Показания к применению
Уропрезервативы предназначены для пациентов-мужчин, страдающих недержанием мочи.

Предупреждения
Не используйте повторно данное одноразовое изделие, поскольку возможна перекрестная контаминация, которая может привести к инфекции.

Повторная обработка, промывка, дезинфекция и (или) стерилизация могут нарушить характеристики изделия и привести к дополнительному риску причинения вреда здоровью пациента или развития у него инфекции.

Меры предосторожности
При изготовлении этого изделия не использовался натуральный каучуковый латекс, однако возможны редкие случаи загрязнения следовыми количествами натурального каучукового латекса во время изготовления или упаковки изделия, что может привести к возникновению аллергических реакций у пациентов с подтвержденной или предполагаемой аллергией на натуральный каучуковый латекс.

Информация
Это изделие одноразового применения.

Уропрезерватив выпускается в двух исполнениях: в виде самоклеящегося варианта или в виде неадгезивного варианта с клейким пластырем в комплекте.

Не используйте с препаратами для кожи на основе спирта, если кожа тщательно не высушена. Остаточный спирт может приводить к порче материалов или вызывать избыточную адгезию.

Не используйте с кремами и порошками. Использование таких веществ с уропрезервативом может привести к утере адгезивных свойств изделия.

Побочные эффекты, связанные с использованием самоклеящегося уропрезерватива, могут включать раздражение кожи, слабовыраженную боль и инфекцию мочевыводящих путей.

Компания Coloplast не несет ответственности за причинение вреда здоровью или ущерб, возникшие в результате несоблюдения текущих рекомендаций компании Coloplast по использованию данного изделия.


Условия хранения
Не допускайте воздействия солнечного света и тепла.

Порядок применения




Самоклеящийся
Уропрезерватив является самоклеящимся устройством.

Уропрезерватив снабжен аппликатором. Для обеспечения дополнительной поддержки рекомендуем не удалять его при надевании изделия.

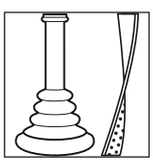

Неадгезивный с клейким пластырем в комплекте
Уропрезерватив неадгезивный с клейким пластырем в комплекте.

Подготовка

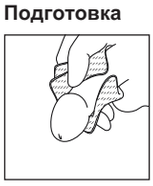

При необходимости подстригите лобковые волосы. Промойте половой член водой с мылом. Тщательно высушите.

Применение
При применении изделия не смещайте крайнюю плоть с головки полового члена во избежание скручивания и натяжения кожи. Данная рекомендация относится к необрезанным пациентам. Она не применяется к обрезанным пациентам.

Самоклеящийся



Наденьте свернутый уропрезерватив на головку полового члена так, чтобы узкий конец был обращен в сторону от тела. Оставьте расстояние в 1–2 см между кончиком полового члена и узкой сливной трубкой для обеспечения беспрепятственного оттока мочи. Медленно разверните изделие, раскатывая его на всю длину изделия или полового члена.

Одной рукой удерживайте уропрезерватив на месте, а другой потяните за раскручивающую ленту.




Снимите и удалите в отходы аппликатор.


Неадгезивный с клейким пластырем в комплекте



Удалите защитную бумагу с обеих сторон пластыря и аккуратно растяните его, чтобы повысить эластичность. Поместите один конец пластыря на ствол полового члена. Аккуратно оттягивая пластырь, оберните его вокруг полового члена и закрепите его с небольшим натяжением.

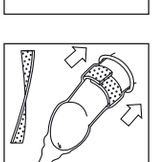


Поместите свернутый уропрезерватив на головку полового члена так, чтобы узкий конец был обращен в сторону от тела. Оставьте расстояние в 1–2 см между кончиком полового члена и узкой сливной трубкой для обеспечения беспрепятственного тока мочи. Медленно разверните изделие по половому члену на всю длину по направлению к телу, поверх пластыря.

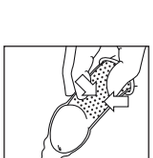

Аккуратно сожмите половой член в зоне, где уропрезерватив касается клейкого пластыря для обеспечения надежного приклеивания. Использование дополнительных средств фиксации не требуется.

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

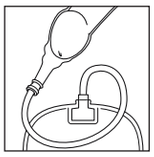

Подсоедините изделие к мочеприемнику.

Теперь система сбора мочи готова к работе.

Удаление

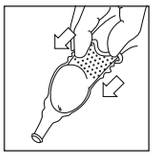

Отсоедините изделие от мочеприемника.

Захватите уропрезерватив у основания полового члена и аккуратно скрутите от основания к головке. Если изделие снабжено клейким пластырем, он будет удален вместе с уропрезервативом.

Удаление в отходы



Заменяйте изделие в соответствии с местными правилами и рекомендациями. Каждое изделие следует применять не более 24 часов.

Уход за кожей: При смене изделий по возможности позволяйте коже некоторое время «дышать».

Изделие предназначено только для однократного применения, после чего его следует удалить в отходы в соответствии с местными правилами, например вместе с обычными бытовыми отходами.

Не смывать в унитаз.

Сообщение об инцидентах

Если во время или в результате использования данного изделия произошел серьезный инцидент, сообщите об этом производителю и уведомьте соответствующий национальный орган.

Условные обозначения

MD	Медицинское изделие
CE	Указывает, что изделие соответствует требованиям европейского законодательства в отношении медицинских изделий
REF	Номер по каталогу
	Срок годности (ГГГГ-ММ-ДД)
LOT	Код партии
	Дата изготовления (ГГГГ-ММ-ДД)
	Изготовитель
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не используйте повторно
LATEX	Изготовлен без применения натурального каучукового латекса
UDI	Обозначает носитель, содержащий информацию об уникальном идентификаторе изделия
GTIN	(Global Trade Item Number) Идентификационный номер изделия в системе международной торговли
	Не допускайте воздействия солнечного света и тепла
	Упаковка, пригодная для переработки
MR	Безопасно при МРТ