Comfeel®Cleanser Coloplast

Флакон

Очиститель для кожи

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Информация об изделии
23331967
Version 1
Логотип Coloplast является зарегистрированным товарным знаком компании Coloplast A/S.
Все права защищены.© 2024-04-19

Назначение изделия
Очищает неповрежденную кожу, находящуюся в контакте с содержимым кишечника, мочой и гноем.

Меры предосторожности
Горючая жидкость

Беречь от высоких температур, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и иных источников воспламенения. При использовании не курить.

Избегать попадания в глаза.

Инструкция
Нанесите очищающее средство на мягкую салфетку или хлопчатобумажную ткань и осторожно дочиста протрите кожу.

Дайте коже высохнуть, прежде чем накладывать клеевую пластину.

Компоненты
вода (очищенная), изопропиловый спирт, кокоамфодиацетата двунатриевая соль, лаурилсульфат натрия, этерифицированный лаурилсульфат натрия, пропиленгликоль, консервант, аллантоин, ароматизатор

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Comfeel® Cleanser Coloplast

Салфетки

Очиститель для кожи

1 шт.

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Информация об изделии
23331966
Version 1
Логотип Coloplast является зарегистрированным товарным знаком компании Coloplast A/S.
Все права защищены.© 2024-04-19

Назначение изделия
Очищает неповрежденную кожу, находящуюся в контакте с содержимым кишечника, мочой и гноем.

Предупреждения
Повторное использование данного одноразового изделия не рекомендуется, поскольку может произойти перекрестное заражение, потенциально приводящее к развитию местной инфекции.

Меры предосторожности
Беречь от высоких температур, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и иных источников воспламенения. При использовании не курить.

Избегать попадания в глаза.

Инструкция
Дочиста протрите кожу очищающим средством Comfeel.

Дайте коже высохнуть, прежде чем накладывать клеевую пластину.

Компоненты
вода (очищенная), изопропиловый спирт, кокоамфодиацетата двунатриевая соль, лаурилсульфат натрия, этерифицированный лаурилсульфат натрия, пропиленгликоль, консервант, аллантоин, ароматизатор

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Comfeel®

Coloplast

Barrier Cream
Средство защитное

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Информация об изделии
23331938
Version 1
Логотип Coloplast является зарегистрированным товарным знаком компании Coloplast A/S. Все права защищены.© 2024-04-12

Назначение изделия
Защищает неповрежденную кожу, находящуюся в контакте с содержимым кишечника, мочой и гноем.

Меры предосторожности
Не использовать для детей младше 3 лет.

Информация
Увлажняет сухую кожу. Обладает водоотталкивающим действием.

Порядок применения
Осторожно нанесите на чистую кожу очень тонкий слой крема. Прежде чем накладывать медицинские адгезивные изделия, удалите излишки крема тканью.

Компоненты
Вода, минеральное масло, вазелин, озокерит, глицерилолеат, спирт ланолина, глицерин, циклометикон, цитрат магния, пропиленгликоль, консервант, лимонная кислота

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Conveen® Prep

ru Защитная пленка для кожи

Coloplast

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Инструкция по применению
Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции.

23331988 Version 1
Логотип Coloplast является зарегистрированным товарным знаком компании Coloplast A/S. Все права защищены.© 2024-04-24

Назначение изделия
Средство предназначено для защиты неповрежденной кожи от повреждений вследствие использования адгезивных клеевых составов.

Показания к применению
Средство показано к применению в рамках ухода за стомами и при недержании.
Средство показано для взрослых и детей в возрасте от 1 года.

Меры предосторожности
Избегайте прямого попадания на поврежденную кожу, например на ложе раны и слизистые оболочки (глаз, ушей, носа, рта, влагалища), так как это может вызвать раздражение кожи.

Беречь от высоких температур, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и иных источников воспламенения. Не курить.

Информация
При нанесении на кожу средство создает тонкую барьерную защитную пленку перед применением изделий для ухода за стомой или изделий, используемых при недержании мочи, например, уропрезерватива.

Изделие рассчитано на однократное применение.

Храните изделия в коробке до их непосредственного использования — это является защитной мерой и позволяет сохранить уникальный штрихкод, информацию о номере партии и сроке годности.

Компания Coloplast не несет ответственности за причинение вреда здоровью или ущерб, возникшие в результате несоблюдения текущих рекомендаций компании Coloplast по использованию данного изделия.

Условия хранения
Не допускайте воздействия солнечного света и тепла.

Порядок применения
Убедитесь, что кожа чистая и сухая.

Откройте пакетик с салфеткой. Достаньте салфетку и разверните ее.

Аккуратно нанесите средство на участки кожи, нуждающиеся в защите.

После полного высыхания кожи изделие для ухода можно приклеивать как обычно.

При замене изделия для ухода остатки барьерной защитной пленки можно удалить водой с мягким мылом.

Удаление в отходы
Изделие предназначено только для однократного применения, после чего его следует удалить в отходы в соответствии с местными правилами, например вместе с обычными бытовыми отходами.

Не смывать в унитаз.

Сообщение об инцидентах
Если во время или в результате использования данного изделия произошел серьезный инцидент, сообщите об этом производителю и уведомьте соответствующий национальный орган.

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Условные обозначения

MD	Медицинское изделие
CE	Указывает, что изделие соответствует требованиям европейского законодательства в отношении медицинских изделий
REF	Номер по каталогу
	Срок годности (ГГГГ-ММ-ДД)
LOT	Код партии
	Дата изготовления (ГГГГ-ММ-ДД)
	Изготовитель
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не используйте повторно
UDI	Обозначает носитель, содержащий информацию об уникальном идентификаторе изделия
	Не допускайте воздействия солнечного света и тепла
	Упаковка, пригодная для переработки
MR	Безопасно при МРТ
	Легковоспламеняющиеся жидкость и пар

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Brava® **Coloplast**

Нейтрализатор запаха

Принадлежности по уходу за стомой

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Инструкция по применению
23325871 Version 1
Логотип Coloplast является зарегистрированным товарным знаком компании Coloplast A/S. Все права защищены.© 2021-02-04


Назначение изделия
Нейтрализатор запаха Brava предназначен для устранения неприятного запаха и смазывания содержимого калоприемника.

Предостережения
Не допускайте воздействия солнечного света.

Информация
Состав: Вода, кокамидопропилбетаин, гидроксипропилгуар, отдушка, тетранатрия ЭДТА, имидиазолидинилмочевина, лимонная кислота.

Компания Coloplast не несет ответственности за травмы или ущерб, полученные в результате несоблюдения рекомендаций компании Coloplast по использованию данного изделия.

Способ применения

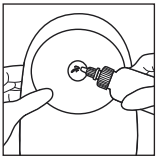

Добавьте 5–10 мл или одно саше в калоприемник и осторожно потрите его, чтобы по нему равномерно распределился нейтрализатор запаха Brava.

Скорректируйте количество нейтрализатора в зависимости от размеров вашего калоприемника.



Если вы пользуетесь дренируемым калоприемником или стомным мешком, можете также добавить нейтрализатор через выпускное отверстие.

Повторите процедуру после опорожнения мешка.

Удаление в отходы
Данное изделие следует удалять вместе с обычными бытовыми отходами или в соответствии с местными правилами.

Не смывайте изделие в унитаз.

Сообщения о проблемах
Если во время или в результате использования данного изделия произошел серьезный инцидент, сообщите об этом производителю и уведомьте соответствующий национальный орган.

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Пояснения к символам

MD	Медицинское изделие
CE	Подтверждает, что данное изделие отвечает требованиям европейского законодательства в отношении медицинских изделий
REF	Номер по каталогу
	Использовать до (ГГГГ-ММ-ДД)
LOT	Код партии
	Дата выпуска (ГГГГ-ММ-ДД)
	Производитель
	Обратитесь к инструкции по применению
UDI	Указывает на штрихкод, содержащий уникальный идентификационный номер
GTIN	(Global Trade Item Number) Глобальный номер товарной позиции
	Не допускайте воздействия солнечного света
	Упаковка подлежит переработке

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru