Инструкция по применению

**Изделия медицинские компрессионные лечебно-профилактические**

Изделия торговой марки VENOTEKS, производителем которых является немецкая компания Rehard Technologies GmbH, за долгое время своего существования на российском рынке приобрели широкую популярность среди медицинских специалистов и покупателей.

Компания предлагает широкий ассортимент компрессионного трикотажа VENOTEKS, который оптимально сочетает в себе качество, эффективность, элегантность и доступность.

Для обеспечения эффективного лечения и комфортного ношения все изделия компрессионного трикотажа изготавливаются на отдельно настроенных цифровых станках производства немецкой компании MERZ. Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485, регулирующим производство изделий медицинского назначения.

При производстве используются только самые современные материалы от Европейских производителей, такие как хлопок, микрофибра, нейлон, эластан, медицинская лайкра. На все материалы имеются сертификаты качества и экологического соответствия. Трикотаж VENOTEKS сертифицирован по системе OEKO-Tex 100, гарантирующей соответствие Европейским нормам производства трикотажа. Все изделия проходят строгий контроль качества и компрессионных параметров на специализированном оборудовании Salzmann.

Качество компрессионного трикотажа VENOTEKS подтверждено Регистрационным удостоверением, выданным Росздравнадзором. Мы уверены в надёжности нашей продукции и гарантируем сохранение компрессионных свойств трикотажа VENOTEKS в течение 6 месяцев при ежедневном применении и соответствующем уходе.

Здоровье – главная ценность. Все сотрудники компании Rehard Technologies GmbH стремятся к тому, чтобы вклад в его защиту становился весомее день ото дня. Именно это является философией бренда VENOTEKS.

Объединяя усилия с врачами, VENOTEKS делает победу над варикозом реальностью для миллионов людей.

**Механизм действия VENOTEKS**

Лечебные свойства VENOTEKS обусловлены градуированной компрессией. Компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.). Параметры компрессии заложены в сложную современную технологию производства компрессионного трикотажа VENOTEKS.

Основные механизмы действия эластической компрессии связаны с повышением тканевого давления, которое заставляет жидкость из тканей перемещаться в систему глубоких вен. Помимо этого, улучшается функция мышечно-венозной помпы, и кровь лучше дренируется. Сужение просвета глубоких вен приводит к увеличению скорости кровотока и восстановлению работы венозных клапанов. Все эти факторы способствуют снижению венозной гипертензии, устранению объективных и субъективных симптомов.

Предназначено для использования в домашних или клинических условиях пациентами с хроническими заболеваниями вен или предрасположенностью к данным заболеваниям.

***Показания к применению в зависимости от класса компрессии***

0 класс компрессии (< 18 мм рт ст.)

- Наследственная предрасположенность к заболеваниям вен
- Регулярные статические нагрузки
- Занятия спортом
- Интенсивные физические нагрузки, связанные с бегом и ходьбой
- Тяжелые физические нагрузки

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Избыточная масса тела
- Длительные перелеты и переезды
- Прием гормональных препаратов, в том числе и контрацептивов

1 класс компрессии (18-21 мм рт. ст.)

- Функциональные флебопатии (боли, распирание, чувство тяжести в ногах)
- Телеангиэктазии и ретикулярный варикоз
- Приходящие отеки ног
- Беременность, начиная с 1 триместра
- Профилактика тромбоза глубоких вен (ТГВ) и венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО)
- Профилактика лимфедемы

2 класс компрессии (23-32 мм рт. ст.)

- Отеки ног, не проходящие к утру
- Варикозная болезнь, в том числе в период беременности
- Тромбофлебит
- Тромбоз глубоких вен
- Посттромботическая болезнь
- Состояние после склеротерапии и оперативных вмешательств на венах нижних конечностей.

- Профилактика тромбоза глубоких вен (ТГВ) и венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО)
- Профилактика рецидива венозной трофической язвы
- Лимфедема

3 класс компрессии (34-46 мм рт. ст.)

- Варикозная болезнь с трофическими расстройствами
- Профилактика рецидива и лечение венозной трофической язвы
- Тромбоз глубоких вен
- Посттромботическая болезнь с трофическими расстройствами
- Лимфедема

4 класс компрессии (свыше 47 мм рт. ст.)

- Лимфедема тяжелой степени выраженности (слоновость)
- Врожденные аномалии венозной системы

**Противопоказания**

- Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (регионарное систолическое давление на a. tibialis posterior – на уровне лодыжки ниже 60 мм рт. ст.)
- Предполагаемое сдавление подкожных артериальных шунтов
- Тяжелые формы диабетической нейропатии и ангиопатии
- Сердечная недостаточность (NYHA III-IVст.)
- Индивидуальная непереносимость материалов

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**Нежелательные побочные эффекты:**

Зуд, сухость и раздражение кожи, чувство дискомфорта.

С целью профилактики данных побочных эффектов, необходим уход за кожей с использованием увлажняющих средств.

При возникновении боли и дискомфорта при ношении, необходимо обратиться к специалисту с целью коррекции класса компрессии и проверки соответствия подобранного размера изделия.

**Предостережения при использовании**

При механических повреждения изделия возможно скручивание изделия (потеря формы при носке) и как результат, нарушение кровообращения в результате передавливания области под образовавшимся участками скрученного изделия.

Изделие нельзя подвергать кипячению, воздействию химических растворителей и использовать вблизи открытых источников огня.

Запрещено обрезание технологических нитей внутри изделия.

При надевании изделия необходимо удалять с рук все предметы, которые могут повредить изделие (кольца, браслеты).

При надевании чулок запрещено тянуть за резинку во избежание её отрыва от изделия.

**Рекомендации по подбору размера изделия**

Подбор размера изделия осуществляться методом замера по точкам (сантиметровой лентой) на конечностях пациента либо методом замера роста, веса пациента и длины его стопы.

***Подбор размера изделий методом замера конечностей по точкам.***

**Таблица 1А.**
**Соотношение измерений и размеров изделий**

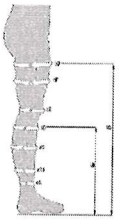
| Класс компрессии | Заметка | Артикул | Размеры | Схема проведения замеров |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Плотные изделия | 1P1(00-99), 2P1(00-99), 3P1(00-99), 4P1(00-99), 1P2(00-99), 2P2(00-99), 3P2(00-99), 4P2(00-99), 1P3(00-99), 2P3(00-99), 3P3(0099), 4P3(00-99), 1P4(00-99), 2P4(00-99), 2W7(00-10), 2W7(11-99). | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |

**Таблица 1Б.**
**Соотношение измерений окружности и размеров изделий.**

| | | Измерения окружности (см) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Размер** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Точки замера** | **cB** | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| | cB1 | 23-27 | 24-29 | 26-32 | 29-35 | 31-37 | 33-39 | 35-41 |
| | cC | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-45 | 39-47 | 41-49 |
| | cD | 27-33 | 29-36 | 32-39 | 34-42 | 36-44 | 38-46 | 40-48 |
| | cE | 32-38 | 34-41 | 37-44 | 39-47 | 41-49 | 43-51 | 45-53 |
| | cF | 37-47 | 40-52 | 43-56 | 46-60 | 50-65 | 53-68 | 56-71 |
| | cG | 43-57 | 46-62 | 49-67 | 52-72 | 56-76 | 60-79 | 64-82 |

**Таблица 1С.**
**Соотношение измерений длины и размеров изделий**

| Длина | lD | lG | lG |
|---|---|---|---|

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Стандартная** | 38-43 | 71-82 | 71-82 |
| **Укороченная** | 33-37 | 62-70 | 62-70 |

**Таблица 2А.**
**Соотношение измерений длины и размеров изделий**

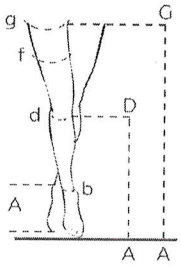
| Класс компрессии | Заметка | Артикул | Размеры | Схема проведения замеров |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Повседневные изделия | 1C1(00-49), 1C1(60-99) 2C1(00-99), 3C1(00-99), 1C2(00-99), 2C2(00-99), 3C2(00-99), 1C3(00-99), 2C3(00-99), 3C3(00-99), 1C4(00-99), 2C4(00-99 | S M L XL XXL XXXL |   |

**Таблица 2Б.**
**Соотношение измерений и размеров изделий.**

| | Размер | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Измерения окружностей (см)** | | | | | |
| **Точки замера** | b | 19-20 | 20-22 | 22-25 | 25-27 | 27-31 |
| | d | 28-35 | 30-38 | 33-41 | 35-44 | 37-47 |
| | f | 39-53 | 41-56 | 45-60 | 46-62 | 47-64 |
| | g | 46-67 | 49-71 | 52-74 | 56-79 | 58-84 |
| | g для чулок | 46-56 | 49-60 | 56-67 | 62-74 | 65-78 |
| | **Измерения длины (см)** | | | | | |
| | A-D для гольфов | до 38 | до 40 | до 44 | до 48 | до 48 |
| | A-G | 62-71 | | | | |
| | A-G для удлинённых колготок и чулков | 72-83 | | | | |
| | A | 23-25 | 24-26 | 24,5-26,5 | 24,5-27 | 25-28 |

**Таблица 3А.**
**Соотношение измерений длины и размеров изделий**

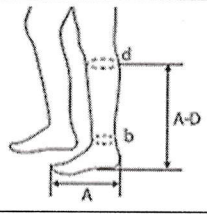
| Класс компрессии | Заметка | Артикул | Размеры | Схема проведения замеров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1C1(50-59) 2C1(50-59) | S M L XL |   |

**Таблица 3Б-1.**
**Соотношение измерений и размеров изделий.**

| | Размеры | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Измерения окружностей (см)** | | | | |
| **То чк** | A-D | до 36 | до 39 | до 43 | до 46 |

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | b | 17-19 | 19-22 | 22-25 | 26-30 |
| | d | 26-35 | 30-39 | 34-43 | 37-46 |
| | **Размер обуви** | | | | |
| | A | 36-38 | 39-41 | 41-43 | 44-46 |

**Таблица 3Б-2.**
**Соотношение измерений и размеров для арт. 1С156**

| | **Размеры** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Измерения окружностей (см)** | | | | |
| **Точки замера** | b | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 |
| | d | 31-37 | 34-40 | 37-43 | 40-46 |
| | **Размер обуви** | | | | |
| | A | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 |

**Таблица 4А**
**Соотношение измерений и размеров изделий**

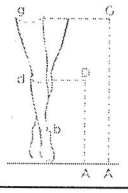
| **Класс компрессии** | **Заметка** | **Артикул** | **Размеры** | **Схема проведения замеров** |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Антиэмболические изделия | 1A1(00-99), 2A1(00-99), 3A1(0099), 1A2(00-99), 2A2(00-99), 3A2(00-99) | S<br>M<br>L<br>XL |  |

**Таблица 4Б.**
**Соотношение измерений и размеров изделий**

| | **Размер** | **S** | **M** | **L** | **XL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Измерения окружностей (см)** | | | | |
| **Точки замера** | b | 18-22 | 22-26 | 26-29 | 29-32 |
| | d | 29-35 | 34-40 | 39-45 | 44-51 |
| | g | 43-54 | 48-60 | 54-66 | 60-72 |
| | g | 45-60 | 53-68 | 61-76 | 69-84 |
| | **Измерения длины (см)** | | | | |
| | A-D* | 38-43 | | | |
| | A-G* | 70-80 | | | |

**** В случае, если показатели A-D, A-G выходят за пределы данных, указанных в Таблице 8, то изделие не подходит пациенту и не должно им использоваться.***

**Таблица 5А.**
**Соотношение измерений и размеров изделий**

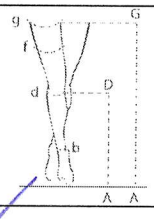
| **Класс компрессии** | **Заметка** | **Артикул** | **Размеры** | **Схема проведения замеров** |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Госпитальные изделия | 1R1(00-99), 2R1(00-99), 1R2(00-99), 2R2(00-99), 1R3(00-99), 2R3(00-99) | S<br>M<br>L<br>XL<br>XXL<br>XXXL |  |

**Таблица 5Б.**
**Соотношение измерений и размеров изделий**

| **Размер** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
|---|---|---|---|---|---|---|

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точки замера | Измерения окружностей (см) | | | | | | |
| | b | 18-20 | 20-23 | 23-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| | d | 25-34 | 28-36 | 31-39 | 33-41 | 36-46 | 40-48 |
| | f | 37-49 | 41-53 | 45-57 | 49-60 | 53-65 | 59-70 |
| | g | 40-54 | 44-58 | 48-62 | 52-65 | 56-70 | 62-75 |
| | g | 44-58 | 52-66 | 56-70 | 60-74 | 66-78 | 68-86 |
| | Измерения длины (см) | | | | | | |
| | A-G | до 70 | до 75 | до 80 | до 80 | до 85 | до 85 |

**Таблица 6**
**Соотношение измерений и размеров изделий**

| | | Измерения окружностей (см) | | |
|---|---|---|---|---|
| | Размер | S | M | L |
| Места замера | B | 33-39 | 35,5-41,5 | 38-44 |
| | C | 21,5-26,5 | 23,5-28,5 | 25,5-30,5 |
| | D | 23-25 | 25,5-27,5 | 26,5-30,5 |

**Таблица 7А.**
**Соотношение измерений и размеров изделий**


| Размер перчатки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Измерения ладони (см) | | | | | | | |
| cC | 12-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
| cB | 15,5-19 | 17-20 | 18,5-22 | 20,5-24 | 22,5-26 | 24,5-28 | 26,5-30 |
| cA | 15-18 | 16,5-19 | 18-21 | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 |
| lAB | | | | 3-5 см | | | |
| lAC | | | | 9-12 см | | | |

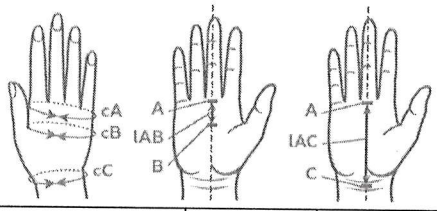


cA – окружность ладони у основания среднего пальца;
cB – окружность ладони у основания большого пальца;
cC – окружность запястья;
lAB – расстояние от основания среднего пальца до середины ладони;
lAC – расстояние от основания среднего пальца до запястья.

**Таблица 7Б.**
**Соотношение измерений и размеров изделий**

| Размер перчатки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Измерения пальцев (см) | | | | | | | | |
| Большой палец | lZ | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
| | lX | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
| | XZ | 3,5-4,5 | | | | | | |

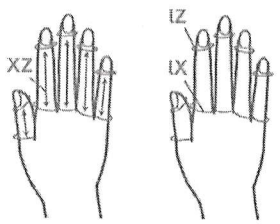


XZ – расстояние между уровнями X и Z;
lX – окружность пальца у основания;
lZ – окружность пальца на уровне Z.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Указательный палец** | **lZ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
| | **lX** | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
| | **XZ** | 4,5-5,5 | | | | | | |
| **Средний палец** | **lZ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
| | **lX** | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
| | **XZ** | 5,5-6,5 | | | | | | |
| **Безымянный палец** | **lZ** | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 |
| | **lX** | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
| | **XZ** | 4,5-5,5 | | | | | | |
| **Мизинец** | **lX** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
| | **lZ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
| | **XZ** | 3,5-4,5 | | | | | | |

**Таблица 8А.**
**Соотношение измерений и размеров изделий**

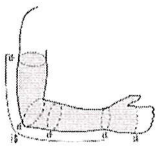
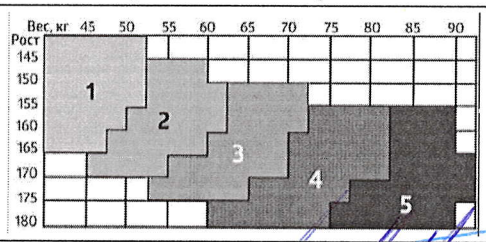
| Класс компрессии | Заметка | Артикул | Размеры | Схема проведения замеров |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Рукав | 1L5(00-99)<br>2L5(00-99) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. |  |

**Таблица 8Б.**
**Соотношение измерений и размеров изделий.**

| | | Измерения окружностей (см) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Размер** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Места замеров** | cA | 15-18 | 16,5-19 | 18-21 | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 |
| | cC | 12-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
| | cD | 16-21 | 20-24 | 23-27 | 26-30 | 28-33 | 31-36 | 34-39 |
| | cE | 17-22 | 20-26 | 23-29 | 26-32 | 29-35 | 32-38 | 35-41 |
| | cG | 19-25 | 22-29 | 25-32 | 29-36 | 33-40 | 37-44 | 41-48 |
| | lG | до 44 см – укороченная длина, более 44 см – стандартная длина | | | | | | |

***Подбор размера изделий методом замера роста и веса пациента.***

| Класс компрессии | Заметка | Артикул | Размеры | Схема проведения замеров* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Изделия повседневные | 0C1(00-99)<br>0C2(00-99)<br>0C3(00-99)<br>0C4(00-99) | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |  |

* С целью определения размера осуществляются замеры роста и веса пациента.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**Рекомендации по надеванию компрессионного трикотажа**

- Старайтесь надевать компрессионные изделия VENOTEKS утром сразу после пробуждения и гигиенических процедур, до появления отёков на ногах.
- Перед первым применением изделие рекомендуется постирать
- надевать изделие в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.
- При надевании и снятии чулок не тяните за ажурную резинку во избежание отрыва резинки от чулка.
- Прежде, чем надевать или снимать изделие, удалите с рук все украшения.
- Рекомендуется снимать изделие в резиновых перчатках.

**Рекомендации по надеванию компрессионных изделий с закрытым носком**

***Схема надевания изделий с закрытым мысом***

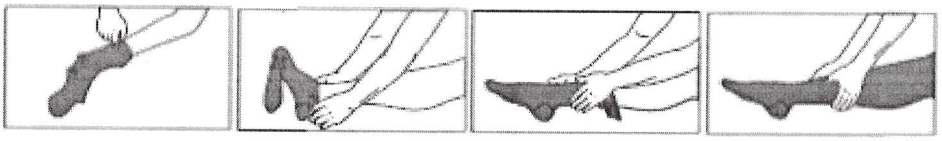


- Выверните изделие наизнанку до пятки.
- Осторожно натяните изделие на ступню и обратите внимание на правильность расположения пяточной части
- Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге.
- Окончательно разгладьте мелкие морщинки по всей длине изделия.
- Убедитесь, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания
- Если Вы надеваете колготки, натягивайте их далее на бёдра.

Прежде, чем снимать изделие, удалите с рук все украшения. Рекомендуется снимать изделие в резиновых перчатках. Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе. Аккуратно снимите пятку и далее всё изделие.

**Рекомендации по надеванию компрессионных изделий с открытым носком**

***Схема надевания изделий с открытым мысом***

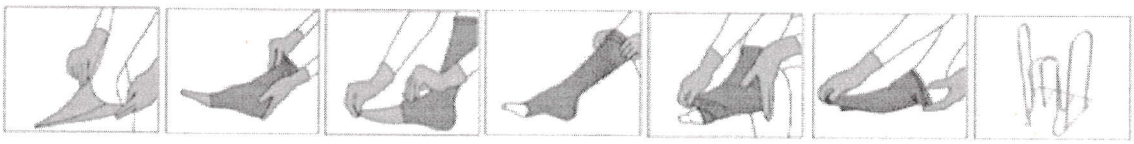

- Наденьте на ступню специальный носочек «глайдер», улучшающий скольжение трикотажа. Соберите в гармошку верхнюю часть изделия и надевайте его поверх специального носочка.
- Равномерно, не перекручивая, расправляйте изделие по ноге. Обратите внимание на правильность расположения пяточной части.
- Удалите специальный носочек, вытянув его вперед.
- Расправьте изделие на тыльной и подошвенной сторонах стопы так, чтобы оно достигало основания пальцев.
- Убедитесь, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания.
- Если Вы чрезмерно растянули изделие вверх, то опустите его вниз до уровня лодыжек и затем снова расправьте, не растягивая так сильно.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


*Для надевания трикотажа с закрытым или открытым мысом Вы можете использовать специальное приспособление для облегчения надевания компрессионного трикотажа VENOTEKS HELPER (приспособление в комплект не входит).*

• Снимайте изделие в резиновых перчатках.

***!Комплекте поставки содержит «глайдер» для следующих вариантов исполнения: 1С376, 2С3(00-85), 2С386, 2С3(87-99), 2R3(00-04), 2Р3(00-04), 3С3(00-04), 3Р3(00-04), 4Р3(00-04), 2С1(00-29), 2А1(00-29), 3С1(00-29), 3А1(00-29), 1Р1(00-09), 2Р1 (00-29), 3Р1(00-29), 4Р1(00-29), 1Р2(00-09), 1А2(00-29), 2С2(00-29), 2R2(00-29), 2Р2(00-29), 2А2(00-29), 3С2(00-29), 3Р2(00-29), 3А2(00-29), 4Р2(00-29).***

***Схема надевания рукава***

Для облегчения надевания изделия рекомендуется припудрить руку тальком или детской присыпкой. Для правильного распределения давления рукав должен быть равномерно распределен по всей длине руки. Следует обязательно расправить складки, чтобы избежать трения и раздражения кожи. Запрещается закатывать края изделия валиком, так как это может вызвать эффект «эластичного жгута» и привести к застою лимфы и венозной крови ниже перетяжки. Правильно подобранное по размеру изделие плотно прилегает к телу, но не нарушает кровообращение в кисти и не вызывает болезненных ощущений. Рукав, свободно надетый на руку, не обеспечивает лечебного эффекта.

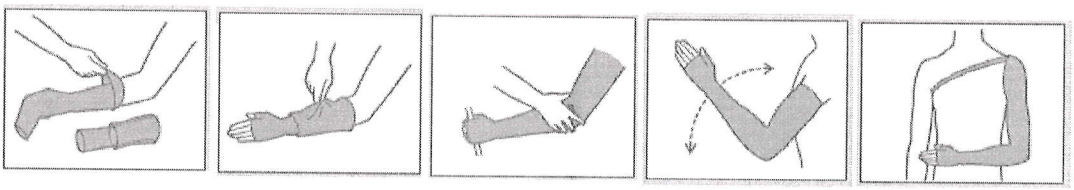

• Выверните половину рукава наизнанку.

• Наденьте рукав на запястье и предплечье.

• Держитесь кистью за опору (дверная ручка и т.п.), расслабьте мышцы руки и другой рукой натягивайте постепенно рукав до подмышки.

• Убедитесь в том, что рукав плотно, равномерно сидит на руке и не стесняет ее сгибание в локте. Следите за тем, чтобы у подмышки рукав не сворачивался валиком.

• Застегните ленту рукава, если она предусмотрена в изделии.

***Рекомендации по надеванию комплекта гольфов***

Комплект состоит из двух нижних гольфов белого цвета (лайнеров) и верхнего гольфа с открытым мысом бежевого цвета. Нижний гольф-лайнер надевают на ногу поверх раневой повязки. Лайнер надежно фиксирует раневое покрытие и защищает поврежденную область ноги. Наличие в комплекте двух лайнеров позволяет ежедневно менять нижний гольф. Непрерывное ношение лайнера обеспечивает умеренную компрессию в течение 24 часов.

Поверх лайнера надевают верхний гольф, который носят в течение дня во время двигательной активности. При надевании верхнего гольфа следите за тем, чтобы края резинок верхнего гольфа и лайнера максимально совпадали.

Для надевания гольф-лайнер необходимо руководствоваться схемой надевания изделий с закрытым мысом. Для надевания верхнего гольфа необходимо руководствоваться схемой надевания изделий с открытым мысом.

**Рекомендации по уходу за компрессионным трикотажем**

• Изделие нужно ежедневно стирать вручную.

• Температура воды не должна превышать 30 °С.

• В качестве моющих средств нужно выбирать средства для стирки деликатных тканей или жидкие слабощелочные шампуни.

• Не используйте стиральные порошки и кондиционеры.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

• После ручной стирки изделие нужно тщательно прополоскать в тёплой воде.

• Не выкручивайте изделие, заверните в полотенце и слегка отожмите его.

• Сушите изделие при комнатной температуре.

***В зависимости от применения и состава изделия возможны различные рекомендации по уходу. Обращайте внимание на информацию, приведенную на вшивном ярлыке изделия.***

**Комплектность**

Компрессионное изделие, инструкция.

**Гарантийный срок**

6 месяцев со дня продажи на сохранение компрессионных свойств при соблюдении инструкции.

***Гарантийными случаями не являются***

• Механические повреждения (включая случайные).

• Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.

• Дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием.

• Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**Обратите внимание!**

**• Если у вас чувствительная кожа, один раз в день протирайте силиконовую резинку с внутренней стороны влажной салфеткой.**

**• Компрессионные изделия VENOTEKS нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, гладить и сушить на батареях, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца.**

**• Недопустимо использование химических растворителей и пятновыводителей, которые повреждают изделие.**

**• Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.**

**Обязанность извещения**

О каждом серьезном инциденте, произошедшем при использовании данного медицинского изделия, следует незамедлительно извещать производителя или уполномоченного представителя производителя.

**Утилизация**

Медицинское изделие и упаковочные материалы относятся к Классу А по классификации опасности (согласно СанПиН 2.1.3684-21).

Согласно указанному классу опасности медицинских отходов использованные материалы утилизируются с твердыми коммунальными отходами.

***Производитель***

Rehard Technologies GmbH («Рехард Технолоджис ГмбХ»)

Potsdamer Str. 92, 10785 Berlin, Germany (Потсдамер штрассе, 92, 10785, Берлин, Германия)

***Представительство в России и уполномоченный представитель***

ООО «НИКАМЕД», 127015, г. Москва, Россия, Бумажный проезд, 14, стр. 2

Тел.: 8(800)3333112, e-mail: skk@nikamed.ru

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru