VENTADOUR
Pascale

Signature numérique de
VENTADOUR Pascale
Date : 2021.07.28 09:31:31 +02'00'

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	NOTI-VEDALAB-BBTEST-210x297-B DU 01/02/2016		
	Notice BB TEST **10 UI - CEI** **Russe-Ouzbek**	**CODE** 534202-04-21 **VERSION** 1	**Ancien code Article :** 533170-10-18
Intervenant studio : Stéphanie Bouquet	Format : 210 x 297 mm Format plié : 105 x 50 mm Fiche de pliage : NA Grammage : 60g/m2	EHD1 **DATE :** 26/07/2021	**Nature de la Modification :** Remplacer la langue ouzbek en alphabet cyril-lique par l'alphabet latin
Gestionnaire BAT Chouzy : Odile Bouchère Tel : 02 54 51 22 23	COULEURS Cyan Jaune Zone de texte Magenta Noir découpe		**Ref. VEDALAB :** HCG-STRI602903 **Code Laetus :** NA
			Taille mini Police utilisée : 7 points

БЕ ТЕСТ®

Тест для самостоятельного определения беременности (стрип-тест)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При наступлении беременности в женском организме вырабатывается особый гормон — хорионический гонадотропин человека (ХГЧ).
Его продукция начинается спустя некоторое время после оплодотворения яйцеклетки и возрастает в первые три месяца. Присутствие ХГЧ в моче позволяет крайне быстро провести диагностирование беременности. Количественный экспресс-тест для определения беременности ББ Тест работает по принципу «сэндвича» и позволяет в короткие сроки определить наличие ХГЧ в моче. Тест для определения беременности ББ Тест представляет собой тест-полоску, пропитанную реагентом из уникальной комбинации поликлональных и моноклональных антител, приготовленной на белковой матрице с применением азида натрия (NaN_3 <0,1%).
Помещенный в емкость с мочой тест впитывает жидкость и показывает результат в виде цветной полоски посередине. Окрашивание полоски означает, что тест был проведен правильно. В том случае если уровень ХГЧ в моче превышает значение 10 мМЕ/мл, появляется вторая цветная полоска.
Ее окрашивание означает положительный результат. Благодаря своей высокой чувствительности тест позволяет крайне быстро установить наступление беременности уже с первого дня задержки менструации.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ


Каждый комплект ББ Тест состоит из одной тест-полоски, упакованной в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с влагопоглотителем. Не используйте пакетик с влагопоглотителем. Откройте защитную упаковку непосредственно перед использованием теста.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Тест для определения беременности предназначен исключительно для самостоятельной диагностики in vitro. Только для наружного использования. НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ тест-полоску и пакетик с влагопоглотителем.
2. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, прежде чем использовать тест.
3. Если вы проводите тест в день предполагаемого наступления менструации либо сразу после него, следует использовать утреннюю мочу (сразу после пробуждения), так как в ней содержится наиболее высокая концентрация ХГЧ. Если задержка с дня предполагаемого наступления менструации составляет более недели, тогда необязательно собирать утреннюю мочу, так как содержание ХГЧ в моче к тому времени повышено в любое время суток.
4. При повышенной мутности мочи и в случае наличия осадков или признаков бактериального заражения рекомендуется произвести повторный сбор мочи.
5. Хранить при температуре от +4 °C до +30 °C. Не замораживать. Если тест-полоска хранилась при температуре +4 °C, согрейте ее до комнатной температуры в течение 5 минут до проведения теста.
6. Не используйте тест-полоску после даты истечения срока годности, указанной на этикетке, и в случае повреждения защитной упаковки или самого теста.
7. Не используйте ББ Тест повторно.
8. Хранить в недоступном для детей месте.
9. Вскрывайте защитную упаковку с осторожностью.
10. Не мочите тест-полоску перед использованием и не прикасайтесь к ней влажными руками.
11. Не прикасайтесь к реактивной зоне тест-полоски.
12. Подождите 5 минут до интерпретации результатов.
13. После использования следует выбросить все компоненты теста в мусорную корзину.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА

1. Соберите небольшое количество мочи в чистую сухую емкость (не входит в комплект) без остатков моющего средства. Объем мочи должен составлять примерно 1/2 от высоты емкости.
2. Вскройте защитную упаковку в месте надреза и извлеките только тест-полоску. Выбросите пакетик с влагопоглотителем.
3. Вертикально поместите тест в мочу на 5-10 секунд, как показано напротив (Рис.1).

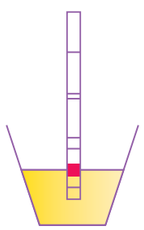

ВНИМАНИЕ! УРОВЕНЬ МОЧИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ОБЛАСТИ МАРКИРОВКИ на тест-полоске.

4. Подождите 5 минут и прочтите результаты. Не учитывайте результат после 10 минут. На ранних сроках предполагаемой беременности рекомендуется подождать 10 минут до интерпретации результатов.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Посредине стрип-теста должна появиться одна цветная полоска, свидетельствующая о правильном проведении теста.
Возможное появление второй цветной полоски (ниже первой) означает результат теста. Разница в цвете или интенсивности окрашивания двух полосок не имеет какого-либо значения, так как появление второй полоски в любом случае означает положительный результат.

1. Отрицательный результат



Отсутствие второй цветной полоски означает, что тест не выявил в организме необходимого для наступления беременности гормона ХГЧ. Проведите повторный тест через 5 дней, если менструация не наступила. Если отрицательный результат повторится, проконсультируйтесь с врачом.

2. Положительный результат



Наличие второй цветной полоски (ниже контрольной первой) означает, что тест определил наступление беременности. В таком случае вам следует обратиться к врачу-гинекологу.

3. Недействительный результат



В случае отсутствия цветной полоски в контрольной зоне или появления цветной полоски в тестовой зоне при ее отсутствии в контрольной зоне, тест недействителен. Возможно, инструкция не была правильно наблюдена или тест был поврежден. Повторите, воспользовавшись другим стрип-тестом, или обратитесь к врачу.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

По какому принципу работает стрип-тест для определения беременности ББ Тест?
После наступления беременности в женском организме начинает вырабатываться хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Этот гормон, уровень которого постоянно возрастает первое время, присутствует в моче. Принцип действия теста для определения беременности ББ Теста основывается на его выявлении.

Когда можно использовать этот тест?
Тест можно проводить уже с первого дня задержки менструации.

Когда лучше всего проводить тест?
Тест можно проводить в любое время дня. Тем не менее, поскольку в утренней моче содержится наиболее высокая концентрация ХГЧ, она позволит получить более достоверные результаты.

Может ли повлиять количество выпитой жидкости на результат?
Употребление внутрь большого количества жидкости может привести к разведению мочи и дать ложный результат; по этой причине рекомендуется пить жидкости в умеренном количестве.

Может ли получиться ложный результат?
Точность результатов гарантирована при условии неукоснительного соблюдения инструкций по применению теста. Ложный результат может проявиться в том случае, если стрип-тест ББ Тест был намочен перед использованием. Тест ББ Тест характеризуется повышенной точностью, которая была продемонстрирована в ряде строгих контрольных испытаний качества. Тем не менее, в исключительных случаях он может дать искаженный результат (ложноотрицательный при наступившей беременности или ложноположительный при ее отсутствии). В случае получения непредвиденных или противоречащих результатов рекомендуется обратиться к гинекологу, так как в их основе могут лежать некоторые заболевания.
Кроме того, ложноположительный результат может быть обусловлен приемом некоторых ХГЧ-содержащих или стимулирующих образование ХГЧ препаратов (таких как Прегнил, Профази, Пергонал). Прием алкоголя, анальгезирующих средств, антибиотиков, контрацептивных препаратов, гормональных препаратов, содержащих цитрат кломифена (таких как Кломид, Серофен) и успокоительных средств не влияет на результаты.
Тест может дать ложноположительный результат в случае, если за 8 недель, предшествующих проведению теста, имели место выкидыш, аборт или роды. Такая вероятность объясняется тем, что тест может выявить ХГЧ, присутствующий в организме еще с предыдущей беременности.

Я оставила стрип-тест в емкости с мочой более чем на 10 секунд. Будет ли результат точным?
Да. Несколько дополнительных секунд не повлияют на результат.

Я оставила стрип-тест в емкости с мочой менее чем на 5 секунд.Будет ли результат точным?
Нет, так как концентрации гормона в собранной моче может быть недостаточно.

Как следует читать результаты теста?
Появление цветной полоски в контрольной зоне означает, что диагностика была проведена правильно. В случае ее отсутствия необходимо повторить процедуру, воспользовавшись новым стрип-тестом ББ Тестом.

Как следует интерпретировать результаты теста?
Если вы беременны, в течение 5 минут должны появиться две цветные полоски. Тем не менее, если уровень гормона в моче слишком низок, вторая полоска может проявиться чуть позже. Из этих соображений рекомендуется подождать еще несколько минут до окончательного отрицательного результата, чтобы подтвердить отсутствие гормона в моче и исключить беременность.
НЕ СЧИТЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПО ПРОШЕСТВИИ 10 МИНУТ с момента контакта теста с мочой.

На тесте появилось две полоски, но их цвет отличается от приведенного на изображении в инструкциях или они различаются по интенсивности окрашивания. Как это расценивать?
Разница в цвете или интенсивность окраски не имеют какого-либо значения. Если результат теста положительный, в тестовой зоне должна появиться вторая полоска. Она может не совпадать по цвету с полоской на изображении или в контрольной зоне. Это объясняется тем, что уровень ХГЧ во время беременности постепенно возрастает, влияя тем самым на цвет или интенсивность окрашивания полоски.

Может ли прием определенных препаратов повлиять на результат?
Прием препаратов для лечения бесплодия, содержащих ХГЧ или менопаузный гонадотропин человека (МГЧ), может привести к сомнительному результату. Как правило, это инъекционные препараты, в связи с чем проведение теста в ближайшие после введения сроки может дать ложноположительный результат. Прием иных препаратов от бесплодия, анальгезирующих средств и оральных контрацептивных средств не влияют на результат. Тем не менее, прекращение приема оральных контрацептивов или проведение лечения от бесплодия незадолго до проведения теста может повлечь за собой сбой в цикле и, как следствие, обусловить преждевременное проведение диагностики.

Как оценивается достоверность результатов теста ББ Теста?
Эффективность теста в клинических исследованиях *in vitro* превышала 99%.

В течение какого отрезка времени результат оценивается как надежный?
При отрицательном результате в тестовой зоне спустя 10 минут может появиться бледно окрашенная полоска. Ее появление НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ положительный результат. Учтите, что НЕ СЛЕДУЕТ СЧИТЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ по прошествии 10 минут с момента контакта теста с мочой.

Что делать, если результат отрицательный?
Если тест показывает отрицательный результат, это означает, что ХГЧ в моче отсутствует, потому что вы не беременны. Если менструация не наступила через неделю, повторите диагностику с использованием нового стрип-теста ББ Теста. В случае повторного отрицательного результата обратитесь к гинекологу. Задержка менструации может быть обусловлена рядом факторов.

Что делать, если результат положительный?
Если результат теста положительный, посетите гинеколога. Диагностика беременности на ранних сроках важна для здоровья женщины и ребенка.

Изготовитель: VEDALAB
Адрес: Rue de l'Expansion - ZAT du Londeau - Cerisé
BP 181 - 61006 ALENCON Cedex, France (Франция)
3039B-10-CEI

CE 0483

	Ознакомиться с инструкциями	IVD	Медицинское изде-лие для диагностики *in vitro*		Не использовать повторно
+4°C +30°C	Хранить при темпе-ратуре от +4 °C до +30 °C	LOT	Номер партии		Срок хранения
	Производитель		Дата изготовления		Дата пересмотра: 12/2018

RECTO

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

BB test BB test BB test


Homiladorlikni mustaqil ravishda aniqlash uchun test (strip-test)

UMUMIY MA'LUMOTLAR
Ayol organizmida homiladorlik paydo bo'lishi bilan organizm o'ziga xos gormon ishlab chiqarishni boshlaydi — odam xorionik gonadotropini (XG).
Tuxum urug'langandan so'ng, mahsulot bir qancha vaqt davomida ishlab chiqishni boshlaydi va birinchi uch oylikda ko'payib boradi. Siydikda XGning bo'lishi homiladorlikni tezroq aniqlashga yordam beradi.
Homiladorlikni aniqlash uchun, miqdoriy Ekspress-test BB test "sendvich" printsipida ishlaydi va qisqa vaqt mobaynida XG miqdorini aniqlaydi. Homiladorlikni aniqlash uchun test BB test: yuqori unumlashgan poliklonal va monoklonal antitelali shimdirilgan reagent, azid natiriy (NaN3 <0,1%) bilan birgalikda oqsil asosida tayyorlangan test tasmasi.
Siydik solingan idishdan test o'ziga suyuqlikni shimadi va natijani test o'rtasida rangli chiziq ko'rinishida ko'rsatadi. Testni rangli chiziqni ko'rsatishi testni to'g'ri o'tkazilganini bildiradi.
Agarda siydikda XG miqdori 10 XB/ml dan ko'p bo'lsa, ikkinchi rangli chiziq paydo bo'ladi.
Rangli chiziqning paydo bo'lishi ijobiy natijani beradi. Test yuqori sezuvchanlik ta'sirga ega bo'lganligi uchun ham homiladorlikning boshlangich davrida, ya'ni hayzning kechikishi bilan homiladorlik paydo bo'lganligini bilish mumkin.

QADOQ TARKIBI
Har bir BB test komplekti nam o'tkazmaydigan alyuminiy vakuum qadoqda alohida, bir dona testdan tashkil topgan. Nam tortuvchi to'plam bilan birga qo'llamang.
Qo'llashdan oldin, albatta, himoya qobig'ini oching.

MAXSUS KO'RSATMALAR
1. Homiladorlikni aniqlovchi test faqatgina mustaqil ravishda homiladorlikni aniqlash uchun in vitro. Faqat tashqi qo'llash uchun. Test va nam singdiruchi to'plamni ichkariga qo'llamang.
2. Qo'llashdan oldin, yo'riqnoma bilan diqqat bilan tanishib chiqing.
3. Agarda siz test o'tkazsangiz, mo'ljallangan hayz kuni yoki undan so'ng ertalabki siydikda (tungi uyqudan uyg'ongandan so'ng) qo'llang, chunki uning tarkibida yuqori XG kontsetrasiyasi tarkib topadi. Agarda hayz kechikish holati bir haftadan ko'p bo'lsa, tonggi siydikni kutish shart emas, chunki XG miqdori kunning barcha vaqtida yuqori bo'ladi.
4. Siydikning xiraligi yoki cho'kindilarning mavjudligi va bakterial zararlanish holatlari bo'lsa, takroriy siydik olish tavsiya etiladi.
5. +4°C dan +30°C gacha bo'lgan haroratda saqlansin. Muzlatilmasin. Agarda test tasmasi +4 °C haroratda saqlangan bo'lsa, qo'llashdan oldin 5 minut davomida xona haroratida isiting.
6. Test o'ramida ko'rsatilgan yaroqlilik muddati tugaganidan keyin, shuningdek, folga shaxsiy o'ram shikastlangan holda ishlatilmasin.
7. BB testni takroran qo'llamang.
8. Bolalar ololmaydigan joyda saqlang.
9. Himoya qobig'ini ehtiyotkorlik bilan oching.
10. Test tasmasini qo'llashdan oldin, namlamang va nam qo'llar bilan ushlamang.
11. Testni reaktiv joyiga teginmang.
12. Natija ko'rinishidan oldin, 5 minut davomida kuting.
13. Qo'llashdan oldin, test tasmasidan boshqa qo'shimcha komponentlarni axlatga tashlash lozim.

TESTNI QO'LLASH
1. Ko'p bo'lmagan miqdordagi siydikni quruq, toza va yuvish vositalari qoldiqlari bo'lmagan idishga (komplekt tarkibiga kirmagan) yig'ing.
Siydik miqdori taxminan idishda ½ balandlikda bo'lishi lozim.
2. Qobiqda ko'rsatilgan kesish joyini qirqing va faqat test tasmasini oling. Nam singdiruvchi to'plamni tashlab yuboring.
3. Testni vertikal holatda siydikka rasmda ko'rsatilgan tarzda 5-10 sekund botiring (1- rasm).

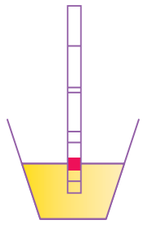

Diqqat! SIYDIK MIQDORI TEST TASMASIDA BELGILANGAN BO'LIMDAN YUQORI BO'LISHI MUMKIN EMAS.

4. 5 minut kuting va natijani o'qing. 10 minutdan keyingi natijani qabul qilmang. Ehtimoliy erta homiladorlik holatidagina natijani to'g'ri talqin qilish uchun 10 minut davomida kutish tavsiya qilinadi.

NATIJANI TALQIN QILISH
Strip test o'rtasida testni to'g'ri o'tkazganligidan dalolat beruvchi bir rangli chiziq paydo bo'lishi lozim.
Ikkinchi rangli chiziqning paydo bo'lishi (birinchisining pastki qismida) test natijasini ko'rsatadi. Ikki chiziq orasidagi ranglarning farqi yoki bo'yalish quyuqligi hech qanday ahamiyatga ega emas, ikkinchi chiziqning paydo bo'lishi barcha holatda natija ijobiyligini ko'rsatadi.

1. Salbiy natija



Ikkinchi rangli chiziqning namoyon bo'lmasligi homiladorlik bo'lishi uchun XG gormoni miqdori yetarli emasligini ko'rsatadi. Agarda hayz kelmasa, yana 5 kundan so'ng, qayta test o'tkazing. Yana salbiy natija bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashing.

2. Ijobiy natija



Ikkinchi rangli chiziqning (nazorat chiziqning pastki qismida) namoyon bo'lishi homiladorlik paydo bo'lganidan darak beradi. Ushbu holatda ginekolog shifokorga murojaat etish tavsiya qilinadi.

3. Yaroqsiz natija



Nazorat qismida rangli chiziqning mavjud emasligi yoki test qismida rangli chiziq paydo bo'lishi, shu bilan birga, nazorat qismida chiziqning namoyon bo'lmasligi testning yaroqsizligini bildiradi. Test noto'g'ri ishlatilgan yoki test yaroqsiz bo'lishi mumkin. Boshqa strip test orqali testni takroran o'tkazing yoki shifokorga murojaat qiling.

SAVOL VA JAVOBLAR

BB test homiladorlikni aniqlash uchun qaysi strip test yo'nalishi bo'yicha ishlaydi?
Ayol organizmida homiladorlik paydo bo'lgandan so'ng XG gormoni ishlab chiqarishni boshlaydi.
Bu gormon boshlang'ich kunlarda miqdori siydik tarkibida o'sib boradi. BB testni ishlash printsipi testni homiladorlikni aniqlashi uning namoyon bo'lishiga asoslanadi.

Qachon testni qo'llash mumkin?
Test o'tkazish hayz kechikishini birinchi kuniyoq o'tkazish mumkin.

Testni qachon o'tkazgan ma'qul?
Testni kuning barcha qismida o'tkazish mumkin. Shunga qaramay tonggi siydikda XG yuqori kontsentrat miqdori tashkil topadi, va u ishonchliroq natijalarni ko'rsatadi.

Ichilgan suyuqlik miqdori natijaga ta'sir ko'rsatadimi?
Ko'p miqdorda suyuqlik ichish siydikni ko'payishiga va aralshuviga ta'sir etishi mumkin va yolg'on natija berishi mumkin; shu munosabat bilan o'rtacha miqdorda suyuqlik ichish lozim.

Yolg'on natija bo'lishi mumkinmi?
Natijani aniqligi yo'riqnomaga muvofiq ravishda testni qo'llanilishiga bog'liq. Agarda strip test BB test qo'llashdan oldin namlangan bo'lsa yolg'on natija beradi. BB test bir qator yuqori sifat tekshiruv tadqiqotlarida namoyish etilgan va yuqori aniqligi tavsiflanadi. Shunga qaramay, juda kam holatda yolg'on natija ko'rsatishi mumkin. (homiladorlik holatida yolg'on salbiy natija yoki homiladorlik bo'lmagan holatda yolg'on ijobiy natija). Bunday noma'lum va natijasiz holatda ginekologga murojat qilish tavsiya etiladi, chunki bu holatlar asosida ba'zi kasalliklar mavjud bo'lishi mumkin.
Bundan tashqari, ba'zi tarkibida XG bor va XG miqdorini rag'batlantiruvchi preparatlar qabul qilish yolg'on ijobiy natija berishi mumkin. (misol uchun Pregnil, Profazi, Pergonal).
Spirtli ichimliklar, og'riq qoldiruvchi vositalar, antibiotik, kontratseptiv preparatlar, gormonal preparatlar, Klomifen sitrat tarkibli (masalan Klomid, Serofen) va tinchlantiruvchi vositalar natijalarga ta'sir ko'rsatmaydi. 8 hafta oldin bola tushish va abort yoki tug'ruq bo'lgan bo'lsa yolg'on ijobiy natija berishi mumkin.
Bu ehtimol oldingi homiladorlikdan qolgan XG miqdorini mavjudligi bilan izohlanadi.

Men strip testni siydikli idishda 10 sekunddan ko'p vaqtga qoldirdim. Natija aniq bo'ladimi?
Xa. Qo'shimcha bir necha sekund natijaga ta'sir etmaydi.

Men strip testni siydikli idishda 5 sekunddan kam vaqtga qoldirdim. Natija aniq bo'ladimi?
Yo'k, chunki siydikda yig'ilgan gormon miqdori etarli bo'lmasligi mumkin.

Test natijalarini qanday o'qish lozim?
Tekshiruv joyida rangli chiziq paydo bo'lishi tekshiruv to'g'ri o'tkazilganligidan dalolat beradi.
Agarda bu holat ko'rinmasa yangi strip test BB test orqali amaliyotni takrorlash lozim.

Test natijalarini qanday talqin qilish lozim?
Homilador bo'lsangiz 5 minut davomida ikkita rangli chiziq paydo bo'ladi. Shunga qaramay agar siydikda gormonlar miqdori juda kam bo'lsa, ikkinchi chiziq sal paydo bo'lishi mumkin. Shunisi aniqki, siydikda gormonlar miqdorini yo'qligi va hxomiladorlik bo'lmaganlikni tasdiqlash uchun oxirgi salbiy natija paydo bo'lgunga qadar bir qancha minut kutib turish tavsiya etiladi..
Siydikka test botirigan vaqtdan 10 minut orasida paydo bo'lgan natija to'g'ri hisoblanmaydi.

Testda ikkita chiziq paydo bo'ldi, biroq chiziqlar rangi va quyuqligi yoriqnomada ko'rsatilgan rasmdan farq qiladi. Buni qanday izohlash mumkin?
Ranggning quyuqligi yoki farqi xech qanday ahamiyatga ega emas. Agarda natija ijobiy bo'lsa test joyida ikkinchi chiziq paydo bo'lishi lozim. Bu chiziq rasmda ko'rsatilgandek ko'rinishda yoki tekshiruv qismidagi chiziqdan rangi bilan farq qilishi mumkin. Bu XG miqdorini odam organizmida o'sib borishi va testdagi rangiga va quyuqligiga ta'sir qilishi bilan izohlanadi.

Ba'zi preparatlarni qabul qilish natijaga ta'sir ko'rsatadimi?
Bepushtlikni davolovchi ba'zi preparatlar, tarkibida XG yoki odam menopauza gonodotropin XG bo'lgan preparatlar qabul qilish ishonchsiz natajalarni ko'rsatishi mumkin. Qoida bo'yicha bu inektsion preparatlar qabul qilingandan so'ng yaqin kunlarda test o'tkazilishi yolg'on ijobiy natija berishi mumkin. Bepushtlikdan boshqa preparatlar, og'riq qoldiruvchi va oral kontratseptiv preparatlar natijaga ta'sir ko'rsatmaydi. Shunga qaramay, test natijalari oldindan oral kontratsepsiyalarni qabul qilishni tugatish yoki bepushtlikni davolash muolajalari tugatilishi shart ekanligini izohlab beradi.

BB test natijalari ishonchli ekanligi qanday baholanadi?
Testning samaradorligi bir qancha in vitro klinik tadqiqotlarda 99% dan yuqori ekanligi isbotlangan.

Qaysi vaqt mobaynida natijalar ishonchliligi baholanadi?
Salbiy natijada test qismida 10 minutdan so'ng oqish rangli chiziq paydo bo'lishi mumkin. Uning paydo bo'lishi ijobiy natijani ko'rsatmaydi. Yodda tuting, test siydik botirilgan vaqtdan boshlab, 10 minut ichida paydo bo'lgan natija qabul qilinmaydi.

Natija salbiy bo'lsa nima qilish kerak?
Agarda test salbiy natija ko'rsatsa siz homilador bo'lmaganligingiz sababli siydikda XG miqdori mavjud emasligini ko'rsatadi. Bir xaftadan so'ng hayz ko'rmasangiz yana takroran strip test BB test yordamida test o'tkazing. Takroran salbiy natija bo'lsa ginekologga murojat qilishingiz lozim. Chunki hayzning kechkishiga boshqa sabablar bo'lishi mumkin.

Natija ijobiy bo'lsa nima qilish kerak?
Agarda test natijasi ijobiy bo'lsa ginekologga murojat qiling. Homiladorlikni erta aniqlanishi va olib borilishi bola va ona salomatligi uchun zarur.

Ishlab chiqaruvchi: VEDALAB
Manzil: Rue de l'Expansion - ZAT du Londeau – Cerisé
BP 181 - 61006 ALENCON Cedex, France (Fransiya)

CE 0483

	Doir yo`riqnomasi bilan tanishib chiqing	IVD	*In vitro* tashxis uchun tibbiy buyum		Takroran qo`llamang
+4°C +30°C	+4°C dan +30°C gacha bo`lgan haroratda saqlansin	LOT	Partiya raqami		Saqlash muddati
	Ishlab chiqaruvchi				

VERSO

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru