ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стул операционный Brumaba

модель BALANCE ADVANCE



DESIGNED, ENGINEERED AND MANUFACTURED SINCE 1980

MADE IN GERMANY

www.brumaba.com

BRUMABA

OPERATING TABLE SYSTEMS

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Обслуживание

Периодически удалять загрязнения и остатки дезинфицирующего средства со всех поверхностей мягким моющим средством.

Дезинфекция

Рекомендуется дезинфекция салфеткой. Необходимо использовать только протестированные и одобренные средства. Не используйте агенты, содержащие такие активные ингредиенты как фенол, перуксусную кислоту и другие вещества, содержащие активный кислород, гидрохлорид натрия и йод.

ПРИМЕЧАНИЕ!

• Регулярно проверяйте резьбовые соединения и при необходимости подтягивайте!
• Перед использованием проверьте прижимное усилие зажимных рычагов подлокотника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Конструкция стульев является электропроводимой при условии наличия обивки черного цвета.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТУЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ BALANCE ADVANCE


(Микрохирургия)

Стул BALANCE ADVANCE идеально подходит для микрохирургии. При необходимости подлокотники можно надежно зафиксировать в крайних положениях. Данный хирургический стул отличается гигиеничными колесами закрытой конструкции и электрической проводимостью.

Описание функций



Регулировка высоты ножным управлением
1. Нажмите ногой регулирующий механизм **2**.
2. Приподнимитесь с сиденья для увеличения высоты.
3. Опуститесь на сиденье для уменьшения высоты.
4. Уберите ногу с регулирующего механизма для фиксации положения

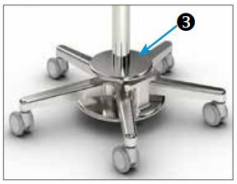


Тормозное устройство
Для включения или отключения тормоза двумя ногами нажмите на тормозное устройство




Угол наклона спинки
1. Нажмите на рычаг**4**,находящийся с левой стороны.
2. Наклонитесь вперед или назад для достижения требуемого наклона спинки.
3. Для фиксации положения отпустите рычаг.



Угол наклона сиденья
1. Нажмите на рычаг, находящийся с правой стороны.
2. Отрегулируйте наклон сиденья, наклоняясь вперед или назад.
3. Отпустите рычаг.

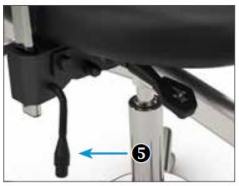

Регулировка высоты спинки
1. Потяните рычаг**5** вверх для ослабления механизма блокировки.
2. Установите требуемую высоту, затем верните рычаг в исходное положение

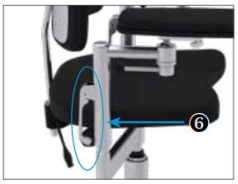

Регулировка высоты подлокотников
1. Потяните рычаг **6** вверх для регулировки высоты.
2. Для фиксации выбранной высоты опустите рычаг.



Регулировка угла и поворота подлокотников
Ослабьте поворотный рычаг**7** и отрегулируйте угол и поворот подлокотников на шаровом шарнире



Регулировка длины подлокотников
Ослабьте барашковый винт **8**, отрегулируйте положение подлокотника, передвинув его вперед или назад.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Примечания

Адрес производства:
BRUMABA GmbH & Co. KG
Bürgermeister-Graf-Ring 17
82538 Geretsried | Germany

Официальное представительство в России
ООО «BRUMABA Russland»
Телефон: +7(963)695-73-83;
+7(925)002-27-66;
+7(495)580-30-80

E-mail: info@brumaba.ru
Web: www.brumaba.com

© 2021 BRUMABA GmbH & Co. KG | GA.0054_09-2021_DE/EN

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru