
Процедура снятия

Смочите гидроколлоид, прикрепленный к коже, ватой со спиртом и аккуратно отделите его вдоль области шва.

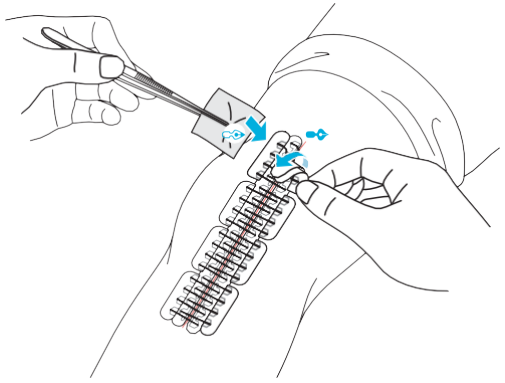

- Если у вас слабая или тонкая кожа с риском ссадин, используйте медицинское средство для удаления клея, например Detachol или AlKare.
- Если нет ваты со спиртом, ее можно использовать с водой или мыльным раствором.
- Это устройство может действовать до 14 дней в зависимости от состояния пациента.

Эксплуатация после использования

Поскольку медицинское изделие является одноразовым, его нельзя использовать повторно, перерабатывать или стерилизовать.

Условия хранения

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и храните его при комнатной температуре.

Применяемые символы



Противопоказания

- Не используйте устройство с поврежденной упаковкой или с истёкшим сроком годности.
- Не используйте на участках с выпотом, жиром или водой, а также на участках кожи головы.
- Не используйте его на инфицированных ранах.
- Не используйте его в качестве замены подкожных швов или швов, снимающих напряжение.
- Не используйте на ранах с высокой силой растяжения, которую невозможно контролировать пальцами или щипцами.
- Не используйте устройство, поврежденное во время приклеивания.

Меры предосторожности

- Данное устройство может использоваться только практикующими врачами, которые полностью изучили процедуру использования. Опыт оператора и хирургическая ситуация должны быть гарантированы, и устройство не может быть использовано кем-либо, кроме обученного человека.
  Перед использованием полностью высушите область хирургического вмешательства. Если область хирургического вмешательства не будет полностью высушена, прочность сцепления может быть ослаблена, и устройство может отделиться от кожи.
- В области приклеивания гидроколлоида может возникнуть аллергическая реакция или пигментация.
- При удалении хирургических лент или клейких шовных фиксаторов кожа может быть поцарапана.

Инструкция по применению

- Проверьте состояние упаковки и срок годности устройства. Не используйте устройство с поврежденной упаковкой или истекшим сроком годности.
- Наложите шов на дерму, прежде чем прикрепить устройство..

Центр обслуживания клиентов

Адрес (Офис) #533, 366, Gyeryong-ro, Seo-gu, Daejeon, Корея
(Фабрика) #606, Factory Building 29, Shimin-daero 109beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Корея

Телефон +82-31-360-0961(#0961)

Вебсайт www.surginus.com


ⓒ 2021 SURGINUS Co., Ltd

Дата создания : 2021/12
SUR-IFU-E001 (Rev.0)


Инструкция по применению

Медицинский фиксатор швов

Foldable Skin Closure

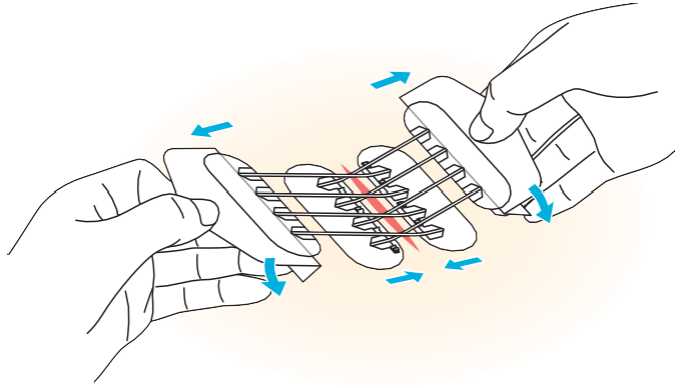

Спецификация Foldable Skin Closure

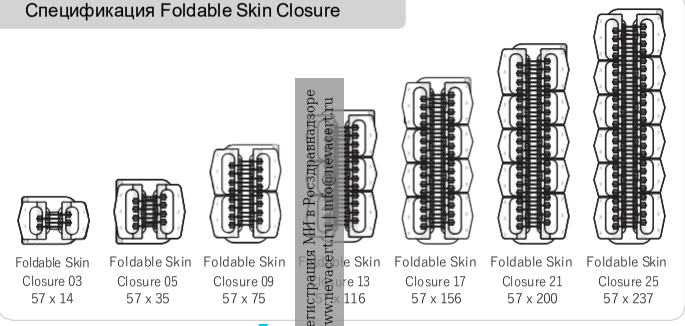


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.tdetacert.ru | info@tdetacert.ru

SURGINUS Co., Ltd


Применение

1 Продезинфицируйте область хирургического вмешательства и полностью высушите ее


2 Сняв защитную пленку [1], поместите хирургический разрез (место наложения швов) в центр устройства и прижмите гидроколлоид к коже.

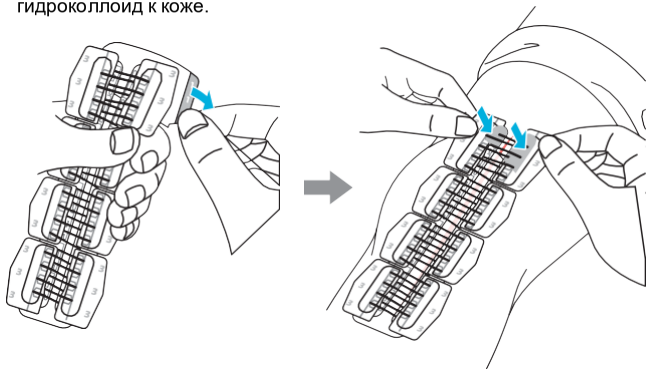

3 Снявзащитную пленку [2], прижмите оставшуюся часть гидроколлоида к коже

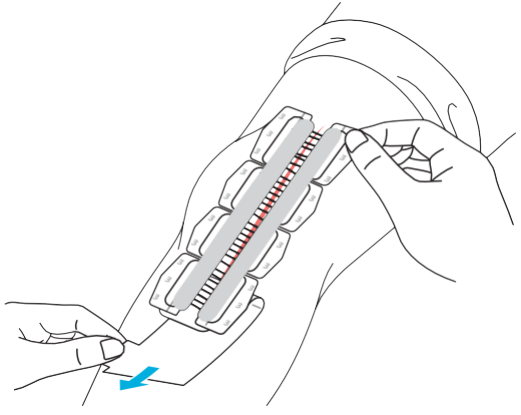


4 Зацепив указательным или средним пальцем круглую выемку защитной пленки [3]внутри, сложите защитную пленку пополам в отмеченной области.

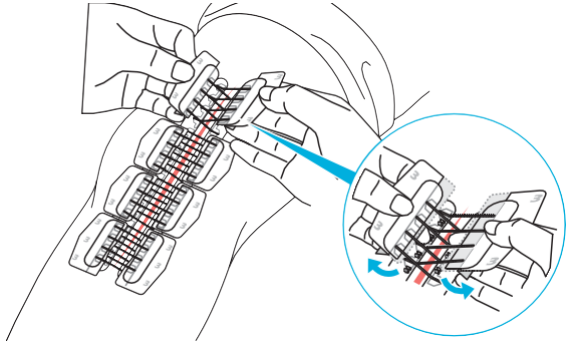


Убедитесь, что гидроколлоид на сложенной части защитной пленки удален с защитной пленки

5 Удерживая сложенную пополам защитную пленку [3], потяните ее в обе стороны, чтобы закрыть разрез (место шва), затем вставьте струны в направляющее устройство, приложите и прижмите к коже

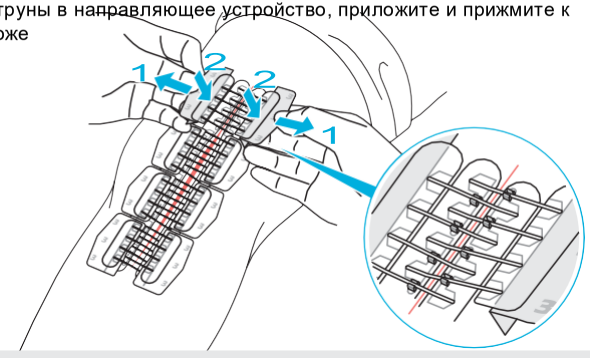


Убедитесь, что область разреза (область шва) не соприкасается друг с другом и не смещена

6 После удаления всей защитной пленки [3] приклейте оставшейся части гидроколлоида к коже.

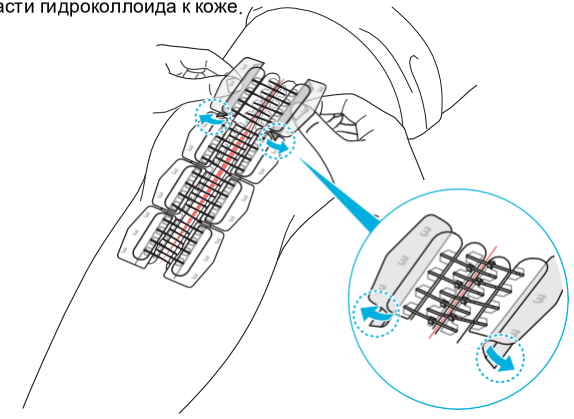

7 Повторите процедуру номер 4~6 и приклейте оставшийся гидроколлоид к коже.

8 Прикрепите большую марлю так, чтобы она полностью закрывала устройство в области шва.

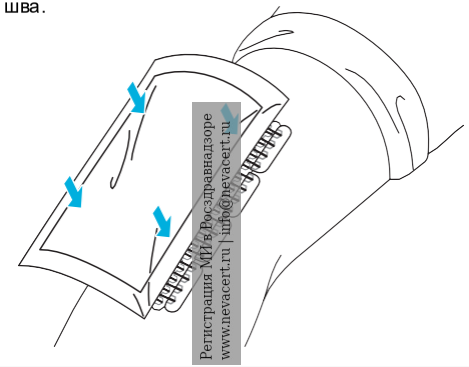

Будьте осторожны, чтобы марлевая лента не соприкасалась с устройством.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru