sertsa®
Разам. Для жыцця



Инструкция по применению

Ланцеты автоматические стерильные одноразовые sertsa®, модель Press 2, размер:


17G 2.0 мм
21G 1.8 мм
21G 2.2 мм
26G 1.8 мм
28G 1.8 мм
30G 1.5 мм

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Ланцеты автоматические стерильные одноразовые sertsa® (далее – Ланцеты) используются для забора капиллярной крови.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

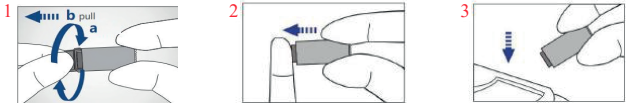

1. Осторожно открутите защитный колпачок, отделив его от Ланцета.
2. Плотно прижмите Ланцет к месту прокола для активации. Не убирайте Ланцет от места прокола до тех пор, пока не раздастся звуковой щелчок.
3. Утилизируйте использованный Ланцет в подходящий контейнер для сбора острых предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ХРАНЕНИЕ. УТИЛИЗАЦИЯ

1. Не используйте Ланцет, если до использования был отсоединен колпачок.
2. Проверьте дату "Использовать до" на упаковке и не используйте Ланцеты после истечения срока годности.
3. Ланцет предназначен для одноразового применения, не используйте его повторно.
4. Хранить Ланцеты в упаковке в хорошо проветриваемом помещении, не допускать контакта с ядовитыми, вредными и коррозионными веществами.
5. Утилизируйте использованный Ланцет в подходящий контейнер для сбора острых предметов.

СИМВОЛЫ

	Изготовитель
	Обратитесь к инструкции по применению
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
MD	Медицинское изделие
	Использовать до
	Запрет на повторное применение
STERILE R	Радиационная стерилизация
LOT	Код партии
	Дата изготовления

SteriLance Medical (Suzhou) Inc.,
No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель производителя на принятие претензий на территории Республики Беларусь: **ООО «Нью Сертификейшн», 220076, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Мстиславца 18, помещение 376**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.newcert.ru | info@newcert.ru