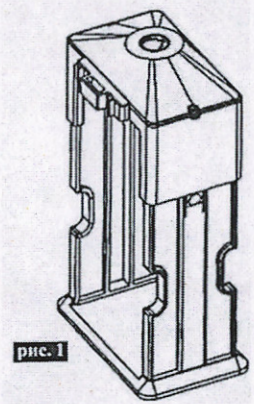
Общество с ограниченной ответственностью
«ДезЛаб»
www.dezlab.by dezlab360@yandex.ru

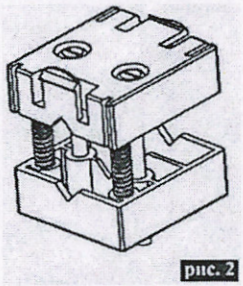
ПАСПОРТ
(инструкция по применению)
Устройство для снятия инъекционных игл «ДЛ-03»
ТУ BY 690777163.003-2013

Устройство для снятия инъекционных игл «ДЛ-03» ТУ BY 690777163.003-2013 (далее-устройство) предназначено для применения в медицинских учреждениях для безопасного снятия использованных инъекционных игл со шприца и их временного хранения в контейнере до момента утилизации.
Конструкция устройства позволяет использовать сменные контейнеры для сбора, временного хранения и транспортировки использованных инъекционных игл, другого колюще-режущего медицинского инструментария.


рис. 1

В качестве сменных контейнеров могут быть использованы пластиковые литровые ёмкости от дезинфицирующих, антисептических средств, жидкого мыла.

Конструкция кронштейна позволяет закрепить держатель контейнера, как на горизонтальной плоскости, так и на стойке.

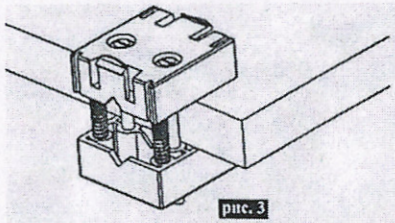

рис. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.Тип крепления: кронштейн.
2. Масса устройства: 0,44 кг.
3. Габаритные размеры, ДхШхВ: 144x128,5x213,6мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Держатель контейнера с иглосъемником (рис. 1)	1 шт.
2. Кронштейн (рис. 2)	1 шт.
3. Контейнер с крышкой (рис. 9)	1 шт.
4. Маркировочная наклейка	1 шт.
5. Паспорт	1 шт.
6. Коробка картонная	1 шт.


рис. 3

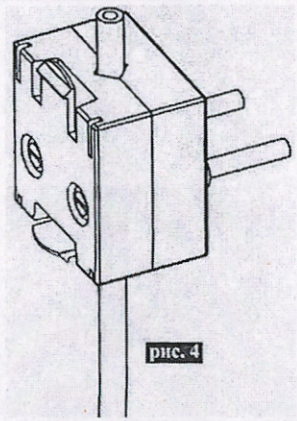
Примечание – комплект поставки может быть изменен в соответствии с договором на поставку

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

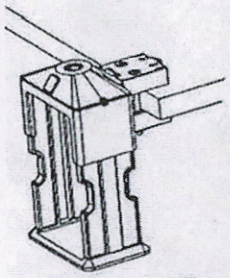
1. Выберите место установки устройства (на столе, на вертикальной стойке и др.)

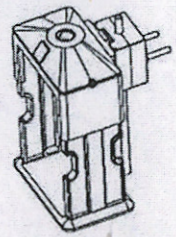
⚠ Выбирайте место установки устройства вблизи от места проведения инъекций.

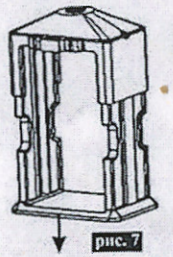
2. В зависимости от места установки возможны следующие варианты крепления кронштейна:
- крепление кронштейна к горизонтальной плоскости (рис.3);
- крепление кронштейна к вертикальной стойке (рис.4).

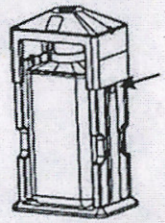

рис. 4

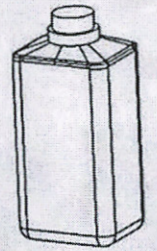
3. Присоедините держатель контейнера к кронштейну (рис. 5,6).
4. Приготовьте необходимое количество дезинфицирующего раствора и заполните им контейнер.
5. Оттяните вниз основание держателя контейнера (рис. 7).
6. Вставьте контейнер в держатель и, придерживая его, нажмите
на боковые фиксаторы (рис. 8).
7. Устройство готово к работе.

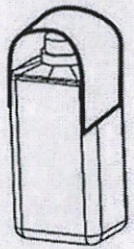

рис. 5


рис. 6


рис. 7


рис. 8


рис. 9


рис. 10

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Выполните инъекцию.
2. Поднесите шприц с использованной иглой к устройству вставьте в отверстие иглосъемника.
3. Зацепите иглу (канюлю иглы) за выступ иглосъемника и потяните шприц вверх.
4. Игла отсоединена.
5. По мере необходимости или заполнения емкости контейнера его заменяют на новый согласно рекомендациям по подготовке к работе.
6. После дезинфекции аккуратно слейте дезинфицирующий раствор из контейнера и плотно закройте его крышкой.
7. Заполните графы маркировочной наклейки, а затем наклейте ее на контейнер (рис. 10).
8. Контейнер готов к транспортировке на место временного хранения для последующей утилизации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте поверхности устройства ветошью, смоченной в моющем растворе. Для дезинфекции устройства применяются препараты, разрешенные для дезинфекции изделий медицинского назначения.

⚠ Не пользуйтесь абразивными и содержащими хлор очистителями.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Средний срок службы – не менее 5 лет.
2. Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев от даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- приведение в негодность устройства по причине нарушений эксплуатации и технического обслуживания;
- наличие механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство соответствует **ТУ BY 690777163.003-2013** и признано годным к эксплуатации.

Юридический адрес изготовителя:
Республика Беларусь, 222744, Минская область, Дзержинский район, д. Юники, улица Центральная, дом 2, к. 115
Почтовый адрес изготовителя: 220087, г. Минск, ул. Чюрлёниса, дом 24, к. 146.
тел: +375296211126 Email: dezlab360@yandex.ru

Директор ООО «ДезЛаб» С.А. Цеголко