RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стерильные трубки с подсоединенным мешком только для энтерального питания посредством насоса.

Инструкция по эксплуатации

1. Закройте зажим.
2. Заполните и закройте мешок.
3. Установите трубку на насос в соответствии с инструкциями производителя.
4. Откройте зажим и прокачайте комплект.
5. Подключите концевой разъем к трубке пациента.
6. Установите насос в соответствии с инструкциями производителя.

Важное примечание:

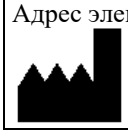
- Только для энтерального применения.
- Хранить при комнатной температуре.
- Не используйте в течение более 24 часов.
- Не используйте изделия при открытии или повреждении упаковочного мешка. Не стерилизовать повторно.
- Точность градуировки составляет +/- 100 мл.
- Градуировка приведена только для справки и не принимает в расчет изменения объема, вызванные наличием охлаждающего устройства или деформации мешка со временем под весом жидкости.

Повторное использование этого изделия может привести к изменению его механических или биологических характеристик, что, в свою очередь, приведет к его неисправности и повышению риска аллергических реакций или бактериальных инфекций.

Данное изделие не содержит латекса из натуральной резины или латекса из сухой резиновой смеси.

	Не использовать при открытии или повреждении		Вещество для стерилизации Этиленоксид
	Только для однократного применения		См. инструкцию по эксплуатации

Распространитель: «ВИГОН СА» (VYGON SA), 5, рю Аделин, 95440, Экуан, Франция
Тел.: + 33 (0)1 39 92 64 15
Факс: + 33 (0)1 34 29 19 34
Адрес электронной почты: questions@vygon.com Сайт: www.vygon.com


«МЕДВИН Франс» (MEDWIN France)
9, Аллее де ла Винь Гранд
34600, Лез Эр, ФРАНЦИЯ

CE 1639

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стерильные трубки только для энтерального питания, безнапорного или с использованием насоса.

Инструкция по эксплуатации: комплект насосов
1. Закройте зажим или роликовый зажим.
2. Соедините нужную насадку с мешком для питания.
3. Подключите трубку к насосу в соответствии с инструкциями производителя насоса.
4. Откройте роликовый зажим (или зажим) и промойте трубку.
5. Подключите конец трубки к зонду пациента.
6. Отрегулируйте скорость и объем введения (20 капель ~1 мл).

Инструкции по применению: комплект безнапорных насосов
1. Закройте зажим или роликовый зажим.
2. Соедините нужную насадку с мешком для питания.
3. Откройте роликовый зажим (или зажим) и промойте трубку.
4. Подключите конец трубки к зонду пациента.
5. Отрегулируйте скорость и объем введения.

Меры предосторожности при эксплуатации
- Только для энтерального применения.
- Хранить при комнатной температуре.
- Не используйте трубку в течение более 24 часов подряд.

Повторное использование этого изделия может привести к изменению его механических или биологических характеристик, что, в свою очередь, приведет к его неисправности и повышению риска аллергических реакций или бактериальных инфекций.

Данное изделие не содержит латекса из натуральной резины или латекса из сухой резиновой смеси.

	Не использовать при открытии или повреждении		Вещество для стерилизации Этиленоксид
	Только для однократного применения		См. инструкцию по эксплуатации

Распространитель: «ВИГОН СА» (VYGON SA), 5, рю Аделин, 95440, Экуан, Франция
Тел.: + 33 (0)1 39 92 64 15
Факс: + 33 (0)1 34 29 19 34
Адрес электронной почты: questions@vygon.com Сайт: www.vygon.com


«МЕДВИН Франс» (MEDWIN France)
9, Аллее де ла Винь Гранд
34600, Лез Эр, ФРАНЦИЯ

CE 1639

VYGON Value Life	**0VENEED145xH – 0VENEEJ24xH – 0VENEEK24xH OVENEEPlxxH – 0VENEP2P1xxHCS – 0VEN2P2P1xxH 0VENEP2GBJ24xHCS – 0VEN2P2J24xH**	TNEM/NT25/5 03.2020

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трубка для энтерального питания и гидратации насосом. После опустошения мешка с питательным веществом подается вода для промывки трубки и гидратации пациента.

Инструкции по эксплуатации:

1. Закройте два зажима.
2. Подключите емкость с водой к бесцветному патрубку.
3. Подсоедините мешок с питательным веществом к розовому патрубку.
4. Откройте зажим на стороне подачи воды, бесцветный патрубок с клапаном, чтобы опустошить патрубок до точки Y.
5. Откройте зажим на стороне подачи, розовом патрубке, чтобы полностью опорожнить трубку.
6. Установите трубку на насос в соответствии с инструкциями производителя насоса.
7. Подключите конец трубки к датчику пациента.
8. Отрегулируйте скорость и объем подачи.
   Необходимый объем подачи равен сумме объема раствора в мешке с питательным раствором и желаемого объема подачи воды.

Меры предосторожности при эксплуатации

- Только для энтерального применения.
- Хранить при комнатной температуре.
- Не используйте трубку в течение более 24 часов подряд.

Повторное использование этого изделия может привести к изменению его механических или биологических характеристик, что, в свою очередь, приведет к его неисправности и повышению риска аллергических реакций или бактериальных инфекций.

Данное изделие не содержит латекса из натуральной резины или латекса из сухой резиновой смеси.

	Не использовать при открытии или повреждении		Вещество для стерилизации Этиленоксид
	Только для однократного применения		См. инструкцию по эксплуатации

Распространитель: «ВИГОН СА» (VYGON SA), 5, рю Аделин, 95440, Экуан, Франция
Тел.: + 33 (0)1 39 92 64 15
Факс: + 33 (0)1 34 29 19 34
Адрес электронной почты: questions@vygon.com Сайт: www.vygon.com



«МЕДВИН Франс» (MEDWIN France)
9, Аллее де ла Винь Гранд
34600, Лез Эр, ФРАНЦИЯ

CE 1639