Картридж для промывания AFIAS

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Картридж для промывания AFIAS предназначен для очистки наконечника адаптера анализатора AFIAS. Только для диагностики *in vitro*.

КОМПОНЕНТЫ

Картридж для промывания AFIAS состоит из: корпуса картриджа AFIAS, тюбиков для дистиллированной воды двойной очистки (DDW), тюбиков с моющим средством и инструкции по применению.

- Тюбик для DDW заполнен дистиллированной водой двойной очистки, предварительно дозированной и запечатанной алюминиевой крышкой.
- Тюбик с моющим средством заполнен 0,2% полисорбатом (твином) 20 и запечатан алюминиевой крышкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Предназначен для использования медицинскими работниками в диагностике *in vitro*.
- Следуйте инструкциям и процедурам, описанным в настоящей «Инструкции по применению».
- Не используйте этот картридж после истечения срока годности.
- Если вы не проводите это испытание еженедельно, это может привести к получению неверных или неточных результатов.
- Мы рекомендуем проводить это испытание еженедельно, чтобы предотвратить непредвиденные сбои.
- Не используйте повторно тюбики с дистиллированной воды двойной очистки и тюбики с моющим средством. Набор тюбиков следует использовать только один раз.
- Прибор для испытаний AFIAS может создавать небольшую вибрацию во время использования.

* ***Не проводите испытания в течение 30 минут после промывки наконечника адаптера.***

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Номер по каталогу (REF): SMFP-79
Компоненты картриджа для промывания AFIAS

■ Коробка с картриджем:	
- Корпус картриджа	5
- Тюбик для дистиллированной воды двойной очистки (DDW)	100
- Тюбик с моющим средством	100
- Инструкция по применению	1


ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Условия хранения	
Температура хранения:	2–30 °C
Срок годности:	60 месяцев
Примечание:	Одноразовый


ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Проверьте содержимое картриджа для промывания AFIAS: корпус картриджа AFIAS, тюбики для дистиллированной воды двойной очистки (DDW), тюбики с моющим средством и инструкцию по применению.
- Корпус картриджа многоразовый. Если корпус загрязнен, промойте и высушите его перед использованием.

* ***<u>Перед началом испытания проверьте цвет каждого тюбика..</u>***

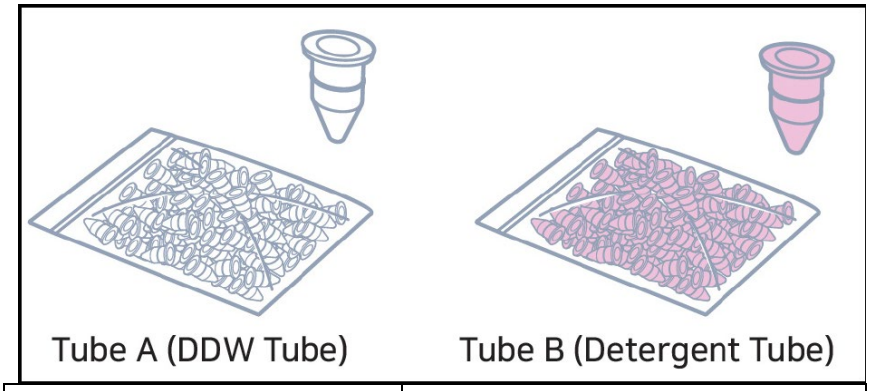

Тюбик А (тюбик для дистиллированной воды двойной очистки)	Тюбик Б (тюбик с моющим средством)

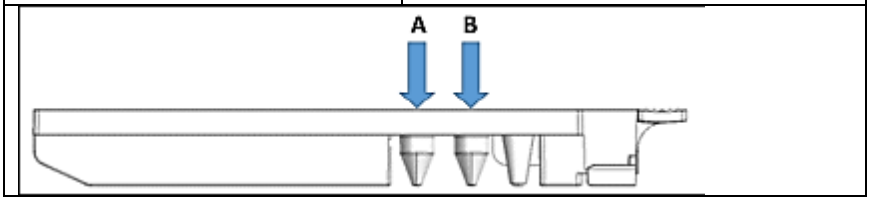

1) Поместите корпус картриджа AFIAS на ровный стол.
2) Вставьте тюбик А (тюбик DDW- белый) в позицию А корпуса картриджа.
3) Вставьте трубку Б (тюбик с моющим средством - розовый) в позицию В корпуса картриджа.
4) Выполните промывку наконечника адаптера, следуя руководству по эксплуатации анализатора AFIAS.

Картридж для промывания AFIAS

Примечание: для идентификации различных символов см. таблицу ниже.

	Достаточно для проведения n-го количества испытаний
	Прочтите инструкции по применению
	Использовать до указанной даты
	Дата изготовления
	Код серии
	Номер по каталогу
	Предупреждение
	Производитель
	Импортёр
	Поставщик
	Уполномоченный представитель Европейского сообщества
	Диагностическое медицинское устройство для применения in vitro
	Температурное ограничение
	Не использовать повторно
	Знак соответствия европейским стандартам

О любом серьезном происшествии, случившемся в связи с использованием данной продукции, необходимо сообщить в Boditech Med Inc. и ваше уполномоченное ведомство.

Для получения технической помощи обратитесь в
Техническую службу компании «Boditech Med Inc.»
Тел: +(82) -33-243-1400
Электронная почта: TS@boditech.co.kr

Производитель:
Boditech Med Inc.
43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si,
Gang-won-do, 24398 Республика Корея
Тел: + (82) -33-243-1400
Факс: + (82) -33-243-9373
www.boditech.co.kr

Уполномоченный представитель Европейского сообщества:
Obelis s.a
Bd. General Wahis 53, 1030 Брюссель, БЕЛЬГИЯ
Тел: + (32) -2-732-59-54
Факс: + (32) -2-732-60-03
Электронная почта: mail@obelis.net

CE IVD

Перевод соответствует оригиналу. Переводчик: Грабайло К. Н.

