/Логотип/

Интерфейсный кабель катетера (CIC) для АИП PulseSelect модель PSCIC101

CE 0123


Руководство оператора

Интерфейсный кабель катетера

Описание

Интерфейсный кабель катетера (CIC) для АИП PulseSelect модель PSCIC101 – стерильный, одноразовый кабель, являющийся средством соединения катетера с генератором с использованием специализированного фиксируемого коннектора. Этот кабель поставляется стерильным с применением стерилизации электронным пучком.

Рисунок 1. Интерфейсный кабель катетера

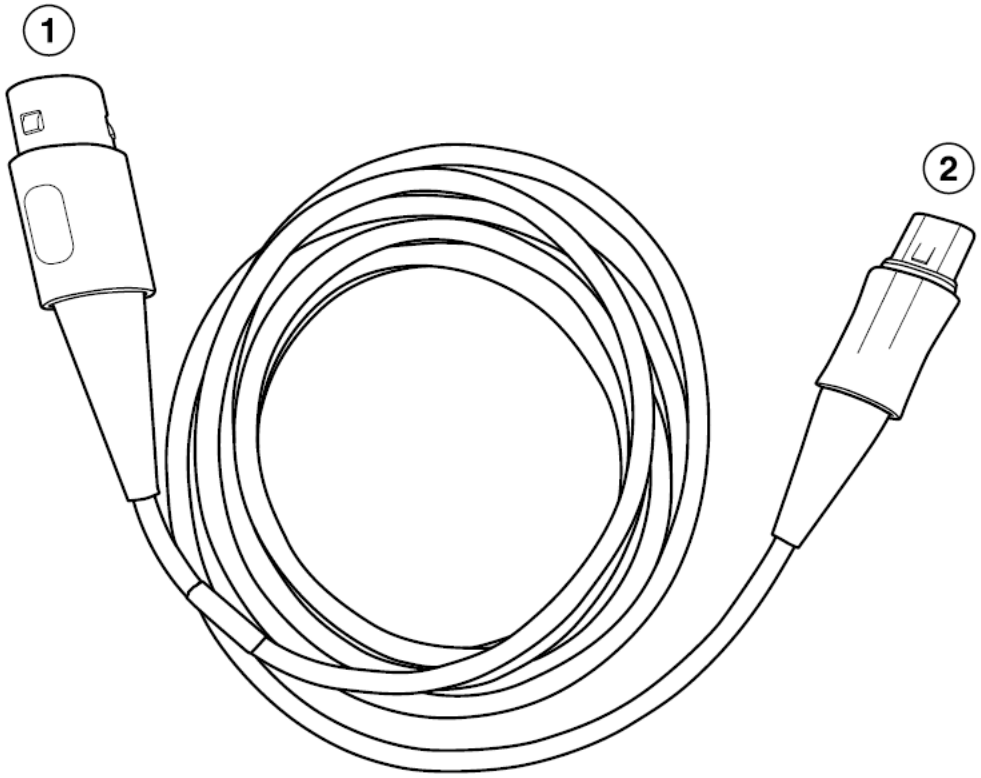

1 Коннектор генератора
2 Коннектор катетера

Содержимое упаковки

Упаковка содержит следующее:

- Интерфейсный кабель катетера для АИП PulseSelect
- Документация по продукту

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции. Соблюдайте все противопоказания, предупреждения и меры предосторожности, указанные в этих инструкциях. Несоблюдение инструкций может привести к результатам, ниже ожидаемых.

Предусмотренное назначение

Предусмотренное назначение интерфейсного кабеля катетера для АИП PulseSelect – обеспечить электрическое соединение между генератором для АИП PulseSelect и совместимым катетером Medtronic.

Предполагаемый пользователь

Предполагаемый пользователь данной системы абляции – врач, выполняющий абляцию сердца. Использование данного устройства не требует специальных квалификаций или обучения, помимо требующегося согласно применяемым местным, национальным или федеральным регламентам.

Нежелательные явления

Нежелательные явления, ассоциированные с использованием интерфейсного кабеля катетера с совместимым катетером, приведены в инструкции по применению катетера.

Инструкция по применению

1. Распакуйте интерфейсный кабель катетера.

2. Подключите интерфейсный кабель катетера к катетеру.
3. Вставьте штекер интерфейсного кабеля катетера в разъем на передней панели генератора.
4. После завершения процедуры отсоедините интерфейсный кабель катетера от рукоятки катетера и генератора.

Уход и хранение

До использования храните интерфейсный кабель катетера в оригинальной упаковке при комнатной температуре в сухом месте.

Интерфейсный кабель катетера – стерильный компонент, предназначенный для однократного применения. Не пытайтесь очистить его.

Утилизация

Не утилизируйте данный продукт с несортированным бытовым мусором. Утилизируйте этот продукт согласно местным регламентам. См. инструкции по надлежащей утилизации данного продукта: http://recycling.medtronic.com.

Спецификации

Таблица 9. Спецификации интерфейсного кабеля катетера

Описание	**Спецификация**
Длина (от генератора к катетеру)	251,46 см (99 дюймов)
Защита от проникновения жидкости	IPX4
Рабочие параметры окружающей среды	От 15 °C до 30 °C (от 59 °F до 86 °F) при влажности от 30 % до 75 %
Стерилизация	Для однократного применения, облучение электронным пучком

/*Логотип*/

Medtronic, Inc.
710 Медтроник Парквей
Миннеаполис, штат Миннесота 55432
США
www.medtronic.com
+1 763 514 4000

EC REP
Medtronic B.V.
Эрл Баккенстраат 10
6422 PJ Херлен
Нидерланды
+31 45 566 8000

Канада
Medtronic Canada ULC
99 Херефорд Стрит
Брамптон, Онтарио L6Y 0R3
Канада
1 800 268 5346

Технические руководства
www.medtronic.com/manuals

© 2023 Medtronic
M012858C001 B
29.09.2023
/*Штрихкод*/
M012858C001