SANLI Medical
Since 1991

Пробирки одноразовые для забора капиллярной крови ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Liuyang SANLI Medical Technology Development Co., Ltd

Add: No.99, Jinsha North Road, 410300 Liuyang, Hunan, China

+86 731 83655125

+86 731 83669587


www.sanlimedical.com

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Назначение


Капиллярные пробирки для забора крови VacuLab® (далее - микропробирка) предназначены для сбора и хранения образцов капиллярной крови человека. Используется вместе с одноразовым ланцетом (не входит в состав пробирки, приобретается отдельно). Микропробирки VacuLab® имеют цветовую кодировку крышек в соответствии с добавками, объёма жидких добавок и допустимого соотношения количества крови к добавке в соответствии с китайскими отраслевыми стандартами YY/T 0617-2021 (Одноразовые контейнеры для сбора образцов капиллярной крови человека) и ISO 6710 (Одноразовые контейнеры для сбора образцов венозной крови). Пробирки доступны в пластиковом исполнении с объёмом от 0,2 до 1 мл.

Инструкция по применению капиллярные пробирки для сбора крови без капилляра (стандартного типа и 13x75мм)

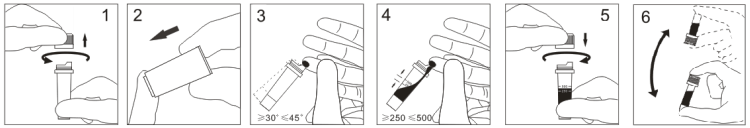


1. Снимите крышку с пробирки и положите её на удобную поверхность.
2. Обработайте место пункции подходящим антисептиком. Не пальпируйте область прокола после очистки. Выполните прокол кожи ланцетом и аккуратно удалите первую каплю крови стерильной марлей или ватой. Утилизируйте ланцет в контейнер для биологически опасных острых предметов.
3. Держите микропробирку для забора крови под углом 30°-40° к поверхности места пункции и набирайте кровь. Избегайте соскабливания поверхности кожи во время сбора образца. Когда соберётся 2 - 3 капли, кровь будет плавно стекать по стенке пробирки до дна пробирки для капиллярной крови.
4. Наберите необходимое количество крови до индикатора заполнения. Переполнение или недонаполнение пробирок может привести к неправильному соотношению кровь/добавка, что может стать причиной некорректных аналитических результатов или ухудшения рабочих характеристик продукта.
5. После завершения забора крови установите крышку на место, поворачивая и надавливая на неё вниз.
6. Сразу после забора крови аккуратно переверните пробирки необходимое количество раз, указанное в таблице на последней странице данной Инструкции по применению, чтобы полностью смешать кровь и добавки.
   1 переворачивание: переверните пробирку вверх дном и верните в вертикальное положение.
   Примечание: Не встряхивайте пробирки. Интенсивное перемешивание может вызвать гемолиз или пенообразование. Недостаточное или позднее перемешивание в пробирках с сывороткой может привести к слипанию тромбоцитов, образованию сгустков и/или получению неверных результатов анализа.
   ПРИМЕЧАНИЕ: После забора крови все пробирки, особенно с сывороткой, следует держать вертикально.

Инструкция по применению капиллярные пробирки для сбора крови (с капилляром и резиновой крышкой)

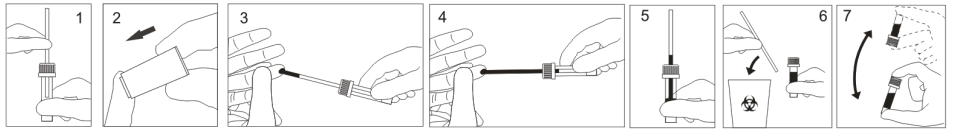

1. Вставьте капилляр в микропробирку.
2. Обработайте место прокола подходящим антисептиком. Не пальпируйте место прокола после очищения. Проколите кожу ланцетом и аккуратно удалите первую каплю крови стерильной марлей или ватой. Ланцет следует утилизировать в контейнер для биологически опасных острых предметов.
3. Соберите кровь в пробирку для капиллярной крови с помощью капилляра.
4. Собирайте кровь до индикатора заполнения. Переполнение или недополнение пробирок может привести к неправильному соотношению крови и добавки, неверным результатам анализа или снижению эффективности продукта.
5. Кровь будет плавно стекать по стенке капилляра ко дну пробирки для капиллярной крови.
6. После завершения сбора крови извлеките капилляр и утилизируйте его в контейнере для биологически опасных острых предметов.
7. Сразу после забора крови аккуратно переверните пробирки в соответствии с количеством переворачиваний, указанным в таблице на последней странице данной инструкции по применению, для полного перемешивания крови и добавок после взятия крови.
   1 переворачивание: переверните пробирку вверх дном и верните в вертикальное положение.
   Примечание: Не встряхивайте пробирки. Интенсивное перемешивание может вызвать гемолиз или пенообразование. Несвоевременное или недостаточное перемешивание в пробирках с сывороткой может привести к слипанию тромбоцитов, образованию сгустков и/или получению неверных результатов анализа.
   ПРИМЕЧАНИЕ: После взятия крови все пробирки, особенно с сывороткой, следует держать в вертикальном положении.

Инструкция по применению капиллярные пробирки для сбора крови (с капилляром и пластиковой крышкой)

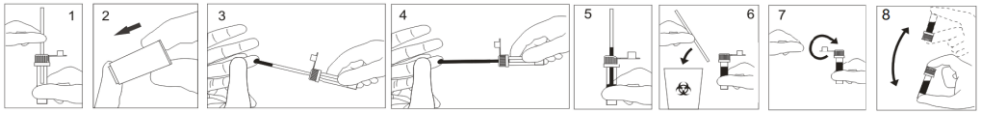

1. Откройте крышку и вставьте капилляр в микропробирку.
2. Обработайте место прокола подходящим антисептиком. Не пальпируйте место прокола после очищения. Проколите кожу ланцетом и аккуратно удалите первую каплю крови стерильной марлей или ватой. Ланцет следует утилизировать в контейнер для биологически опасных острых предметов.
3. Соберите кровь в пробирку для капиллярной крови с помощью капилляра.
4. Собирайте кровь до индикатора заполнения. Переполнение или недополнение пробирок может привести к неправильному соотношению крови и добавки, неверным результатам анализа или снижению эффективности продукта.
5. Кровь будет плавно стекать по стенке капилляра ко дну пробирки для капиллярной крови.
6. После завершения сбора крови извлеките капилляр и утилизируйте его в контейнере для биологически опасных острых предметов.
7. Закройте крышку.
8. Сразу после забора крови аккуратно переверните пробирки в соответствии с количеством переворачиваний, указанным в таблице на последней странице данной инструкции по применению, для полного перемешивания крови и добавок после взятия крови.
1 переворачивание: переверните пробирку вверх дном и верните в вертикальное положение.
Примечание: Не встряхивайте пробирки. Интенсивное перемешивание может вызвать гемолиз или пенообразование. Несвоевременное или недостаточное перемешивание в пробирках с сывороткой может привести к слипанию тромбоцитов, образованию сгустков и/или получению неверных результатов анализа.
ПРИМЕЧАНИЕ: После взятия крови все пробирки, особенно с сывороткой, следует держать в вертикальном положении.

Центрифугирование

Микропробирку следует центрифугировать в помещении с контролируемой температурой 15–25 °C. Более высокая температура может отрицательно повлиять на физические свойства геля.
Центрифугируйте пробирку согласно следующей таблице.

Пробирка VacuLab®	ИНВЕРСИИ (СМЕШИВАНИЕ)	РЕКОМЕНДОВАННАЯ СКОРОСТЬ ЦЕНТРИФУГИ	ВРЕМЯ (МИН)
Пустая пробирка	-	Время свертывания крови: 60 минут после взятия крови Центрифугирование при 1700g-2000g.	10-20
Активатор свёртывания	3-5x	Время свертывания крови: 15-30 минут после взятия крови Центрифугирование при 1700g-2000g.	10-20
Активатор свёртывания и гель	3-5x	Время свертывания крови: 15-30 минут после взятия крови Центрифугирование при 1700g-2400g.	10-120
Гепарин лития/ Гепарин натрия	5-8x	-	-
Гепарин лития и гель	5-8x	После полного смешивания, Центрифугирование при 1700g-2400g	10-20
K2 EDTA/ K3 EDTA	5-8x	-	-
K2 EDTA и гель	5-8x	После полного смешивания, Центрифугирование при 1700g-2400g	10-20
Глюкоза (ЭДТА и фторид натрия/ с фторидом натрия и оксалатом калия)	5-8x	-	-
3,2% и 3,8% Цитрат натрия	5-8x	-	-
3,8% Цитрат натрия (для СОЭ)	5-8x	-	-
Цитрат натрия и гель	5-8x	После полного смешивания, Центрифугирование при 1700g-2400g	10-20

Меры предосторожности

Внимательно осмотрите пробирку на наличие посторонних веществ. В случае обнаружения посторонних веществ не используйте пробирку.

Не используйте пробирки после истечения срока годности. Следуйте инструкции по применению. Не встряхивайте пробирки.

1. Используйте перчатки, халаты, средства защиты глаз и другие средства индивидуальной защиты от утечки крови и потенциального контакта с возбудителями заболеваний, передающихся через кровь.
2. Капиллярные пробирки VacuLab® стабильны до истечения срока годности при температуре хранения от 4 до 25 °C.
3. Переполнение или недополнение пробирок может привести к неправильному соотношению крови и добавки, получению неверных результатов анализа или снижению эффективности продукта.
4. Не используйте пробирку, если цвет добавки изменился. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, дождя или снега.
5. Перед использованием аккуратно постучите по пробирке, чтобы удалить прилипшую к крышке добавку.
6. Обращайтесь со всеми биологическими образцами и оборудованием для сбора крови в соответствии с местными правилами.

Хранение

Храните и транспортируйте пробирки при температуре 4–25 °C (39–77 °F), относительной влажности 30-75%. При кратковременной перевозке (до 24-48 часов) допустимы кратковременные отклонения (не ниже +2°C и не выше +35°C). Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Превышение максимально допустимой температуры хранения может привести к ухудшению качества пробирок (например, высыханию жидких добавок, появлению красителей и т. д.). Срок годности в течение 24 мес. с даты стерилизации.

Уполномоченный представитель ЕС

CMC Medical Devices & Drugs S.L
C/Horacio Lengo Nº 18 CP 29006, Málaga-Spain