

Кюветы для ACL TOP (ACL TOP Cuvettes)

Каталожный номер: 0029400100

Количество: 2400 шт (600 стрипов, где 1 стрип состоит из 4 кювет)

Для использования с анализаторами гемостаза серии ACL (модели: ACL TOP 700, ACL TOP 700 LAS, ACL TOP 700 CTS, ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 300 CTS, ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS)

Описание: кювета-ячейка представляет собой пластиковую емкость, камеру или лунку с длиной оптического пути 0,67 см. В кювету дозируются образцы и реагенты для последующего анализа. Допустимый объем реакционной смеси в одной кювете – от 150 мкл до 600 мкл.


Четыре кюветы соединены в единый стрип, представляющий собой одноразовый пластиковый ряд из 4 камер, соединенных вместе. Детали конструкции стрипов позволяют скреплять их друг с другом в обоймы и облегчают работу с ними. Обойма кювет состоит из 10 стрипов, соединенных между собой за счет собственных конструктивных особенностей. Кюветы загружаются на борт анализатора упаковками. Упаковка кювет – это группа из 10 обойм, собранных вместе для облегчения процесса загрузки (10 обойм = 100 стрипов = 400 кювет).

Назначение: для анализа используется стрип кювет, каждая емкость которого предназначена для смешивания, инкубирования образцов и реагентов, а также для проведения анализа и измерений.

Применение: перед применением внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на анализатор ACL.


Применяемые символы:

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Код партии
	Температурный диапазон

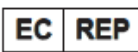	Для однократного применения
	Обратитесь к инструкции по применению
	Изготовитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

*Logomun
Instrumentation
Laboratory*

Instrumentation Laboratory Company - 180 Хартвелл
Роуд, Бедфорд, штат Массачусетс, 01730-2443 (США)
Instrumentation Laboratory SpA – В. ле. Монца 338 -
20128 Милан (Италия)
Тел.+1 800 678 0710

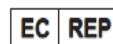

Кюветы для ACL AcuStar (ACL AcuStar Cuvettes)

Каталожный номер: 0009801100

Объем: 1400 штук в упаковке

Для использования с анализаторами гемостаза ACL AcuStar

Описание: кювета представляет собой пластиковую емкость, в которую дозируются образцы и реагенты для последующего анализа.

Назначение: предназначена для смешивания, инкубирования образцов и реагентов, а также для проведения анализа и измерений.

Применение: перед применением внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на анализатор ACL AcuStar.

Применяемые символы:

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Код партии
	Для однократного применения
	Обратитесь к инструкции по применению
	Изготовитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

Logomun
Instrumentation
Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - 180 Хартвелл
Роуд, Бедфорд, штат Массачусетс, 01730-2443 (США)
Instrumentation Laboratory SpA – В. ле. Монца 338 -
20128 Милан (Италия)
Тел.+1 800 678 0710



Роторы (Rotors)

Каталожный номер: 0006800000

Количество: 100 шт (каждый ротор состоит из 20 кювет)

Для использования с анализаторами гемостаза серии ACL (модели: ACL 200, ACL 7000, ACL 10000, ACL Elite, ACL Elite Pro)

Описание: ротор представляет собой пластиковое монолитное изделие, включающее в себя 20 реакционных кювет. В кювету дозируются образцы и реагенты для последующего анализа.

Назначение: предназначен для смешивания, инкубирования образцов и реагентов, а также для проведения анализа и измерений.

Применение: перед применением внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на анализатор ACL.

Условия хранения: температура хранения 4-45 °С.

Применяемые символы:

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Код партии
	Для однократного применения
	Обратитесь к инструкции по применению
	Изготовитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

Logomun
Instrumentation
Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - 180 Хартвелл
Роуд, Бедфорд, штат Массачусетс, 01730-2443 (США)
Instrumentation Laboratory SpA – В. ле. Монца 338 -
20128 Милан (Италия)
Тел.+1 800 678 0710

