

Общество с ограниченной ответственностью «Сурсил»
(ООО «Сурсил»)

32.50.22.150

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Сурсил»



Хамоков З.Х.
201 8 г.

Обувь ортопедическая малосложная
по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016

Руководство по эксплуатации (РЭ)

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016,
варианты исполнения:

1. Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 145-150-155-160-165;
2. Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 170-175-180-185-190-195-200;
3. Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 205-210-215-220-225-230-235-240;
4. Мальчиковая и девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 225-230-235-240-245-250-255-260;
5. Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 210-215-220-225-230-235-240-245-255-260-265-270-275;
6. Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 245-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И РАЗРАБОТЧИКЕ

Разработка и производство медицинского изделия "Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016" осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Сурсил» (ООО «Сурсил»)

Телефон/Факс: +7 (495) 258-61-58.

Адрес места производства медицинского изделия:

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская д. 13

Интв. № подл.	Подпись и дата	Взам. интв. №	Интв. № дубл.	Подпись и дата

Регистрация МИ в Росздравнадзоре	Подпись	Дата
www.nevacert.ru info@nevacert.ru		

ПП-вкладные обувные изделия

Лист

2

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

"Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016" (далее по тексту - обувь) предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности всех половозрастных групп при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп (плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3 см) приводящими к незначительным или умеренным функциональным нарушениям, в том числе и при начальной стадии диабетической патологии стоп.

Потенциальными потребителями обуви являются лица имеющие одно или несколько из клинических состояний, описанных в п.7 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Область применения – ортопедия.

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ

Номер вида обуви ортопедической малосложной 9-01, 9-02 по «Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р (с изменениями на 22 июля 2015 года)» Приказ Минтруда России от 24 мая 2013 г. №214н.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения обуви в медицинских целях – 1 по ГОСТ 31508.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией изделий – 250220.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru info@nevacert.ru	Дата	ПП-вкладные обувные изделия	Лист 3
--	------	-----------------------------	-----------

2. ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 ОПИСАНИЕ

Обувь ортопедическая малосложная, серийно выпускаемая продукция, изготавливается летняя, зимняя, весенне-осенняя, круглосезонная и может быть использована для реабилитации инвалидов в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждений, а также в бытовых условиях.

Обувь повседневная - женская и девичья изготавливается на низком и среднем каблуке; остальная - на низком.

Для больных сахарным диабетом не допускается изготавливать обувь с открытой носочной частью и состоящую из ремешков.

Обувь малодетская и дошкольная изготавливается с закрытой пяточной частью.

Обувь является нестерильным медицинским изделием, не подлежащим стерилизации.

Перед эксплуатацией следует внимательно ознакомиться с данным руководством.

Не рекомендуется эксплуатация после истечения срока службы.

2.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обувь рассчитана для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре от плюс 40 °С до минус 20 °С.

Срок службы обуви не менее одного года, для детей инвалидов - не менее шести месяцев.

Срок сохраняемости обуви не более шести месяцев, для детей инвалидов - не более одного месяца.

Обувь ремонтпригодна в течение срока службы.

Критериями непригодности обуви к носке являются деформация или нарушение целостности специальных деталей, указанных в п.2.3 настоящего руководства. Специальные детали обуви ремонту не подлежат.

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инов. № подл.	Подпись и дата	Вам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Регистрация МИ в Росздравнадзоре	Подпись	Дата
www.nevacert.ru info@nevacert.ru		

Виды и размеры обуви малосложной приведены в таблице 1.

Таблица 1

Половозрастная группа применения обуви	Вид обуви	Размеры, мм	Обозначения (шифр) обуви / Модель
1	2	3	4
Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД)	Сапожки	145-150-155-160-165	09-С1МД-1, 09-С1МД-2, 09-С1МД-3, 09-С2МД-1, 09-С2МД-2, 09-С2МД-3, 09-С6МД-1, 09-С6МД-2, 09-С6МД-3,
	полусапожки		09-ПС1МД-1, 09-ПС1МД-2, 09-ПС1МД-3, 09-ПС2МД-1, 09-ПС2МД-2, 09-ПС2МД-3, 09-ПС6МД-1, 09-ПС6МД-2, 09-ПС6МД-3,
	ботинки		09-К1МД-1, 09-К1МД-2, 09-К1МД-3, 09-К3МД-1, 09-К3МД-2, 09-К3МД-3, 09-К6МД-1, 09-К6МД-2, 09-К6МД-3,
	полуботинки		010-К1МД-1, 010-К1МД-2, 010-К1МД-3, 010-К6МД-1, 010-К6МД-2, 010-К6МД-3,
	туфли		011-К1МД-1, 011-К1МД-2, 011-К1МД-3, 011-К2МД-1, 011-К2МД-2, 011-К2МД-3, 011-К6МД-1, 011-К6МД-2, 011-К6МД-3,
	сандалеты		013-К1МД-1, 013-К1МД-2, 013-К1МД-3, 013-К3МД-1, 013-К3МД-2, 013-К3МД-3, 013-К6МД-1, 013-К6МД-2, 013-К6МД-3
Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ)	Сапожки	170-175-180-185-190-195-200	09-С1ДШ-1, 09-С1ДШ-2, 09-С1ДШ-3, 09-С2ДШ-1, 09-С2ДШ-2, 09-С2ДШ-3, 09-С6ДШ-1, 09-С6ДШ-2, 09-С6ДШ-3
	полусапожки		09-ПС1ДШ-1, 09-ПС1ДШ-2, 09-ПС1ДШ-3, 09-ПС2ДШ-1, 09-ПС2ДШ-2, 09-ПС2ДШ-3, 09-ПС6ДШ-1, 09-ПС6ДШ-2, 09-ПС6ДШ-3
	ботинки		09-К1ДШ-1, 09-К1ДШ-2, 09-К1ДШ-3, 09-К3ДШ-1, 09-К3ДШ-2, 09-К3ДШ-3, 09-К6ДШ-1, 09-К6ДШ-2, 09-К6ДШ-3,
	полуботинки		010-К1ДШ-1, 010-К1ДШ-2, 010-К1ДШ-3, 010-К6ДШ-1, 010-К6ДШ-2, 010-К6ДШ-3
	туфли		011-К1ДШ-1, 011-К1ДШ-2, 011-К1ДШ-3, 011-К2ДШ-1, 011-К2ДШ-2, 011-К2ДШ-3, 011-К6ДШ-1, 011-К6ДШ-2, 011-К6ДШ-3
	сандалеты		013-К1ДШ-1, 013-К1ДШ-2, 013-К1ДШ-3, 013-К3ДШ-1, 013-К3ДШ-2, 013-К3ДШ-3, 013-К6ДШ-1, 013-К6ДШ-2, 013-К6ДШ-3,
Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)	Сапожки	205-210-215-220-225-230-235-240	09-С1Ш-1, 09-С1Ш-2, 09-С1Ш-3, 09-С2Ш-1, 09-С2Ш-2, 09-С2Ш-3, 09-С6Ш-1, 09-С6Ш-2, 09-С6Ш-3
	полусапожки		09-ПС1Ш-1, 09-ПС1Ш-2, 09-ПС1Ш-3, 09-ПС2Ш-1, 09-ПС2Ш-2, 09-ПС2Ш-3, 09-ПС6Ш-1, 09-ПС6Ш-2, 09-ПС6Ш-3
	ботинки		09-К1Ш-1, 09-К1Ш-2, 09-К1Ш-3, 09-К3Ш-2, 09-К3Ш-3, 09-К6Ш-1, 09-К6Ш-2, 09-К6Ш-3,
	полуботинки		010-К1Ш-1, 010-К1Ш-2, 010-К1Ш-3, 010-К6Ш-1, 010-К6Ш-2, 010-К6Ш-3
	туфли		011-К1Ш-1, 011-К1Ш-2, 011-К1Ш-3, 011-К2Ш-1, 011-К2Ш-2, 011-К2Ш-3, 011-К6Ш-1, 011-К6Ш-2, 011-К6Ш-3
	сандалеты		013-К1Ш-1, 013-К1Ш-2, 013-К1Ш-3, 013-К3Ш-1, 013-К3Ш-2, 013-К3Ш-3, 013-К6Ш-1, 013-К6Ш-2, 013-К6Ш-3,
Мальчиковая и девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П)	Сапожки	225-230-235-240-245-250-255-260	09-С1П-1, 09-С1П-2, 09-С1П-3, 09-С2П-1, 09-С2П-2, 09-С2П-3, 09-С6П-1, 09-С6П-2, 09-С6П-3
	полусапожки		09-ПС1П-1, 09-ПС1П-2, 09-ПС1П-3, 09-ПС2П-1, 09-ПС2П-2, 09-ПС2П-3, 09-ПС6П-1, 09-ПС6П-2, 09-ПС6П-3
	ботинки		09-К1П-1, 09-К1П-2, 09-К1П-3, 09-К3П-2, 09-К3П-3, 09-К6П-1, 09-К6П-2, 09-К6П-3,
	полуботинки		010-К1П-1, 010-К1П-2, 010-К1П-3, 010-К6П-1, 010-К6П-2, 010-К6П-3
	туфли		011-К1П-1, 011-К1П-2, 011-К1П-3, 011-К2П-1, 011-К2П-2, 011-К2П-3, 011-К6П-1, 011-К6П-2, 011-К6П-3
	сандалеты		013-К1П-1, 013-К1П-2, 013-К1П-3, 013-К3П-1, 013-К3П-2, 013-К3П-3, 013-К6П-1, 013-К6П-2, 013-К6П-3,

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	Сапожки	210-215-220- 225-230-235- 240-245-255- 260-265-270- 275	09-С1Ж-1, 09-С1Ж-2, 09-С1Ж-3, 09-С2Ж-1, 09-С2Ж-2, 09-С2Ж-3, 09-С6Ж-1, 09-С6Ж-2, 09-С6Ж-3,
	полусапожки		09-ПС1Ж-1, 09-ПС1Ж-2, 09-ПС1Ж-3, 09-ПС2Ж-1, 09-ПС2Ж-2, 09-ПС2Ж-3, 09-ПС6Ж-1, 09-ПС6Ж-2, 09-ПС6Ж-3,
	ботинки		09-К1Ж-1, 09-К1Ж-2, 09-К1Ж-3, 09-К6Ж-1, 09-К6Ж-2, 09-К6Ж-3,
	полуботинки		010-К1Ж-1, 010-К1Ж-2, 010-К1Ж-3, 010-К6Ж-1, 010-К6Ж-2, 010-К6Ж-3,
	туфли		011-К1Ж-1, 011-К1Ж-2, 011-К1Ж-3, 011-К2Ж-1, 011-К2Ж-2, 011-К2Ж-3, 011-К6Ж-1, 011-К6Ж-2, 011-К6Ж-3,
	сандалеты		013-К1Ж-1, 013-К1Ж-2, 013-К1Ж-3, 013-К3Ж-1, 013-К3Ж-2, 013-К3Ж-3, 013-К6Ж-1, 013-К6Ж-2, 013-К6Ж-3,
Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	Сапожки	245-255-260- 265-270-275- 280-285-290- 295-300-305	09-С1М-1, 09-С1М-2, 09-С1М-3, 09-С2М-1, 09-С2М-2, 09-С2М-3, 09-С6М-1, 09-С6М-2, 09-С6М-3
	полусапожки		09-ПС1М-1, 09-ПС1М-2, 09-ПС1М-3, 09-ПС2М-1, 09-ПС2М-2, 09-ПС2М-3, 09-ПС6М-1, 09-ПС6М-2, 09-ПС6М-3
	ботинки		09-К1М-1, 09-К1М-2, 09-К1М-3, 09-К6М-1, 09-К6М-2, 09-К6М-3
	полуботинки		010-К1М-1, 010-К1М-2, 010-К1М-3, 010-К6М-1, 010-К6М-2, 010-К6М-3
	туфли		011-К1М-1, 011-К1М-2, 011-К1М-3, 011-К2М-1, 011-К2М-2, 011-К2М-3, 011-К6М-1, 011-К6М-2, 011-К6М-3
	сандалеты		013-К1М-1, 013-К1М-2, 013-К1М-3, 013-К3М-1, 013-К3М-2, 013-К3М-3, 013-К6М-1, 013-К6М-2, 013-К6М-3

Габаритные размеры обуви указаны на рисунках 1-6 и таблицах 2-7.



Рисунок 1 Сапожок

Таблица 2

Половозрастная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Сапожок (С)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	Н не менее
Малодетская (МД)	09-С1МД-1, 09-С1МД-2, 09-С1МД-3, 09-С2МД-1, 09-С2МД-2, 09-С2МД-3, 09-С6МД-1, 09-С6МД-2, 09-С6МД-3,	145	157	67	126
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (ДШ)	09-С1ДШ-1, 09-С1ДШ-2, 09-С1ДШ-3, 09-С2ДШ-1, 09-С2ДШ-2, 09-С2ДШ-3, 09-С6ДШ-1, 09-С6ДШ-2, 09-С6ДШ-3	170	182	74	150
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
		195	207	82	
		200	212	83	
Для школьников-девочек и мальчиков (Ш)	09-С1Ш-1, 09-С1Ш-2, 09-С1Ш-3, 09-С2Ш-1, 09-С2Ш-2, 09-С2Ш-3, 09-С6Ш-1, 09-С6Ш-2, 09-С6Ш-3	205	217	85	Для девочек 180 Для мальчиков 184
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	94	
Мальчишковая и девичья (П)	09-С1П-1, 09-С1П-2, 09-С1П-3, 09-С2П-1, 09-С2П-2, 09-С2П-3, 09-С6П-1, 09-С6П-2, 09-С6П-3	225	237	91	Для девочек 190 Для мальчиков 210
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	

Женская (Ж)	09-С1Ж-1, 09-С1Ж-2, 09-С1Ж-3, 09-С2Ж-1, 09-С2Ж-2, 09-С2Ж-3, 09-С6Ж-1, 09-С6Ж-2, 09-С6Ж-3,	260	272	100	345
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	97	
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
Мужская (М)	09-С1М-1, 09-С1М-2, 09-С1М-3, 09-С2М-1, 09-С2М-2, 09-С2М-3, 09-С6М-1, 09-С6М-2, 09-С6М-3	245	257	97	410
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

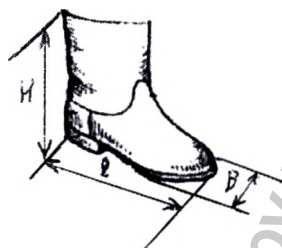


Рисунок .2 Полусапожок

Таблица 3

Половозрастная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полусапожок (ПС)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H не менее
Малодетская (М)-	09-ПС1МД-1, 09-ПС1МД-2, 09-ПС1МД-3, 09-ПС2МД-1, 09-ПС2МД-2, 09-ПС2МД-3, 09-ПС6МД-1, 09-ПС6МД-2, 09-ПС6МД-3,	145	157	67	-
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (ДШ)	09-ПС1ДШ-1, 09-ПС1ДШ-2, 09-ПС1ДШ-3, 09-ПС2ДШ-1, 09-ПС2ДШ-2, 09-ПС2ДШ-3, 09-ПС6ДШ-1, 09-ПС6ДШ-2, 09-ПС6ДШ-3	170	182	74	-
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
		195	207	82	
		200	212	83	
Для школьников-девочек и мальчиков (Ш)	09-ПС1Ш-1, 09-ПС1Ш-2, 09-ПС1Ш-3, 09-ПС2Ш-1, 09-ПС2Ш-2, 09-ПС2Ш-3, 09-ПС6Ш-1, 09-ПС6Ш-2, 09-ПС6Ш-3	205	217	85	Для девочек 145 Для мальчиков 150
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
Мальчиковая и девичья подростковые (П)	09-ПС1П-1, 09-ПС1П-2, 09-ПС1П-3, 09-ПС2П-1, 09-ПС2П-2, 09-ПС2П-3, 09-ПС6П-1, 09-ПС6П-2, 09-ПС6П-3	240	252	94	Для девочек 160 Для мальчиков 175
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	
		260	272	100	

Женская (Ж)	09-ПС1Ж-1, 09-ПС1Ж-2, 09-ПС1Ж-3, 09-ПС2Ж-1, 09-ПС2Ж-2, 09-ПС2Ж-3, 09-ПС6Ж-1, 09-ПС6Ж-2, 09-ПС6Ж-3,	210	222	86	180
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		255	262	97	
		260	267	99	
		265	272	100	
		270	277	102	
		275	282	103	
Мужская (М)	09-ПС1М-1, 09-ПС1М-2, 09-ПС1М-3, 09-ПС2М-1, 09-ПС2М-2, 09-ПС2М-3, 09-ПС6М-1, 09-ПС6М-2, 09-ПС6М-3	245	257	97	180
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

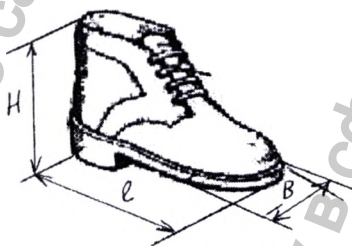


Рисунок 3 Ботинок

Таблица 4

Половозрастная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Ботинок (К)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0.5	H не менее
Малодетская- (МД)	09-К1МД-1, 09-К1МД-2, 09-К1МД-3, 09-К3МД-1, 09-К3МД-2, 09-К3МД-3, 09-К6МД-1, 09-К6МД-2, 09-К6МД-3,	145	157	67	106
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (Д)	09-К1Д-1, 09-К1Д-2, 09-К1Д-3, 09-К3Д-1, 09-К3Д-3, 09-К6Д-1, 09-К6Д-2, 09-К6Д-3,	170	182	74	118
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
		195	207	82	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	09-К1Ш-1, 09-К1Ш-2, 09-К1Ш-3, 09-К3Ш-2, 09-К3Ш-3, 09-К6Ш-1, 09-К6Ш-2, 09-К6Ш-3,	200	212	83	Для девочек 139 Для мальчиков 150
		205	217	85	
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
Мальчиковая и девичья подростковые (П)	09-К1П-1, 09-К1П-2, 09-К1П-3, 09-К3П-1, 09-К3П-2, 09-К3П-3, 09-К6П-1, 09-К6П-2, 09-К6П-3,	235	247	94	Для девочек 143 Для мальчиков 124
		240	252	95	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	
		260	272	100	
		265	277	102	
Женская (Ж)	09-К1Ж-1, 09-К1Ж-2, 09-К1Ж-3, 09-К6Ж-1, 09-К6Ж-2, 09-К6Ж-3,	210	222	86	156
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

		240	252	95	
		245	257	97	
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
Мужская (М)	09-К1М-1, 09-К1М-2, 09-К1М-3, 09-К6М-1, 09-К6М-2, 09-К6М-3	245	257	97	126
		255	262	98,5	
		260	267	100,0	
		265	272	101,5	
		270	277	103	
		275	282	104,5	
		280	287	106	
		285	292	107,5	
		290	297	109	
		295	302	110,5	
		300	307	112	
		305	312	113,5	

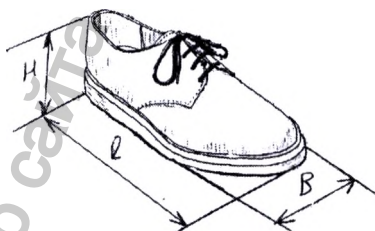


Рисунок 4 Полуботинок

Таблица 5

Половозрастная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полуботинок (К)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H не менее
Малодетская- (МД)	010-К1МД-1, 010-К1МД-2, 010-К1МД-3, 010-К6МД-1, 010-К6МД-2, 010-К6МД-3,	145 150 155 160 165	157 162 167 172 177	67 68 70 71 73	45
Дошкольная (ДШ)	010-К1ДШ-1, 010-К1ДШ-2, 010-К1ДШ-3, 010-К6ДШ-1, 010-К6ДШ-2, 010-К6ДШ-3	170 175 180 185 190 195 200	182 187 192 197 202 207 212	74 76 77 79 80 82 83	49
Для школьни- ков-девочек и мальчиков (Ш)	010-К1Ш-1, 010-К1Ш-2, 010-К1Ш-3, 010-К6Ш-1, 010-К6Ш-2, 010-К6Ш-3	205 210 215 220 225 230 235 240	217 222 227 232 237 242 247 252	85 86 88 89 91 92 94 94	Для девочек 59 Для мальчиков 60
Мальчиковая и девичья подростковые (П)	010-К1П-1, 010-К1П-2, 010-К1П-3, 010-К6П-1, 010-К6П-2, 010-К6П-3	225 230 235 240 245 250 255 260	237 242 247 252 257 262 267 272	91 92 94 95 96 97 99 100	Для девочек 59 Для мальчиков 65
Женская (Ж)	010-К1Ж-1, 010-К1Ж-2, 010-К1Ж-3, 010-К6Ж-1, 010-К6Ж-2, 010-К6Ж-3,	210 215 220 225 230 235 240 245 255 260	222, 227, 232, 237, 242, 247, 252, 257, 262, 267,	86 88 89 91 92 94 95 96 97 99	61

Инов. №подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. №дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

		265	272;	100	
		270	277;	102	
		275	282	103	
Мужская (М)	010-К1М-1, 010-К1М-2, 010-К1М-3, 010-К6М-1, 010-К6М-2, 010-К6М-3	245	257	97	61
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

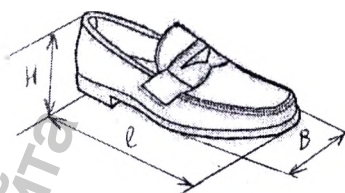


Рисунок 5 Туфли

Таблица 6

Половозраст- ная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви - Туфли (К)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H±1,5
Малодетская- (МД)	011-К1МД-1, 011-К1МД-2, 011-К1МД-3, 011-К2МД-1, 011-К2МД-2, 011-К2МД-3, 011-К6МД-1, 011-К6МД-2, 011-К6МД-3,	145	157	65	45
		150	162	66	
		155	167	68	
		160	172	69	
		165	177	71	
Дошкольная (ДШ)	011-К1ДШ-1, 011-К1ДШ-2, 011-К1ДШ-3, 011-К2ДШ-1, 011-К2ДШ-2, 011-К2ДШ-3, 011-К6ДШ-1, 011-К6ДШ-2, 011-К6ДШ-3	170	182	72	49
		175	187	74	
		180	192	75	
		185	197	77	
		190	202	78	
		195	207	80	
		200	212;	81	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	011-К1Ш-1, 011-К1Ш-2, 011-К1Ш-3, 011-К2Ш-1, 011-К2Ш-2, 011-К2Ш-3, 011-К6Ш-1, 011-К6Ш-2, 011-К6Ш-3	205	217	83	Для девочек 59 Для мальчиков 60
		210	222	84	
		215	227	86	
		220	232	87	
		225	237	89	
		230	242	90	
		235	247	92	
		240	252	93	
Мальчиковая и девочковая (П)	011-К1П-1, 011-К1П-2, 011-К1П-3, 011-К2П-1, 011-К2П-2, 011-К2П-3, 011-К6П-1, 011-К6П-2, 011-К6П-3	225	237	89	Для девочек 59 Для мальчиков 65
		230	242	90	
		235	247	92	
		240	252	93	
		245	257	95	
		250	262	96	
		255	267	98	
		260	272	99	
Женская (Ж)	011-К1Ж-1, 011-К1Ж-2, 011-К1Ж-3, 011-К2Ж-1, 011-К2Ж-2, 011-К2Ж-3, 011-К6Ж-1, 011-К6Ж-2, 011-К6Ж-3,	210	222	84	61
		215	227	86	
		220	232	87	
		225	237	89	
		230	242	90	
		235	247	92	
		240	252	93	
		245	257	95	
		255	262	96	
		260	267	98	
		265	272	99	
		270	277	101	
		275	282	102	

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru info@nevacert.ru	Подпись	Дата
--	---------	------

Мужская (М)	011-К1М-1, 011-К1М-2, 011-К1М-3, 011-К2М-1, 011-К2М-2, 011-К2М-3, 011-К6М-1, 011-К6М-2, 011-К6М-3	245	257	97	61
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

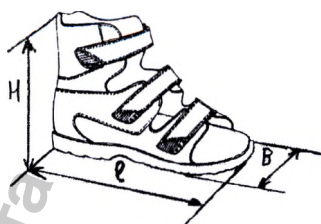


Рисунок А.6 Сандалеты

Таблица 7

Половозраст- ная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Сандалет (К)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H не менее
Малодетская- (МД)	013-К1МД-1, 013-К1МД-2, 013-К1МД-3, 013-К3МД-1, 013-К3МД-2, 013-К3МД-3, 013-К6МД-1, 013-К6МД-2, 013-К6МД-3	145	157	67	106
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (Д)	013-К1Д-1, 013-К1Д-2, 013-К1Д-3, 013-К3Д-1, 013-К3Д-2, 013-К3Д-3, 013-К6Д-1, 013-К6Д-2, 013-К6Д-3,	170	182	74	118
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
		195	207	82	
		200	212	83	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	013-К1Ш-1, 013-К1Ш-2, 013-К1Ш-3, 013-К3Ш-1, 013-К3Ш-2, 013-К3Ш-3, 013-К6Ш-1, 013-К6Ш-2, 013-К6Ш-3,	205	217	85	Для девочек 139 Для мальчиков 150
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	94	
Мальчиковая и девочковая подростковые (П)	013-К1П-1, 013-К1П-2, 013-К1П-3, 013-К3П-1, 013-К3П-2, 013-К3П-3, 013-К6П-1, 013-К6П-2, 013-К6П-3,	225	237	91	Для девочек 143 Для мальчиков 124
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	
		260	272	100	
Женская (Ж)	013-К1Ж-1, 013-К1Ж-2, 013-К1Ж-3, 013-К3Ж-1, 013-К3Ж-2, 013-К3Ж-3, 013-К6Ж-1, 013-К6Ж-2, 013-К6Ж-3,	210	222	86	156
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		255	262	97	
		260	267	99	
		265	272	100	
		270	277	102	
		275	282	103	
Мужская (М)	013-К1М-1, 013-К1М-2, 013-К1М-3, 013-К3М-1, 013-К3М-2, 013-К3М-3, 013-К6М-1, 013-К6М-2, 013-К6М-3	245	257	97	126
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

Согласно приложения 13 ТР ТС 007/2011 масса полупары обуви не должна превышать:

- малодетская размером 145-165 мм повседневная обувь - 300 г.;
- малодетская летняя обувь - 150 г.;
- малодетская домашняя обувь - 60 г.;
- дошкольная размером 170-200 мм. повседневная обувь - 380 г.;
- дошкольная летняя обувь - 200 г.;
- дошкольная домашняя обувь - 70 г.

С размера 205 мм и выше масса обуви не регламентируется.

В соответствии с пунктом 6.2.9 ГОСТ Р 54407 масса полупары обуви на подбор в исходном размере должна соответствовать массе образца-эталона, увеличенной на коэффициент 1,10.

Масса полупары обуви для взрослых, не должна превышать:

Мужская обувь - сапожок 1050 г.; полусапожок 870 г.; ботинки 850 г.; полуботинки 400 г.; сандалеты 380 г.

Женская обувь - сапожек 800 г.; полусапожок 650 г.; ботинки 635 г.; туфли с открытыми пяточной или носочной частями 320 г.; туфли 350 г.

Обувь в соответствии с ее функциональным назначением может включать специальные детали:

- специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий;
- специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка, смягчающие прокладки;
- межстелечные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru info@nevacert.ru	Дата	ПП-вкладные обувные изделия	Лист 12
--	------	-----------------------------	------------

- специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук;

В зависимости от сезонности обувь может быть изготовлена с утепленной подкладкой и без неё.

3 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закреплена на ноге, искусственной стопе протеза, на ноге с аппаратом при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт».

3.2 В первый день после получения обуви необходимо надеть её и походить в ней в течении 15-20 минут, во второй и третий день рекомендуется надеть обувь и в течении одного часа (можно с перерывами) походить в ней.

3.3 При эксплуатации обуви необходимо учитывать сезонность (летняя, зимняя, весенне-осенняя). Кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, т.к. она не является непромокаемой.

3.4 При носке обуви:

- обувь не должна препятствовать нормальному функционированию стопы, вызывать болезненных ощущений и неудобств при пользовании;
- обувь должна быть плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, текстильных застежек «контакт»;
- при носке обуви в течение дня следует изменять объем обуви и плотность ее прилегания к ноге при помощи застежек;
- не должно быть избыточного давления верха обуви и со стороны межстельного слоя или стелек на мягкие ткани стопы;
- должен быть обеспечен незатрудненный пережат при ходьбе, а также надежная фиксация стопы в обуви в заданном положении;
- подошва обуви должна иметь хорошее сцепление с опорной поверхностью.

3.5 Ежедневно на ночь необходимо обмывать ноги теплой водой и насухо вытирать их полотенцем.

4 УХОД ЗА ОБУВЬЮ

4.1 Ежедневно вечером следует вынимать стельки, протирать и оставлять их на ночь на открытом воздухе для просушки. Сушить стельки следует вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.

4.2 Обувь необходимо ежедневно очищать от грязи и пыли мягкой влажной тряпкой или щеткой. Запрещается мыть обувь в воде.

4.3 Межстелечный слой обуви следует подвергать ежедневной гигиенической обработке раствором детского мыла или растворами нейтральных моющих средств в теплой воде при температуре не превышающей 40 градусов С.

4.4 Для освежения цвета, придания блеска и защиты от вредного воздействия окружающей среды, после чистки на кожу обуви следует нанести тонкий слой цветного или бесцветного крема и располировать его волосяной щеткой или шерстяной тряпкой. В случае, если лицевой слой кожи механически поврежден, на это место наносится тонкий слой краски соответствующего цвета.

5 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ОБУВИ

5.1 МАРКИРОВКА

5.1.1 Каждая полупара обуви замаркирована в соответствии с таблицей 2.

Допускается товарный знак или наименование предприятия изготовителя изображать на отдельной ленте с клеевой основой методом шелкографии.

Таблица 2

Содержание маркировки	Место нанесения маркировки	Способ нанесения маркировки
Товарный знак или наименование предприятия изготовителя	В геленочной части вкладной стельки (полустельки), или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берца, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»).	Штемпелевание, горячее тиснение через фольгу

Номер контролера, ОТК (Клеймо ОТК)	На штаферке, или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»).	Штемпелевание
Модель; размер штихмассовый; полнота; дата выпуска (месяц, год).	На ярлык, прикрепляемый к подкладке каждой полупары обуви или другим деталям	Штемпелевание

5.1.2 Маркировка коробки из картона (потребительской упаковки).

На торцевой поверхности каждой коробки прикреплена этикетка или нанесен штамп с четким маркированием следующих обозначений:

- товарного знака (при его наличии);
- наименования предприятия-изготовителя и его почтового адреса;
- наименования обуви;
- обозначения настоящих технических условий;
- артикул;
- размер штихмассовый;
- полнота;
- цвет;
- дата выпуска (месяц, год);
- количества пар обуви (на коробках, в которые упаковано несколько

пар).

5.1.3 Маркировка транспортной тары содержит:

- товарный знак (при его наличии);
- наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;
- артикул (индекс);
- обозначение настоящих ТУ;
- номера ящика;
- материал ящика;
- масса (брутто);
- дата упаковки;
- номер упаковщика.

5.2 УПАКОВКА

Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата	Инов. № подл.

плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3 см, а также больным с начальной стадией сахарного диабета для:

- обеспечения рационального распределения давления по подошвенной поверхности стопы с учётом её индивидуальных анатомо-функциональных особенностей;
- восстановления или компенсации функции стояния и ходьбы;
- предотвращения травм мягких тканей стопы с целью профилактики гнойно-некротических осложнений и ранней ампутации стопы;
- профилактики или компенсации деформации костно-суставного аппарата стопы.

8 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение обуви не по медицинскому назначению.

8.2 ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не выявлены.

9 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБУВИ

Ограничений по совместному применению обуви с другими медицинскими изделиями разрешенными к применению в установленном порядке на территории РФ не выявлено.

10 РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУВИ. МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

риск возникновения аллергической реакции на материалы изготовления обуви. При возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу.

- риск дискомфорта, боли, раздражения, травмы пациента при неправильной эксплуатации обуви. Во избежание риска дискомфорта, боли,

Инов. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. №дубл.	Подпись и дата

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru info@nevacert.ru	Подпись	Дата

раздражения, травмы следует соблюдать правила эксплуатации обуви изложенные в настоящем руководстве. Следует прекратить эксплуатацию обуви при возникновении дискомфорта, боли или раздражения.

- риск неправильного подбора по виду, назначению, размеру и полноте. Во избежание риска неправильного подбора обуви рекомендовано подбирать обувь врачом-ортопедом.

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ

11.1 В комплект поставки соответствует Таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	Примечание
- Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016*	1	одна пара / полупара
- руководство по эксплуатации;	1	
- упаковка.	1	
* - соответствующий вариант исполнения:		
1. Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 145-150-155-160-165;		
2. Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 170-175-180-185-190-195-200;		
3. Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 205-210-215-220-225-230-235-240;		
4. Мальчиковая и девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 225-230-235-240-245-250-255-260;		
5. Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 210-215-220-225-230-235-240-245-255-260-265-270-275;		
6. Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 245-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305.		

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует срок носки обуви при соблюдении пользователем условий эксплуатации и хранения.

12.2 Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

- на кожаной подошве – 40 дней;

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru info@nevacert.ru	Подпись	Дата
--	---------	------

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;
- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;
- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;
- на детскую обувь – 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

12.3 Гарантийными случаями являются:

- разрушение шва крепления деталей верха обуви.
- выпадение кнопок, застежек, блочек и др. фурнитуры.
- разрыв кожи верха заготовки по строчке.
- деформация жестких деталей верха обуви.
- отрыв и отставание подошвы.
- износ подошвы.
- излом каблука.
- разрыв кожи верха по грани следа.

12.4 В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине пользователя.

13 УТИЛИЗАЦИЯ

13.1 Обувь, которая утратила свои эксплуатационные качества после окончания срока службы, подлежит утилизации как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Допускается утилизация обуви в качестве бытовых отходов.

14 РЕКЛАМАЦИИ

По всем вопросам, связанным с качеством обуви обращаться к производителю.

Общество с ограниченной ответственностью «Сурсил» (ООО «Сурсил»)

Телефон/Факс: +7 (495) 258-61-58.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Инов. № подл.	Подпись	Дата	ПП-вкладные обувные изделия	Лист
				19

E-mail: sursil@inbox.ru Internet: <http://www.sursil.ru>

ГОСТ 7296-81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические.

Технические условия

ГОСТ 9182-75 Кожа для рантов Технические условия

ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

ГОСТ 10350-81 Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия

ГОСТ ISO 10993-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

ОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкоммеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия.

ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры.

ГОСТ 12632-79 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия.

ГОСТ 13514-93 Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14226-80 Обувь. Нормы гибкости

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия

ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16534-89 Коробки из картона для обуви. Технические условия

ГОСТ 19196-93 Ткани обувные. Общие технические условия

ГОСТ 21463-87 Обувь. Нормы прочности

ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Масса полупары образца эталона для каждого варианта исполнения по
каждому размеру

Таблица Г.1

[illegible]

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Вам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

				Лист
ПП-вкладные обувные изделия				54

Лист

Лист

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводитель- ного докум. и дата	Подп.	Дата
	измене- нных	замене- нных	новых	аннулир- ованных					

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdramnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре

www.revasert.ru

info@revasert.ru

Лист

68

ПП-вкладные обувные изделия

Дата

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
технического регулирования

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

www.roszdravnadzor.gov.ru

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



Примечание 3.18-

Информация получена с официального сайта

Финансирование

Финансирование

www.roszdravnadzor.gov.ru